




UNIVERSAL ROBOTS

# Gebruikershandleiding

## UR10e PolyScope X

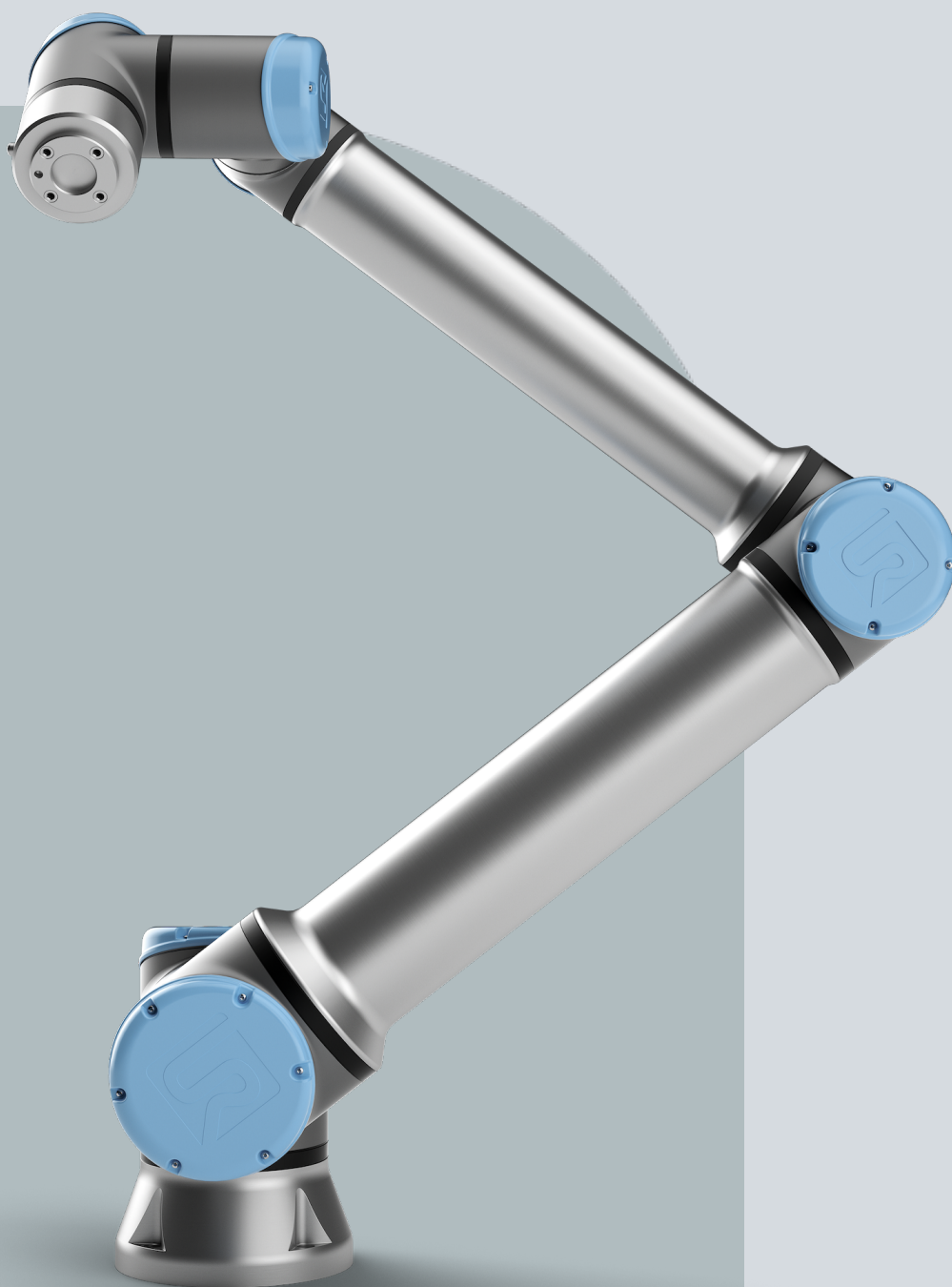



De informatie hierin is eigendom van Universal Robots A/S en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Universal Robots A/S. De informatie hierin kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en dient niet te worden gezien als toezegging door Universal Robots A/S. Dit document wordt periodiek geëvalueerd en herzien.

Universal Robots A/S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gebreken in dit document.

Copyright © 2009-2025 door Universal Robots A/S.

Het Universal Robots-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Universal Robots A/S.



# 1. Voorwoord

## Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe robot van Universal Robots, bestaande uit de robotarm (manipulator), regelkast en programmeereenheid.

Oorspronkelijk ontworpen om het bewegingsbereik van een menselijke arm na te bootsen, is de robotarm samengesteld uit aluminium buizen, beweegbaar door zes gewrichten, waardoor een hoge mate van flexibiliteit in uw automatiseringsinstallatie mogelijk is. Met de gepatenteerde programmeerinterface van Universal Robots, PolyScope, kunt u uw automatiseringstoepassingen maken, laden en uitvoeren.

## Over deze handleiding

Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie, richtlijnen voor veilig gebruik en instructies om de robotarm, regelkast en programmeereenheid te monteren. De handleiding bevat ook instructies over hoe te beginnen met installeren en hoe te beginnen met het programmeren van de robot.

Lees en houd u aan het beoogde gebruik. Voer een risicobeoordeling uit. Installeer en gebruik in overeenstemming met de elektrische en mechanische specificaties in deze gebruikershandleiding.

Risicobeoordeling vereist inzicht in de gevaren, risico's en risicobeperkende maatregelen voor de robottoepassing. Robotintegratie kan een basisniveau van mechanische en elektrische training vereisen.

## Inhoudsdisclaimer

Universal Robots A/S blijft de betrouwbaarheid en prestaties van haar producten verbeteren en behoudt zich als zodanig het recht voor om producten en productdocumentatie te upgraden, zonder voorafgaande waarschuwing. Universal Robots A/S draagt er zorg voor dat de inhoud van de gebruikershandleiding(en) nauwkeurig en correct is, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of ontbrekende informatie.

Deze handleiding bevat geen garantie-informatie.

## Online handleidingen

Handleidingen, gidsen en handboeken zijn online te lezen. We hebben een groot aantal documenten verzameld op <https://www.universal-robots.com/manuals>

- PolyScope-softwarehandboek met beschrijvingen en instructies voor de software
- Het Servicehandboek met instructies voor probleemoplossing, onderhoud en reparatie
- De Scriptlijst met scripts voor diepgaand programmeren



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UR+</b>                | <p>De online UR+-showroom <a href="http://www.universal-robots.com/plus">www.universal-robots.com/plus</a> biedt geavanceerde producten om uw UR-robottoepassing aan te passen. U kunt alles dat u nodig heeft vinden op één plaats, van gereedschap en accessoires tot software.</p> <p>UR+-producten maken verbinding met en werken met UR-robots om voor een eenvoudige configuratie en een algeheel soepele gebruikerservaring te zorgen. Alle UR+-producten zijn getest door UR.</p> <p>U heeft ook toegang tot het UR+-partnerprogramma via ons softwareplatform <a href="http://plus.universal-robots.com">plus.universal-robots.com</a>, waarmee u gebruiksvriendelijkere producten voor UR-robots kunt ontwerpen.</p> |
| <b>Academy</b>            | <p>De UR Academy-site <a href="http://academy.universal-robots.com">academy.universal-robots.com</a> biedt een verscheidenheid aan trainingsmogelijkheden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>myUR</b>               | <p>Op het myUR-portaal kunt u al uw robots registreren, service kunt bijhouden en antwoord op algemene ondersteuningsvragen kunt krijgen.</p> <p>Log in op <a href="http://myur.universal-robots.com">myur.universal-robots.com</a> om toegang te krijgen tot het portaal.</p> <p>Op het myUR-portaal worden uw kwesties afgehandeld door de distributeur van uw voorkeur of doorgestuurd naar de klantenserviceteams van Universal Robots. U kunt zich ook abonneren op robotmonitoring en extra gebruikersaccounts bij uw bedrijf beheren.</p>                                                                                                                                                                               |
| <b>Developer Suite</b>    | <p>De UR Developer Suite <a href="http://universal-robots.com/products/ur-developer-suite">universal-robots.com/products/ur-developer-suite</a> is een verzameling van alle tools die nodig zijn om een volledige oplossing te bouwen, inclusief het ontwikkelen van URCaps, het aanpassen van eindeffectoren en het integreren van hardware.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ondersteuning</b>      | <p>De ondersteuningssite <a href="http://www.universal-robots.com/support">www.universal-robots.com/support</a> bevat versies van deze handleiding in andere talen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UR-forums</b>          | <p>Op het UR-forum op <a href="http://forum.universal-robots.com">forum.universal-robots.com</a> kunnen robotenthousiasten van alle vaardigheidsniveaus contact maken met UR en elkaar, vragen stellen en informatie uitwisselen. Hoewel het UR-forum is opgericht door UR+ en onze beheerders UR-medewerkers zijn, wordt het merendeel van de inhoud gemaakt door u, de UR-forumgebruiker.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gegevensverklaring</b> | <p>In overeenstemming met Verordening (EU) 2854/2023 ("Gegevensverordening") is een gegevensverklaring voor dit product, samen met instructies voor het verkrijgen van direct beschikbare gegevens te vinden op de volgende locatie: <a href="https://www.universal-robots.com/legal/data-notice/">https://www.universal-robots.com/legal/data-notice/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Adres**

Universele robots A/S  
Energivej 51  
DK-5260 Odense Denemarken  
Tel.: +45 89 93 89 89  
Zie de officiële Universal Robots-website voor regionale kantoren.

---

# Inhoud

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Voorwoord</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>2. Aansprakelijkheid en beoogd gebruik</b>                    | <b>15</b> |
| 2.1. Beperking van aansprakelijkheid                             | 15        |
| 2.2. Bedoeld gebruik                                             | 15        |
| <b>3. Uw robot</b>                                               | <b>18</b> |
| 3.1. Technische specificaties UR10e                              | 18        |
| 3.2. Inhoud van de doos                                          | 19        |
| 3.2.1. Robotarm                                                  | 20        |
| 3.2.2. Regelkast                                                 | 21        |
| 3.2.3. Programmeereenheid met inschakelapparaat met drie standen | 22        |
| 3.2.4. Robotkabels                                               | 27        |
| 3.2.5. PolyScope X-overzicht                                     | 28        |
| <b>4. Veiligheid</b>                                             | <b>33</b> |
| 4.1. Algemeen                                                    | 33        |
| 4.2. Soorten veiligheidsmededelingen                             | 34        |
| 4.3. Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen             | 35        |
| 4.4. Integratie en verantwoordelijkheid                          | 37        |
| <b>5. Heffen en hanteren</b>                                     | <b>38</b> |
| 5.1. Robotarm                                                    | 42        |
| 5.2. Control Box and Teach Pendant                               | 42        |
| <b>6. Montage en bevestiging</b>                                 | <b>44</b> |
| 6.1. Vastzetten van de robotarm                                  | 45        |
| 6.2. Afmetingen van de standaard                                 | 47        |
| 6.3. Montagebeschrijving                                         | 50        |
| 6.3.1. Montage van de regelkast                                  | 51        |
| 6.3.2. Vrije ruimte om regelkast                                 | 52        |
| 6.4. Werkruimte en bedrijfsruimte                                | 53        |
| 6.4.1. Singulariteit                                             | 54        |
| 6.4.2. Vaste en verplaatsbare installatie                        | 55        |
| 6.5. Robotaansluitingen: basisflens kabel                        | 56        |
| 6.6. Robotaansluitingen: robotkabel                              | 57        |
| 6.7. Voedingsaansluitingen                                       | 58        |
| <b>7. Eerste start</b>                                           | <b>60</b> |
| 7.1. De robot inschakelen                                        | 61        |
| 7.2. Het serienummer invoeren                                    | 61        |
| 7.3. De robotarm starten                                         | 62        |



|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 7.4. De robot uitschakelen .....                              | 63         |
| 7.5. Tabblad Toepassing .....                                 | 64         |
| 7.6. De robot verplaatsen met de 3PE-programmeereenheid ..... | 65         |
| <b>8. Installatie .....</b>                                   | <b>67</b>  |
| 8.1. Elektrische waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ..... | 67         |
| 8.2. Aansluitpoorten regelkast .....                          | 69         |
| 8.3. Ethernet .....                                           | 71         |
| 8.4. Installatie van de 3PE programmeereenheid .....          | 72         |
| 8.4.1. Hardware-installatie .....                             | 72         |
| 8.4.2. Software-installatie .....                             | 73         |
| 8.5. Regelaar-I/O .....                                       | 75         |
| 8.5.1. Digitale in- en uitgang .....                          | 77         |
| 8.5.2. Gebruik van het tabblad Bedrade I/O .....              | 79         |
| 8.5.3. Aandrijfstroomindicator .....                          | 80         |
| 8.6. Veiligheids-I/O .....                                    | 83         |
| 8.6.1. Veiligheids-I/O-signalen .....                         | 86         |
| 8.6.2. I/O-instellingen .....                                 | 92         |
| 8.6.3. I/O gebruiken voor modusselectie .....                 | 95         |
| 8.6.4. Inschakelapparaat met drie standen .....               | 97         |
| 8.7. Digitale I/O voor algemene doelen .....                  | 98         |
| 8.7.1. Externe AAN/UIT-regeling .....                         | 100        |
| 8.8. Analoge I/O voor algemene doeleinden .....               | 101        |
| 8.9. Externe modus in Veiligheidsoverzicht .....              | 102        |
| <b>9. Eindeffectorintegratie .....</b>                        | <b>105</b> |
| 9.1. Maximale belasting .....                                 | 105        |
| 9.2. Het gereedschap vastzetten .....                         | 107        |
| 9.3. Tool I/O .....                                           | 109        |
| 9.3.1. Installatiespecificaties gereedschaps-I/O .....        | 112        |
| 9.3.2. Stroomtoevoer gereedschap .....                        | 113        |
| 9.3.3. Digitale tool-ingangen .....                           | 113        |
| 9.3.4. Digitale gereedschapsuitgangen .....                   | 115        |
| 9.3.5. Analoge gereedschapingangen .....                      | 116        |
| 9.4. Belasting instellen .....                                | 117        |
| 9.4.1. De actieve belasting veilig instellen .....            | 117        |
| <b>10. Veiligheidsconfiguratie .....</b>                      | <b>119</b> |
| 10.1. Veiligheidsgerelateerde functies en interfaces .....    | 119        |
| 10.1.1. Configureerbare veiligheidsfuncties .....             | 120        |
| 10.2. Instellingen .....                                      | 121        |
| 10.2.1. Wachtwoord .....                                      | 121        |

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 10.2.2. Secure Shell-toegang (SSH)                         | 125        |
| 10.2.3. Machtigingen                                       | 126        |
| 10.2.4. Services                                           | 126        |
| 10.3. Veiligheidsinstellingen ontgrendelen                 | 127        |
| 10.4. Veiligheidsmenu-instellingen                         | 127        |
| 10.4.1. Robotlimieten                                      | 128        |
| 10.4.2. Gewrichtslimieten                                  | 132        |
| 10.4.3. Beperking van gereedschapspositie                  | 133        |
| 10.4.4. Veiligheidsvlakken                                 | 135        |
| 10.4.5. I/O-vlakken                                        | 140        |
| 10.4.6. Hardware                                           | 143        |
| 10.4.7. Driepositie                                        | 145        |
| 10.4.8. PROFIsafe                                          | 145        |
| 10.4.9. Veilig thuis                                       | 152        |
| 10.4.10. Gereedschapsrichting                              | 158        |
| <b>11. Beoordeling van cyberbeveiligingsbedreigingen</b>   | <b>163</b> |
| 11.1. Algemene cyberbeveiliging                            | 163        |
| 11.2. Vereisten voor cyberbeveiliging                      | 163        |
| 11.3. Richtlijnen voor versterking van de cyberbeveiliging | 165        |
| <b>12. Communicatienetwerken</b>                           | <b>166</b> |
| 12.1. MODBUS                                               | 167        |
| 12.2. Ethernet/IP                                          | 169        |
| 12.3. Profinet                                             | 171        |
| 12.4. UR Connect                                           | 176        |
| <b>13. Risicobeoordeling</b>                               | <b>180</b> |
| 13.1. Beknellingsgevaar                                    | 184        |
| 13.2. Stoptijden en stopafstanden                          | 185        |
| 13.2.1. Robotscenario 1: 10 kg.                            | 185        |
| 13.2.2. Robotscenario 2: 12,5 kg.                          | 189        |
| 13.3. Stopcategorieën                                      | 193        |
| <b>14. Noodgevallen</b>                                    | <b>194</b> |
| 14.1. Noodstop                                             | 194        |
| 14.2. Beweging zonder aandrijfkraft                        | 195        |
| 14.3. Operationele modus                                   | 195        |
| <b>15. Transport</b>                                       | <b>199</b> |
| 15.1. Vervoer zonder verpakking                            | 200        |
| 15.2. Opbergen van de programmeereenheid                   | 200        |
| 15.3. Langetermijnopslag                                   | 201        |
| <b>16. Onderhoud en reparatie</b>                          | <b>202</b> |



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 16.1. Stopprestaties testen .....                    | 203        |
| 16.2. Reiniging en inspectie van robotarm .....      | 203        |
| 16.3. Programmeereenheid en regelkast reinigen ..... | 207        |
| 16.4. Software-installatie .....                     | 208        |
| <b>17. Wegwerpen en het milieu .....</b>             | <b>210</b> |
| <b>18. Verklaringen en certificeringen .....</b>     | <b>212</b> |
| 18.1. Opmameverklaring (origineel) .....             | 213        |
| 18.2. Verklaringen en certificaten .....             | 215        |
| 18.3. Certificeringen UR10e .....                    | 216        |
| 18.4. Certificaten UR10e .....                       | 218        |
| <b>19. Veiligheidsfunctietabellen .....</b>          | <b>225</b> |



## 2. Aansprakelijkheid en beoogd gebruik

### 2.1. Beperking van aansprakelijkheid

**Beschrijving**

Alle informatie in deze handleiding mag niet gezien worden als een garantie door UR dat de industriële robot geen letsel of schade zal veroorzaken, zelfs als de industriële robot aan alle veiligheidsinstructies en gebruiksinformatie voldoet.

### 2.2. Bedoeld gebruik

**Beschrijving****MEDEDELING**

Universal Robots is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet-goedgekeurd gebruik van zijn robots of toepassingen waarvoor zijn robots niet bedoeld zijn en Universal Robots biedt geen ondersteuning voor onbedoeld gebruik.

**HANDLEIDING LEZEN**

Het niet gebruiken van de robot in overeenstemming met het beoogde gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- Lees en volg de aanbevelingen voor het beoogde gebruik en de specificaties in de gebruikershandleiding.

Robots van Universal Robots zijn bedoeld voor de hantering van gereedschappen/eindeffectors en bevestigingen, of voor de verwerking of het vervoer van onderdelen of producten.

Alle UR-robots zijn uitgerust met veiligheidsfuncties, die speciaal zijn ontworpen om collaboratieve toepassingen mogelijk te maken, waarbij de robottoepassing samenwerkt met een mens. De veiligheidsfunctie-instellingen moeten worden ingesteld op de juiste waarden zoals bepaald door de risicobeoordeling van de robottoepassing.

De robot en de regelkast zijn bedoeld voor gebruik binnen waar normaal gesproken alleen niet-conductieve vervuiling optreedt, d.w.z. omgeving van vervuilingsgraad 2.

Collaboratieve toepassingen zijn alleen bedoeld voor niet-gevaarlijke toepassingen, waarbij de volledige toepassing, inclusief gereedschap/eindeffector, werkobject, obstakels en andere machines, een laag risico heeft volgens de risicobeoordeling van de specifieke toepassing.



**WAARSCHUWING**

Het gebruik van UR-robots of UR-producten buiten het beoogde gebruik kan leiden tot letsel, overlijden en/of materiële schade. Gebruik UR-robots of -producten niet voor een van de onderstaande onbedoelde gebruiken en toepassingen:

- Medisch gebruik, d.w.z. gebruik met betrekking tot ziekte, letsel of beperkingen bij mensen, inclusief de volgende doeleinden:
    - Revalidatie
    - Beoordeling
    - Compensatie of verlichting
    - Diagnostiek
    - Behandeling
    - Chirurgie
    - Gezondheidszorg
    - Prothesen en andere hulpmiddelen voor mensen met lichamelijke beperkingen
    - Elk gebruik in de nabijheid van patiënten
  - Hanteren, tillen of vervoeren van mensen
  - Elke toepassing die naleving van specifieke hygiënische en/of sanitaire normen vereist, zoals in de nabijheid van of in direct contact met voedsel, dranken en farmaceutische en/of cosmetische producten.
    - UR-gewrichtsvet lekt en kan ook als damp in de lucht vrijkomen.
    - UR-gewrichtsvet is niet "voedselveilig".
    - UR-robots voldoen niet aan voedselnormen, normen van National Sanitization Foundation (NSF) of Food and Drug Administration (FDA) of normen betreffende hygiënisch ontwerp.
- Hygiënische normen, zoals ISO 14159 en EN 1672-2, vereisen dat een hygiënerisicobeoordeling wordt uitgevoerd.
- Ieder gebruik of iedere toepassing die afwijkt van het bedoelde gebruik, specificaties en certificeringen van UR-robots of UR-producten.
  - Misbruik is verboden, omdat dit kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen

UNIVERSAL ROBOTS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG GEBRUIK.

**WAARSCHUWING**

Als geen rekening wordt gehouden met de extra risico's van het bereik, belastingen, bedrijfskoppels en snelheden in verband met een robottoeepassing, kan dit leiden tot letsel of overlijden.

- Uw risicobeoordeling van de toepassing moet de risico's omvatten die verband houden met het bereik, de beweging, de belasting en de snelheid van de robot, de eindeffector en het werkstuk.

**WAARSCHUWING**

Wijzig eindkappen van e-Series-robots niet. Een aanpassing kan leiden tot onvoorziene gevaren. Alle geoorloofde demontage en montage moet worden uitgevoerd bij een UR-servicecentrum, of kan worden gedaan door bekwame personen volgens de nieuwste versie van alle relevante servicehandleidingen.

## 3. Uw robot

### Beschrijving

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de onderdelen van het robotsysteem, waaronder hardware, aansluitaccessoires en interfaces die nodig zijn voor de installatie, bediening en interactie met de gebruiker.

## 3.1. Technische specificaties UR10e

### Algemene specificaties

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximaal laadvermogen      | 10 kg / 22 lb of 12,5 kg / 27,5 lb                                                                       |
| Bereik                     | 1300 mm / 51,2 in                                                                                        |
| Vrijheidsgraden            | 6 roterende verbindingen                                                                                 |
| Programmering              | PolyScope 5-GUI op 12 inch touchscreen<br>of PolyScope X-GUI op 12 inch touchscreen                      |
| Stroomverbruik (gemiddeld) | 615 W<br>Ongeveer 350 W met een typisch programma                                                        |
| Omgevingstemperatuurbereik | 0-50°C. Bij omgevingstemperaturen boven 35°C kan de robot met verminderde snelheid en prestaties werken. |
| Veiligheidsfuncties        | 21 configureerbare veiligheidsfuncties. PLd categorie 3 conform: EN ISO 13849-1.                         |

### Prestaties

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Nauwkeurigheid kracht-/koppelsensor | 5,5 N |
|-------------------------------------|-------|

### Beweging

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snelheid              | Basis- en schoudergewricht: max. 120°/s.<br>Alle overige gewrichten: max. 180°/s.<br>Maximale snelheid TCP: Ca. 4 m/s / Ca. 157,5 in/s. |
| Positieerhaalbaarheid | ± 0,05 mm / ± 0,0019 in (1,9 mils) volgens ISO 9283                                                                                     |
| Verbindingsbereiken   | ± 360° voor alle gewrichten behalve Elleboog ± 160°                                                                                     |

### Functies

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IP-classificatie                     | IP54                                                            |
| Geluid                               | Robotarm: minder dan 60 dB(A)<br>Regelkast: minder dan 50 dB(A) |
| I/O-poorten gereedschap              | 2 digitale in, 2 digitale uit, 2 analoge in                     |
| Voeding en spanning gereedschaps-I/O | 2 A (dubbele pen) 1 A (enkele pen) en 12 V/24 V                 |

### Fysiek

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Voetafdruk       | Ø190 mm / 7,5 in            |
| Materialen       | Aluminium, PC/ASA kunststof |
| Gewicht robotarm | 33,3 kg / 73,5 lb           |

**Regelkast**

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stroombron regelkast                | 100-240 VAC, 47-440 Hz                                         |
| Afmetingen regelkast (B x H x D)    | 460 mm × 449 mm × 254 mm / 18,2 inch × 17,6 inch × 10 inch     |
| I/O-poorten regelkast               | 16 digitaal in, 16 digitaal uit, 2 analoog in, 2 analoog uit   |
| I/O-voeding regelkast               | 24 V 2 A in besturingskast                                     |
| Frequentie van systeemupdates       | 500 Hz                                                         |
| Kortsluitstroomclassificatie (SCCR) | 200 A                                                          |
| Communicatie                        | MODBUS TCP- en Ethernet/IP-adapter, PROFINET, USB 2.0, USB 3.0 |
| Toolcommunicatie                    | RS-485                                                         |

**Robotkabel**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmeereenheidkabel: programmeereenheid naar regelkast | 4,5 m / 177 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Robotkabel: robotarm naar bedieningskast (opties)          | Standaard (PVC) 1 m/39 in x 12,1 mm<br>Standaard (PVC) 2 m/78,7 in x 12,1 mm<br>Standaard (PVC) 3 m/118 in x 12,1 mm<br>Standaard (PVC) 6 m/236 in x 12,1 mm<br>Standaard (PVC) 12 m/472,4 in x 12,1 mm<br>High flex (PUR) 6 m/236 in x 13,4 mm<br>High flex (PUR) 12 m/472,4 in x 13,4 mm<br>High flex (PUR) 6 m/236 in x 14,6 mm<br>High flex (PUR) 12 m/472,4 in x 14,6 mm |

## 3.2. Inhoud van de doos

**Beschrijving**

In dit gedeelte wordt de inhoud van de productverpakking beschreven.

**In de dozen**

- Robotarm
  - Regelkast
  - 3PE programmeereenheid
  - Montagebeugel voor de regelkast
  - Montagebeugel voor de 3PE-programmeereenheid
  - Sleutel voor het openen van de regelkast
  - Kabel voor het aansluiten van de robotarm en de regelkast (meerdere opties beschikbaar, afhankelijk van de robotgrootte)
  - Net- of voedingskabel geschikt voor uw regio
  - Ronde hijsband of hijsband (afhankelijk van robotgrootte)
  - Gereedschapskabeladapter (afhankelijk van robotversie)
  - Deze handleiding
- 


### 3.2.1. Robotarm

---

**Over de robotarm**

De gewrichten, basis en gereedschapsflens zijn de belangrijkste componenten van de robotarm. De regelaar coördineert de beweging van de gewrichten om de robotarm te bewegen.

Door een eindeffector (gereedschap) aan de gereedschapsflens aan het uiteinde van de robotarm te bevestigen, kan de robot een werkstuk manipuleren. Sommige gereedschappen hebben een specifiek doel dat verder gaat dan het manipuleren van een onderdeel, bijvoorbeeld inspectie voor kwaliteitscontrole, lijm aanbrengen en lassen.

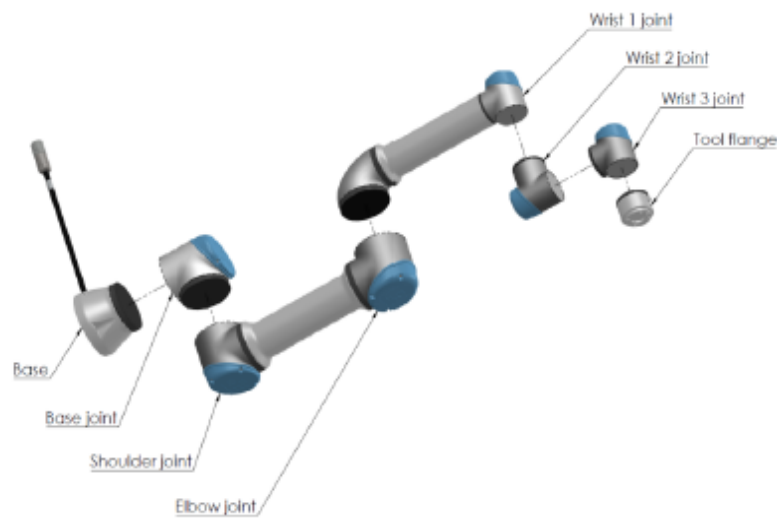

*De belangrijkste onderdelen van de robotarm.*

- **Basis:** waar de robotarm is gemonteerd.
- **Schouder** en **elleboog:** deze maken grotere bewegingen.
- **Pols 1** en **Pols 2:** deze maken fijnere bewegingen.
- **Pols 3:** waar het gereedschap op de gereedschapsflens is bevestigd.

De robot is een gedeeltelijk voltooide machine en daarom wordt een opnameverklaring verstrekt. Voor elke robottoepassing is een risicobeoordeling vereist.


---

### 3.2.2. Regelkast

---

#### Over de regelkast

De regelkast bevat de aansluitpoorten en regelingen en -uitgangen (I/O) die worden gebruikt in robotarmprogramma's en -installaties. De aansluitpoorten worden gebruikt voor externe aansluitingen. De I/O zijn groepen elektrische interfaces die worden gebruikt voor communicatie en configuratie.

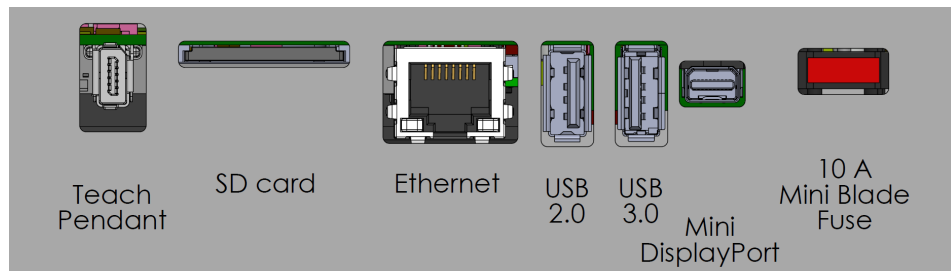

*Externe aansluitpoorten.*

|                | Safety                                                                                | Remote                                                                                | Power                                                                                 | Configurable Inputs                                                                   |                                                                                       | Configurable Outputs                                                                  |                                                                                       | Digital Inputs                                                                        |                                                                                         | Digital Outputs                                                                         |                                                                                         | Analog Inputs                                                                           | Analog Outputs |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emergency Stop | 24V  | 12V  | PWR  | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   |                                                                                         |                |
|                | E10  | GND  | GND  | CI0  | CI4  | CO0  | CO4  | DI0  | DI4  | DO0  | DO4  | AI0  |                |
| Safehold Stop  | 24V  | ON   | 24V  | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   | AG   |                |
|                | E11  | OFF  | 0V   | CI1  | CI5  | CO1  | CO5  | DI1  | DI5  | DO1  | DO5  | AI1  |                |
|                | 24V  |                                                                                       |                                                                                       | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   | AG   |                |
|                | S10  |                                                                                       |                                                                                       | CI2  | CI6  | CO2  | CO6  | DI2  | DI6  | DO2  | DO6  | AG   |                |
|                | 24V  |                                                                                       |                                                                                       | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   | 24V  | 24V  | 0V   | 0V   | AG   |                |
|                | S11  |                                                                                       |                                                                                       | CI3  | CI7  | CO3  | CO7  | DI3  | DI7  | DO3  | DO7  | A01  |                |

### In- en uitgangsgroepen (I/O)

Zie het hoofdstuk installatie voor gedetailleerde beschrijvingen van de aansluitpoorten van de regelkast en de besturings-I/O.

### 3.2.3. Programmeereenheid met inschakelapparaat met drie standen

**Beschrijving**

Afhankelijk van de robotgeneratie kan uw programmeereenheid een ingebouwd 3PE-apparaat bevatten. Programmeereenheid met inschakelapparaat met drie standen (3PE-TP) genoemd.

Robots met een hoger laadvermogen kunnen alleen met de 3PE-TP werken.

Als u een 3PE-TP gebruikt, bevinden de knoppen zich aan de onderkant van de programmeereenheid, zoals hieronder afgebeeld. U kunt beide knoppen gebruiken, afhankelijk van uw voorkeur.

Als de programmeereenheid is losgekoppeld, moet u een extern 3PE-apparaat aansluiten en configureren. De functionaliteit van de 3PE-TP strekt zich uit tot de PolyScope-interface, waar er extra functies zijn in de kop.

**MEDEDELING**

- Als u een UR15-, UR20-, UR30-, UR8 Long- of UR18-robot hebt gekocht, werkt een programmeereenheid zonder het 3PE-apparaat niet. Zie de **Robot en 3PE TP compatibiliteitstabel** hieronder.
- Voor het gebruik van een UR15-, UR20-, UR30-, UR8 Long- of UR18-robot is een extern activeringsapparaat of een 3PE-programmeereenheid vereist bij het programmeren of inleren binnen het bereik van de robottoepassing. Zie ISO 10218-2.
- De 3PE-programmeereenheid is niet inbegrepen bij de aankoop van de OEM-regelkast, dus het inschakelen van apparaatfunctionaliteit is niet inbegrepen.



**Compatibiliteitstabel voor robots en 3PE TP**

| Compatibiliteitstabel per UR Robotgeneraties                                                                        |                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Robotgeneratie                                                                                                      | Standaard programmeereenheid | 3PE programmeereenheid |
| e-Series                                                                                                            | √                            | √                      |
| UR Series                                                                                                           |                              | √                      |
| <i>Houd er rekening mee dat de robots uit de UR-serie niet compatibel zijn met de standaard programmeereenheid.</i> |                              |                        |

| Compatibiliteitstabel per individuele UR -robot             |                                 |                           |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Robotmodel*                                                 | Standaard programmeereenheid id | 3PE programmeereenheid id | Geen programmeereenheid id |
| UR3e                                                        | √                               | √                         | √                          |
| UR5e                                                        | √                               | √                         | √                          |
| UR7e                                                        | √                               | √                         | √                          |
| UR10e                                                       | √                               | √                         | √                          |
| UR12e                                                       | √                               | √                         | √                          |
| UR16e                                                       | √                               | √                         | √                          |
| UR8 Long                                                    |                                 | √                         | √                          |
| UR15                                                        |                                 | √                         | √                          |
| UR18                                                        |                                 | √                         | √                          |
| UR20                                                        |                                 | √                         | √                          |
| UR30                                                        |                                 | √                         | √                          |
| <i>*Dit omvat zowel de standaard- als de OEM-regelkast.</i> |                                 |                           |                            |

**Overzicht van programmeereenheid**

1. Aan/uit-knop
2. Noodstopknop
3. USB-poort (met stofkap)
4. 3PE-knoppen



**Freedrive**

Onder elke 3PE-knop bevindt zich een Freedrive-robotsymbool, zoals hieronder is afgebeeld.



## Knopfuncties van de 3PE programmeereenheid

### Beschrijving




#### MEDEDELING

De 3PE-knoppen zijn alleen actief in de handmatige modus. In de automatische modus vereist robotbeweging geen 3PE-knopactie.

De volgende tabel beschrijft de functies van de 3PE-knoppen.

| Positie |                                      | Beschrijving                                                             | Actie                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Loslaten                             | Er is geen druk op de 3PE-knop. De knop is niet ingedrukt.               | De robot is gestopt met bewegen in de handmatige modus. De stroom van de robotarm wordt niet uitgeschakeld en de remmen blijven los. |
| 2       | Licht indrukken (licht beetpakken)   | Er is enige druk op de 3PE-knop. De knop wordt ingedrukt tot het midden. | Hierdoor kan je programma worden afgespeeld wanneer de robot in de handmatige modus is.                                              |
| 3       | Stevig indrukken (stevig beetpakken) | Er is volledige druk op de 3PE-knop. De knop is helemaal ingedrukt.      | De robot is gestopt met bewegen in de handmatige modus. De robot is in 3PE-stop.                                                     |

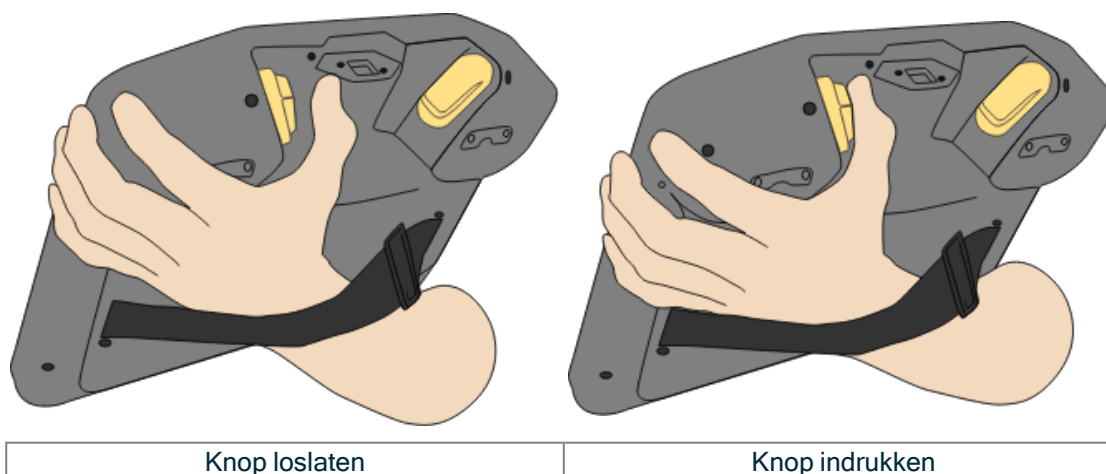

## 3.2.4. Robotkabels

### Beschrijving

In dit gedeelte worden de robotkabels van de e--serie opgesomd en wordt gewaarschuwd voor een verkeerde kabelkeuze en het gebruik van incompatibele kabels.



#### WAARSCHUWING

De kabels "Standard (zwart)" en "High flex e-Series (blauw)" zijn niet compatibel met UR20- en UR30-robots.

- Gebruik geen e-Series-kabel om een UR20- of UR30-robotarm aan te sluiten.
- Gebruik altijd de High Flex-kabel die compatibel is met de UR20- en UR30-robotarmen.



#### WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT

Het uitvoeren van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur die is aangesloten op een stroombron kan leiden tot letsel of overlijden door elektrische schokken.

- Koppel de apparatuur los van de stroombron voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.



#### MEDEDELING

Een verkeerde keuze van kabels, onjuist gebruik of verkeerde aansluitingen kunnen leiden tot stroomuitval in de robotarm.

- De maximale lengte van de robotkabel tussen de robotarm en de regelkast is 12 meter.
- Is het mogelijk om een High Flex-kabel van 6 meter te verlengen met een enkele High Flex-kabel van 3 meter?
- Gebruik geen andere kabelcombinatie dan de hierboven beschreven.



#### MEDEDELING

Rechtstreekse aansluiting van de basisflens kabel op een regelkast kan schade aan apparatuur en eigendommen veroorzaken.

- Sluit de basisflens kabel niet aan op uw regelkast.
- Gebruik altijd een UR-robotkabel om de basisflens aan te sluiten op uw regelkast.



#### HANDLEIDING LEZEN

Het niet gebruiken van de robot in overeenstemming met het beoogde gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- Lees en volg de aanbevelingen voor het beoogde gebruik en de specificaties in de gebruikershandleiding.

| Kabeltype           | Item   | Lengte | Mat. | Dia.    | Torsie | Max. snelheid | Maximale versnelling | Maximale trekrek     |                        | Buigen                         |                | Koppelingscyclussen |
|---------------------|--------|--------|------|---------|--------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
|                     |        |        |      |         |        |               |                      | statisch             | dynamisch              | radius                         | cycli          |                     |
| Standaard (zwart)   | 200145 | 1 m    | PVC  | 12,1 mm | n.v.t. | n.v.t.        | n.v.t.               | 7 N/mm <sup>2</sup>  | 10,3 N/mm <sup>2</sup> | 7 x d (statische installatie)  | n.v.t.         | 500                 |
|                     | 200146 | 2 m    |      |         |        |               |                      |                      |                        |                                |                |                     |
|                     | 165100 | 6 m    |      |         |        |               |                      |                      |                        |                                |                |                     |
|                     | 165101 | 12 m   |      |         |        |               |                      |                      |                        |                                |                |                     |
| Zeeflexibel (blauw) | 166100 | 6 m    | PUR  | 13,4 mm | ±30°/m | 120 m/min     | 10 m/s <sup>2</sup>  | 50 N/mm <sup>2</sup> | 20 N/mm <sup>2</sup>   | 4 x d (statische installatie)  | 5Mil bij 8 x d | 500                 |
|                     | 166101 | 12 m   |      |         |        |               |                      |                      |                        | 8 x d (dynamische installatie) |                |                     |

### 3.2.5. PolyScope X-overzicht

#### Overzicht

PolyScope X is de grafische gebruikersinterface (GUI) die op de programmeereenheid is geïnstalleerd en die de robotarm aanstuurt via een touchscreen. Met de PolyScope X-interface kunt u programma's maken, laden en uitvoeren.



#### MEDEDELING

Zorg ervoor dat uw software altijd is bijgewerkt naar de nieuwste versie.


## Het hoofdscherm weergeven

1. Tik op het pictogram 3D-viewer  in de hoofdnavigatie. Dit geeft een driedimensionaal beeld van de robotarm in x-y-z-coördinaten.
2. Om het 3D-weergavegebied te maximaliseren, klappt u de rechter lade in met behulp van de zijbalk:

- Tik eenmaal op het pictogram Bewegen 


- Tik tweemaal op het pictogram Programmastructuur 

- Tik tweemaal op het pictogram Globale variabelen 

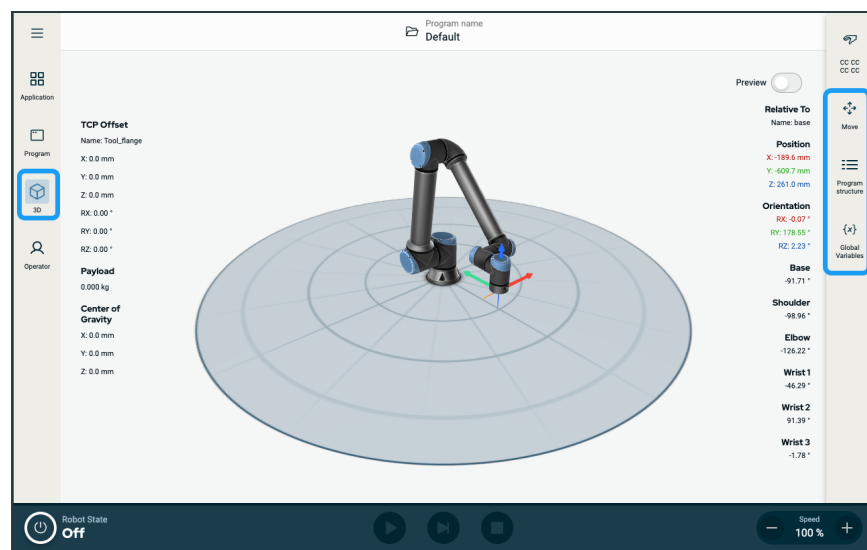

## Scherm Indeling

De PolyScope X-interface is opgedeeld zoals is aangegeven in de volgende illustratie:

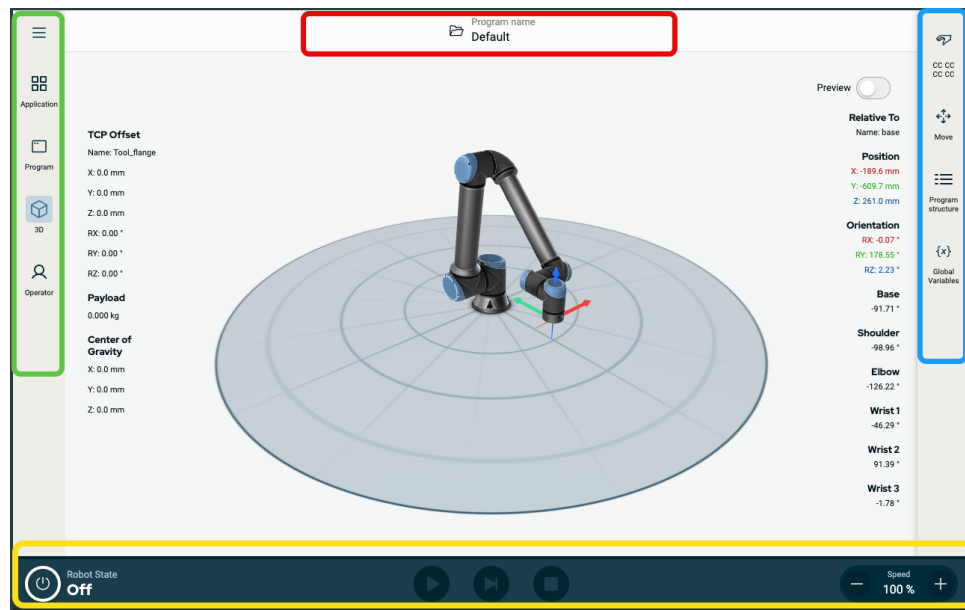

- **Kop** - in rood omrand vak. Ook wel **systeembeheer** genoemd.  
Bevat een map om programma's te laden, te maken en te bewerken en URCaps te gebruiken.
- **Hoofdnavigatie** - in groen omrand vak. Ook wel **navigatiehub** genoemd.  
Bevat pictogrammen/velden om een hoofdscherm te selecteren:
  - Hamburgerpictogram
  - Toepassing
  - Programma
  - 3D-weergave
  - Operatorscherm
- **Zijbalk** - in blauw omrand vak. Ook wel **multitaskingpaneel** genoemd.  
Bevat pictogrammen/velden om een multitaskscherm te selecteren:
  - Pictogram veiligheidscontrolesom
  - Bewegen
  - Programmastructuur
  - Globale variabelen
- **Voet** - in geel omrand vak. Ook wel **robotbesturingsbalk** genoemd.  
Bevat knoppen om de robotstatus, snelheid en uitvoeren/afspelen van een programma te regelen.

## Schermincombinaties

Het hoofdscherm en het multitaskscherm vormen de regelschermcombinatie voor de robot.


Het multitaskscherm is onafhankelijk van het hoofdscherm, zodat u afzonderlijke taken kunt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld een programma configureren in het hoofdscherm, terwijl u de robotarm beweegt in het multitaskscherm. U kunt het multitaskscherm ook verbergen als het niet nodig is.

- **Hoofdscherm**

Bevat velden en opties om robotacties te beheren en te controleren.

- **Multitaskscherm**

Bevat velden en opties die vaak betrekking hebben op het hoofdscherm.

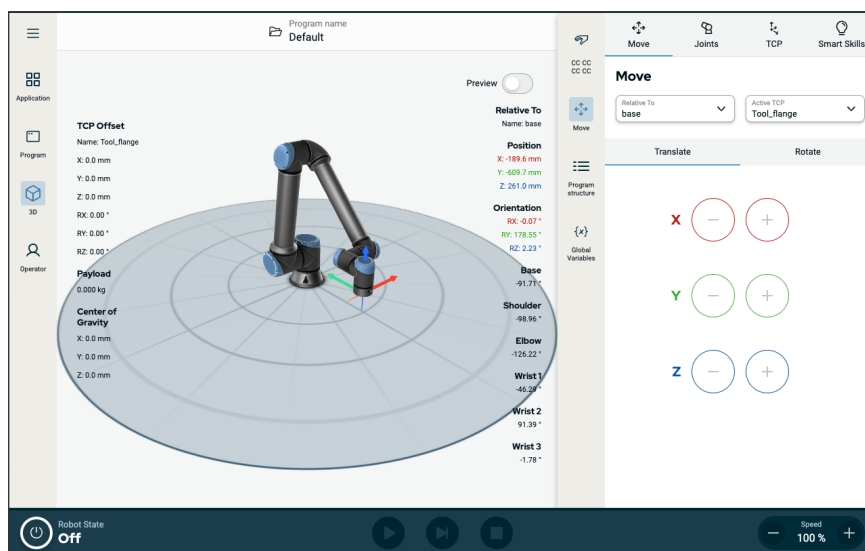

Figuur 1.1: Hoofdscherm en multitaskscherm

## Het multitaskscherm weergeven/verbergen

1. Klik in de zijbalk op een veld om het multitaskscherm weer te geven.  
De zijbalk breidt zich uit naar het midden van het scherm, waardoor het multitaskscherm zichtbaar wordt.
2. Tik op het momenteel geselecteerde veld in de zijbalk om het multitaskscherm te verbergen.

## Touchscreen



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b>                | <p>Het <b>touchscreen van de programmeereenheid</b> is geoptimaliseerd voor gebruik in industriële omgevingen. In tegenstelling tot consumentenelektronica is de gevoeligheid van het touchscreen van de programmeereenheid volgens ontwerp meer bestand tegen omgevingsfactoren zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druppels water en/of machinekoelmiddel</li><li>• Radiogolven</li><li>• Andere ruis afkomstig uit de gebruiksomgeving</li></ul>                                                                            |
| <b>Gebruik van het touchscreen</b> | <p>De aanraakgevoeligheid is ontworpen om valse selecties in PolyScope X te vermijden en om onverwachte beweging van de robot te voorkomen.</p> <p>Gebruik voor de beste resultaten de top van uw vinger om een selectie te maken op het scherm. In deze handleiding wordt dat <b>tikken</b> genoemd.</p> <p>Indien gewenst kan een commercieel verkrijgbare stylus worden gebruikt om selecties te maken op het scherm. De voorgaande paragraaf vermeldt en definieert de pictogrammen/tabbladen en knoppen in de PolyScope X-interface.</p> |

## 4. Veiligheid

**Beschrijving** Lees de veiligheidsinformatie hier om de belangrijkste veiligheidsrichtlijnen, belangrijke veiligheidskennisgevingen en uw verantwoordelijkheden bij het werken met de robot te begrijpen.  
Ontwerp en installatie van het systeem worden hier niet behandeld.

### 4.1. Algemeen

**Beschrijving** Lees de algemene veiligheidsinformatie en de instructies en richtlijnen met betrekking tot de risicobeoordeling en het beoogde gebruik. Navolgende hoofdstukken beschrijven en definiëren veiligheidsfuncties die met name relevant zijn voor collaboratieve toepassingen.



#### WAARSCHUWING

Er moet een risicobeoordeling van de toepassing worden uitgevoerd voor de veiligheid van personeel en apparatuur.

Zorg dat u de specifieke technische gegevens leest en begrijpt die relevant zijn voor montage en installatie, om de integratie van UR-robots te begrijpen voordat de robot voor het eerst wordt ingeschakeld.

Het is van belang dat alle montage-instructies in de volgende hoofdstukken van deze handleiding worden opgevolgd.



#### MEDEDELING

Universal Robots wijst alle aansprakelijkheid af als de robot (armregelkast met of zonder programmeereenheid) op de een of andere manier is beschadigd, veranderd of gewijzigd. Universal Robots kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt aan de robot of andere apparatuur door programmafouten, onbevoegde toegang tot de UR-robot en de inhoud ervan, of incorrect functioneren van de robot.

## 4.2. Soorten veiligheidsmededelingen

### Beschrijving

Veiligheidsmededelingen worden gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken. Lees alle berichten om te helpen de veiligheid te waarborgen en letsel aan personeel en productschade te voorkomen.



#### WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



#### WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT

Geeft een gevaarlijke elektrische situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



#### WAARSCHUWING: HEET OPPERVLAKE

Geeft een gevaarlijk heet oppervlak aan waar letsel kan ontstaan door contact en contactloze nabijheid.



#### LET OP

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot letsel.



#### AARDE

Geeft aarding aan.



#### BESCHERMENDE AARDE

Geeft beschermende aarding aan.



#### MEDEDELING

Geeft het risico op schade aan apparatuur en/of nuttige informatie aan.



#### HANDLEIDING LEZEN

Geeft gedetailleerdere informatie aan die in de handleiding moet worden geraadpleegd.

## 4.3. Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

**Beschrijving** De volgende waarschuwingsberichten kunnen worden herhaald, uitgelegd of gedetailleerd in de volgende paragrafen.



### WAARSCHUWING

Het niet naleven van de hieronder vermelde algemene veiligheidspraktijken kan leiden tot letsel of overlijden.

- Controleer dat de robotarm en het gereedschap/eindeffector juist en stevig zijn vastgeschroefd.
- Controleer dat de robottoepassing voldoende ruimte heeft om vrij te bewegen.
- Controleer of het personeel beschermd is gedurende de levensduur van de robottoepassing, inclusief transport, installatie, inbedrijfstelling, programmering, bediening en gebruik, demontage en verwijdering.
- Controleer of de parameters van de veiligheidsconfiguratie zijn ingesteld om personeel te beschermen, inclusief degenen die binnen bereik van de robottoepassing kunnen komen.
- Gebruik de robot niet als deze beschadigd is.
- Draag geen losse kleding of sieraden bij het werken met de robot. Bind lang haar vast in de nek.
- Plaats geen vingers achter de interne afdekking van de regelkast.
- Informeer gebruikers over eventuele gevaarlijke situaties en de geboden bescherming en leg eventuele beperkingen van de bescherming en de restrisico's uit.
- Informeer gebruikers over de locatie van de noodstopknop(pen) en hoe de noodstop moet worden geactiveerd in geval van een abnormale of noodsituatie.
- Waarschuw mensen om buiten het bereik van de robot te blijven, ook wanneer de robottoepassing op het punt staat op te starten.
- Let op de oriëntatie van de robot om de bewegingsrichting te begrijpen wanneer u de programmeereenheid gebruikt.
- Houd u aan de vereisten in ISO 10218-2.



### WAARSCHUWING

Het hanteren van gereedschappen/eindeffectoren met scherpe randen en/of knelpunten kan letsel tot gevolg hebben.

- Zorg dat gereedschappen/eindeffectoren geen scherpe randen of knelpunten hebben.
- Beschermende handschoenen en/of een beschermende bril kunnen vereist zijn.

**WAARSCHUWING: HEET OPPERVLAK**

Langdurig contact met de warmte die tijdens bedrijf door de robotarm en de regelkast wordt gegenereerd, kan leiden tot ongemak met letsel tot gevolg.

- Hanteer of raak de robot niet aan terwijl deze in bedrijf is of onmiddellijk daarna.
- Controleer de temperatuur op het logscherm voordat u de robot hanteert of aanraakt.
- Laat de robot afkoelen door deze uit te schakelen en een uur te wachten.

**LET OP**

Het niet uitvoeren van een risicobeoordeling voorafgaand aan integratie en bediening kan het risico op letsel verhogen.

- Voer een risicobeoordeling uit en verminder de risico's voorafgaand aan gebruik.
- Kom, indien bepaald door de risicobeoordeling, niet binnen het bereik van de robotbeweging en raak de robottoepassing niet aan tijdens bedrijf. Installeer veiligheidsvoorzieningen.
- Lees de informatie in de risicobeoordeling.

**LET OP**

Gebruik van de robot met niet-geteste externe machines of in een niet-geteste toepassing kan het risico op letsel bij personeel vergroten.

- Test alle functies en het robotprogramma afzonderlijk.
- Lees de inbedrijfstellingsinformatie.

**MEDEDELING**

Zeer sterke magnetische velden kunnen de robot beschadigen.

- Stel de robot niet bloot aan permanente magnetische velden.

**HANDLEIDING LEZEN**

Controleer of alle mechanische en elektrische apparatuur is geïnstalleerd volgens de relevante specificaties en waarschuwingen.

## 4.4. Integratie en verantwoordelijkheid

---

### Beschrijving

De informatie in deze handleiding behandelt niet het ontwerpen, installeren, integreren en bedienen van een robottoepassing, noch alle randapparatuur die van invloed kan zijn op de veiligheid van de robottoepassing. De robottoepassing moet ontworpen en geïnstalleerd worden in overeenstemming met de veiligheidsvereisten die vermeld worden in de relevante normen en regels van het land waar de robot geïnstalleerd wordt.

Degenen die de UR-robot integreren, zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de toepasselijke regelgeving in het betreffende land wordt nageleefd en dat eventuele risico's van de robottoepassing voldoende worden verminderd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Het uitvoeren van een volledige risicobeoordeling voor het complete robotsysteem
  - Verbinding maken met andere machines en aanvullende veiligheidsvoorzieningen indien vereist door de risicobeoordeling
  - Instellen van de juiste veiligheidsinstellingen in de software
  - Zorgen dat de veiligheidsvoorzieningen niet worden gewijzigd
  - Valideren dat de robottoepassing is ontworpen, geïnstalleerd en geïntegreerd
  - Gebruiksaanwijzingen opstellen
  - De robotinstallatie markeren met de relevante borden en contactinformatie van de integrator
  - Bewaren van alle documentatie, inclusief de risicobeoordeling van de toepassing, deze handleiding en aanvullende relevante documentatie.
-


## 5. Heffen en hanteren

### Beschrijving


De robotarmen hebben verschillende afmetingen en gewichten, dus het is belangrijk om de juiste hef- en hanteringstechnieken te gebruiken voor elk model. Hier vindt u informatie over het veilig heffen en hanteren van de robot.

### Correct hijsen en hanteren


1. Vervoer de robot met een vorkheftruck naar de locatie.
2. Open de doos zoals afgebeeld.

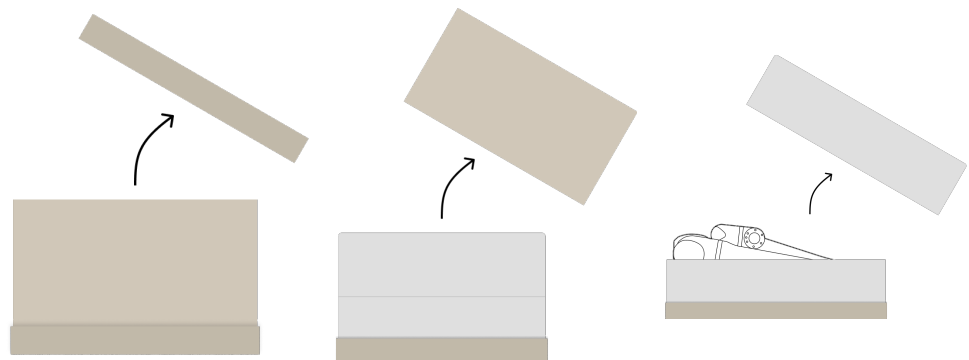

3. Zet de robotarm stevig vast met de hijsband.

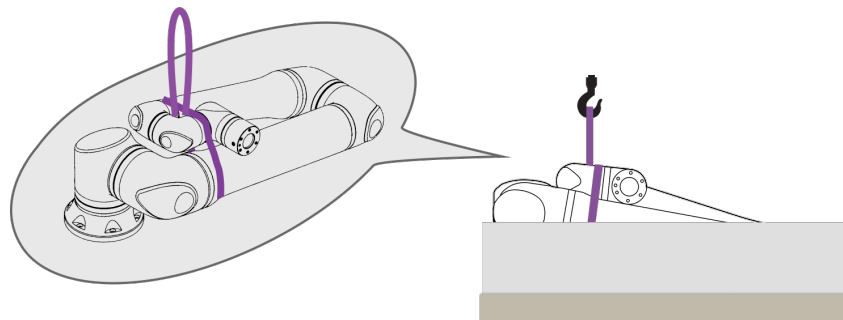


4. Til de robotarm uit de doos met behulp van de band en de haak.

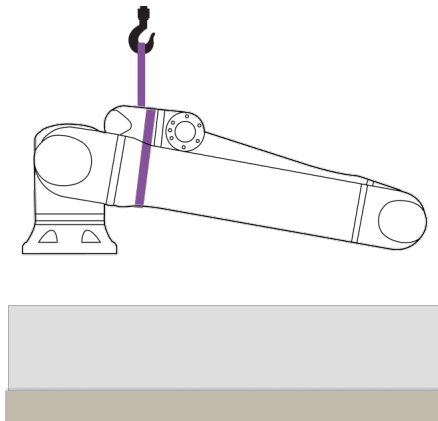**LET OP**

Gebruik hijsapparatuur bij het heffen van een zwaardere robotarm.

5. Ondersteund de robot terwijl deze wordt gehesen, om hem te draaien en op te hangen zoals afgebeeld.

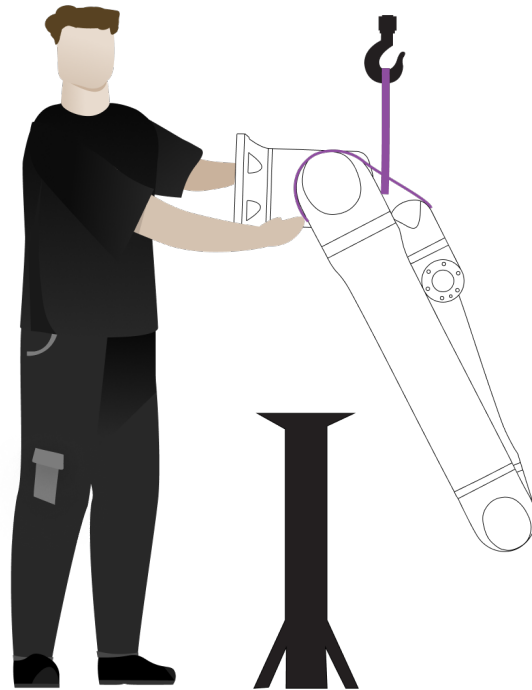




**De  
robotarm  
monteren**


De robotarm kan zijwaarts, ondersteboven of onder een hoek ( $\pm 45^\circ$ ) worden gemonteerd.



Zijwaartse montage

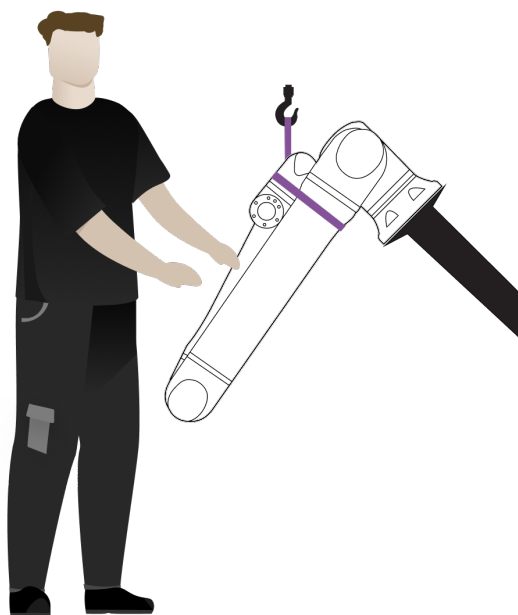


Montage onder een hoek ( $\pm 45^\circ$ )

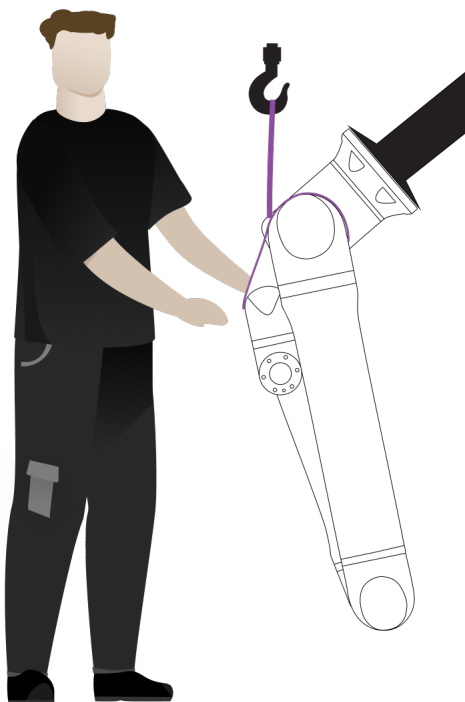

Montage ondersteboven

1. Monteer de robotarm. Draai de schroeven vast en pas koppel toe zoals gespecificeerd in de relevante gebruikershandleiding.

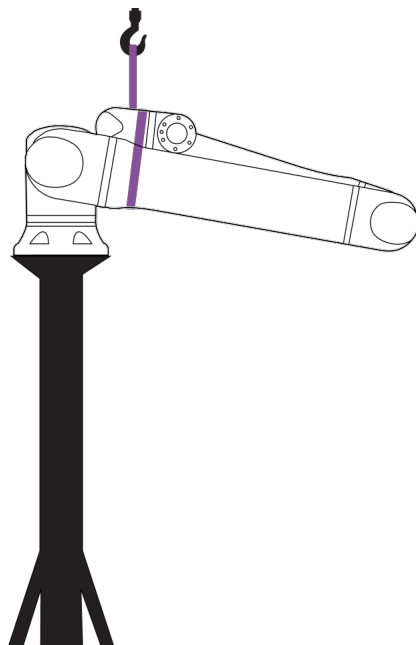

2. Verwijder de band.
3. Schakel de robot in en herpositioneer het schoudergewricht zoals bedoeld.

**MEDEDELING**

Voor zijwaartse montage hoeft de robot niet te worden ingeschakeld.

4. Plaats de band terug.



**WAARSCHUWING**

Het heffen of verplaatsen van zware onderdelen kan letsel veroorzaken.

- Hijsapparatuur/hulpmiddel om te heffen kan nodig zijn.
- Pak de robotarm uit in de gewenste werkruimte om het tillen en verplaatsen van zware onderdelen te beperken.

**WAARSCHUWING**

Onjuiste montage van onderdelen en/of bedrading kan tot letsel leiden.

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (schoenen, bril, handschoenen) kunnen nodig zijn.

**MEDEDELING**

Er kunnen in uw regio specifieke voorschriften gelden voor het heffen van de assemblage.

- Volg de lokale voorschriften en richtlijnen voor het heffen.

Zie het hoofdstuk Montage voor gedetailleerde montagebeschrijvingen.

## 5.1. Robotarm

**Beschrijving**

De robotarm kan, afhankelijk van het gewicht, door één of twee personen worden gedragen, tenzij de hijsband is meegeleverd. Als de hijsband is meegeleverd, is apparatuur voor hijsen en transport vereist.

## 5.2. Control Box and Teach Pendant

**Beschrijving**

De regelkast en de programmeereenheid kunnen elk door één persoon worden gedragen.  
Tijdens gebruik moeten alle kabels worden opgerold en vastgezet om struikelgevaar te voorkomen.



## 6. Montage en bevestiging

**Beschrijving** Installeer en schakel de robotarm en de bedieningskast in om PolyScopete gaan gebruiken.

**De robot monteren** U moet de robotarm, de regelkast en de programmeereenheid monteren om verder te kunnen gaan.

1. Haal de robotarm en de regelkast uit de verpakking.
2. Monteer de robotarm op een stevig, trillingsvrij oppervlak.
3. Plaats de bedieningskast op zijn voet.
4. Sluit de robotkabel aan op de robotarm en de bedieningskast.
5. Plaats de SD-kaart in de regelkast.
6. Sluit het netsnoer of de hoofdvoedingskabel van de regelkast aan.




### WAARSCHUWING

Het niet bevestigen van de robotarm aan een stevige ondergrond kan leiden tot letsel door vallen van de robot.


- Zorg dat de robotarm aan een stevige ondergrond is bevestigd.

**SD-kaart plaatsen**

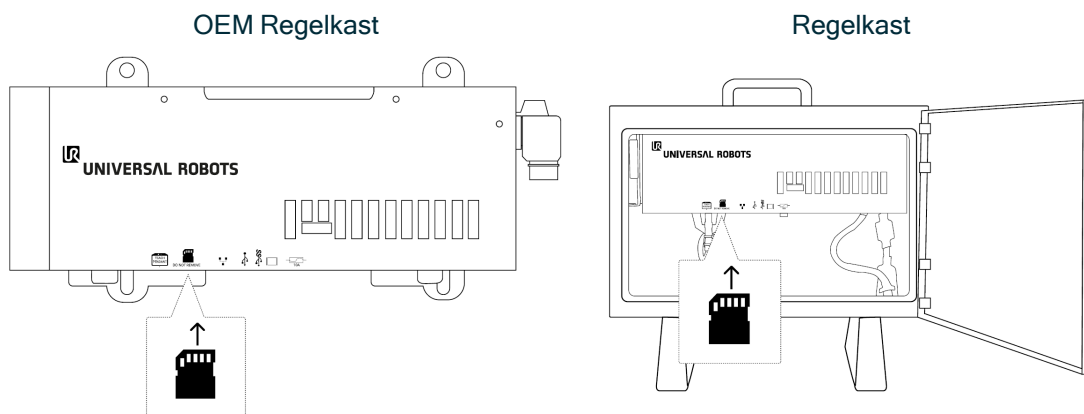


## 6.1. Vastzetten van de robotarm

### Beschrijving

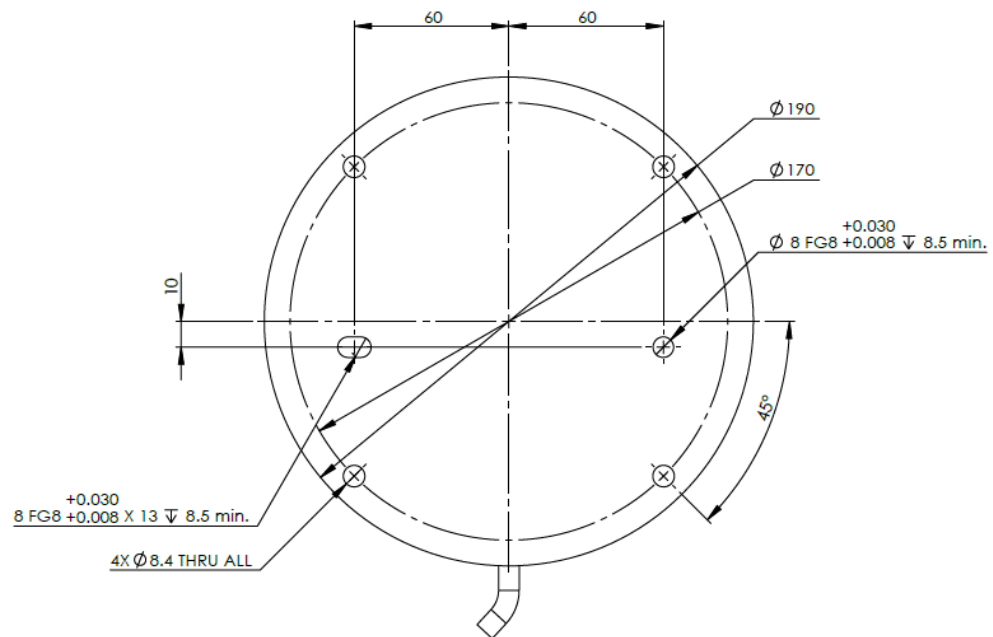

1.1: Onderkant van de basis van de robot

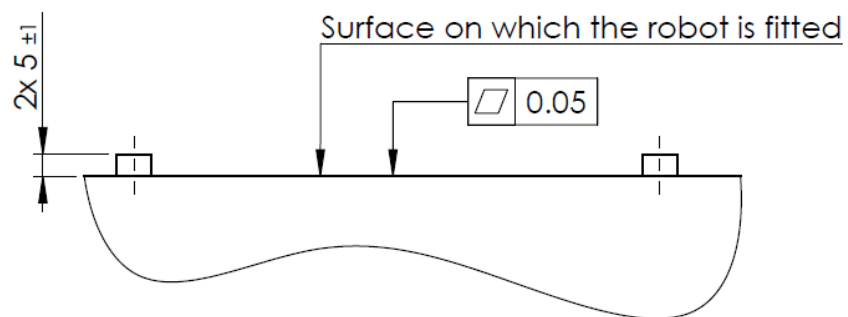

1.2: Montageplaat voor basis van de robot

**Uitschakelen  
van de  
robotarm****WAARSCHUWING**

Onverwacht opstarten en/of bewegen kan leiden tot letsel.

- Schakel de robotarm uit om te voorkomen dat deze onverwacht start tijdens het monteren en demonteren.

1. Tik aan de linkerkant van de voettekst op het pictogram **Robotstatus** om de robotarm uit te schakelen.

De kleur van het pictogram verandert van groen naar wit.

2. Druk op de aan/uit-knop op de programmeereenheid om de regelkast uit te schakelen.
3. Als het dialoogvenster **Afsluiten** verschijnt, tikt u op **Uitschakelen**.

U kunt nu:

- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- Wacht 30 seconden totdat de robot alle opgeslagen energie heeft ontladen.

**Vastzetten van de  
robotarm**

1. Plaats de robotarm op het oppervlak waarop deze moet worden gemonteerd. Het oppervlak moet egaal en schoon zijn.
2. Draai de vier 8.8 M8-bouten aan tot een koppel van 20 Nm. (Koppelwaarden zijn bijgewerkt in SW 5.18. De eerdere gedrukte versie vermeldt andere waarden.)
3. Als een nauwkeurige montage van de robot vereist is, gebruik dan het gat van 8 mm en de sleuf van 8x13 mm met de bijbehorende ISO 2338 8 mm H6-positioneringspennen in de montageplaat.


## 6.2. Afmetingen van de standaard

### Beschrijving

De structuur (standaard) waarop de robotarm is gemonteerd, is een cruciaal onderdeel van de robotinstallatie. De standaard moet stevig zijn en vrij van trillingen van externe bronnen.

Elk robotgewricht produceert een koppel dat de robotarm beweegt en stopt. Tijdens normale ononderbroken werking en tijdens stopbewegingen worden de gewrichtskoppels overgebracht op de robotstandaard als:

- $M_z$ : Koppel rond de Z-as van de basis.
- $F_z$ : Krachten langs de Z-as van de basis.
- $M_{xy}$ : Kantelkoppel in een richting van het XY-vlak van de basis.
- $F_{xy}$ : Kracht in een richting in het XY-vlak van de basis.

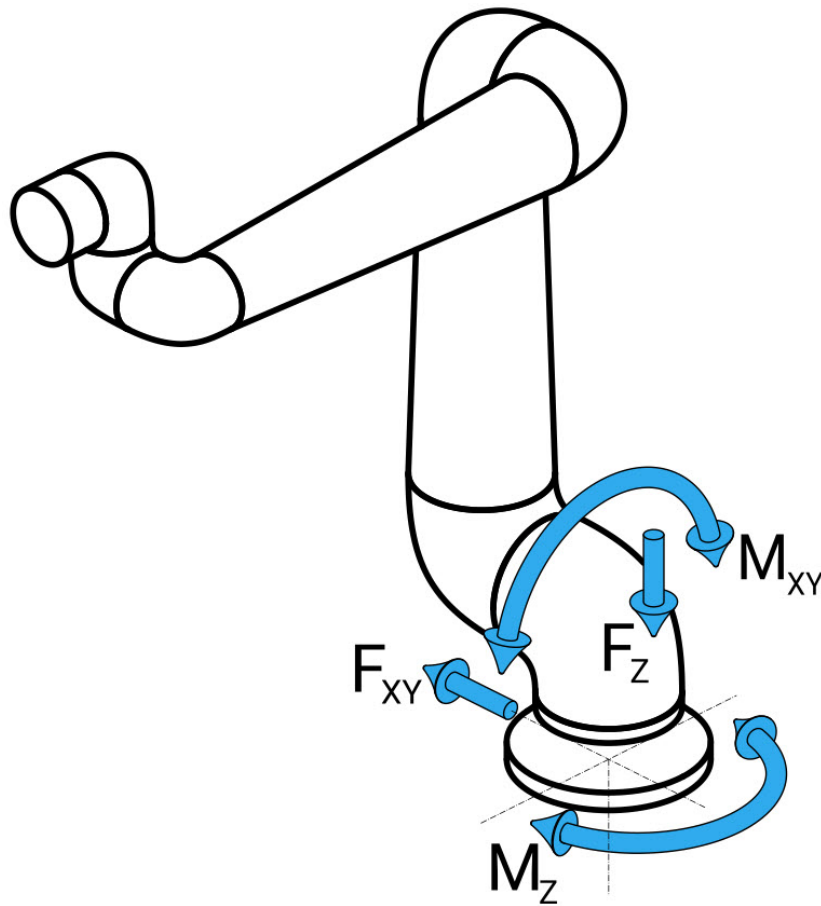

*Definitie van kracht en moment bij basisflens.*



**Afmetingen van de standaard**

De omvang van de belastingen is afhankelijk van het robotmodel, het programma en meerdere andere factoren.

In de proportionering van de standaard moet rekening worden gehouden met de belastingen die de robotarm produceert tijdens normale ononderbroken werking en tijdens stopbewegingen van categorie 0, 1 en 2.

Tijdens de stopbeweging mogen de gewrichten het maximale nominale bedrijfskoppel overschrijden. De belasting tijdens stopbewegingen is onafhankelijk van het type stopcategorie.

De waarden in de volgende tabellen zijn maximale nominale belastingen bij bewegingen in het slechtste geval, vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor van 2,5. De werkelijke belastingen zullen deze waarden niet overschrijden.

| Robotmodel | Mz [Nm] | Fz[N] | Mxy[Nm] | Fxy [N] |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| UR10e      | 990     | 1700  | 1460    | 1160    |

*Maximale gewrichtskoppels tijdens categorie 0, 1 en 2 stops.*

| Robotmodel | Mz [Nm] | Fz[N] | Mxy[Nm] | Fxy [N] |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| UR10e      | 830     | 1450  | 860     | 860     |

*Maximale gewrichtskoppels tijdens normaal bedrijf.*

De normale bedrijfsbelastingen kunnen over het algemeen worden verminderd door de versnellingslimieten van de gewrichten te verlagen. Werkelijke bedrijfsbelastingen zijn afhankelijk van de toepassing en het robotprogramma. U kunt URSim gebruiken om de verwachte belastingen in uw specifieke toepassing te evalueren.

**Veiligheidsmarges**

U kunt extra veiligheidsmarges opnemen, rekening houdend met de volgende ontwerpoverwegingen:

- **Statische stijfheid:** een standaard die niet voldoende stijf is, buigt tijdens beweging van de robot, waardoor de robotarm het beoogde waypoint of pad niet bereikt. Gebrek aan statische stijfheid kan ook leiden tot een slechte programmeerervaring in Freedrive of slechte beschermende stops.
- **Dynamische stijfheid:** als de frequentie van de standaard overeenkomt met de bewegingsfrequentie van de robotarm, kan het hele systeem resoneren, waardoor de indruk wordt gewekt dat de robotarm trilt. Gebrek aan dynamische stijfheid kan ook tot beschermende stops leiden. De standaard moet een minimale resonantiefrequentie van 45 Hz hebben.
- **Vermoeidheid:** de standaard moet worden geproportioneerd om te voldoen aan de verwachte levensduur en belastingscycli van het volledige systeem.

**WAARSCHUWING**

- Mogelijkheid van kantelgevaar.
- De bedrijfsbelastingen van de robotarm kunnen ertoe leiden dat beweegbare platformen, zoals tafels of mobiele robots, omvallen, wat tot mogelijke ongevallen kan leiden.
- Geef prioriteit aan veiligheid door afdoende maatregelen te nemen om te allen tijde het kantelen van beweegbare platformen te voorkomen.

**LET OP**

- Als de robot op een externe as is gemonteerd, mogen de versnellingen van deze as niet te hoog zijn.

U kunt de robotsoftware laten compenseren voor de versnelling van externe assen met behulp van het scriptcommando:

```
set_base_acceleration()
```

- Hoge versnellingen kunnen een veiligheidsstop van de robot veroorzaken.

## 6.3. Montagebeschrijving

### Beschrijving

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschapsflens  | Gebruikt vier M6-gaten om een gereedschap aan de gereedschapsflens te bevestigen. De M6-bouten van sterkteklasse 8.8 moeten worden aangedraaid met 8 Nm. Gebruik voor accurate herpositionering van gereedschap een pen in het daarvoor bestemde Ø 6 mm gat. |
| Regelkast          | De regelkast kan worden opgehangen aan een muur of op de grond worden geplaatst.                                                                                                                                                                             |
| Programmeereenheid | De programmeereenheid wordt aan een muur bevestigd of op de regelkast geplaatst. Controleer dat de kabel geen struikelgevaar veroorzaakt. U kunt extra montagebeugels kopen voor de regelkast en de programmeereenheid.                                      |



#### WAARSCHUWING

Het monteren en bedienen van de robot in omgevingen die de aanbevolen IP-classificatie overschrijden, kan leiden tot letsel.

- Plaats de robot in een omgeving geschikt voor de IP-klasse. De robot mag niet worden gebruikt in omgevingen die de IP-classificatie van de robot (IP54), de programmeereenheid (IP54) en de regelkast (IP44) overschrijden.



#### WAARSCHUWING

Instabiele montage kan letsel tot gevolg hebben.


- Zorg altijd dat de robotonderdelen goed en stevig gemonteerd en vastgeschroefd zijn.

### 6.3.1. Montage van de regelkast

**Een regelkast  
aan een muur  
monteren**

Gebruik de hieronder afgebeelde beugel die bij de robot is meegeleverd om de regelkast te monteren.


Monteer de beugel aan een muur en hang de regelkast vervolgens aan de beugel met de bevestigingsnokken.

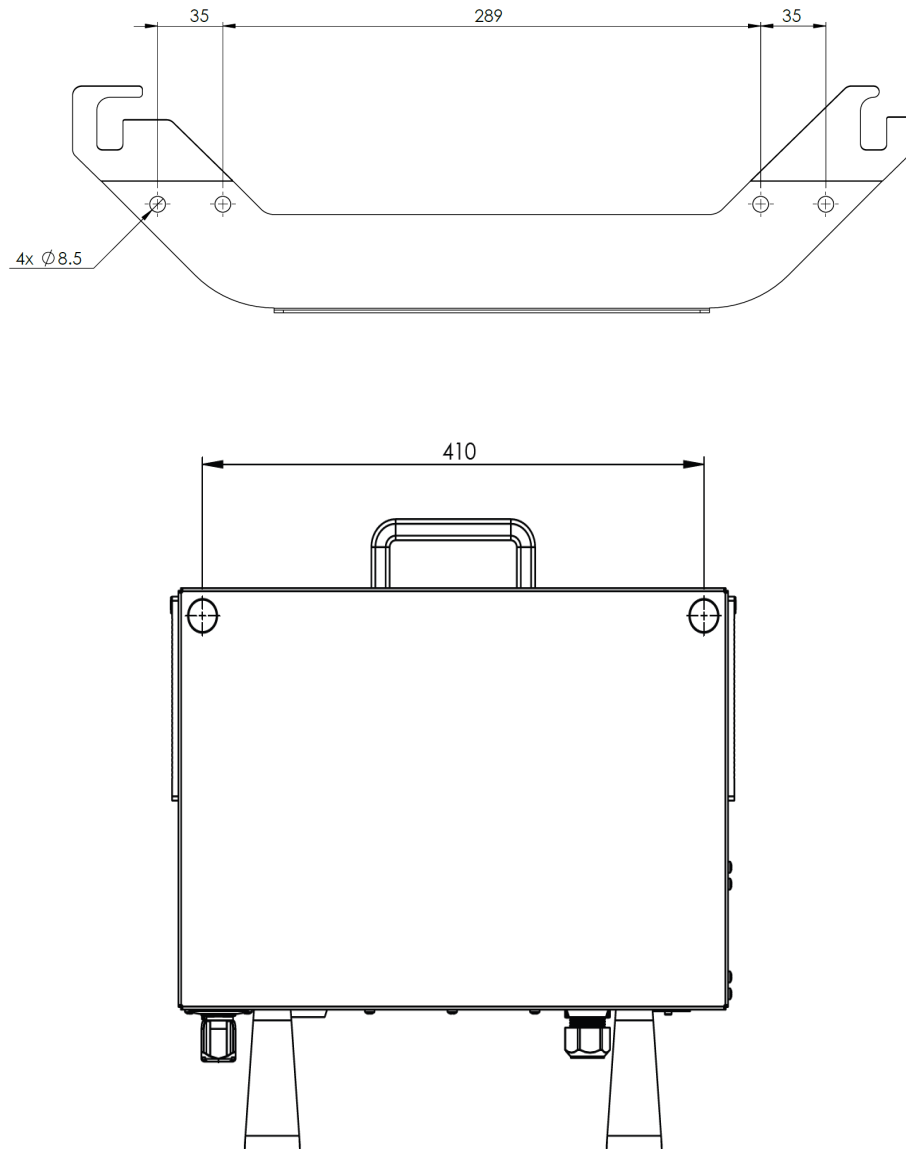

## 6.3.2. Vrije ruimte om regelkast

### Beschrijving

De stroom van warme lucht in de regelkast kan leiden tot storingen in de apparatuur. De aanbevolen vrije ruimte rond de regelkast is 200 mm aan elke kant voor voldoende stroming van koele lucht.

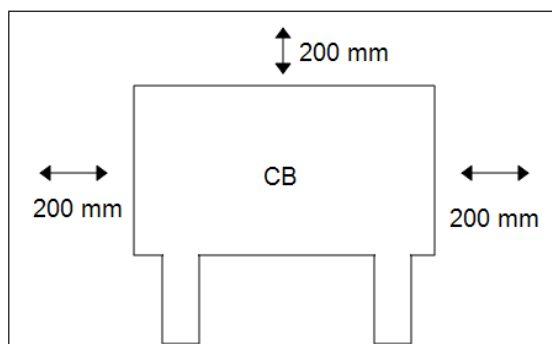

### WAARSCHUWING

Een natte regelkast kan dodelijk letsel veroorzaken.

- Zorg dat de regelkast en kabels niet in aanraking met vloeistoffen komen.
- Plaats de regelkast (IP44) in een omgeving geschikt voor de IP-klasse.

## 6.4. Werkruimte en bedrijfsruimte

### Beschrijving

De werkruimte is het bereik van de volledig uitgestrekte robotarm, horizontaal en verticaal. De bedrijfsruimte is de plaats waar de robot geacht wordt te functioneren.



#### MEDEDELING

Negeren van de werk- en bedrijfsruimte van de robot kan leiden tot materiële schade.

Het is belangrijk om rekening te houden met het cilindrische volume direct boven en onder de robotbasis bij het kiezen van de locatie voor het monteren van de robot. Het verplaatsen van het gereedschap in de buurt van het cilindrische volume moet worden vermeden, omdat dit ervoor zorgt dat de gewrichten snel bewegen, ook wanneer het gereedschap langzaam beweegt. Dit kan ertoe leiden dat de robot inefficiënt werkt en kan het moeilijk maken om een risicobeoordeling uit te voeren.



#### MEDEDELING


Door beweging van het gereedschap dicht bij het cilindrische volume kunnen de gewrichten te snel bewegen, wat leidt tot verlies van functionaliteit en schade aan eigendommen.

- Beweeg het gereedschap niet dicht bij het cilindrische volume, ook niet wanneer het gereedschap langzaam beweegt.

Het cilindrische volume bevindt zich zowel direct boven als direct onder de robotbasis. De robot reikt tot 1300 mm vanaf het basisgewricht.



Voor

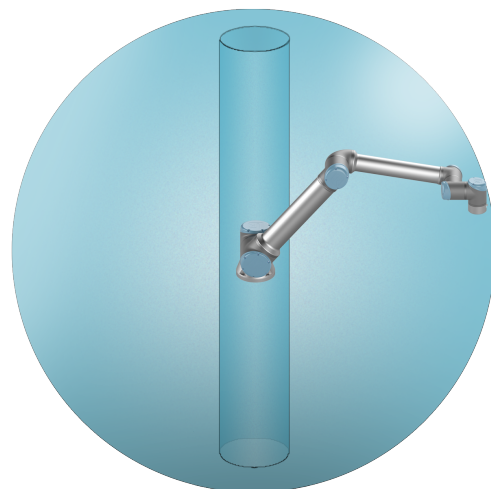

Gekanteld

## 6.4.1. Singulariteit

### Beschrijving



Een singulariteit is een positie die de beweging en het vermogen om de robot te positioneren beperkt. De robotarm kan stoppen met bewegen of zeer plotselinge en snelle bewegingen maken bij het naderen en verlaten van een singulariteit. Tijdens het plaatsen van de robot in de werkruimte en het definiëren van de bedrijfsruimte, is het belangrijk om rekening te houden met de singulariteitspositie die hieronder wordt beschreven.



#### WAARSCHUWING

Zorg dat robotbewegingen in de buurt van een singulariteit geen gevaren opleveren voor personen binnen het bereik van de robotarm, de eindeffector en het werkstuk.

- Stel veiligheidslimieten in voor de snelheid en acceleratie van het ellebooggewricht.

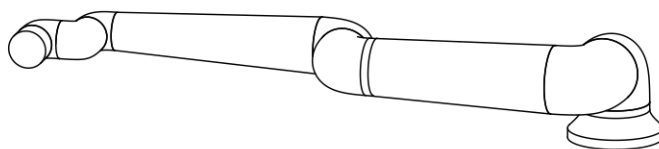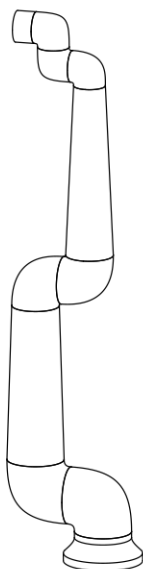

Het volgende veroorzaakt een singulariteit in de robotarm:

- Buitenste werkruimtelimiet
- Binnenste werkruimtelimiet
- Polsuitlijning

### Buitenste werkruimtelimiet

De singulariteit treedt op omdat de robot niet ver genoeg kan reiken of buiten het maximale werkgebied reikt.

Om dit te vermijden: stel de apparatuur rond de robot zo op dat wordt voorkomen dat deze buiten de aanbevolen werkruimte reikt.

**Binnenste  
werkruimtelimiet**

De singulariteit treedt op omdat de bewegingen direct boven of direct onder de robotbasis plaatsvinden. Hierdoor zijn veel posities/oriëntaties onbereikbaar.

Om dit te vermijden: programmeer de robottaak zodanig dat het niet nodig is om in of dicht bij de centrale cilinder te werken. U kunt ook overwegen om de robotbasis op een horizontaal oppervlak te monteren om de centrale cilinder van een verticale naar horizontale oriëntatie te draaien, zodat deze mogelijk weg van de kritieke delen van de taak wordt verplaatst.

**Polsuitlijning**

Deze singulariteit treedt op doordat polsgewricht 2 roteert in hetzelfde vlak als het schouder-, elleboog- en polsgewricht 1. Dit beperkt het bewegingsbereik van de robotarm, ongeacht de werkruimte.

Om dit te vermijden: deel de robottaak zo in dat het niet nodig is om de polsgewrichten van de robot op deze manier uit te lijnen. U kunt ook de richting van het gereedschap verschuiven, zodat het gereedschap horizontaal kan wijzen zonder de problematische uitlijning van de pols.

## 6.4.2. Vaste en verplaatsbare installatie

**Beschrijving**

Of de robotarm nu is bevestigd (gemonteerd op een standaard, muur of vloer) of in een beweegbare installatie (lineaire as, duwkar of mobiele robotbasis), deze moet veilig worden geïnstalleerd om stabiliteit tijdens alle bewegingen te garanderen.

Het ontwerp van de bevestiging moet zorgen voor stabiliteit bij bewegingen van:

- de robotarm
- de robotbasis
- zowel robotarm als robotbasis



## 6.5. Robotaansluitingen: basisflensskabel

### Beschrijving

Deze paragraaf beschrijft het aansluiten van een robotarm met een basisflenskabelaansluiting.

### Aansluiting basisflensskabel

De basisflensskabel brengt de robotverbinding tot stand door de robotarm aan te sluiten op de regelkast. De robotkabel wordt verbonden met de aansluiting van de basisflensskabel aan de ene kant en de aansluiting van de regelkast aan de nadere kant. U kunt elke aansluiting vergrendelen nadat de robotaansluiting tot stand is gebracht.



#### LET OP

Onjuiste aansluiting van de robot kan resulteren in uitval van de stroomtoevoer naar de robotarm.

- Gebruik geen robotkabels om een andere robotkabel te verlengen.



#### MEDEDELING

Rechtstreekse aansluiting van de basisflensskabel op een regelkast kan schade aan apparatuur of eigendommen veroorzaken.

- Sluit de basisflensskabel niet rechtstreeks aan op de regelkast.

## 6.6. Robotaansluitingen: robotkabel

### Beschrijving

Deze paragraaf beschrijft het aansluiten van een robotarm met een vaste robotkabel van 6 meter.

### Aansluiten van de arm en regelkast

U kunt de aansluiting naar rechts draaien om het vergrendelen eenvoudiger te maken nadat de kabel is aangesloten.

- Breng de robotaansluiting tot stand door de robotarm te verbinden met de regelkast met behulp van de robotkabel.
- Sluit de kabel van de robot aan op de aansluiting aan de onderkant van de regelkast zoals hieronder is afgebeeld.
- Draai de aansluiting tweemaal om ervoor te zorgen dat deze correct is vergrendeld voordat de robotarm wordt ingeschakeld.



### LET OP

Onjuiste aansluiting van de robot kan resulteren in stroomuitval op de robotarm.

- Koppel de robotkabel niet los wanneer de robotarm is ingeschakeld.
- Wijzig de originele robotkabel niet.

## 6.7. Voedingsaansluitingen

### Beschrijving

De netkabel vanaf de regelkast heeft standaard een IEC-stekker aan het uiteinde. Sluit een landspecifieke netstekker of -kabel aan op de IEC-stekker.



#### MEDEDELING

- IEC 61000-6-4 hoofdstuk 1 toepassingsbereik: "Dit deel van IEC 61000 voor emissie-eisen is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur bedoeld voor gebruik in de omgeving van bestaande industriële locaties (zie 3.1.12)."
- IEC 61000-6-4 hoofdstuk 3.1.12 industriële locatie: "Locations characterized by a separate power network, supplied from a high- or medium-voltage transformer, dedicated for the supply of the installation"

### Voedingsaansluitingen

Om de robot van stroom te voorzien, moet de regelkast op het stroomnet worden aangesloten via het meegeleverde netsnoer. De IEC C13-stekker van het netsnoer wordt aangesloten op de ingang van het IEC C14-apparaat aan de onderkant van de regelkast.



#### WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT

Het niet correct plaatsen van de netaansluiting kan tot letsel leiden.

- De stekker voor de netaansluiting moet buiten het bereik van de robot worden geplaatst, zodat de stroom kan worden uitgeschakeld zonder personeel bloot te stellen aan mogelijke gevaren.
- Als extra beveiliging is geïmplementeerd, moet de stekker voor de netaansluiting ook buiten de beveiligde ruimte worden geplaatst, zodat de stroom kan worden uitgeschakeld zonder blootstelling aan mogelijke gevaren.



#### MEDEDELING

Gebruik altijd een netsnoer met een landspecifieke stekker bij het aansluiten van de regelkast.

Gebruik voor landen met een netspanning lager dan 200 VAC een netsnoer met een nominale stroomsterkte van 15 A.

Gebruik voor landen met een netspanning hoger dan 200 VAC een netsnoer met een nominale stroomsterkte van 10 A.

Gebruik geen adapter.

Zorg als onderdeel van de elektrische installatie voor het volgende:

- Aarding
- Hoofdzekering
- Aardlekschakelaar
- Een vergrendelbare (in de UIT-stand) schakelaar

Er moet een hoofdschakelaar worden geïnstalleerd om alle apparatuur in de robottoepassing uit te schakelen als een eenvoudig middel om de stroomtoevoer te onderbreken. De elektrische specificaties worden in de tabel hieronder weergegeven.

| Parameter                    | Min. | Type | Max. | Eenheid |
|------------------------------|------|------|------|---------|
| Ingangsspanning              | 90   | -    | 264  | VAC     |
| Externe zekering (90-200 V)  | 15   | -    | 16   | A       |
| Externe zekering (200-264 V) | 8    | -    | 16   | A       |
| Ingangsfrequentie            | 47   | -    | 440  | Hz      |
| Stand-byvermogen             | -    | -    | <1,5 | W       |
| Nominaal bedrijfsvermogen    | 90   | 250  | 500  | W       |



#### WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT

Het niet naleven van het onderstaande kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als gevolg van elektrische gevaren.

- Controleer of de robot correct geaard is (elektrische verbinding met de aarde). Gebruik de ongebruikte bouten met de aardingssymbolen in de regelkast voor gemeenschappelijke aarding van alle apparatuur in het systeem. De aardingsgeleider moet minimaal de stroomsterkte van de hoogste stroomwaarde in het systeem hebben.
- Zorg ervoor dat de voeding van de regelkast beveiligd is met een aardlekschakelaar en een juiste zekering.
- Vergrendel alle stroom naar de volledige robotinstallatie tijdens onderhoud.
- Zorg dat andere apparatuur de robot-I/O niet van stroom voorziet wanneer de robot is vergrendeld.
- Controleer dat alle kabels correct zijn aangesloten voordat de regelkast wordt ingeschakeld. Gebruik altijd de originele voedingskabel.

## 7. Eerste start

### Beschrijving

De eerste start is de eerste reeks van acties die u na de montage met de robot kunt nemen.

Deze initiële sequentie vereist het volgende:

- Schakel de robot in
- Voer het serienummer in
- Intialiseer de robotarm
- Schakel de robot uit



#### LET OP

Het niet controleren van de belasting en installatie voorafgaand aan het opstarten van de robotarm kan leiden tot letsel aan personeel en/of materiële schade.

- Controleer altijd of de daadwerkelijke belasting en installatie juist zijn voordat u de robotarm opstart.



#### LET OP

Onjuiste belastings- en installatie-instellingen verhinderen een juiste werking van de robotarm en regelkast.

- Controleer altijd of de belastings- en installatie-instellingen juist zijn.



#### MEDEDELING

Het opstarten van de robot bij lagere temperaturen kan leiden tot lagere prestaties of stops als gevolg van temperatuurafhankelijke viscositeit van olie en vet.

- Om de robot op te starten bij lage temperaturen kan een opwarmfase nodig zijn.

## 7.1. De robot inschakelen

### Om de robot in te schakelen

Door de robot in te schakelen, wordt de regelkast ingeschakeld en wordt het display op het scherm van de programmeereenheid geladen.

1. Druk op de aan/uit-knop op de programmeereenheid om de robot in te schakelen.

## 7.2. Het serienummer invoeren


### Het serienummer invoeren

Wanneer de robot voor het eerst wordt geïnstalleerd, moet u het serienummer op de robotarm invoeren.

Deze procedure is ook vereist wanneer u de software opnieuw installeert. Bijvoorbeeld wanneer u een software-update installeert.

1. Selecteer uw regelkast.
2. Voeg het serienummer toe zoals het op de robotarm staat.
3. Tik op **OK** om te beëindigen.

Het laden van het startscherm kan enkele minuten duren.

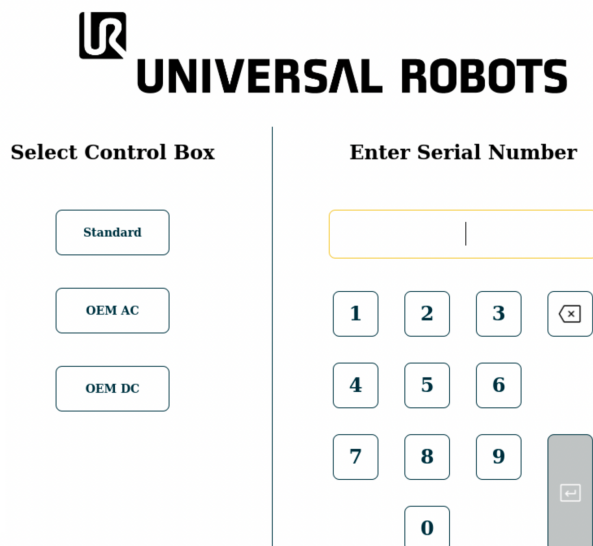

The screenshot shows the Universal Robots logo at the top. Below it, there are two main sections: 'Select Control Box' and 'Enter Serial Number'. The 'Select Control Box' section has three buttons: 'Standard', 'OEM AC', and 'OEM DC'. The 'Enter Serial Number' section has a text input field with a cursor, and a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and a backspace key (X).

## 7.3. De robotarm starten

**Starten van de robot** Door de robotarm te starten, wordt het remsysteem losgelaten, zodat u de robotarm kunt bewegen en PolyScope X kunt gebruiken.

1. Tik links in de voet op de aan/uit-knop of het pictogram **Robotstatus**. De status van de robotarm is **Uit**.
2. Tik op **Inschakelen** wanneer het dialoogvenster Initialiseren wordt weergegeven. De status van de robotarm is **Opstarten**.

### Initialize

#### Arm - OFF

Robot arm is currently off and not communicating with the controller.

Press "**Power On**" to send power to the arm in a locked state.

Active Payload  
0.000 kg

Application Payload | 0 kg

 Power On



3. Tik op **Ontgrendelen** om de remmen los te laten.

### Initialize

#### Arm - LOCKED

The robot arm is powered but for safety has its brakes applied.

Confirm that the below payload is accurate before unlocking.

Active Payload  
0.000 kg

Application Payload | 0 kg

 Power Off

 Unlock



De initialisatie van de robotarm gaat gepaard met geluid en lichte bewegingen wanneer de remmen worden losgelaten.

- De status van de robotarm is nu **actief** en u kunt beginnen met het gebruik van de interface.

### Initialize

#### Arm - **ACTIVE**

Robot arm is currently active and can communicate with the control box and other equipment.

Press "**Power Off**" to stop the communication and power off the robot arm.

Active Payload  
0.000 kg



Application Payload | 0 kg



Power Off



- U kunt op **Uitschakelen** tikken om de robotarm uit te schakelen.

Wanneer de status van de robotarm verandert van **Inactief** naar **Normaal**, worden de sensorgegevens gecontroleerd aan de hand van de geconfigureerde montage van de robotarm. Als de montage is geverifieerd, tik dan op **START** om door te gaan met het loslaten van alle gewrichtsremmen om de robotarm voor te bereiden op gebruik.

## 7.4. De robot uitschakelen



## Uitschakelen van de robotarm



### WAARSCHUWING

Onverwacht opstarten en/of bewegen kan leiden tot letsel.

- Schakel de robotarm uit om te voorkomen dat deze onverwacht start tijdens het monteren en demonteren.

1. Tik aan de linkerkant van de voettekst op het pictogram **Robotstatus** om de robotarm uit te schakelen.

De kleur van het pictogram verandert van groen naar wit.

2. Druk op de aan/uit-knop op de programmeereenheid om de regelkast uit te schakelen.


3. Als het dialoogvenster **Afsluiten** verschijnt, tikt u op **Uitschakelen**.

U kunt nu:

- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- Wacht 30 seconden totdat de robot alle opgeslagen energie heeft ontladen.

## 7.5. Tabblad Toepassing

Op het tabblad Toepassing kunt u de instellingen configureren die van invloed zijn op de algemene prestaties van uw robot en PolyScope X.

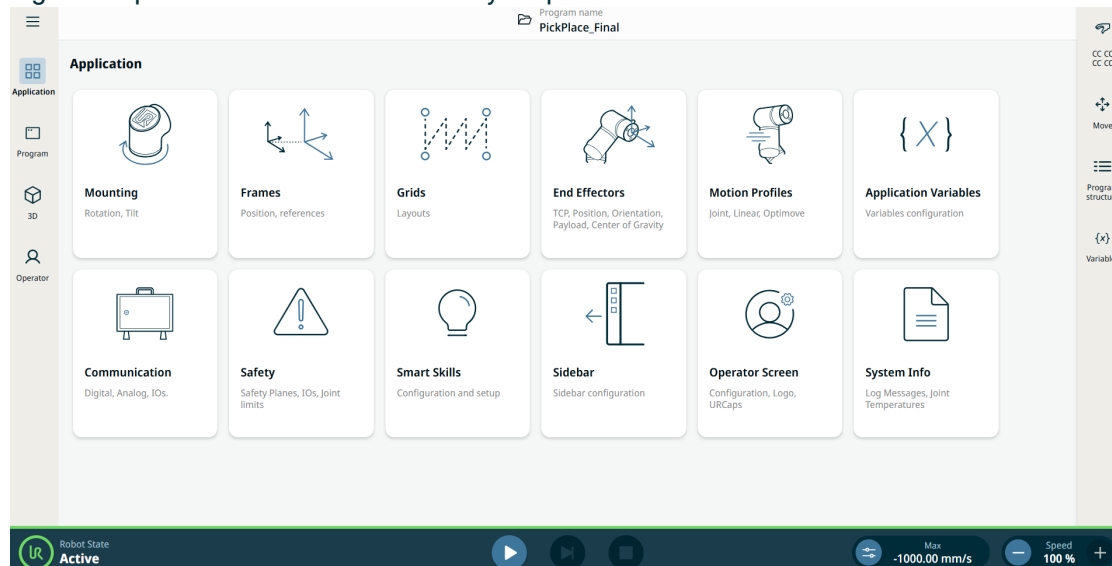

**Figuur 1.3:** Toepassingsscherm met toepassingsknoppen.

Gebruik het tabblad Toepassing om toegang te krijgen tot de volgende configuratieschermen.

- Montage
- Kaders
- Grids Application
- End Effectors Application
- Bewegingsprofielen
- Toepassingsvariabelen
- Communicatie
- Veiligheid
- Smart Skills Application
- Sidebar in the Application Tab
- Operator Screen Application
- Systeeminformatie

## 7.6. De robot verplaatsen met de 3PE-programmeereenheid

### Beschrijving

Met Freedrive kan de robotarm handmatig naar gewenste posities worden getrokken. Voor de meeste robotgroottes is de meest gebruikelijke manier om Freedrive in te schakelen het indrukken van de Freedrive-knop op de programmeereenheid. Meer manieren om Freedrive in te schakelen en te gebruiken worden in de volgende paragrafen beschreven.

In Freedrive bewegen de gewrichten van de robotarm met weinig weerstand, omdat de remmen losgelaten zijn. De weerstand neemt toe naarmate de robotarm in Freedrive een vooraf gedefinieerde limiet of vlak nadert. Hierdoor voelt het zwaar om de robot in een positie te trekken.



#### WAARSCHUWING

Letsel aan personeel kan optreden als gevolg van onverwachte bewegingen.

- Controleer of de geconfigureerde belasting overeenkomt met de gebruikte belasting.
- Controleer of de juiste belasting stevig aan de gereedschapsflens is bevestigd.

**Freedrive  
inschakelen**

U kunt FreeDrive inschakelen op de volgende manieren:

- De 3PE-programmeereenheid gebruiken.
- Freedrive op de robot gebruiken.
- I/O-acties gebruiken.

**MEDEDELING**

Als u Freedrive inschakelt terwijl u de robotarm beweegt, kan dit drift en fouten veroorzaken.

- Schakel Freedrive niet in terwijl u de robot duwt of aanraakt.

**3PE  
programmeereenheid**

Gebruik van de 3PE TP-knop om de robotarm te freedriven:

1. Druk de 3PE knop snel licht in, laat los, druk hem vervolgens weer licht in en houd hem in die positie.

Nu kunt u de robotarm in de gewenste positie brengen, terwijl de druk licht wordt gehandhaafd.

**Freedrive op  
robot**

Gebruik **freedrive op robot** om de robotarm in PolyScope te verplaatsen:

1. Tik in de hoofdnavigatie op **Toepassingen** tik vervolgens op **Veiligheid**.
2. Tik op **Ontgrendelen** en voer het wachtwoord in.
3. Tik onder Veiligheids-I/O op **Ingangen**.
4. Scroll in het **Funcities** dropdownmenu omlaag naar **Freedrive Enabled Input**.
5. Tik op **Toepassen** en **Toepassen en opnieuw opstarten** om de robotarm opnieuw op te starten.
6. Tik op **Configuratie bevestigen**.
7. Beweeg de robotarm naar wens.

**Backdrive**

Tijdens initialisatie van de robotarm kunnen kleine trillingen worden waargenomen wanneer de remmen worden losgelaten. In sommige situaties, zoals wanneer de robot dicht bij een botsing is, zijn deze trillingen ongewenst. Gebruik Backdrive om specifieke gewrichten naar een gewenste positie te dwingen zonder alle remmen van de robotarm te lossen.

**Heavy  
Freedrive**

Als de robotarm is ingeschakeld en de remmen zijn losgelaten, kunnen de gewrichten met kracht worden bewogen. De kracht die nodig is om een beweging in gang te zetten, is afhankelijk van de krachtlimieten die zijn opgegeven in de veiligheidsinstellingen.

## 8. Installatie

### Beschrijving

Het installeren van de robot kan de configuratie en het gebruik van in- en uitgangssignalen (I/O's) vereisen. Deze verschillende soorten I/O's en hun gebruik worden in de volgende paragrafen beschreven.

## 8.1. Elektrische waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

### Waarschuwing

Neem de volgende waarschuwingen in acht voor alle interfacegroepen, ook wanneer u een toepassing ontwerpt en installeert.



#### WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van het onderstaande kan leiden tot ernstig letsel of overlijden, omdat de veiligheidsfuncties kunnen worden overschreven.

- Sluit nooit veiligheidssignalen aan op een PLC die geen veiligheids-PLC is met het juiste veiligheidsniveau. Het is van belang dat de veiligheidsinterfacesignalen worden gescheiden van de normale I/O-interfacesignalen.
- Alle veiligheidsgelateerde signalen moeten redundant worden uitgevoerd (twee onafhankelijke kanalen).
- Houd de twee afzonderlijke kanalen gescheiden, zodat een enkele fout niet kan leiden tot verlies van de veiligheidsfunctie.



#### WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT

Het niet naleven van het onderstaande kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als gevolg van elektrische gevaren.

- Zorg dat alle apparatuur die niet geschikt is voor blootstelling aan water droog blijft. Indien er water in het product is gekomen, sluit dan de stroomvoorziening af en neem contact op met uw lokale Universal Robot-dienstverlener voor hulp.
- Gebruik alleen originele kabels die met de robot zijn meegeleverd. Gebruik de robot niet voor toepassingen waarbij de kabels worden gebogen.
- U moet de interfacekabels naar de robot-I/O voorzichtig installeren. De metalen plaat onderin is bedoeld voor interfacekabels en aansluitingen. Verwijder de plaat voordat u gaten boort. Controleer of alle zaagsel verwijderd is voordat u de plaat opnieuw plaatst. Denk eraan pakkingen van het juiste formaat te gebruiken.

**LET OP**

Storende signalen met een niveau hoger dan die zijn vastgelegd in de specifieke IEC-standaard kunnen onverwachte gedragingen van de robot veroorzaken. Let op het volgende:

- De robot is getest conform internationale IEC-normen voor **elektromagnetische compatibiliteit (EMC)**. Zeer hoge signalen of overmatige blootstelling kunnen de robot permanent beschadigen. EMC-problemen treden vaak op tijdens lasprocessen en worden normaal gesproken gemeld door foutmeldingen in het logboek. Universal Robots kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt door EMC-problemen.
- I/O-kabels die vanaf de regelkast naar andere machines en fabrieksapparatuur lopen, mogen niet langer zijn dan 30 m, tenzij aanvullende testen zijn uitgevoerd.

**AARDE**

Negatieve aansluitingen worden aangeduid als GND en worden aangesloten op de afscherming van de robot en de regelkast. Alle genoemde GND-aansluitingen zijn uitsluitend voor voeding en signalering. Gebruik voor aarding (PE, Protective Earth) de M6-schroefklemmen gemarkeerd met aardingssymbolen in de regelkast. De aardingsgeleider moet minimaal de stroomsterkte van de hoogste stroomwaarde in het systeem hebben.

**HANDLEIDING LEZEN**

Sommige I/O's in de regelkast kunnen worden geconfigureerd als een normale of een veiligheidsgerelateerde I/O. Zorg dat u het volledige hoofdstuk Elektrische interface leest en begrijpt.

## 8.2. Aansluitpoorten regelkast


### Beschrijving

De onderkant van de I/O-interfacegroepen in de regelkast is voorzien van externe aansluitpoorten en een zekering, zoals hieronder beschreven. Er zijn afgedekte openingen aan de onderkant van de regelkast om externe verbindingskabels door te voeren voor toegang tot de aansluitpoorten.

### Externe aansluitpoorten

De poorten voor externe aansluitingen zijn als volgt:

- Programmeereenheidpoort om de programmeereenheid te gebruiken om de robotarm te bedienen of te programmeren.
- SD-kaartpoort om een SD-kaart te plaatsen.
- Ethernetpoort om ethernetverbindingen mogelijk te maken.
- Mini DisplayPort ter ondersteuning van beeldschermen met DisplayPort. Deze poort vereist een actieve converter om DVI of HDMI te ondersteunen.
- De ministeekzekering wordt gebruikt wanneer een externe voeding is aangesloten.

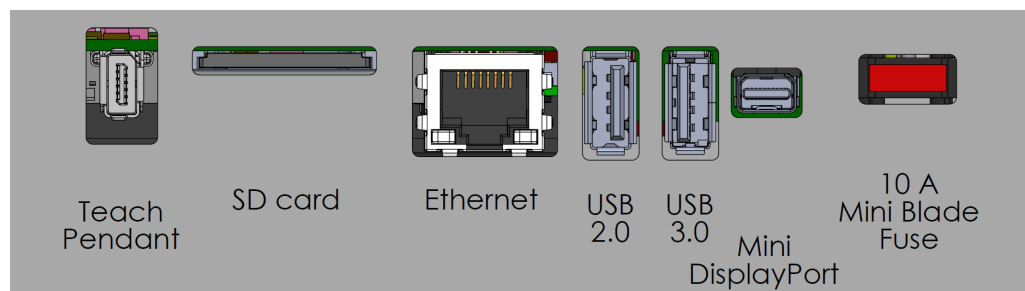

#### MEDEDELING

Het aansluiten of loskoppelen van een programmeereenheid terwijl de regelkast is ingeschakeld, kan schade aan apparatuur veroorzaken.

- Sluit geen programmeereenheid aan terwijl de regelkast is ingeschakeld.
- Schakel de regelkast uit voordat u een programmeereenheid aansluit.



#### MEDEDELING

Het niet aansluiten van de actieve adapter voordat de regelkast wordt ingeschakeld, kan de schermweergave belemmeren.

- Sluit de actieve adapter aan voordat u de regelkast inschakelt.
- In sommige gevallen moet de externe monitor worden ingeschakeld voordat de regelkast wordt ingeschakeld.
- Gebruik een actieve adapter die revisie 1.2 ondersteunt, omdat niet alle adapters out-of-the-box werken.



## 8.3. Ethernet

### Beschrijving

De Ethernet-interface kan worden gebruikt voor:

- MODBUS, EtherNet/IP en PROFINET.
- Externe toegang en controle.

Om de ethernetkabel aan te sluiten moet deze door de opening in de bodem van de regelkast worden gevoerd en in de ethernetpoort aan de onderzijde van de houder worden gestoken. Vervang de afdekking in de bodem van de regelkast door een geschikte kabelwartel om de kabel aan te sluiten op de ethernetpoort.



De elektrische specificaties worden in de tabel hieronder weergegeven.

| Parameter            | Min. | Type | Max. | Eenheid |
|----------------------|------|------|------|---------|
| Communicatiesnelheid | 10   | -    | 1000 | Mb/s    |



## 8.4. Installatie van de 3PE programmeereenheid

### Beschrijving

De programmeereenheid met inschakelapparaat met 3 standen (3PE TP) is een veiligheidskritische interface die is ontworpen om handmatige bediening te verbeteren. De 3PE-knoppen zijn rechtstreeks in de programmeereenheid geïntegreerd en zorgen ervoor dat robotbewegingen alleen kunnen worden gestart wanneer de operator een gecontroleerde grip behoudt.

### 8.4.1. Hardware-installatie

#### Een programmeereenheid verwijderen




#### MEDEDELING

Vervangen van de programmeereenheid kan ertoe leiden dat het systeem een fout meldt bij het opstarten.


- Selecteer altijd de juiste configuratie voor het type programmeereenheid.

Om de standaard programmeereenheid te verwijderen:

1. Schakel de regelkast uit en koppel de stroomkabel af van de stroombron.
2. Verwijder de twee kabelbinders die gebruikt zijn voor bevestiging van de kabels van de programmeereenheid en werp ze weg.
3. Druk de clips aan beide zijden van de stekker van de programmeereenheid in zoals op de afbeelding en trek omlaag om de verbinding met de poort van de programmeereenheid te verbreken.
4. Open de plastic doorvoerhuls aan de onderkant van de regelkast volledig en verwijder de stekker en kabel van de programmeereenheid.
5. Verwijder voorzichtig de kabel en de programmeereenheid.

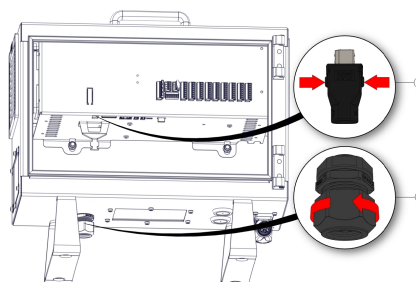

|   |       |   |                      |
|---|-------|---|----------------------|
| 1 | Clips | 2 | Plastic doorvoerhuls |
|---|-------|---|----------------------|

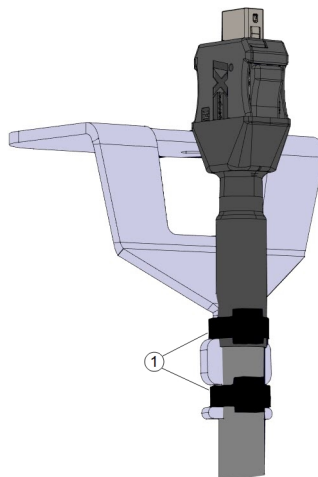

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | Kabelbinders |
|---|--------------|

#### Een programmeereenheid installeren

1. Steek de stekker en kabel van de programmeereenheid door de onderkant van de regelkast en sluit de plastic doorvoerhuls volledig.
2. Steek de stekker van de programmeereenheid in de poort voor de programmeereenheid om deze aan te sluiten.
3. Gebruik twee nieuwe kabelbinders om de kabels van de programmeereenheid te bevestigen.
4. Sluit de stroomkabel aan op de stroombron en schakel de regelkast in.


Er is altijd een stuk kabel bij de programmeereenheid die een struikelgevaar kan opleveren als deze niet goed wordt opgeborgen.

- Berg de programmeereenheid en de kabel altijd goed op om struikelgevaar te voorkomen.


### 8.4.2. Software-installatie

## Configureren van de software voor de 3PE-programmeereenheid

1. Tik in PolyScope in het menu links op **Toepassing** en selecteer **Veiligheid**.

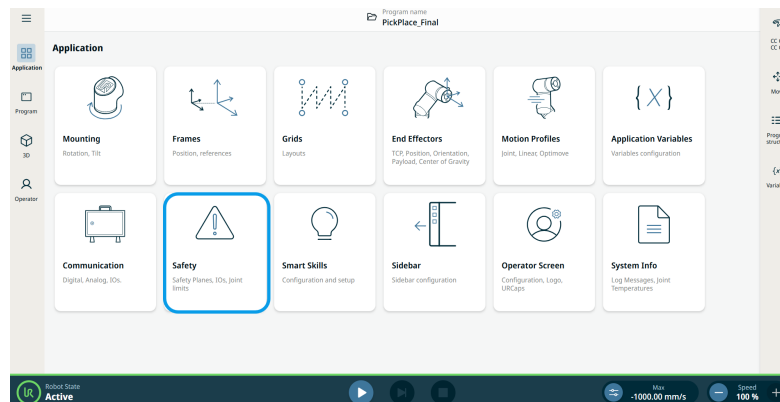

2. Tik op **Hardware** en vervolgens op de knop **Ontgrendelen**

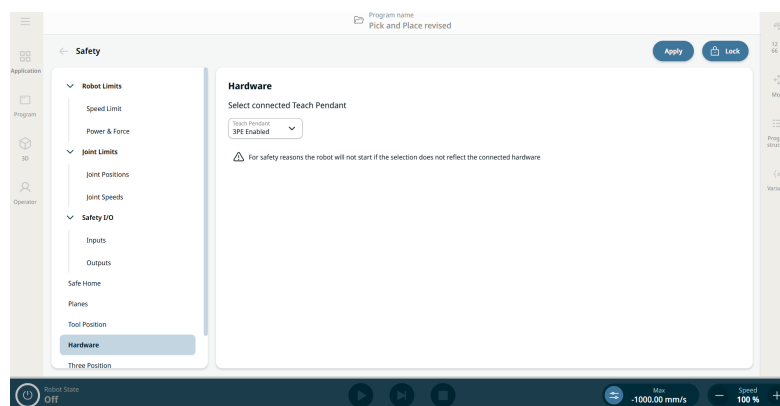

3. Voer het wachtwoord in en tik op **Bevestigen**. Programmeereenheid is nu ingeschakeld.
4. Tik op **Toepassen** om het systeem opnieuw te starten. PolyScope blijft lopen.
5. Tik op **Toepassen en opnieuw starten** en vervolgens op **Configuratie bevestigen** om de software-installatie van de 3PE-programmeereenheid te voltooien.


## 8.5. Regelaar-I/O

### Beschrijving

De elektrische interface in de regelkast bestaat uit groepen in- en uitgangen I/O die communicatie en configuraties tussen de robotarm en verschillende soorten apparatuur mogelijk maken. De I/O-groepen omvatten:

- Digitaal (24 V)
- Configureerbaar (24 V)
- Analooq
- Veiligheid (24 V)

De afbeelding hieronder toont de lay-out van de elektrische interfacegroepen in de regelkast. Let op en houd u aan het doel van het kleurenschema, zoals hieronder geïllustreerd.

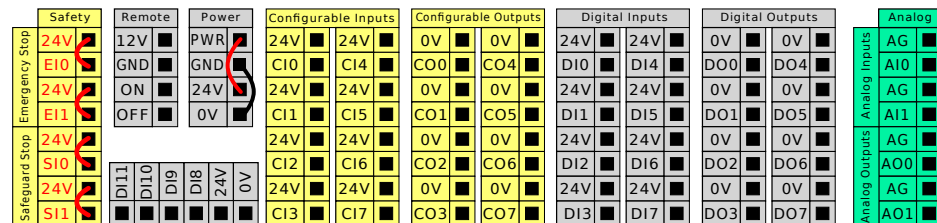

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Geel met rode tekst    | Speciale veiligheidssignalen      |
| Geel met zwarte tekst  | Configureerbaar voor veiligheid   |
| Grijs met zwarte tekst | Digitale I/O voor algemene doelen |
| Groen met zwarte tekst | Algemene analoge I/O              |

### I/O-groepen

U kunt de robot installeren volgens de elektrische specificaties, welke hetzelfde zijn voor alle drie vermelde ingangen.

- Veiligheids-I/O.
- Configureerbare I/O.
- Algemene I/O.




#### MEDEDELING

Configureerbare I/O zijn I/O die zijn geconfigureerd als veiligheidsgerelateerde I/O of als normale I/O. Dit zijn de gele klemmen met zwarte tekst.

Het is mogelijk om de digitale I/O te voeden middels een interne 24V voeding of een externe voedingsbron door het klemmenblok genaamd **Power** te configureren. Dit blok bestaat uit vier klemmen. De bovenste twee (PWR en GND) zijn 24 V en aarde van de interne 24 V voeding. De onderste twee klemmen (24 V en 0 V) van het blok zijn de 24 V ingang om de I/O te voeden. De standaardconfiguratie gebruikt de interne voeding.


**Standaard  
voeding**

In dit voorbeeld wordt de standaardconfiguratie gebruikt met de interne voeding

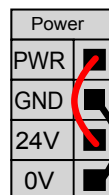
**Externe  
voeding**

Als er meer stroom nodig is, kan een externe voeding worden aangesloten zoals hieronder afgebeeld.

De zekering is een ministeekzekering met een maximale stroomsterkte van 10 A en een minimale spanning van 32 V. De zekering moet UL-gemarkeerd zijn. Als de zekering overbelast is, moet deze worden vervangen.

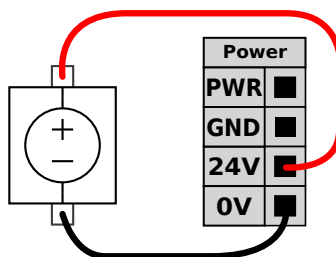

In dit voorbeeld gebruikt de configuratie een externe voeding voor meer stroom.

**Voedingsspecificatie**

De elektrische specificaties van zowel de interne als een externe voeding worden hieronder weergegeven.

| Eindklemmen                         | Parameter | Min. | Type | Max. | Eenheid |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|
| <b>Interne 24 V voeding</b>         |           |      |      |      |         |
| [ PWR - GND ]                       | Spanning  | 23   | 24   | 25   | V       |
| [ PWR - GND ]                       | Huidig    | 0    | -    | 2*   | A       |
| <b>Externe 24 V ingangvereisten</b> |           |      |      |      |         |
| [ 24V - 0V ]                        | Spanning  | 20   | 24   | 29   | V       |
| [ 24V - 0V ]                        | Huidig    | 0    | -    | 6    | A       |

\*3,5 A gedurende 500 ms of 33% bedrijfscyclus.

**Specificatie  
van digitale  
I/O**

De digitale I/O's zijn uitgevoerd volgens IEC 61131-2. De elektrische specificaties worden hieronder weergegeven.

| Eindklemmen               | Parameter        | Min. | Type  | Max. | Eenheid |
|---------------------------|------------------|------|-------|------|---------|
| <b>Digitale uitgangen</b> |                  |      |       |      |         |
| [COx / DOx]               | Stroomsterkte*   | 0    | -     | 1    | A       |
| [COx / DOx]               | Spanningsval     | 0    | -     | 0,5  | V       |
| [COx / DOx]               | Lekstroom        | 0    | -     | 0.1  | mA      |
| [COx / DOx]               | Functie          | -    | PNP   | -    | Type    |
| [COx / DOx]               | IEC 61131-2      | -    | 1 A   | -    | Type    |
| <b>Digitale ingangen</b>  |                  |      |       |      |         |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]         | Spanning         | -3   | -     | 30   | V       |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]         | OFF-regio        | -3   | -     | 5    | V       |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]         | ON-regio         | 11   | -     | 30   | V       |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]         | Stroom (11-30 V) | 2    | -     | 15   | mA      |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]         | Functie          | -    | PNP + | -    | Type    |
| [EIx/SIx/CIx/DIx]         | IEC 61131-2      | -    | 3     | -    | Type    |

\*Voor weerstandsbelastingen of inductieve belastingen van maximaal 1H.

### 8.5.1. Digitale in- en uitgang

**Gereedschapsuitgang**

De gereedschapsuitgang bevat twee digitale uitgangsvelden, gereedschapsuitgangsspanning en voedingsstroomindicator en een schakelaar Tweepens voeding.

- **Digitale uitgang (DO)** - kan onafhankelijk worden ingesteld op hoog of laag
- **Gereedschapsuitgangsspanning** - selecteerbaar tussen 0 V, 12 V en 24 V. Deze instelling is persistent bij het opnieuw opstarten van de robotcontroller
- **Voeding** - stroomverbruiksindicator
- **Tweepens voeding** - wordt gebruikt om te schakelen tussen digitale uitgangen en de voedingsbron voor het gereedschap. Door Tweepens voeding in te schakelen, worden de standaard digitale gereedschapsuitgangen (DO) uitgeschakeld

De wijzigingen worden van kracht na selectie van een nieuwe uitgangsconfiguratie. De huidige geladen installatie wordt aangepast om de nieuwe configuratie te weerspiegelen. Sla de installatie op om verlies van wijzigingen te voorkomen, nadat is gecontroleerd dat de gereedschapsuitgangen werken zoals is bedoeld.

**Digitale  
ingang**

U kunt het horizontale digitale ingangenblok (DI8-DI11, hieronder weergegeven) gebruiken voor kwadratuurcodering van Traceren transportband.


| DI11                                                                              | DI10                                                                              | DI9                                                                               | DI8                                                                               | 24V                                                                                 | 0V                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

## 8.5.2. Gebruik van het tabblad Bedrade I/O

### Beschrijving

Gebruik het tabblad Bedrade I/O om de live I/O-signalen van/naar de regelkast te bewaken en in te stellen.

Het scherm toont de huidige status van de I/O, ook tijdens de uitvoering van het programma. Het programma stopt als er tijdens de uitvoering iets wordt gewijzigd. Bij een programmastop behouden alle uitgangssignalen hun status. Het scherm wordt met 10 Hz bijgewerkt, dus een zeer snel signaal wordt mogelijk niet goed weergegeven.

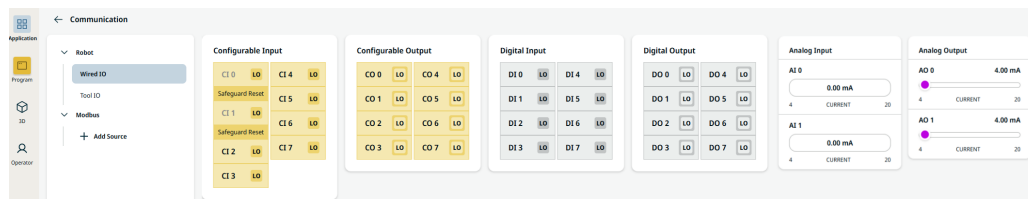

### Configureerbare I/O's

Configureerbare I/O's kunnen worden gereserveerd voor speciale veiligheidsinstellingen die zijn gedefinieerd in de I/O-instellingen. De gereserveerde hebben de naam van de veiligheidsfunctie in plaats van de standaardnaam of de door de gebruiker gedefinieerde naam.

Configureerbare ingangen die gereserveerd zijn voor veiligheidsinstellingen kunnen niet geschakeld worden en worden alleen als leds weergegeven.

Voor niet-gereserveerde I/O's zijn er de volgende opties:

- Programma starten
- Programma stoppen
- Programma pauzeren
- Freedrive

### Digitale I/O's

DI heeft de volgende opties:

- Programma starten
- Programma stoppen
- Programma pauzeren
- Freedrive

Alle digitale ingangen zijn vooraf ingesteld op Laag.  
Alle digitale uitgangen zijn onafhankelijk ingesteld op hoog of laag.

### Analoge I/O's

De analoge I/O 's kunnen worden ingesteld op stroom [4-20mA] of spanning [0-10V] uitgang. Deze instellingen zijn persistent bij het opnieuw opstarten van de robotcontroller en worden opgeslagen in de installatie.



### 8.5.3. Aandrijfstroomindicator

#### Beschrijving

De aandrijfstroomindicator is een lampje dat aan gaat wanneer de robotarm wordt ingeschakeld of wanneer er stroom is naar de robotkabel. Wanneer de robotarm wordt uitgeschakeld, gaat de aandrijfstroomindicator uit.

De aandrijfstroomindicator wordt aangesloten via de digitale uitgangen. Het is geen veiligheidsfunctie en maakt geen gebruik van veiligheids-I/O's.


#### Indicator

De aandrijfstroomindicator kan een lampje zijn dat kan werken op 24 VDC.

#### De indicator instellen


Het instellen van de indicator vereist een lamp en bedrading voor de uitgangen.

1. Sluit uw aandrijfstroomindicator aan op de digitale uitgangen zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
2. Controleer of de aandrijfstroomindicator juist is aangesloten.
  - U kunt de robotarm inschakelen en controleren of het lampje aan gaat.
  - U kunt de robotarm uitschakelen en controleren of het lampje uit gaat.

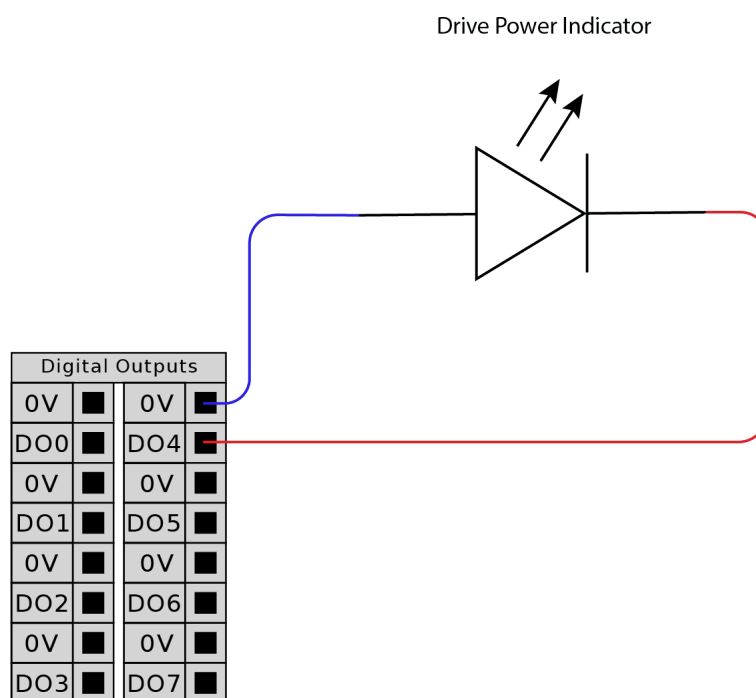

## De indicator configureren

1. Tik in het menu Navigatie op **Toepassing**.
2. Selecteer **Communicatie**.
3. Selecteer **Bedrade I/O** in het zijmenu.
4. Blader naar het gewenste uitgangstype en tik om een van de volgende te selecteren:
  - Configureerbare uitgang
  - Digitale uitgang
  - Analoge uitgang
5. Selecteer **Actiepreset**  
U kunt de geselecteerde uitgang een naam geven
6. Selecteer **Hoog als aandrijfstroom is ingeschakeld, anders Laag** in de vervolgkeuzelijst.

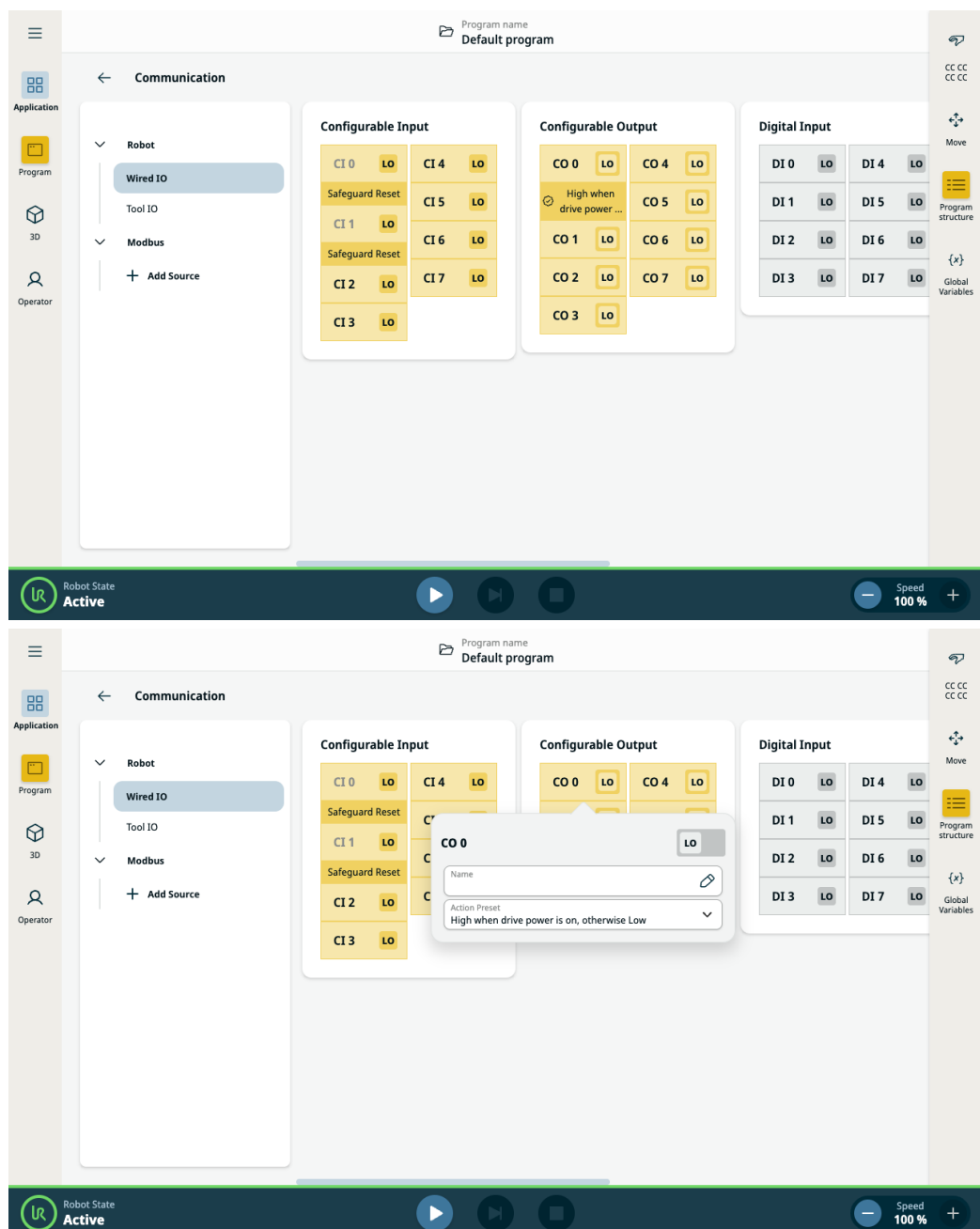



## 8.6. Veiligheids-I/O

**Veiligheids-I/O** Deze paragraaf beschrijft de specifieke veiligheidsingangen (gele klem met rode tekst) en de configureerbare I/O (gele klemmen met zwarte tekst) indien geconfigureerd als veiligheids-I/O.

Veiligheidsvoorzieningen en apparatuur moet worden geïnstalleerd volgens de veiligheidsvoorschriften en de risicobeoordeling in het hoofdstuk Veiligheid.

Alle veiligheids-I/O's komen voor in paren (redundant), zodat een enkele fout niet leidt tot verlies van de veiligheidsfunctie. Alle veiligheids-I/O's moeten echter als twee afzonderlijke takken worden gehouden.

De typen permanente veiligheidsingangen zijn:

- **Noodstop robot** alleen voor noodstopapparatuur
- **Beveiligingsstop** voor veiligheidsapparatuur

**Tabel** Het functieverhaal wordt hieronder weergegeven.

|                                                    | Noodstop                 | Beveiligde stop                | 3PE-stop                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Robot stopt met bewegen                            | Ja                       | Ja                             | Ja                             |
| Programma-uitvoering                               | Pauzes                   | Pauzes                         | Pauzes                         |
| Stroom voor aandrijvingen                          | Uit                      | Aan                            | Aan                            |
| Resetten                                           | Handmatig                | Automatisch of handmatig       | Automatisch of handmatig       |
| Frequentie van gebruik                             | Niet-frequent            | Elke cyclus naar niet-frequent | Elke cyclus naar niet-frequent |
| Vereist herinitialisering                          | Uitsluitend rem loslaten | Nee                            | Nee                            |
| Stopcategorie (IEC 60204-1)                        | 1                        | 2                              | 2                              |
| Prestatieniveau van bewakingsfunctie (ISO 13849-1) | PLd                      | PLd                            | PLd                            |

**Veiligheidswaarschuwing** Het is mogelijk om de configureerbare I/O te gebruiken om extra veiligheids-I/O-functionaliteit te configureren, bijvoorbeeld noodstopuitgangen. Gebruik de PolyScope-interface om een set configureerbare I/O's voor veiligheidsfuncties te definiëren.



### LET OP

Het niet regelmatig controleren en testen van de veiligheidsfuncties kan tot gevaarlijke situaties leiden.


- Veiligheidsfuncties moeten worden gecontroleerd voordat de robot in gebruik wordt genomen.
- Veiligheidsfuncties moeten regelmatig worden getest.

**OSSD-signalen**

Alle geconfigureerde en permanente veiligheidsingangen worden gefilterd om het gebruik van OSSD-veiligheidsapparatuur met pulslengtes korter dan 3 ms mogelijk te maken. De veiligheidsingang wordt iedere milliseconde getest en de status van de ingang wordt bepaald door het meest frequent waargenomen ingangssignaal gedurende de laatste 7 milliseconden.

**OSSD-veiligheidssignalen**

U kunt de bedieningskast configureren om OSSD-pulsen uit te voeren wanneer een veiligheidsuitgang inactief/hoog is. OSSD-pulsen detecteren het vermogen van de bedieningskast om veiligheidsuitgangen actief/laag te maken. Wanneer OSSD-pulsen zijn ingeschakeld voor een uitgang, wordt eenmaal per 32 ms een lage puls van 1 ms gegenereerd op de veiligheidsuitgang. Het veiligheidssysteem detecteert wanneer een uitgang is aangesloten op een voeding en schakelt de robot uit. De onderstaande afbeelding toont: de tijd tussen pulsen op een kanaal (32ms), de pulslengte (1ms) en de tijd van een puls op het ene kanaal naar een puls op het andere kanaal (18ms)

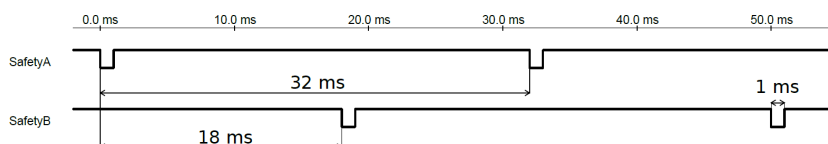

Om OSSD in te schakelen voor veiligheidsuitgang

1. Tik in de koptekst op **Installatie** en selecteer **Veiligheid**.
2. Selecteer onder **Veiligheid I/O**.
3. Schakel op het I/O-scherm onder Uitgangssignaal het gewenste selectievakje OSSD in. U moet het uitgangssignaal toewijzen om de selectievakjes voor OSSD in te schakelen.


**Standaard veiligheidsconfiguratie**

De robot wordt geleverd met een standaardconfiguratie die operatie mogelijk maakt zonder extra veiligheidsuitrusting.

| Safety         |         |
|----------------|---------|
| Emergency Stop | 24V EI0 |
|                | 24V EI1 |
|                | 24V SI0 |
|                | 24V SI1 |

### Aansluiten noodstopknoppen

De meeste toepassingen vereisen een of meer extra noodstopknoppen. De afbeelding hieronder laat zien hoe een of meer noodstopknoppen kunnen worden aangesloten.

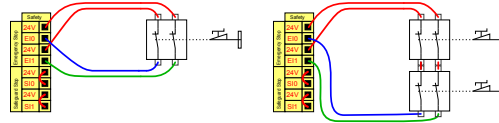


### De noodstop delen met andere machines

U kunt een gedeelde noodstopfunctie tussen de robot en andere machines instellen door de volgende I/O-functies te configureren via de GUI. De noodstopingang van de robot kan niet worden gebruikt voor delingsdoeleinden. Indien meer dan twee UR-robots of andere machines moeten worden aangesloten, moet een veiligheids-PLC worden gebruikt om de noodstopsignalen te regelen.

- Configureerbaar ingangspaar: externe noodstop.
- Configureerbaar uitgangspaar: systeemstop.

De afbeelding hieronder laat zien hoe twee UR-robots hun noodstopfuncties delen. In dit voorbeeld zijn gebruikte geconfigureerde I/O's CI10-CI11 en CO0-CO1.

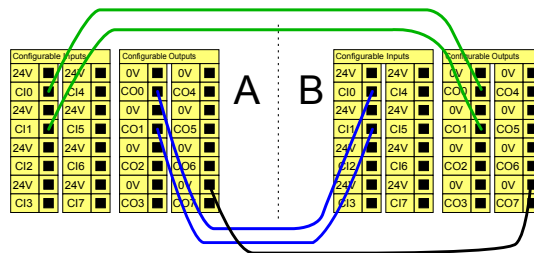


### Beveiligde stop met automatisch hervatten

Deze configuratie is alleen bedoeld voor toepassingen waarbij de operator niet de deur kan passeren en deze achter zich kan sluiten. De configureerbare I/O wordt gebruikt om een resetknop buiten de deur te configureren om de robotbeweging opnieuw te activeren. De robot hervat de beweging automatisch wanneer het signaal wordt hersteld.



#### WAARSCHUWING

Gebruik deze configuratie niet als het signaal kan worden hersteld vanaf de binnenzijde van de veiligheidszone.

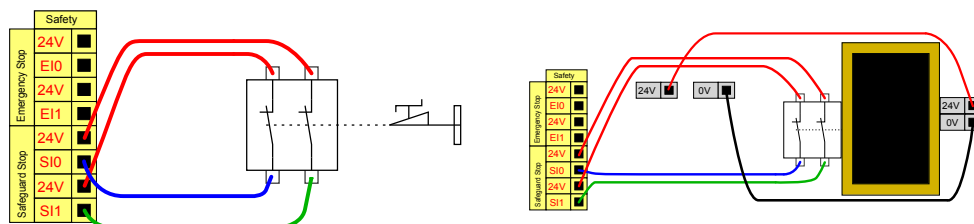


In dit voorbeeld wordt een deurschakelaar gebruikt als een basisbeveiliging waarbij de robot wordt gestopt wanneer de deur wordt geopend.

In dit voorbeeld wordt een veiligheidsmat gebruikt als een veiligheidsvoorziening waarbij automatische hervatting passend is. Dit voorbeeld geldt ook voor een veiligheidslaserscanner.

### Beveiligde stop met resetknop


Als de beveiligingsinterface wordt gebruikt voor interactie met een lichtgordijn, is een reset buiten de veiligheidszone vereist. De resetknop moet van het tweekanaalstype zijn. In dit voorbeeld is CI0-CI1 de voor reset geconfigureerde I/O.

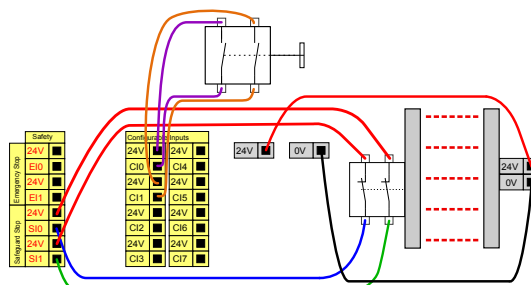


## 8.6.1. Veiligheids-I/O-signalen

## Beschrijving

De I/O's zijn verdeeld tussen ingangen en uitgangen en zijn gekoppeld zodat elke functie een categorie 3 PLd-mogelijkheid vormt.

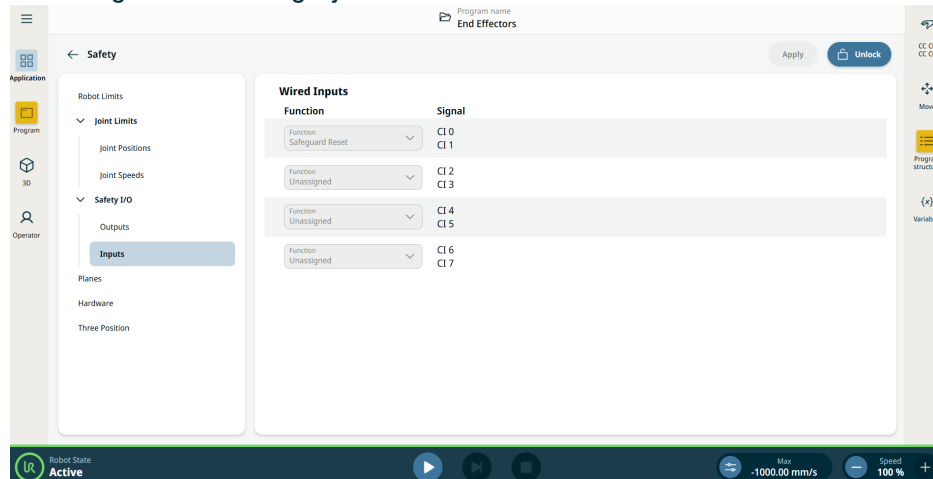

Figuur 1.4: PolyScope X-scherm met de ingangssignalen.

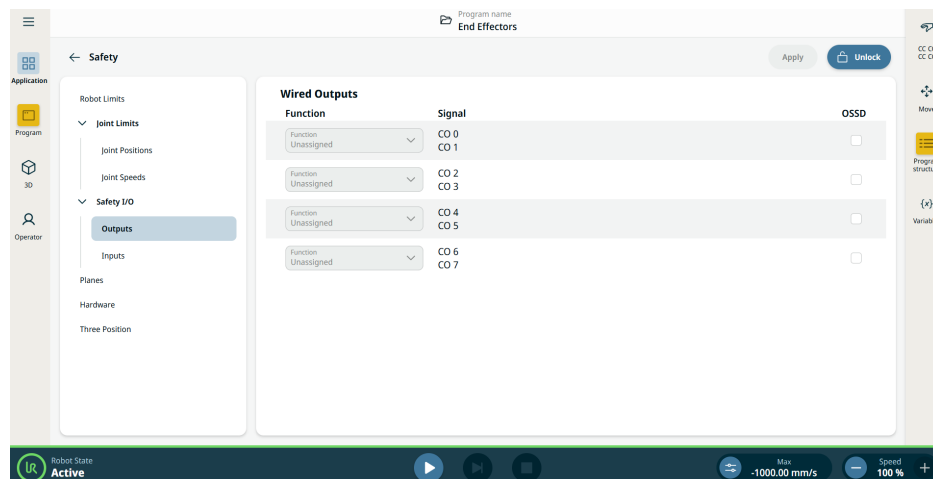

### MEDEDELING

Bij het starten van programma's via een I/O- of veldbusingang, kan de robot beginnen te bewegen vanuit de positie die hij heeft. Handmatige beweging naar het eerste waypoint via PolyScope is niet vereist.



**Regelkast-** De ingangen worden beschreven in de onderstaande tabellen:

**ingang  
en**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noodstopknop     | Voert een categorie 1 stop (IEC 60204-1) uit via de regelkastingang, waarbij andere machines worden geïnformeerd via de Systeemstop-uitgang, als die uitgang is gedefinieerd. Er wordt een stop geïnitieerd in alles wat met de uitgang is verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Noodstop robot   | Voert een categorie 1 stop (IEC 60204-1) uit via de regelkastingang, waarbij andere machines worden geïnformeerd via de Systeemnoodstop-uitgang, als die uitgang is gedefinieerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Externe noodstop | Voert een categorie 1 stop (IEC 60204-1) uit op alleen de robot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verminderd       | <p>Alle veiligheidslimieten kunnen worden toegepast terwijl de robot een <b>normale</b> configuratie gebruikt of een <b>verminderde</b> configuratie. Indien geconfigureerd, zorgt een laag signaal op de ingangen ervoor dat het veiligheidssysteem overgaat naar de verminderde configuratie. De robotarm vertraagt om te voldoen aan de verminderde parameters.</p> <p>Het veiligheidssysteem garandeert dat de robot zich binnen de verminderde limieten bevindt in minder dan 0,5 s nadat de ingang is getriggerd. Als de robotarm toch de verminderde limieten blijft overschrijden, wordt een categorie 0 stop getriggerd. Triggervlakken kunnen ook een overgang veroorzaken naar de verminderde configuratie. Het veiligheidssysteem gaat op dezelfde manier over naar de normale configuratie.</p> |

**Regelkast-** De ingangen worden beschreven in de onderstaande tabellen:

**ingang  
en**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operationele modus                      | Wanneer een externe modusselectie wordt gebruikt, schakelt deze tussen de <b>automatische modus</b> en de <b>handmatige modus</b> . De robot is in de automatische modus wanneer de ingang <i>laag</i> is en in de handmatige modus wanneer de ingang <i>hoog</i> is.                          |
| Beveiligingsreset                       | Keert terug uit de status Beveiligde stop wanneer een stijging op de ingang Beveiligingsreset optreedt. Wanneer een beveiligde stop optreedt, zorgt deze uitgang ervoor dat de status Beveiligde stop gehandhaafd blijft totdat een reset wordt getriggerd.                                    |
| Beveiliging                             | Een stop getriggerd door een beveiligingsingang. Voert een categorie 2 stop (IEC 60204-1) uit in alle modussen, indien getriggerd door een beveiliging.                                                                                                                                        |
| Automatische modus<br>Beveiligingsstop  | Voert een categorie 2 stop (IEC 60204-1) uit in ALLEEN de automatische modus. <i>Beveiligde stop automatische modus</i> kan alleen worden geselecteerd wanneer een inschakelapparaat met drie standen is geconfigureerd en geïnstalleerd.                                                      |
| Automatische modus<br>Beveiligingsreset | Keert terug uit de status Beveiligde stop automatische modus wanneer een stijging op de ingang Beveiligingsreset automatische modus optreedt.                                                                                                                                                  |
| Freedrive op robot                      | U kunt de Freedrive-ingang configureren om Freedrive in te schakelen en te gebruiken zonder op de Freedrive-knop op een standaard programmeereenheid te drukken of zonder een van de knoppen op de 3PE-programmeereenheid ingedrukt te hoeven houden in de middenpositie.                      |
| Inschakelapparaat met drie standen      | In de handmatige modus moet een extern inschakelapparaat met drie standen worden ingedrukt in de middenpositie om de robot te bewegen. Als u een ingebouwd inschakelapparaat met drie standen gebruikt, moet de knop ingedrukt worden gehouden in de middelste positie om de robot te bewegen. |



#### WAARSCHUWING

Wanneer de standaard Beveiliging resetten is uitgeschakeld, vindt er een automatische reset plaats wanneer de beveiliging niet langer een stop triggert. Dit kan gebeuren als een persoon door het veld van de beveiliging gaat. Als de beveiliging geen persoon detecteert en de persoon wordt blootgesteld aan gevaren, is een automatische reset verboden volgens de normen.

- Gebruik de externe reset om ervoor te zorgen dat alleen wordt gereset wanneer personen niet aan gevaren worden blootgesteld.



#### WAARSCHUWING

Wanneer Beveiligde stop automatische modus is ingeschakeld, wordt er geen beveiligde stop getriggerd in de handmatige modus.

**Regelkastuitgangen** Alle veiligheidsuitgangen worden laag in het geval van een overtreding of storing van het veiligheidssysteem. Dit betekent dat de uitgang Systeemstop een stop initieert, ook wanneer geen noodstop wordt getriggerd.

U kunt de volgende uitgangssignalen voor veiligheidsfuncties gebruiken. Alle signalen gaan terug naar laag als de status waardoor het hoge signaal geactiveerd is, beëindigd is:

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> Systeemstop                          | Het signaal is <i>laag</i> wanneer het veiligheidssysteem getriggerd is naar een gestopte toestand door de ingang Noodstop robot of de noodstopknop. Om vastlopen te voorkomen, wordt geen laag signaal gegeven als de noodstopstatus is getriggerd door de ingang Systeemstop. |
| Robot Bewegen                                     | Het signaal is <i>laag</i> wanneer de robot beweegt, anders hoog.                                                                                                                                                                                                               |
| Robot stopt niet                                  | Het signaal is <i>Hoog</i> wanneer de robot is gestopt of bezig is met stoppen vanwege een noodstop of beveiligde stop. Anders is hij logisch laag.                                                                                                                             |
| Verminderd                                        | Het signaal is <i>laag</i> wanneer verminderde parameters actief zijn of als de veiligheidsingang is geconfigureerd met een verminderde ingang en het signaal momenteel laag is. Anders is het signaal hoog.                                                                    |
| Niet verminderd                                   | Dit is het omgekeerde van Verminderd, wat hierboven beschreven is.                                                                                                                                                                                                              |
| Veilig thuis                                      | Het signaal is <i>hoog</i> als de robotarm is gestopt en zich in de geconfigureerde veilige uitgangspositie bevindt. Anders is het signaal <i>laag</i> . Dit wordt vaak gebruikt wanneer UR-robots worden geïntegreerd met mobiele robots.                                      |
| Gestopt door inschakelapparaat met 3 standen      | Het signaal is laag wanneer een stop door een inschakelapparaat met drie standen actief is, anders hoog.                                                                                                                                                                        |
| Niet gestopt door inschakelapparaat met 3 standen | Het signaal is laag wanneer geen stop door een inschakelapparaat met drie standen actief is, anders hoog.                                                                                                                                                                       |



#### MEDEDELING

Externe machines die de noodstopstatus via de uitgang Systeemstop van de robot ontvangen, moeten aan ISO 13850 voldoen. Dit is met name noodzakelijk in installaties waarbij de ingang Noodstop robot met een extern Noodstopapparaat is verbonden. In zulke gevallen wordt de uitgang Systeemstop hoog wanneer het externe noodstopapparaat wordt vrijgegeven. Daarvoor is geen ingrijpen van de operator van de robot nodig. Om aan de veiligheidsnormen te voldoen, moet de externe machine handmatig ingrijpen verzoeken om verder te kunnen.


<sup>1</sup>Systeemstop werd eerder "Systeemnoodstop" genoemd voor Universal Robots-robots. PolyScope kan "Systeemnoodstop" weergeven.



## 8.6.2. I/O-instellingen

### Beschrijving

Gebruik het scherm I/O-instellingen om I/O-signalen te definiëren en acties te configureren met het I/O-tabblad. De soorten I/O-signalen worden vermeld onder **Ingang** en **Uitgang**.

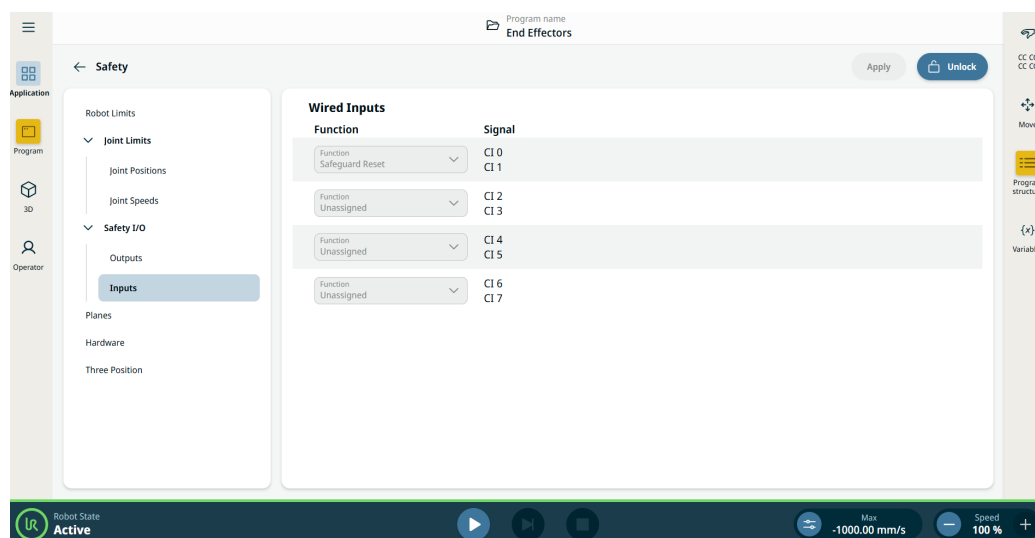

### MEDEDELING

Bij het starten van programma's via een I/O- of veldbusingang, kan de robot beginnen te bewegen vanuit de positie die hij heeft. Handmatige beweging naar het eerste waypoint via PolyScope is niet vereist.

### Ingangen

1. Ga naar het tabblad Toepassing.
2. Ga naar Veiligheid.
3. Tik op de **Ingangen** in het **Veiligheidsingang** gedeelte.
4. Ontgrendel de instellingen.
5. Wijs een functie toe aan de signaalgroep.

Zie de Veiligheids-I/O-signalen voor een beschrijving van de veiligheidsfunctie.

**Beschikbare  
ingangsacties**

| Commando  | Actie                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start     | Start of hervat het huidige programma aan een stijgende kant (alleen ingeschakeld in Besturing op afstand)                                                                             |
| Stop      | Stopt het huidige programma op een stijgende lijn                                                                                                                                      |
| Pauzeren  | Pauzeert het huidige programma op een stijgende lijn                                                                                                                                   |
| Freedrive | Wanneer de ingang hoog is, gaat de robot naar Freedrive (vergelijkbaar met de <b>Freedrive</b> -knop).<br>De ingang wordt genegeerd als andere omstandigheden geen Freedrive toestaan. |

**WAARSCHUWING**

Als de robot wordt gestopt tijdens het gebruik van de startinvoeractie, gaat de robot langzaam naar het eerste waypoint van het programma voordat hij dat programma uitvoert. Als de robot wordt gepauzeerd tijdens het gebruik van de Start-invoeractie, gaat de robot langzaam naar de positie van waar hij werd gepauzeerd voordat hij dat programma hervat.

**Uitgangen**

1. Ga naar het tabblad Toepassing.
2. Ga naar Veiligheid.
3. Tik op Uitgangen in het onderdeel Veiligheids-I/O.
4. Ontgrendel de instellingen.
5. Wijs een functie toe aan de signaalgroep.

U kunt OSSD inschakelen voor elk uitgangssignaal.

Zie de Veiligheids-I/O-signalen voor een beschrijving van de veiligheidsfunctie.

**Beschikbare  
uitgangsacties**

| Actie                                 | Uitgangsstatus                 | Programmastatus                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Laag wanneer niet actief              | Laag                           | Gestopt of gepauzeerd                                               |
| Hoog wanneer niet actief              | Hoog                           | Gestopt of gepauzeerd                                               |
| Hoog bij hardlopen, laag bij stoppen  | Laag<br>Hoog                   | Actief,<br>Gestopt of gepauzeerd                                    |
| Laag bij ongeplande stop              | Laag                           | Programma beëindigd ongepland                                       |
| Laag bij ongeplande stop, anders Hoog | Laag<br>Hoog                   | Programma beëindigd ongepland<br>Hardlopen, gestopt of gepauzeerd   |
| Continue puls                         | Wisselt af tussen hoog en laag | Actief (pauzeer of stop het programma om de pulsstatus te behouden) |

**Oorzaak voor  
beëindiging  
van  
programma**

Een ongeplande programmabeëindiging kan voorkomen om de onderstaande redenen:

- Robotstop
  - Storing
  - Overtreding
  - Runtime-uitzondering
-

### 8.6.3. I/O gebruiken voor modusselectie

#### Beschrijving

De robot kan worden geconfigureerd om van bedrijfsmodus te wisselen zonder de programmeereenheid te gebruiken. Dit betekent dat het gebruik van de programmeereenheid verboden is bij het overschakelen van de automatische modus naar de handmatige modus of van de handmatige modus naar de automatische modus.

Wisselen van modus zonder het gebruik van de programmeereenheid vereist een veiligheids-I/O-configuratie en een extern apparaat als modusselector.


#### Modusselector

De modusselector kan een sleutelschakelaar zijn met een redundant elektrisch schema of met signalen van een speciale veiligheids-plc.

#### De modusselector gebruiken

Het gebruik van de modusselector, zoals een sleutelschakelaar, voorkomt dat de programmeereenheid wordt gebruikt om tussen modussen te schakelen.

1. Sluit uw modusselector aan op de ingangen zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
2. Controleer dat de modusselector juist is aangesloten en geconfigureerd.

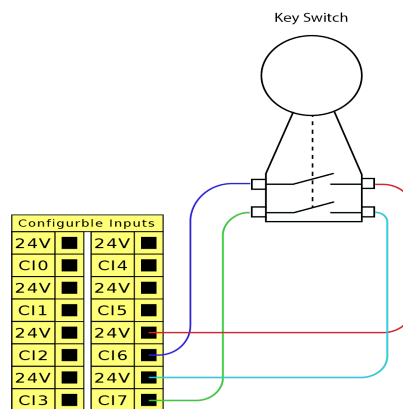



**De aangesloten veiligheidsingangen configureren**

Om de veiligheidsingangen voor aansluiting van externe apparatuur te configureren, moet het veiligheids-I/O-schermbord worden ontgrendeld.

1. Tik in de hoofdnavigatie op **Toepassing**.
2. Selecteer **Veiligheid** en tik op **Ontgrendelen**.

Voer uw wachtwoord in wanneer erom wordt gevraagd om het scherm Veiligheid te ontgrendelen.

Als u nog niet eerder een wachtwoord hebt ingesteld, gebruik dan het standaardwachtwoord: `ursafe`.

3. Selecteer **Ingangen** onder Veiligheids-I/O.
4. Selecteer een van de ingangssignalen door op een van de opties in de vervolgkeuzelijst Ingang te tikken.
5. Selecteer **Bedrijfsmodus** in de vervolgkeuzelijst.
6. Tik op **Toepassen** en laat de robot opnieuw opstarten.
7. Tik op **Veiligheidsconfiguratie bevestigen**.

U kunt nu alleen het externe apparaat gebruiken om te selecteren en/of te schakelen tussen bedrijfsmodussen.

Zodra de ingang is toegewezen aan het externe apparaat, is het niet meer mogelijk om van modus te wisselen modussen via de programmeereenheid. Als wordt geprobeerd de programmeereenheid te gebruiken om van modus te wisselen, wordt een melding weergegeven die aangeeft dat de programmeereenheid niet kan worden gebruikt om de bedrijfsmodus te wijzigen.

## 8.6.4. Inschakelapparaat met drie standen


### Beschrijving

De robot is voorzien van een inschakelapparaat in de vorm van de 3PE-programmeereenheid.

De regelkast ondersteunt de volgende configuraties van inschakelapparaten:

- 3PE programmeereenheid
- Extern inschakelapparaat met drie standen
- Extern inschakelapparaat met drie standen en 3PE-programmeereenheid

De onderstaande afbeelding toont hoe een inschakelapparaat met drie standen moet worden aangesloten.

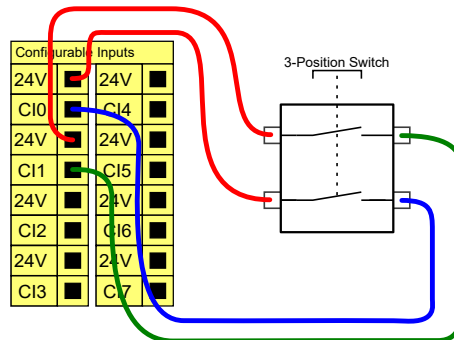

Opmerking: de twee ingangskanalen voor het inschakelapparaat met drie standen hebben een afwijkingstolerantie van 1 seconde.




### MEDEDELING

Het veiligheidssysteem van de UR-robot biedt geen ondersteuning voor meerdere externe inschakelapparaten met drie standen.

### Bedrijfsmodusschakelaar

Het gebruik van een inschakelapparaat met drie standen vereist het gebruik van een bedrijfsmodusschakelaar.

De afbeelding hieronder geeft een bedrijfsmodusschakelaar weer.

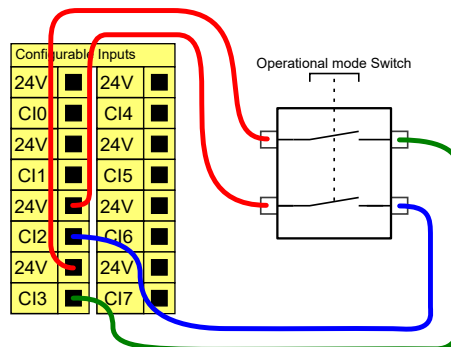

## 8.7. Digitale I/O voor algemene doelen

### Beschrijving

Het opstartscherm bevat instellingen voor het automatisch laden en starten van een standaardprogramma, en voor het automatisch initialiseren van de robotarm bij opstarten.


### Digitale I/O voor algemene doelen

Deze paragraaf beschrijft de algemene 24 V I/O (grijze klemmen) en de configureerbare I/O (gele klemmen met zwarte tekst) indien niet geconfigureerd als veiligheids-I/O.

De algemene I/O kan worden gebruikt om apparatuur zoals pneumatische relais rechtstreeks aan te drijven, of voor communicatie met andere PLC systemen. Alle digitale uitgangen kunnen automatisch worden uitgeschakeld wanneer de uitvoering van het programma wordt gestopt.

In deze modus is de uitgang altijd laag wanneer een programma niet draait. Voorbeelden zijn te vinden in de volgende paragrafen.

Deze voorbeelden gebruiken gewone digitale uitgangen, maar alle configureerbare uitgangen hadden ook kunnen worden gebruikt als ze niet zijn geconfigureerd om een veiligheidsfunctie uit te voeren.

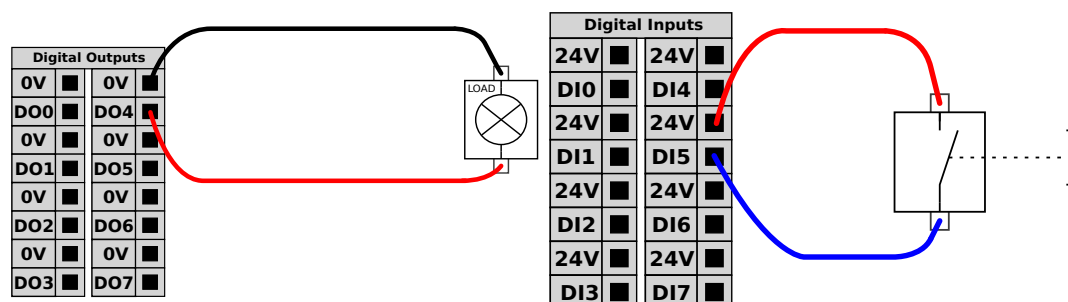


In dit voorbeeld wordt een belasting geregeld via een aangesloten digitale uitgang.

In dit voorbeeld wordt een eenvoudige knop aangesloten op een digitale ingang.

### Communicatie met andere machines of PLC's

De digitale I/O kan worden gebruikt om te communiceren met andere apparaten als voor een gemeenschappelijke GND (0V) wordt gezorgd en de machine PNP-technologie gebruikt, zie hieronder.

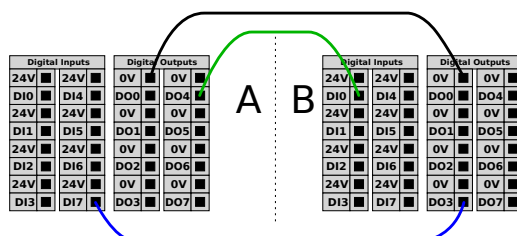

#### MEDEDELING

Gebruik afgeschermd kabels om digitale I/O's aan te sluiten.



## 8.7.1. Externe AAN/UIT-regeling

### Beschrijving

Gebruik de externe **AAN/UIT**-regeling om de regelkast in en uit te schakelen zonder de programmeereenheid te gebruiken. Deze wordt gewoonlijk gebruikt:


- Wanneer de programmeereenheid niet toegankelijk is.
- Wanneer een PLC-systeem volledige controle moet hebben.
- Wanneer meerdere robots tegelijk worden in- of uitgeschakeld.

### Besturing op afstand

De externe **AAN/UIT**-regeling voorziet in een extra 12 V voeding die actief wordt gehouden wanneer de regelkast is uitgeschakeld. De ingang **AAN** is alleen bedoeld voor kortstondige activering en werkt op dezelfde manier als de **AAN/UIT**-knop. De ingang **UIT** kan naar behoefte ingedrukt worden gehouden. Gebruik een softwarefunctie om programma's automatisch te laden en te starten.

De elektrische specificaties worden hieronder weergegeven.

| Eindklemmen | Parameter          | Min. | Type | Max. | Eenheid |
|-------------|--------------------|------|------|------|---------|
| [12V - GND] | Spanning           | 10   | 12   | 13   | V       |
| [12V - GND] | Huidig             | -    | -    | 100  | mA      |
| [AAN / UIT] | Inactieve spanning | 0    | -    | 0,5  | V       |
| [AAN / UIT] | Actieve spanning   | 5    | -    | 12   | V       |
| [AAN / UIT] | Ingangsstroom      | -    | 1    | -    | mA      |
| [AAN]       | Activeringstijd    | 200  | -    | 600  | ms      |

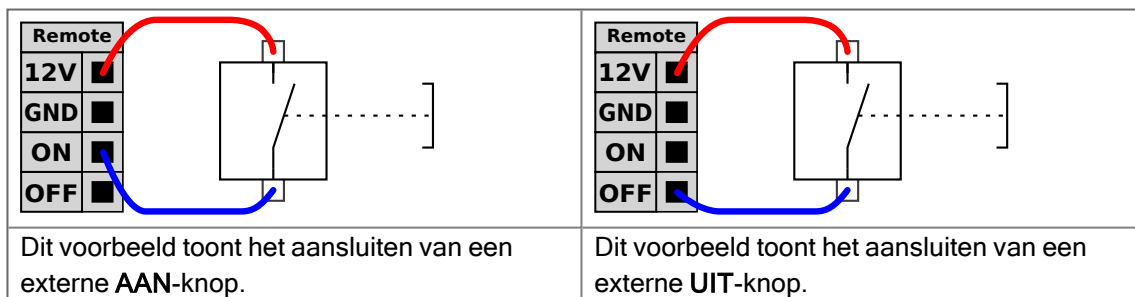

### LET OP

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de regelkast **UIT** te schakelen zonder op te slaan.

- Houd de **AAN**-ingang en de **AAN/UIT**-knop niet ingedrukt zonder op te slaan.
- Gebruik de **UIT**-ingang voor externe uitschakelregeling, om de regelkast de gelegenheid te geven geopende bestanden op te slaan en juist uit te schakelen.

## 8.8. Analoge I/O voor algemene doeleinden

### Beschrijving

De analoge I/O-interface is de groene klem. Deze kan worden gebruikt om spanning (0-10V) of stroom (4-20mA) in te stellen of te meten van en naar andere apparatuur. De volgende richtlijnen worden aanbevolen om de hoogste nauwkeurigheid te bereiken.


- Gebruik de AG-klem het dichtst bij de I/O. Het paar deelt een gemeenschappelijke modusfilter.
- Gebruik dezelfde GND (0V) voor apparatuur en regelkast. De analoge I/O is niet galvanisch geïsoleerd van de regelkast.
- Gebruik een afgeschermd kabel. Sluit de afscherming aan de GND klem op de klem genaamd **Power**.
- Gebruik apparatuur in stroommodus. Stroomsignalen zijn minder gevoelig voor storingen.

### Elektrische specificaties


In de GUI kunt u ingangsmodussen selecteren. De elektrische specificaties worden hieronder weergegeven.

| Eindklemmen                              | Parameter | Min. | Type | Max. | Eenheid |
|------------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|
| <i>Analoge ingang in stroommodus</i>     |           |      |      |      |         |
| [AIx - AG]                               | Huidig    | 4    | -    | 20   | mA      |
| [AIx - AG]                               | Weerstand | -    | 20   | -    | ohm     |
| [AIx - AG]                               | Resolutie | -    | 12   | -    | bit     |
| <i>Analoge ingang in spanningsmodus</i>  |           |      |      |      |         |
| [AIx - AG]                               | Spanning  | 0    | -    | 10   | V       |
| [AIx - AG]                               | Weerstand | -    | 10   | -    | kohm    |
| [AIx - AG]                               | Resolutie | -    | 12   | -    | bit     |
| <i>Analoge uitgang in stroommodus</i>    |           |      |      |      |         |
| [AOx - AG]                               | Huidig    | 4    | -    | 20   | mA      |
| [AOx - AG]                               | Spanning  | 0    | -    | 24   | V       |
| [AOx - AG]                               | Resolutie | -    | 12   | -    | bit     |
| <i>Analoge uitgang in spanningsmodus</i> |           |      |      |      |         |
| [AOx - AG]                               | Spanning  | 0    | -    | 10   | V       |
| [AOx - AG]                               | Huidig    | -20  | -    | 20   | mA      |
| [AOx - AG]                               | Weerstand | -    | 1    | -    | ohm     |
| [AOx - AG]                               | Resolutie | -    | 12   | -    | bit     |

### Analoge uitgang en analoge ingang

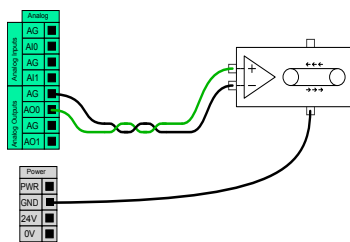

Dit voorbeeld toont het regelen van een transportband met een analoge snelheidsregelingsingang.

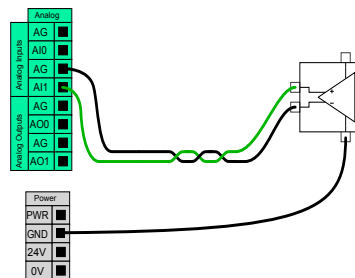

Dit voorbeeld toont het aansluiten van een analoge sensor.

## 8.9. Externe modus in Veiligheidsoverzicht

### Beschrijving

Indien geactiveerd, staat de externe modus externe apparaten toe om verbinding te maken met belangrijke diensten zoals de primaire interface.


De externe modus kan worden geschakeld via een speciale schakelaar in het dialoogvenster Veiligheidsoverzicht.


1. Ga naar het veiligheidsoverzicht in het hoofdscherm.
2. Klik op Modusselectie.
3. U kunt nu Automatisch en vervolgens Extern selecteren.

"Lokaal" is standaard ingeschakeld.

"Extern" is alleen actief als de toepassing in de automatische modus staat.


### Toegang in-/uitschakelen

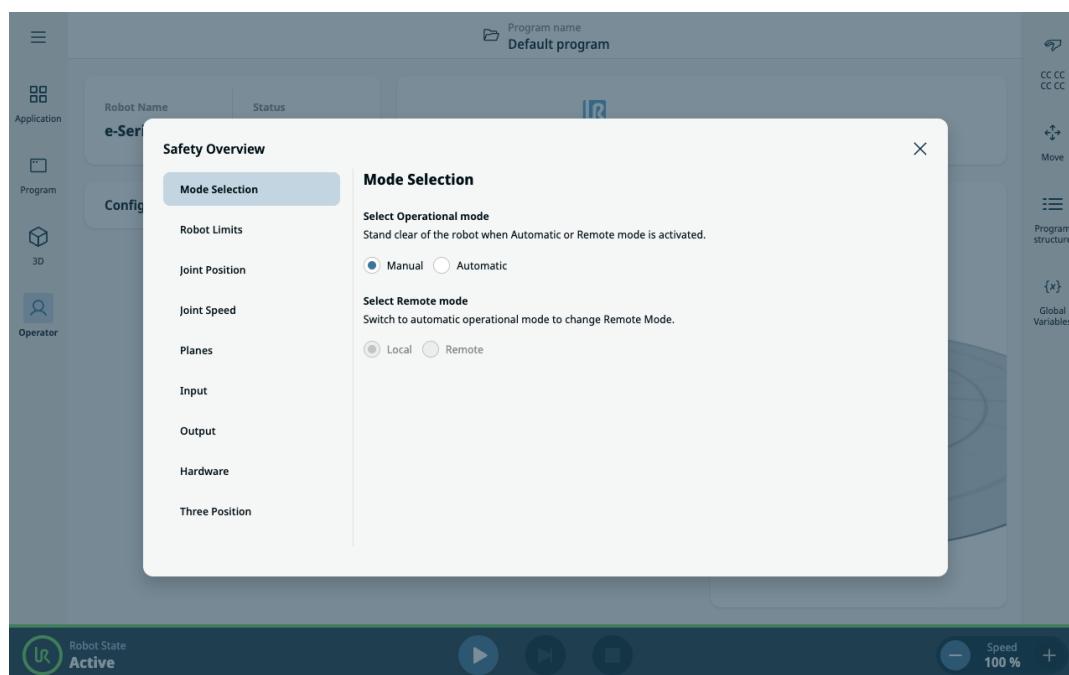

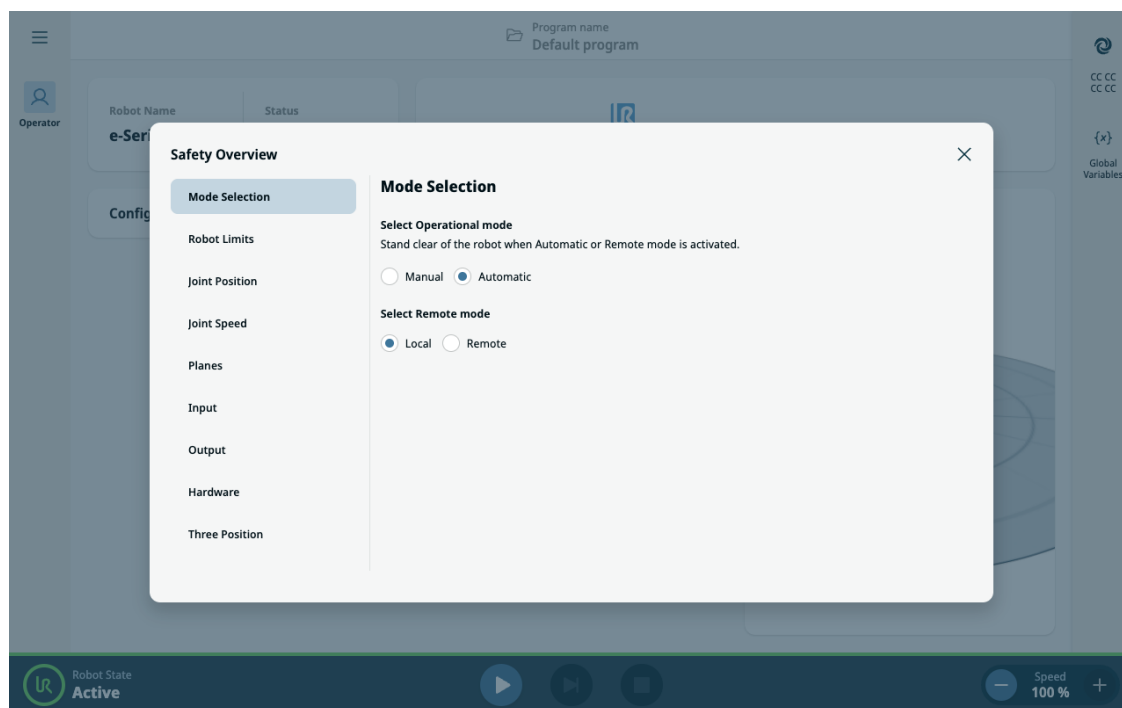

## Veilige vergrendeling

In de externe modus schakelt de PolyScope X-interface naar een veilige, alleen-lezen status. Alle bewerkings- en bedieningsacties zijn uitgeschakeld en alleen het bedieningsschermblijft toegankelijk in de alleen-lezen modus. Daarnaast wordt er een pictogram Externe modus weergegeven boven de veiligheidscontrolesom om duidelijk aan te geven dat het systeem onder extern toezicht staat.

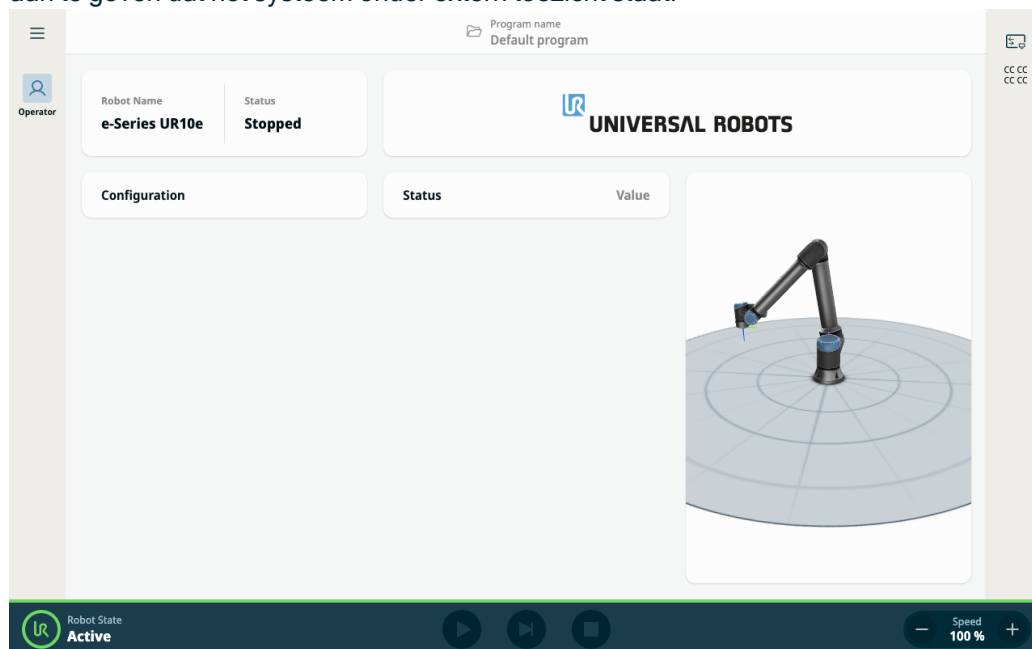




**I/O-gestuurde  
veiligheid**

Als de bedrijfsmodus van de robot wordt geregeld door een I/O-sigitaal, wordt bij overschakelen naar de handmatige modus via I/O automatisch de externe modus teruggeschakeld naar de lokale modus.

Deze functie zorgt voor een veilige en gestructureerde omgeving voor bewaking op afstand, met behoud van de lokale besturingsintegriteit wanneer nodig.

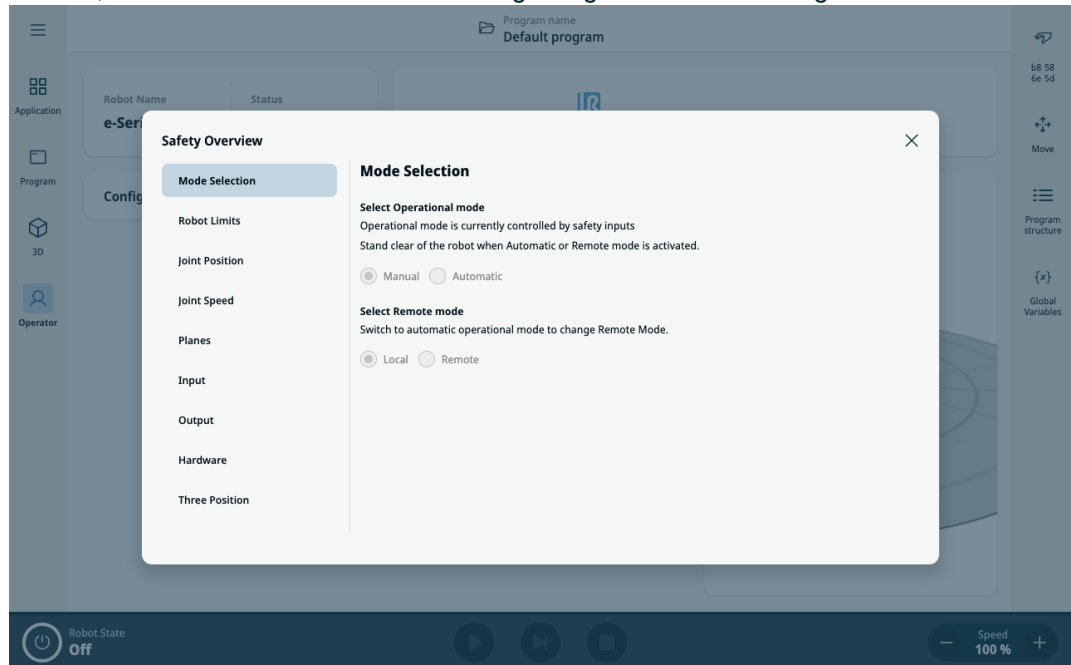

## 9. Eindeffectorintegratie

### Beschrijving

De eindeffector kan in deze handleiding ook worden aangeduid als het gereedschap en het werkstuk.



#### MEDEDELING

UR biedt documentatie voor het integreren van de eindeffector met de robotarm.

- Zie de documentatie die specifiek is voor de eindeffector/het gereedschap/het werkstuk voor montage en aansluiting.

## 9.1. Maximale belasting

### Beschrijving

De nominale belasting van de robotarm is afhankelijk van de offset van het zwaartepunt (CoG) van de belasting, zoals hieronder weergegeven. De zwaartepuntoffset wordt gedefinieerd als de afstand tussen het midden van de gereedschapsflens en het zwaartepunt van de bevestigde lading.

De robotarm is geschikt voor een grote zwaartepuntoffset, als de belasting onder de gereedschapsflens wordt geplaatst. Houd bijvoorbeeld bij het berekenen van de belastingsmassa in een pick-and-place-toepassing rekening met zowel de gripper als het werkstuk.


Het vermogen van de robot om te versnellen kan worden verminderd als het belastingszwaartepunt het bereik en het laadvermogen van de robot overschrijdt. U kunt het bereik en het laadvermogen van uw robot verifiëren in de Technische specificaties.

### UR10e10 kg / 12,5 kg

U kunt het laadvermogen van uw robot verifiëren door het label op de robotarm te controleren. Belastingen van meer dan 10 kg worden horizontaal van het ellebooggewricht gehouden.

Verhoging van de maximale belasting kan ertoe leiden dat de robot met lagere snelheden en lagere acceleratie beweegt.

Beweging met een hoge belasting is met verticaal neerwaarts georiënteerd gereedschap, zoals vaak het geval is bij palletiseertoepassingen.

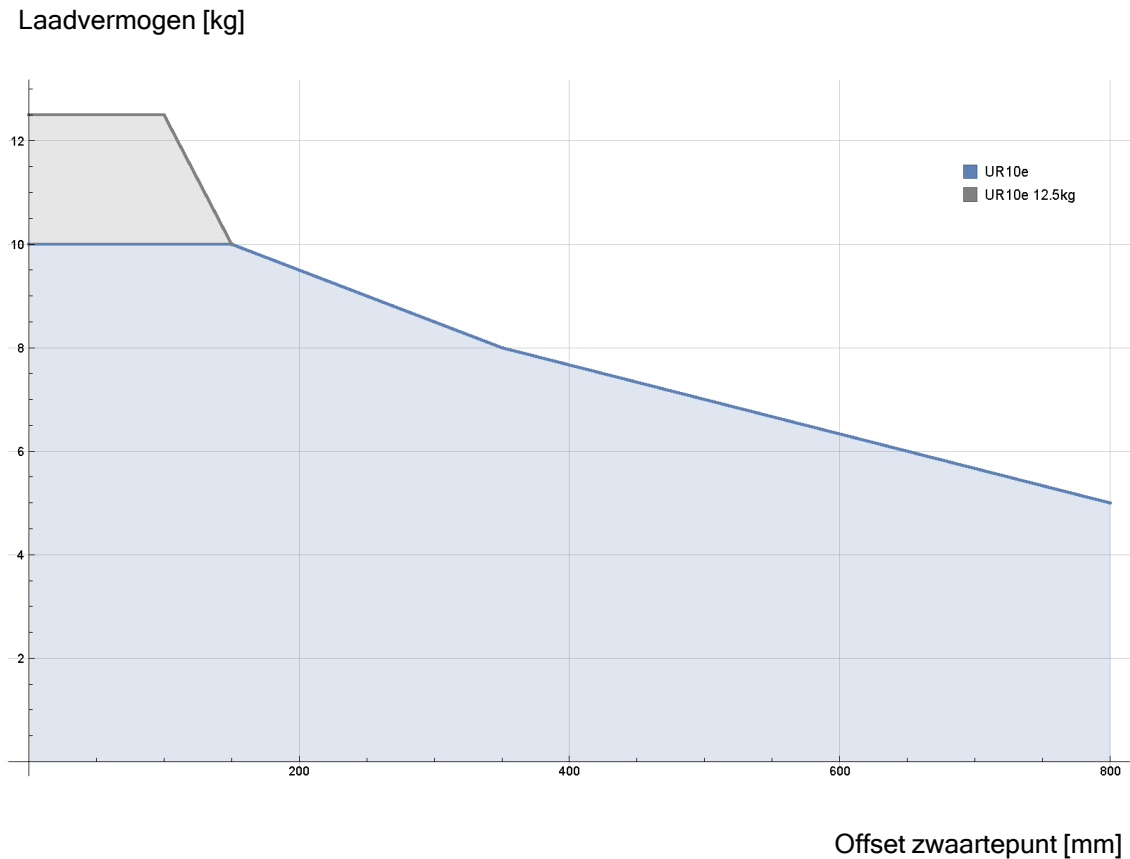

*Verhouding tussen de nominale belasting en de offset van het zwaartepunt.*

### Belastingsinertie

U kunt hoge belastingsinerties configureren als de belasting juist is ingesteld. De controllersoftware past de acceleratie automatisch aan als de volgende parameters juist zijn geconfigureerd:


- Belastingsmassa
- Zwaartepunt
- Inertie

U kunt de URSim gebruiken om de acceleraties en cyclustijden van de robotbewegingen met een bepaalde belasting te evalueren.

## 9.2. Het gereedschap vastzetten

### Beschrijving

Het gereedschap of werkstuk wordt bevestigd aan de gereedschapsuitgangsfleus (ISO) op de punt van de robot.

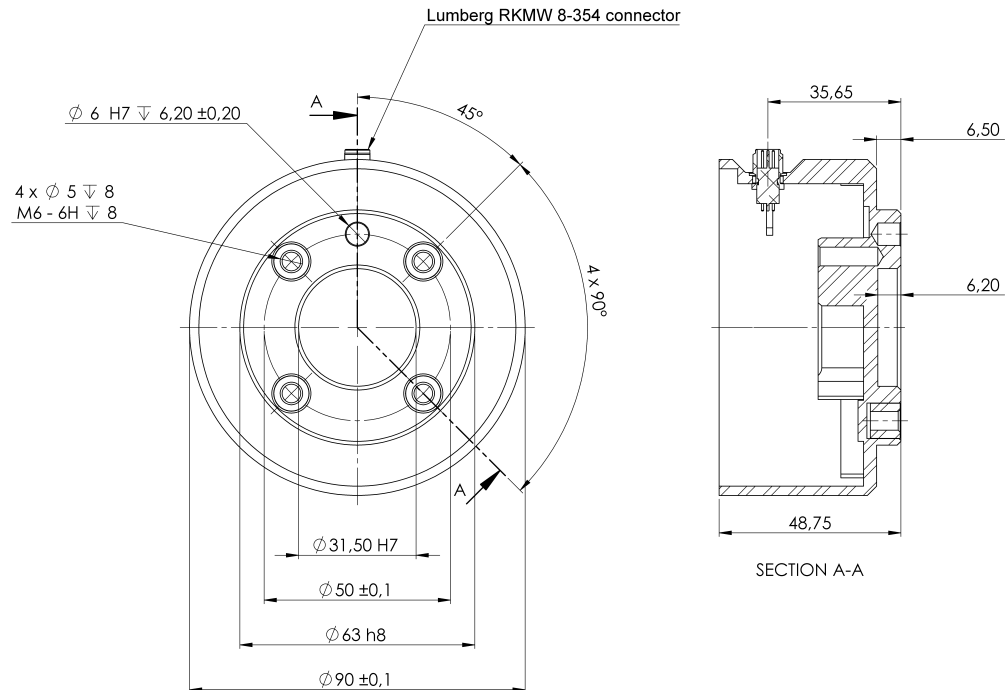

Afmetingen en gatenpatronen van de gereedschapsflens. Alle afmetingen zijn in millimeters.

### Gereedschapsflens

De gereedschapsuitgangsfleus (ISO 9409-1) is waar het gereedschap op de punt van de robot gemonteerd wordt. Het wordt aanbevolen om een radiaal sleufgat te gebruiken voor de positioneringspen om overbelasting te voorkomen, terwijl een precieze positie wordt behouden.



#### LET OP

Zeer lange M6-bouten kunnen tegen de onderzijde van de gereedschapsflens drukken en de robot kortsluiten.

- Gebruik geen bouten die meer dan 8 mm uitsteken om het gereedschap te monteren.



#### WAARSCHUWING

Het niet goed aandraaien van bouten kan letsel veroorzaken als gevolg van verlies van de adapterflens en/of de eindeffector.


- Zorg dat het gereedschap correct en stevig met bouten bevestigd is.
- Zorg dat het gereedschap zo is geconstrueerd dat het geen gevaarlijke situatie kan veroorzaken doordat er onverwacht een onderdeel valt.



## 9.3. Tool I/O

### Gereedschapsconnector

De hieronder afgebeelde gereedschapsaansluiting levert vermogens- en regelsignalen voor de grippers en sensoren die worden gebruikt op een specifiek robotgereedschap. De gereedschapsconnector heeft acht gaten en bevindt zich naast de gereedschapsflens op pols 3. De acht draden in de aansluiting hebben verschillende functies, zoals vermeld in de tabel:
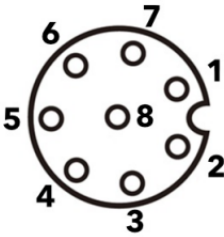
|                                                                                    | Penr. | Signaal      | Beschrijving                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|
|  | 1     | AI0 / RS485- | Analoge ingang 0 of RS485-          |
|                                                                                    | 2     | AI1 / RS485+ | Analoge ingang 1 of RS485+          |
|                                                                                    | 3     | TO0/STROOM   | Digitale uitgang 0 of 0 V/12 V/24 V |
|                                                                                    | 4     | TO1/AARDE    | Digitale uitgang 1 of aarde         |
|                                                                                    | 5     | POWER        | 0 V/12 V/24 V                       |
|                                                                                    | 6     | TI0          | Digitale ingang 0                   |
|                                                                                    | 7     | TI1          | Digitale ingang 1                   |
|                                                                                    | 8     | GND          | Aarde                               |




#### MEDEDELING

De gereedschapsconnector moet handmatig worden aangedraaid tot een maximum van 0,4 Nm.

**Gereedschapskabeladapter**

De gereedschapskabeladapter is de elektronische accessoire die compatibiliteit tussen de gereedschap-I/O en de e-serie-gereedschappen mogelijk maakt.

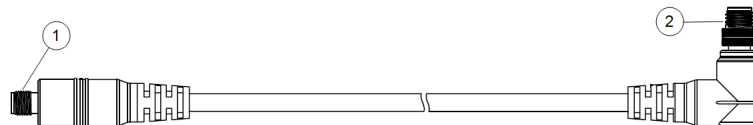


- 1 Wordt aangesloten op het gereedschap/de eindeffector.
- 2 Wordt aangesloten op de robot.

**WAARSCHUWING**

Het aansluiten van de gereedschapskabeladapter op een robot die is ingeschakeld, kan tot letsel leiden.

- Sluit de adapter aan op het gereedschap/de eindeffector voordat u de adapter op de robot aansluit.
- Schakel de robot niet in als de gereedschapskabeladapter niet is aangesloten op het gereedschap/de eindeffector.

De acht draden in de gereedschapskabeladapter hebben verschillende functies, zoals vermeld in de onderstaande tabel:
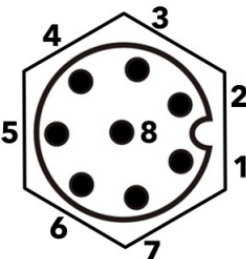
|                                                                                     | Pennr. | Signaal      | Beschrijving                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|
|  | 1      | AI0 / RS485+ | Analoge ingang 0 of RS485+          |
|                                                                                     | 2      | AI1 / RS485- | Analoge ingang 1 of RS485-          |
|                                                                                     | 3      | TI1          | Digitale ingang 1                   |
|                                                                                     | 4      | TI0          | Digitale ingang 0                   |
|                                                                                     | 5      | POWER        | 0 V/12 V/24 V                       |
|                                                                                     | 6      | TO1/AARDE    | Digitale uitgang 1 of aarde         |
|                                                                                     | 7      | TO0/STROOM   | Digitale uitgang 0 of 0 V/12 V/24 V |
|                                                                                     | 8      | GND          | Aarde                               |

**AARDE**

De gereedschapsflens wordt aangesloten op GND (aarde).





### 9.3.1. Installatiespecificaties gereedschaps-I/O

#### Beschrijving

De elektrische specificaties worden hieronder weergegeven. Ga naar Gereedschaps-I/O op het tabblad Installatie voor het instellen van de interne voeding op 0, 12 of 24 V.

| Parameter                     | Min. | Type | Max.    | Eenheid |
|-------------------------------|------|------|---------|---------|
| Voeding in modus 24V          | 23,5 | 24   | 24,8    | V       |
| Toevoerspanning in 12 V-modus | 11,5 | 12   | 12,5    | V       |
| Voedingsstroom (enkele pin)*  | -    | 1000 | 2000**  | mA      |
| Voedingsstroom (dubbele pin)* | -    | 2000 | 2000**  | mA      |
| Capacitieve belasting voeding | -    | -    | 8000*** | uF      |

\* Het wordt ten zeerste aanbevolen om een beschermende diode te gebruiken voor inductieve belastingen.


Max. cyclus: 10%. De gemiddelde stroomsterkte gedurende 10 seconden mag de typische stroomsterkte niet overschrijden.

\*\*\* Wanneer de stroomtoevoer naar het gereedschap wordt ingeschakeld, begint een zachte starttijd van 400 ms, waardoor een capacitieve belasting van 8000  $\mu$ F kan worden aangesloten op de stroomtoevoer van het gereedschap bij het opstarten. Hot-plugging van de capacitieve belasting is niet toegestaan.

### 9.3.2. Stroomtoevoer gereedschap

#### Beschrijving


Ga naar Gereedschaps-I/O op het tabblad Installatie

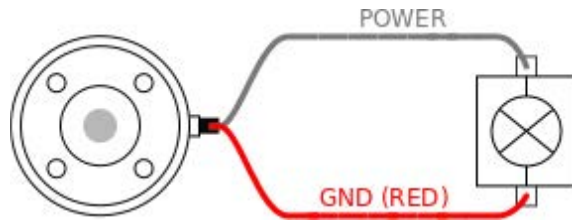

#### Tweepens stroomtoevoer

In de tweepens stroomtoevoermodus kan de uitgangsstroom worden verhoogd zoals is aangegeven in Gereedschaps-I/O.

1. Tik in de kop op **Installatie**.
2. Tik in de lijst links op **Algemeen**.
3. Tik op **Gereedschaps-I/O** en selecteer **Tweepens stroom**.
4. Sluit de stroomdraad (grijs) aan op TO0 (blauw) en de aarde (rood) op TO1 (roze).

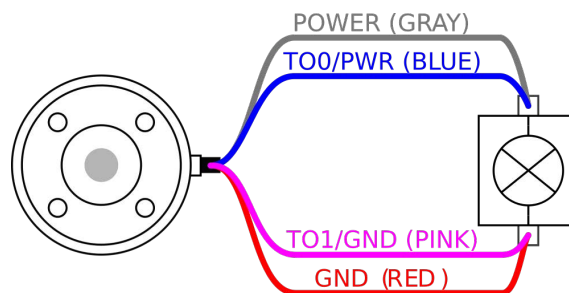

#### MEDEDELING

Wanneer de robot een noodstop uitvoert, wordt de spanning op 0 V gezet voor beide voedingspennen (stroom is uit).

### 9.3.3. Digitale tool-ingangen

#### Beschrijving


Het opstartscherm bevat instellingen voor het automatisch laden en starten van een standaardprogramma, en voor het automatisch initialiseren van de robotarm bij opstarten.

**Tabel** De digitale ingangen zijn geïmplementeerd als PNP met zwakke pull-downweerstand. Dat betekent dat een zwevende ingang altijd als laag wordt gezien. De elektrische specificaties worden hieronder weergegeven.

| Parameter              | Min. | Type | Max. | Eenheid  |
|------------------------|------|------|------|----------|
| Ingangsspanning        | -0,5 | -    | 26   | V        |
| Logische lage spanning | -    | -    | 2,0  | V        |
| Logische hoge spanning | 5,5  | -    | -    | V        |
| Ingangsweerstand       | -    | 47 k | -    | $\Omega$ |

**De digitale ingangen van het gereedschap gebruiken**

Dit voorbeeld laat het aansluiten van een eenvoudige knop zien.

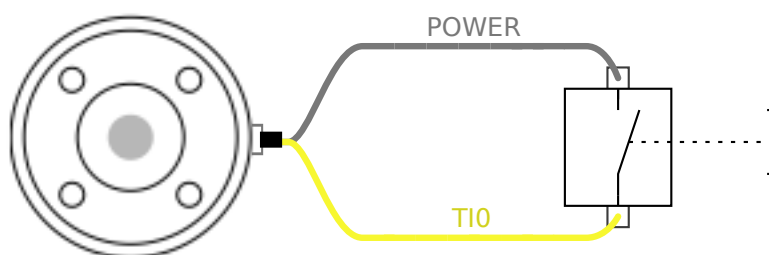

### 9.3.4. Digitale gereedschapsuitgangen

**Beschrijving** Digitale uitgangen ondersteunen drie verschillende modussen:

| Modus           | Actief | Inactief |
|-----------------|--------|----------|
| Zinken (NPN)    | Laag   | Openen   |
| Bron (PNP)      | Hoog   | Openen   |
| Duwen / trekken | Hoog   | Laag     |

Ga naar Gereedschap-I/O op het Installatie-tabblad voor het configureren van de uitgangsmodus van elke pin. De elektrische specificaties worden hieronder weergegeven:

| Parameter               | Min. | Type | Max.  | Eenheid |
|-------------------------|------|------|-------|---------|
| Spanning indien open    | -0,5 | -    | 26    | V       |
| Spanning bij zinken 1 A | -    | 0,08 | 0,09  | V       |
| Stroom bij bron/zinken  | 0    | 600  | 1000  | mA      |
| Stroom door GND         | 0    | 1000 | 3000* | mA      |



#### MEDEDELING

Wanneer de robot een noodstop uitvoert, worden de digitale uitgangen (DO0 en DO1) gedeactiveerd (hoge Z).




#### LET OP


De digitale uitgangen van het gereedschap hebben geen stroomlimiet. Het overschrijden van de gespecificeerde gegevens kan permanente schade veroorzaken.

#### Het gereedschap Digitale uitgangen gebruiken

Dit voorbeeld laat het inschakelen van een belasting zien bij gebruik van de interne voeding van 12V of 24V. De uitgangsspanning wordt bepaald op het I/O-tabblad. Er staat spanning tussen de POWER-aansluiting en de afscherming/aarde, ook wanneer de belasting is uitgeschakeld.

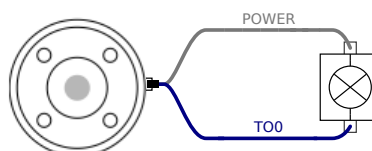

Het wordt aanbevolen om een beveiligingsdiode te gebruiken voor inductieve belastingen, zoals hieronder wordt afgebeeld.

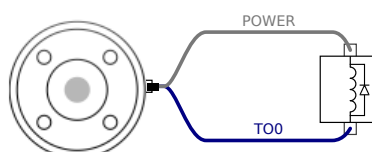

### 9.3.5. Analoge gereedschapsingangen

#### Beschrijving

De analoge gereedschapsingangen zijn niet-differentieel en kunnen worden ingesteld op spanning (0-10V) en stroom (4-20mA) op het I/O-tabblad. De elektrische specificaties worden hieronder weergegeven.

| Parameter                              | Min. | Type | Max. | Eenheid    |
|----------------------------------------|------|------|------|------------|
| Ingangsspanning in spanningsmodus      | -0,5 | -    | 26   | V          |
| Ingangsweerstand bij bereik 0V - 10V   | -    | 10,7 | -    | k $\Omega$ |
| Resolutie                              | -    | 12   | -    | bit        |
| Ingangsspanning in stroommodus         | -0,5 | -    | 5,0  | V          |
| Ingangsstroom in stroommodus           | -2,5 | -    | 25   | mA         |
| Ingangsweerstand bij bereik 4mA - 20mA | -    | 182  | 188  | $\Omega$   |
| Resolutie                              | -    | 12   | -    | bit        |

Twee voorbeelden hoe analoge ingangen te gebruiken worden in de volgende paragrafen getoond.

#### Voorzorgsmaatregel




#### LET OP

Analoge ingangen zijn niet beschermd tegen overspanning in de stroommodus. Overschrijden van de limiet in de elektrische specificatie kan permanente schade aan de ingang veroorzaken.

#### Gebruik van analoge gereedschapsingangen, niet-differentieel


Dit voorbeeld toont een analoge sensorverbinding met een niet-differentiële uitgang. De sensoruitgang kan stroom of spanning zijn, zolang de ingangsmodus van die analoge ingang op hetzelfde is ingesteld op het tabblad I/O.

Opmerking: u kunt controleren of een sensor met spanningsuitgang de interne weerstand van het gereedschap kan aansturen, of de meting kan ongeldig zijn.

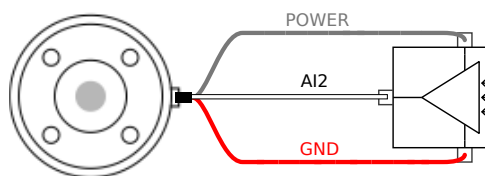

### Gebruik van analoge gereedschapsingangen, differentieel

Dit voorbeeld toont een analoge sensorverbinding met een differentiële uitgang. Aansluiten van het negatieve uitgangsdeel op GND (0V) werkt op dezelfde manier als een niet-differentiële sensor.

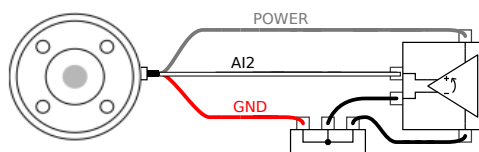


## 9.4. Belasting instellen

### 9.4.1. De actieve belasting veilig instellen

**Installatie  
verifiëren**

Controleer voor gebruik van PolyScope X dat de robotarm en regelkast goed zijn geïnstalleerd.

1. Druk op de programmeereenheid op de noodstopknop.
2. Tik op **OK** op het scherm wanneer het dialoogvenster 'Noodstop robot' verschijnt.
3. Druk op de aan/uit-knop op de programmeereenheid en laat het systeem starten en PolyScope X laden.
4. Tik op de **aan/uit**-knop linksonder op het scherm.
5. Houd de noodstopknop ingedrukt om te ontgrendelen.
6. Controleer in de voet van het scherm of de **Robotstatus Uitgeschakeld** is.
7. Stap buiten het bereik (werkruimte) van de robotarm.
8. Tik op de **aan/uit**-knop op het scherm.
9. Tik in het vak Initialiseren op **Aan/uit**. De status van de robot verandert in **Vergrendeld**.
10. Controleer de belastingsmassa in Actieve belasting.  
U kunt ook controleren of de montagepositie juist is in de 3D-weergave.
11. Tik op het veld **Actieve belasting** en er verschijnt een veld **Bewerken** in het hoofdscherm.
12. Voer de actieve belasting in en druk op **Bevestigen**.

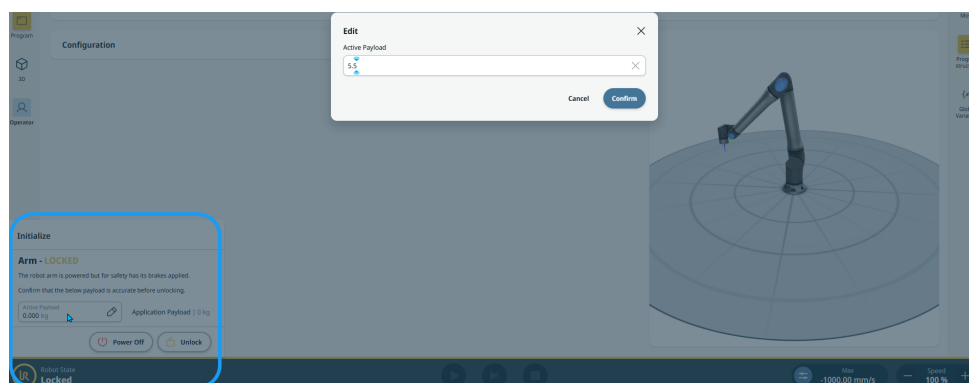

13. Tik op **Ontgrendelen** zodat de robot zijn remsysteem loslaat.

# 10. Veiligheidsconfiguratie

**Beschrijving** Dit gedeelte beschrijft de veiligheidsconfiguratie die mogelijk is in het tabblad Toepassing.

## 10.1. Veiligheidsgerelateerde functies en interfaces

**Beschrijving** Robots van Universal Robots zijn uitgerust met een reeks ingebouwde veiligheidsfuncties en veiligheids-I/O's en digitale en analoge regelsignalen naar of van de elektrische interface om andere machines en aanvullende veiligheidsapparatuur aan te sluiten. Elke veiligheidsfunctie en I/O is uitgevoerd volgens EN ISO13849-1 met prestatieniveau d (PLd) en een architectuur van categorie 3.



### WAARSCHUWING

Het gebruik van andere dan als noodzakelijk voor risicoreductie vastgestelde veiligheidsconfiguratieparameters kan tot gevaren leiden die niet op redelijke wijze worden geëlimineerd of risico's die niet voldoende worden beperkt.

- Zorg dat gereedschappen en grippers op de juiste wijze zijn aangesloten, om gevaren door een stroomonderbreking te vermijden.



### WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT

Programmeer- en/of bedradingsfouten kunnen ertoe leiden dat de spanning verandert van 12 V naar 24 V, wat leidt tot brandschade aan apparatuur.

- Controleer het gebruik van 12 V en ga voorzichtig te werk.



### MEDEDELING

- Het gebruik en de configuratie van veiligheidsfuncties en interfaces moeten de risicobeoordelingsprocedures van elke robottoepassing volgen.
- De stoptijd moet worden meegenomen als onderdeel van de risicobeoordeling van de toepassing.
- Als de robot een fout of overtreding in het veiligheidssysteem detecteert (bijvoorbeeld een van de draden van het noodstopcircuit wordt afgesneden, of een veiligheidslimiet wordt overschreden), dan wordt een stop van categorie 0 geïnitieerd.



### MEDEDELING

De eindeffector is niet beveiligd door het UR-veiligheidssysteem. Het functioneren van de eindeffector en/of verbindingskabel wordt niet bewaakt.



## 10.1.1. Configureerbare veiligheidsfuncties

**Beschrijving** Robotveiligheidsfuncties van Universal Robots, zoals vermeld in de tabel hieronder, bevinden zich in de robot, maar zijn bedoeld voor besturing van het robotsysteem, d.w.z. de robot met zijn aangesloten gereedschap/eindeffector. De robotveiligheidsfuncties worden gebruikt om de in de risicobeoordeling vastgestelde risico's van het robotsysteem te verminderen. Posities en snelheden zijn relatief ten opzichte van de basis van de robot.

### Veiligheidsfuncties

| Beschrijving             | Beschrijving                                                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Positielimiet gewricht   | Stelt boven- en onderlimieten in voor de toegestane gewrichtsposities.                                                                                                    |
| Snelheidslimiet gewricht | Definieert ruimtelijke vlakken die de robotpositie begrenzen.                                                                                                             |
| Veiligheidsvlakken       | Definieert ruimtelijke vlakken die de robotpositie begrenzen. Definieert de toegestane oriëntatielimieten voor het gereedschap.                                           |
| Gereedschapsoriëntatie   | Beperkt de maximale robotsnelheid.                                                                                                                                        |
| Snelheidslimiet          | Beperkt de maximale robotsnelheid. Beperkt de maximale kracht die door het gereedschap/eindeffector en elleboog van de robot wordt uitgeoefend in klemsituaties.          |
| Limiet forceren          | Beperkt de maximale kracht die door het gereedschap/eindeffector en elleboog van de robot wordt uitgeoefend in klemsituaties. Beperkt het maximale momentum van de robot. |
| Momentumlimiet           | Beperkt het mechanische werk uitgevoerd door de robot.                                                                                                                    |
| Vermogenslimiet          | Beperkt de maximale tijd die de robot gebruikt om te stoppen nadat een beschermende stop is geïnitieerd.                                                                  |
| Stoptijdlimiet           | Beperkt de maximale afstand die door de robot wordt afgelegd nadat een beschermende stop is geïnitieerd.                                                                  |
| Stopafstandlimiet        | Bij het uitvoeren van de risicobeoordeling van de toepassing is het noodzakelijk om rekening te houden met de beweging van de robot nadat een stop is geactiveerd.        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risicobeoordeling</b> | <p>Bij het uitvoeren van de risicobeoordeling van de toepassing is het noodzakelijk om rekening te houden met de beweging van de robot nadat een stop is geactiveerd. Om het proces te versoepelen, kunnen de veiligheidsfuncties <i>Stoptijdlimiet</i> en <i>Stopafstandlimiet</i> worden gebruikt.</p> <p>Deze veiligheidsfuncties verminderen de snelheid van de robot dynamisch op een manier dat deze altijd binnen de limieten kan stoppen. In de gewrichtspositielimieten, de veiligheidsvlakken en de gereedschap-/eindeffectororiëntatielimieten wordt rekening gehouden met de verwachte stopafstand, d.w.z. de robotbeweging zal afnemen voordat de limiet wordt bereikt.</p> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.2. Instellingen

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b>             | <p>De instellingen in PolyScope X zijn toegankelijk via het hamburgermenu in de hoofdnavigatie.</p> <p>U hebt toegang tot de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Algemeen</li><li>• Wachtwoord</li><li>• Verbinding</li><li>• Beveiliging</li></ul> |
| <b>Algemene instellingen</b>    | <p>In de algemene instellingen kunt u de voorkeurstaal, meeteenheden enzovoort wijzigen. Het bijwerken van de software wordt ook via de algemene instellingen gedaan.</p>                                                                                                        |
| <b>Wachtwoordinstellingen</b>   | <p>In de wachtwoordinstellingen vindt u de standaardwachtwoorden en kunt u deze wijzigen in gewenste en veilige wachtwoorden.</p>                                                                                                                                                |
| <b>Verbindingsinstellingen</b>  | <p>In de verbindingsinstellingen kunt u netwerkinstellingen instellen zoals IP-adres, DNS-server enzovoort. Instellingen met betrekking tot UR Connect zijn hier ook te vinden.</p>                                                                                              |
| <b>Beveiligingsinstellingen</b> | <p>De beveiligingsinstellingen hebben betrekking op SSH, machtigingen voor het beheerderswachtwoord en het in-/uitschakelen van verschillende services in de software.</p>                                                                                                       |

### 10.2.1. Wachtwoord

- Beschrijving** In de wachtwoordinstellingen in PolyScope X vindt u drie verschillende soorten wachtwoorden.
- Operationele modus
  - Veiligheid
  - Beheerder
- Het is mogelijk om voor alle drie de gevallen hetzelfde wachtwoord in te stellen, maar er kunnen ook drie verschillende wachtwoorden worden ingesteld om toegang en opties te scheiden.
- 

## Wachtwoord - beheerder

---

- Beschrijving** Alle opties onder Beveiliging zijn beveiligd met een beheerderswachtwoord. De met het beheerderswachtwoord beveiligde schermen worden vergrendeld door een transparante overlay die de instellingen ontoegankelijk maakt. Door naar Beveiliging te gaan, kunt u de instellingen configureren in de volgende:
- Secure Shell
  - Machtigingen
  - Services
- De instellingen kunnen alleen worden gewijzigd door de aangewezen beheerder(s). Door een van de opties onder Beveiliging te ontgrendelen, worden ook de andere opties ontgrendeld totdat u het menu Instellingen verlaat.
- 

**Standaardwachtwoord** Het standaard beheerderswachtwoord is: easybot




### MEDEDELING

Als u uw beheerderswachtwoord vergeet, kan het niet worden vervangen of hersteld.  
U moet de software dan opnieuw installeren.

### Het beheerderswachtwoord instellen

Voordat u het beheerderswachtwoord kunt gebruiken om beveiligde schermen te ontgrendelen, moet u het standaardwachtwoord wijzigen.

1. Open het hamburgermenu en selecteer **Instellingen**.
2. Tik onder Wachtwoord op **Beheerder**.
3. Wijzig het huidige beheerderswachtwoord in een nieuw wachtwoord.
  - Als dit de eerste keer is, wijzig dan het standaard beheerderswachtwoord van "easybot" in een nieuw wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord moet ten minste 8 tekens lang zijn.
4. Gebruik het nieuwe wachtwoord om het menu Instellingen te ontgrendelen en toegang te krijgen tot de opties onder Beveiliging.

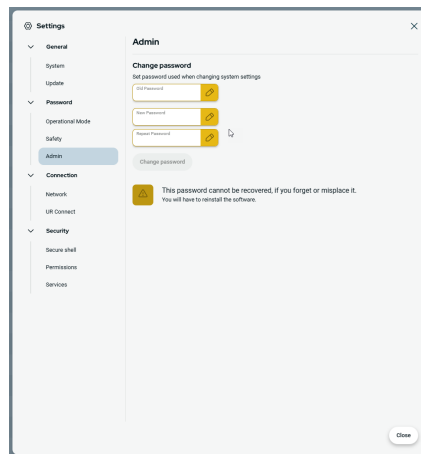

### Om het menu Instellingen te verlaten

Wanneer een van de beveiligingsopties is ontgrendeld, verandert de knop Sluiten rechtsonder in het menu Instellingen. De knop Sluiten wordt vervangen door de knop Vergrendelen en sluiten, wat aangeeft dat de beveiliging is ontgrendeld.

1. Zoek de knop **Vergrendelen en sluiten** in het menu Instellingen en tik erop.

## Wachtwoord - Bedrijfsmodus

### Standaardwachtwoord

Het standaard wachtwoord voor de bedrijfsmodus: operator



#### MEDEDELING

Als u uw wachtwoord vergeet, kan het niet worden vervangen of hersteld.


U moet de software dan opnieuw installeren.

U moet het standaardwachtwoord gebruiken wanneer u het wachtwoord voor de eerste keer wijzigt.

### Wachtwoord voor de bedrijfsmodus wijzigen

Zo wijzigt u het wachtwoord voor de bedrijfsmodus in de PolyScope X-instellingen.

1. Tik op het hamburgermenu in de hoofdnavigatie.
2. Tik op Instellingen.
3. Tik op Bedrijfsmodus in het onderdeel Wachtwoord.
4. Voer het standaardwachtwoord in als dit de eerste keer is.
5. Voeg uw gewenste wachtwoord toe, minimaal 8 tekens lang.

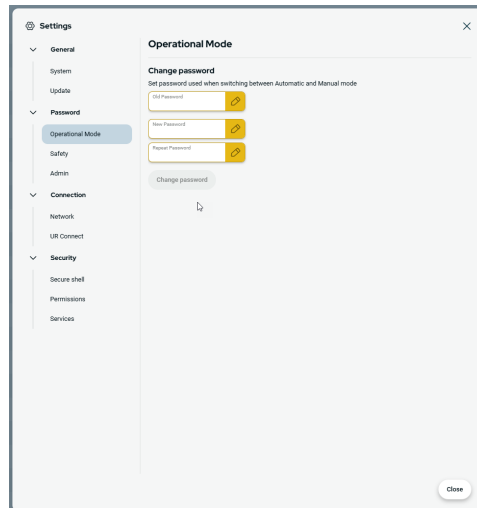

## Wachtwoord - Veiligheid

**Standaardwachtwoord** Het standaardwachtwoord voor veiligheid: **ursafe**



#### MEDEDELING

Als u uw wachtwoord vergeet, kan het niet worden vervangen of hersteld.


U moet de software dan opnieuw installeren.

U moet het standaardwachtwoord gebruiken wanneer u het wachtwoord voor de eerste keer wijzigt.

### Veiligheidswachtwoord wijzigen

Zo wijzigt u het veiligheidswachtwoord in de PolyScope X-instellingen.

1. Tik op het hamburgermenu in de hoofdnavigatie.
2. Tik op Instellingen.
3. Tik op Veiligheid in het onderdeel Wachtwoord.
4. Voer het standaardwachtwoord in als dit de eerste keer is.
5. Voeg uw gewenste wachtwoord toe, minimaal 8 tekens lang.

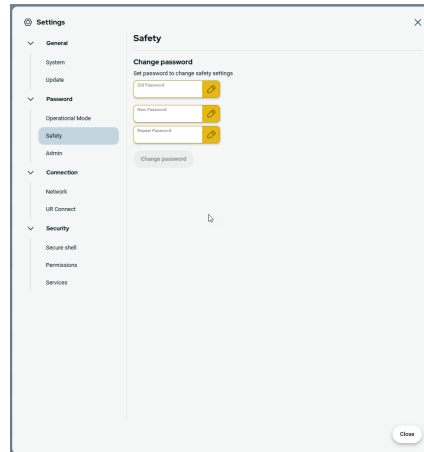

## 10.2.2. Secure Shell-toegang (SSH)

### Beschrijving

U kunt de externe toegang tot de robot beheren met behulp van Secure shell (SSH). In het scherm Secure Shell-beveiligingsinstellingen kunnen beheerders de SSH-toegang tot de robot in- en uitschakelen.

### Om SSH in/uit te schakelen

1. Open het hamburgermenu en selecteer **Instellingen**.
2. Tik onder Beveiliging op **Secure Shell**.
3. Voer het wachtwoord in om de instellingen te **ontgrendelen**.
4. Schuif **SSH-toegang inschakelen** naar de aan-positie.

Helemaal rechts van de schakelknop "SSH-toegang inschakelen" toont het scherm de poort die wordt voor SSH-communicatie wordt gebruikt.

### SSH-authenticatie

Authenticatie kan plaatsvinden met een wachtwoord en/of met een vooraf gedeelde, geautoriseerde sleutel. Beveiligingssleutels kunnen worden toegevoegd door op de knop **Sleutel toevoegen** te tikken en een beveiligingssleutelbestand te selecteren. Beschikbare sleutels worden samen vermeld. Gebruik het prullenbakpictogram om een geselecteerde sleutel uit de lijst te verwijderen.

## 10.2.3. Machtigingen

### Beschrijving

De toegang tot de schermen Netwerk, URCap-beheer en PolyScope X bijwerken is standaard beperkt om onbevoegde wijzigingen in het systeem te voorkomen. U kunt de machtigingen wijzigen om toegang tot deze schermen toe te staan. Een beheerderswachtwoord is vereist om toegang te krijgen tot Machtigingen.

### Om Machtigingen te openen

1. Open het hamburgermenu en selecteer **Instellingen**.
2. Ga naar Beveiliging en tik op **Machtigingen**.

### Aanvullende systeemmachtigingen

U kunt ook een aantal belangrijke schermen/functionariteiten vergrendelen met het beheerderswachtwoord. In het menu Instellingen van het gedeelte Beveiliging in het scherm Machtigingen is het mogelijk om aan te geven welke aanvullende schermen moeten worden beschermd met het beheerderswachtwoord en welke schermen beschikbaar zijn voor alle gebruikers. De volgende schermen/functionariteiten kunnen optioneel worden vergrendeld:

- Netwerkinstellingen
- Instellingen bijwerken
- URCaps-gedeelte in Systeembeheer
- UR Connect

### Systeemmachtigingen in-/uitschakelen

1. Ga naar Machtigingen zoals eerder beschreven. De beveiligde schermen staan vermeld onder Machtigingen.
2. Schuif voor het gewenste scherm de aan/uit-schakelaar naar de aanpositie om het in te schakelen.
3. Om het gewenste scherm uit te schakelen, schuift u de aan/uit-schakelaar naar de uitpositie.

Het scherm wordt weer vergrendeld wanneer de schakelaar in de uitpositie staat.

## 10.2.4. Services

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b>     | <p>Met services kunnen beheerders externe toegang tot de standaard UR-services die worden uitgevoerd op de robot in- of uitschakelen, zoals primaire/secundaire clientinterfaces, PROFINET, Ethernet/IP, ROS2 enz.</p> <p>Gebruik het scherm Services om externe toegang tot de robot te beperken door alleen externe toegang toe te staan tot de services op de robot die de specifieke robottoepassing daadwerkelijk gebruikt. Alle services zijn standaard uitgeschakeld voor maximale beveiliging. De communicatiepoorten voor elke service bevinden zich rechts van de aan/uit-schakelknop in de lijst van services.</p> |
| <b>ROS2 inschakelen</b> | <p>als de ROS2-service is ingeschakeld in dit scherm, kunt u de ROS-domein-ID (waarde 0-9) opgeven. Na het wijzigen van de domein-ID start het systeem opnieuw op om de wijziging toe te passen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 10.3. Veiligheidsinstellingen ontgrendelen

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b> | U moet de veiligheidsinstellingen ontgrendelen om ze te kunnen wijzigen. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|



### MEDEDELING

Veiligheidsinstellingen zijn beveiligd met een wachtwoord.

Het standaardwachtwoord voor veiligheid: **ursafe**.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veiligheidsinstellingen ontgrendelen</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in de hoofdnavigatie in PolyScope X op het tabblad Toepassing.</li> <li>2. Tik in het scherm Werkcel op het pictogram Veiligheid.</li> <li>3. Zie dat het scherm Robotlimieten verschijnt, maar dat de instellingen niet toegankelijk zijn.</li> <li>4. Voer het veiligheidswachtwoord in en tik op ONTGRENDELEN om de instellingen toegankelijk te maken.</li> <li>5. Tik op VERGRENDELEN of verlaat het menu Veiligheid om alle veiligheidsinstellingen weer te vergrendelen.</li> </ol> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10.4. Veiligheidsmenu-instellingen



- Beschrijving** De limieten van het veiligheidssysteem zijn gedefinieerd in de veiligheidsconfiguratie. Het veiligheidssysteem ontvangt de waarden uit de invoervelden en detecteert elke overtreding als een van de waarden wordt overschreden. De robotregelaar voorkomt overtredingen door een robotstop uit te voeren of de snelheid te verminderen.

**LET OP**

Gebruik van andere dan in de risicobeoordeling bepaalde Veiligheidsconfiguratie-parameters kan tot gevaren leiden die niet op redelijke wijze worden verwijderd of risico's die niet voldoende worden beperkt.


## 10.4.1. Robotlimieten

- Beschrijving** Met Robotlimieten kunt u de algemene robotbewegingen beperken.
- Wijzig de waarden in robotlimieten (Normaal en Verminderd) en pas ze toe om de toegepaste wijzigingen in de veiligheidscontrolesom te zien.
  - Verifieer dat de waarden van Verminderd altijd lager zijn dan de waarden in Normaal.

**MEDEDELING**

De veiligheidslimieten beperken krachten en bewegingen bij de gereedschapsflens en in het midden van de twee door de gebruiker gedefinieerde gereedschapsposities

## Snelheidslimieten

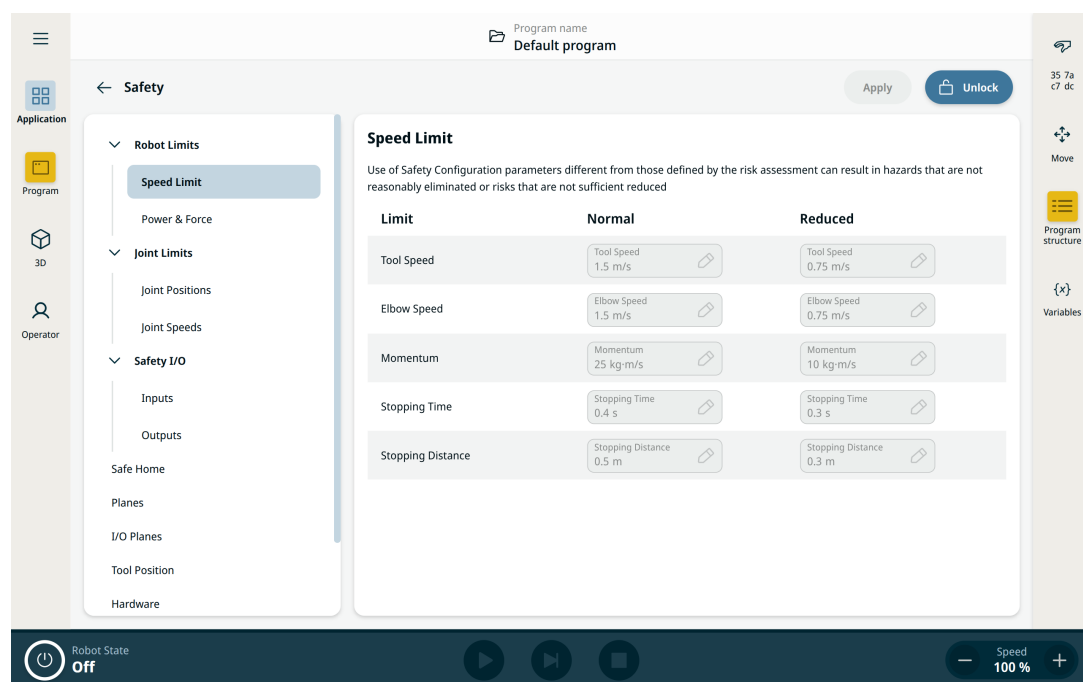

**Speed Limit**

Use of Safety Configuration parameters different from those defined by the risk assessment can result in hazards that are not reasonably eliminated or risks that are not sufficient reduced

| Limit             | Normal                     | Reduced                    |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tool Speed        | Tool Speed<br>1.5 m/s      | Tool Speed<br>0.75 m/s     |
| Elbow Speed       | Elbow Speed<br>1.5 m/s     | Elbow Speed<br>0.75 m/s    |
| Momentum          | Momentum<br>25 kg·m/s      | Momentum<br>10 kg·m/s      |
| Stopping Time     | Stopping Time<br>0.4 s     | Stopping Time<br>0.3 s     |
| Stopping Distance | Stopping Distance<br>0.5 m | Stopping Distance<br>0.3 m |

Robot State Off

Speed 100 %




### MEDEDELING

Het beperken van de stoptijd en afstand heeft invloed op de algehele robotsnelheid. Als de stoptijd bijvoorbeeld is ingesteld op 300 ms, is de maximale robotsnelheid beperkt, zodat de robot binnen 300 ms kan stoppen.

| Limiet               | Beschrijving                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschapssnelheid | Bepert de maximale snelheid van het robotgereedschap.                                                             |
| Elleboogsnelheid     | Bepert de maximale snelheid van de robotelleboog.                                                                 |
| Momentum             | Bepert het maximale robotmomentum.                                                                                |
| Stoptijd             | Bepert de maximale tijd die de robot nodig heeft om te stoppen, bijvoorbeeld wanneer een noodstop is geactiveerd. |
| Stopafstand          | Bepert de maximale afstand die het robotgereedschap of de elleboog kan afleggen tijdens het stoppen.              |

## Vermogen en kracht

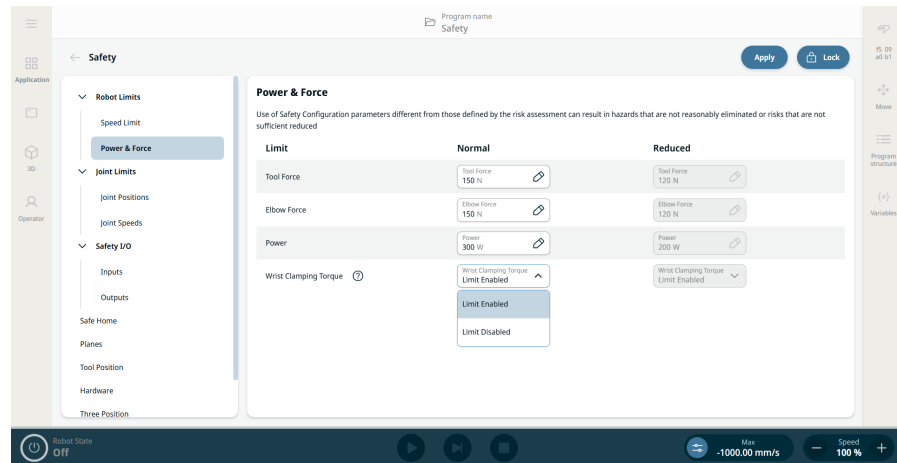

### MEDEDELING

De gereedschaps- en elleboogkracht kunnen worden overschreden door de drie polsgewrichten als de veiligheidsfunctie "koppel polsbeknelling" is uitgeschakeld

| Limiet                | Beschrijving                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschapskracht    | Bepert de maximumkracht die door het gereedschap van de robot wordt uitgeoefend in klemsituaties.                                                                             |
| Elleboogkracht        | Bepert de maximale kracht die de elleboog op de omgeving uitoefent.                                                                                                           |
| Vermogen              | Bepert maximum mechanische werk dat door de robot in de omgeving wordt geproduceerd. Deze limiet beschouwt de nuttige last als een deel van de robot en niet van de omgeving. |
| Koppel polsbeknelling | Bepert hoeveel koppel de pols kan toepassen voor duwen. Standaard ingeschakeld.                                                                                               |

### Veiligheidsmodus

Als er geen beschermende stops actief zijn, werkt het veiligheidssysteem in een Veiligheidsmodus, met een bijbehorende set van veiligheidslimieten:

| Veiligheidsmodus  | Effect                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normaal</b>    | Deze configuratie is standaard actief.                                                                                                                                                                                |
| <b>Verminderd</b> | Deze configuratie wordt geactiveerd wanneer het gereedschapsmiddelpunt (TCP) voorbij een triggervlak voor de verminderde modus wordt gepositioneerd, of wanneer deze wordt getriggerd via een configureerbare ingang. |

## Koppellimiet polsbeknelling

**Beschrijving**

**Koppellimiet polsbeknelling** is een instelling die de begrenzing van het maximale klemkoppel voor de polsgewrichten van de robot in- of uitschakelt. De begrenzing is standaard ingeschakeld. Deze veiligheidsfunctie beperkt hoeveel koppel de pols kan toepassen bij duwen.

**Details  
koppellimiet  
polsbeknelling**

Als dit is **ingeschakeld**, beperkt de robot het koppel in de polsgewrichten om beknelling tussen de pols, belasting en onderarm van de robot te voorkomen.

**MEDEDELING**

Als de instelling is ingeschakeld, definieert deze ook een niet-veiligheidsgeclassificeerde bovenlimiet voor de toegepaste koppelvensters van het basis-, schouder- en ellebooggewricht. Bij toepassingen met krachtregeling kunnen de haalbare contactkrachten aanzienlijk lager zijn dan de gespecificeerde krachten in de veiligheidsfuncties **Krachtlimiet gereedschap** en **Krachtlimiet elleboog**.


Als dit is **uitgeschakeld**, kan de robot een hogere duwkracht gebruiken met de polsgewrichten, bijvoorbeeld in krachtgecontroleerde toepassingen. Als de functie is uitgeschakeld, moeten de risico's van beknelling tussen de pols, belasting en onderarm van de robot op andere wijze worden tegengegaan.

**MEDEDELING**

Deze veiligheidsfunctie is standaard ingeschakeld op alle robots. In PolyScope X versie 10.12 en later is het mogelijk om deze veiligheidsfunctie uit te schakelen.

### Koppellimiet polsbeknelling in- en uitschakelen

1. Ga naar het tabblad **Toepassing** en selecteer **Veiligheid**.
2. Tik onder **Robotlimieten** op **Vermogen en kracht**. Ontgrendel, voer het veiligheidswachtwoord in en bevestig.
3. U kunt nu **Limiet ingeschakeld** of **Limiet uitgeschakeld** selecteren voor Normaal of Verminderd.

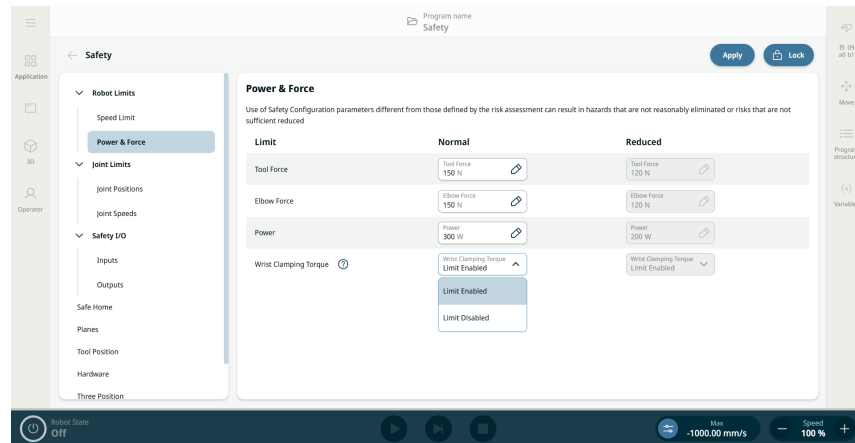

4. Tik **Toepassen** om de veiligheidsconfiguratie toe te passen en het veiligheidssysteem opnieuw op te starten.
5. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de configuratie kunt herstellen of bevestigen.

## 10.4.2. Gewrichtslimieten



### Beschrijving

Met gewrichtslimieten kunt u de bewegingen van individuele robotgewrichten in de gewrichtsruimte beperken, d.w.z. rotatiepositie en rotatiesnelheid van het gewricht. Gewrichtsbegrenzing kan ook software-gebaseerde asbegrenzing worden genoemd.

**Gezamenlijke posities**

Zo vindt u gewrichtsposities en -snelheden.

1. Ga naar de toepassing.
2. Ga naar Veiligheid.
3. Selecteer de instellingen in het menu links.

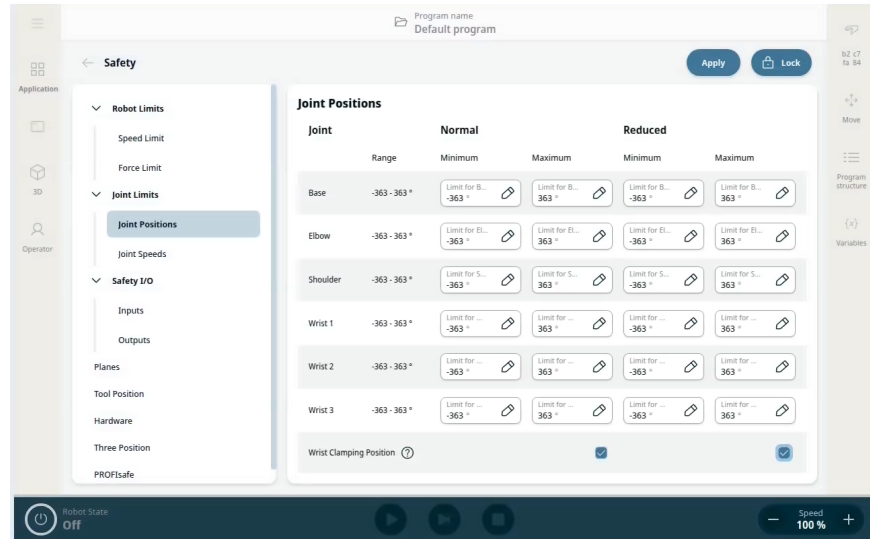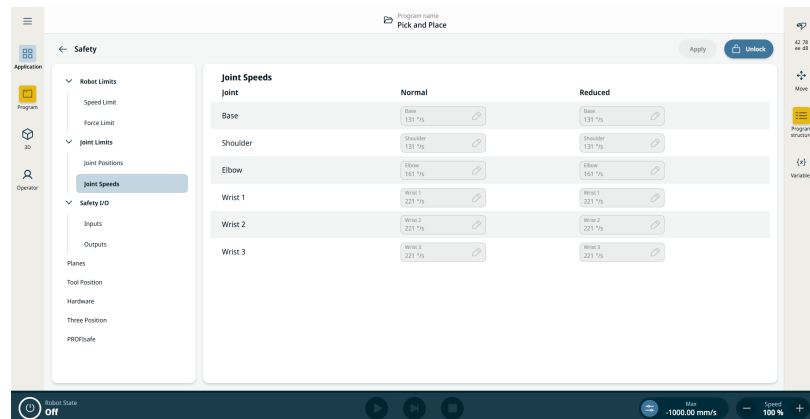**Gewrichtssnelheden**

### 10.4.3. Beperking van gereedschapspositie

**Beschrijving**

Het scherm Gereedschapspositie biedt gebruikers een gecontroleerdere beperking van gereedschappen en/of accessoires die aan het uiteinde van de robotarm zijn bevestigd, door u gereedschapsposities te laten definiëren met een straal die in wisselwerking staat met de veiligheidsvlakken door botsingsdetectie met gereedschapspositie en vlak of door naar de verminderde modus te gaan wanneer het gereedschap het vlak binnenkomt.

**Details**

Gereedschapspositie heeft twee belangrijke voordelen:

- Ondersteunt twee aangepaste configuraties om te specificeren waar op veiligheidsvlakken moet worden gereageerd.
- Visualiseert gereedschapsposities in een 3D-model.

**MEDEDELING**

U kunt maximaal twee gereedschapsposities definiëren, configureren en beheren.


**Door de gebruiker  
gedefinieerde  
gereedschappen**

Voor de door de gebruiker gedefinieerde tools kan de gebruiker het volgende wijzigen:


- Radius om de radius van de gereedschapsbol te wijzigen. Bij het gebruik van veiligheidsvliegtuigen wordt rekening gehouden met de straal.
- X-, Y-, Z-posities om de positie van het gereedschap te wijzigen ten opzichte van de gereedschapsflens van de robot. De positie wordt overwogen voor de veiligheidsfuncties voor snelheid en kracht van het gereedschap, stopafstand en veiligheidsvlakken.

**Om naar  
Gereedschapspositie  
te gaan**


1. Ga naar **Veiligheidstoepassing**.
2. Tik op **Gereedschapspositie** in het paneel links. Tik rechtsboven in het hoofdscherm op **Ontgrendelen** om het toevoegen van gereedschap te activeren. Voer het veiligheidswachtwoord in en tik op **Bevestigen**.

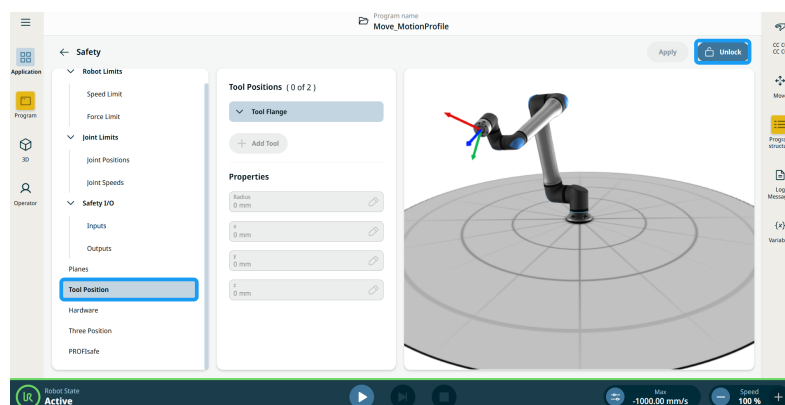

3. Tik in de kolom **Gereedschapsposities** van het middelste paneel op **+ Gereedschap toevoegen**. Het toegevoegde gereedschap, **Gereedschap\_1**, wordt weergegeven onder de **gereedschapsflensstructuur**.
4. Tik op het **kebabpictogram** van het toegevoegde gereedschap om het te hernoemen naar iets herkenbaars. U kunt het ook verwijderen.

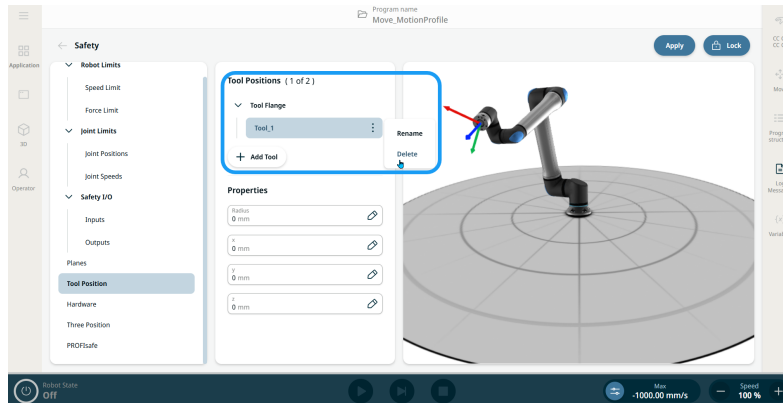

5. In de kolom **Eigenschappen** in het middelste paneel vindt u vier bewerkbare velden voor **straal en x-, y- en z-positie**. Tik op de velden om de straal en de x-, y-, z-coördinaten naar behoefte te wijzigen. De bol in het paneel rechts wordt live bijgewerkt in het 3D-model om te helpen met nauwkeurige plaatsing.
6. Tik op **Toepassen** rechtsboven in het hoofdscherm.

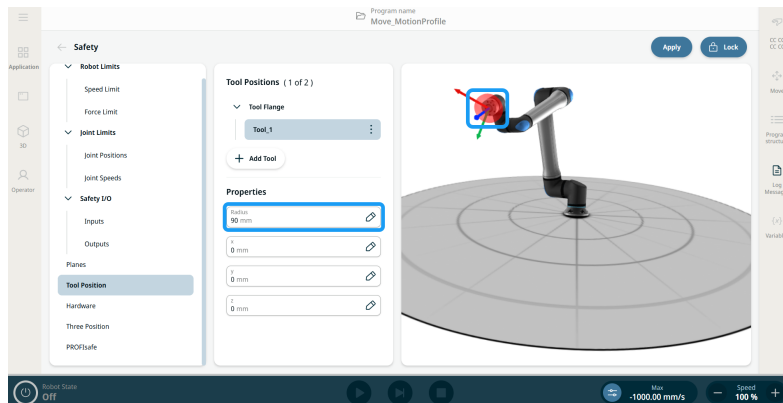

7. De robot heeft nu interactie met veiligheidsvlakken wanneer de bollen van de gereedschapspositie ermee in contact komen.

#### 10.4.4. Veiligheidsvlakken




**Beschrijving**

Veiligheidsvlakken beperken de werkruimte van de robot, het gereedschap en de elleboog.

**WAARSCHUWING**

Het definiëren van veiligheidsvlakken beperkt alleen de gedefinieerde gereedschapsbollen en elleboog, niet de totale limiet voor de robotarm. Het definiëren van veiligheidsvlakken garandeert niet dat andere delen van de robotarm aan dit soort beperkingen zullen voldoen.

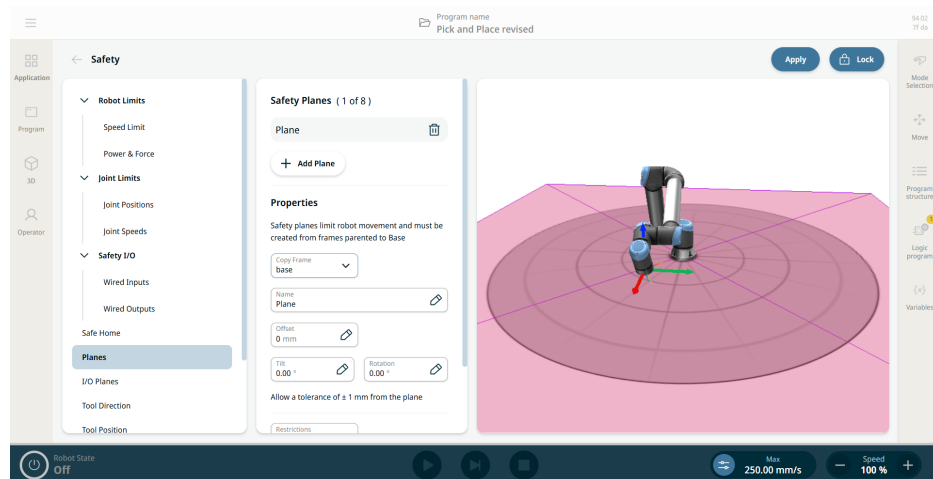

**Figuur 1.5:** PolyScope X-scherm met veiligheidsvlakken.

**Een  
veiligheidsvlak  
configureren**

U kunt veiligheidsvlakken configureren met de onderstaande eigenschappen:

- **Naam.** Dit is de naam die wordt gebruikt om het veiligheidsvlak aan te duiden.
- **Offset van basis.** Dit is de hoogte van het vlak vanaf de basis, gemeten in de Y-richting.
- **Kanteling.** Dit is de kanteling van het vlak, gemeten ten opzichte van het netsnoer.
- **Rotatie.** Dit is de rotatie van het vlak, rechtsonder gemeten.

U kunt elk vlak configureren met de onderstaande beperkingen:

- **Normaal.** Wanneer het veiligheidssysteem in de normale modus staat, is een normaal vlak actief en fungeert het als een strikte limiet voor de positie.
- **Verminderd.** Wanneer het veiligheidssysteem in de gereduceerde modus staat, is er een gereduceerd modusvlak actief en fungeert het als een strikte limiet voor de positie.
- **Beide.** Wanneer het veiligheidssysteem zich in de normale of gereduceerde modus bevindt, is een normaal en gereduceerd modusvlak actief en fungeert het als een strikte limiet voor de positie.
- **Trigger verminderde modus.** Het veiligheidsvlak zorgt ervoor dat het veiligheidssysteem overschakelt naar de gereduceerde modus als het robotgereedschap of de elleboog zich daarachter bevindt.

**Beperking van de elleboog** De functie is standaard ingeschakeld.  
U kunt Elleboog beperken gebruiken om te voorkomen dat het ellebooggewricht niet door een van de door u gedefinieerde vlakken gaat.  
Schakel Elleboog beperken uit voor elleboog om door vlakken te gaan.

---

**Beperking van de gereedschapsflens** Het beperken van de gereedschapsflens voorkomt dat de gereedschapsflens en het bevestigde gereedschap een veiligheidsvlak kruisen. Wanneer u de gereedschapsflens beperkt, is het onbeperkte gebied het gebied binnen het veiligheidsvlak, waar de gereedschapsflens normaal kan werken.  
De gereedschapsflens mag het begrensde gebied, buiten het veiligheidsvlak, niet overschrijden.  
Door het verwijderen van de beperking kan de gereedschapsflens buiten het veiligheidsvlak komen, in het beperkte gebied, terwijl het bevestigde gereedschap binnen het veiligheidsvlak blijft.  
U kunt de beperking van de gereedschapsflens verwijderen wanneer u met een grote gereedschapsoffset werkt. Dit zorgt voor extra afstand voor het gereedschap om te bewegen.  
Voor het beperken van de gereedschapsflens moet een vlakelement worden gemaakt. Het vlakelement wordt gebruikt om later in de veiligheidsinstellingen een veiligheidsvlak in te stellen.


---

## Een veiligheidsvlak maken met behulp van een kader

---

**Beschrijving**

Je kunt een bestaand kader gebruiken om een veiligheidsvlak te definiëren. Dit biedt een intuïtievere manier om vlakparameters te specificeren op basis van een vooraf gedefinieerde positie en rotatie (X, Y, Z, RX, RY, RZ). Selecteer het kader in het **Kopieer kader** vervolgkeuzemenu.

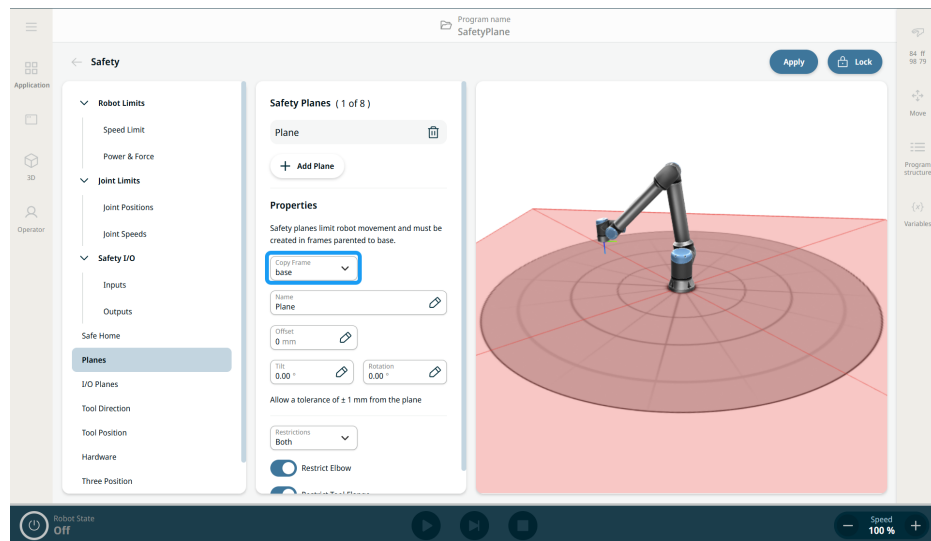

Het **Kopieer kader** vervolgkeuzemenu is te vinden in de parameters van een veiligheidsvlakdefinitie op het **Vlakken** scherm. Deze lijst bevat frames die gedefinieerd zijn in het scherm **Frames**. Wanneer je een kader selecteert, wordt dit gebruikt als definitie voor het veiligheidsvlak.

Als u parameters voor offset, kanteling en rotatie opgeeft, worden deze toegepast op het geselecteerde kader (zie "Een veiligheidsvlak configureren"). Het resulterende veiligheidsvlak combineert alle parameters.

Zie het hoofdstuk "Kaders" in het Softwarehandboek.


**Veiligheidsvlakken  
maken met behulp  
van kaders**

1. Selecteer in het tabblad **Toepassing Kaders**.
2. Tik op **+ Kader toevoegen** onder **Aangepaste kaders**, verander vervolgens de naam van het kader met behulp van de **drie verticale puntjes (kebab-pictogram)**.

**MEDEDELING**


Kaders worden aangemaakt ten opzichte van de **basis**.

### 3. Selecteer in het veld **Parent Basis**.

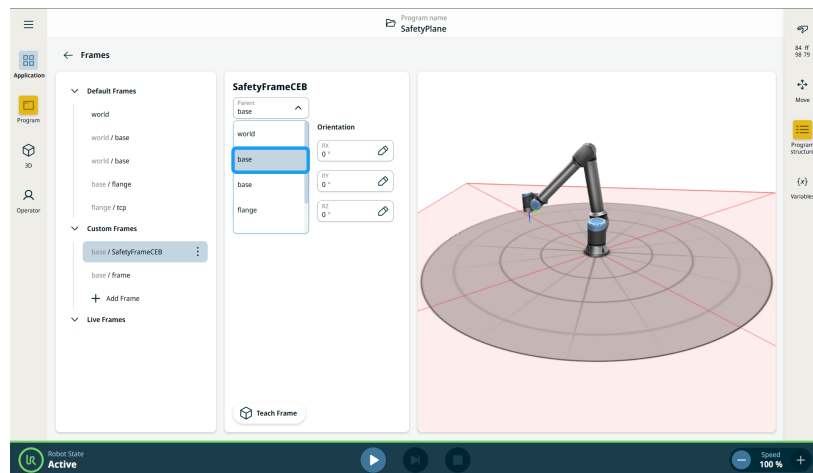


Referentiekader selecteren in het veiligheidsvlak

1. Ga in de **Toepassing** naar **Veiligheid**, selecteer **Vlakken** en tik op **Ontgrendelen**.
2. Selecteer op het scherm **Safety Planes** een kader in het **Copy Frame** vervolgkeuzemenu. U kunt ook offset, kanteling en rotatie toepassen.

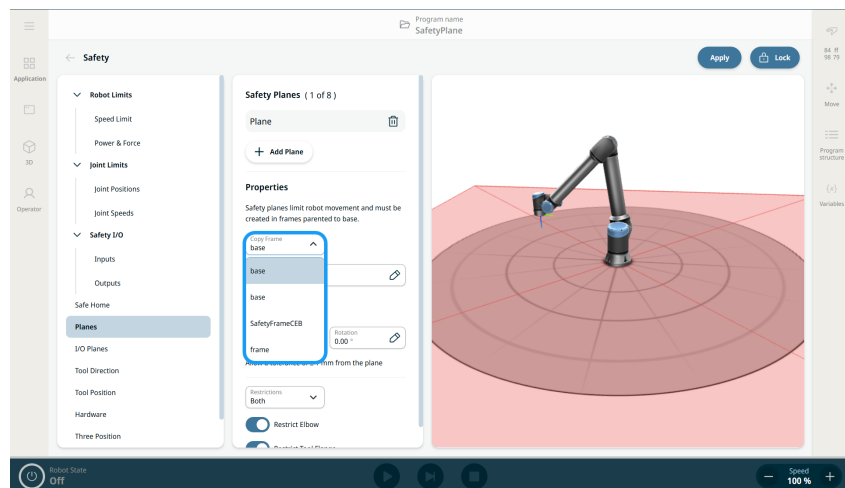

3. Tik op de **Toepassen** knop.

4. Geconfigureerde vlakken worden weergegeven in de tabel met functietoewijzingen in het **Bevestiging van de toegepaste veiligheidsconfiguratie** overzichtsdialogvenster.

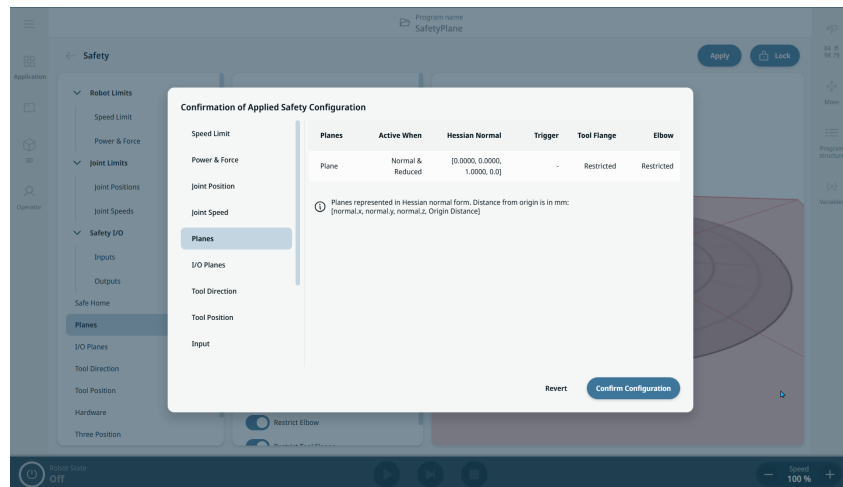

### MEDEDELING

Een kader dat wordt gebruikt voor een veiligheidsvlak kan andersom zijn dan u zou verwachten. Als de robot zich aan de overtredende kant van het vlak bevindt, voeg dan een kanteling van 180 graden toe.

Zie "Veiligheidsvlakken" voor beperkingen met betrekking tot vlakconfiguraties, beperkingen van de elleboogverbinding en beperkingen van de gereedschapsflens.

## 10.4.5. I/O-vlakken

### Beschrijving

De functie **I/O-vlakken** biedt een flexibeler gebruik van veiligheidsvlakken in vergelijking met de standaard [Veiligheidsvlakken](#) functionaliteit. Hiermee kun je veiligheidsvlakken activeren en deactiveren met behulp van eindingen en/of een uitgangssignaal genereren wanneer de veiligheidsbollen een veiligheidsvlak passeren.

**Ingang/Stopvlak**

**Trigger Stop** activeert een I/O-vlakstop. Het kan worden gedempt met een veiligheidsingang.

Als de robot naar het vliegtuig toe beweegt, stopt hij en wacht hij tot de veiligheidsingang het vliegtuig uitschakelt.


**MEDEDELING**

Wanneer het vlak inactief is, kan de robot vrij bewegen.


Wanneer het vlak actief is en de robot het vlak niet heeft overgestoken, stopt de robot voordat hij het vlak oversteekt. Als het vlak wordt geactiveerd terwijl de robot zich op de rand van het vlak beweegt, kan de robot het vlak oversteken en in het ergste geval stoppen volgens de geconfigureerde afstands- en stoptijdlimieten.

Wanneer het vlak geactiveerd is en de robot het vlak heeft overgestoken, stopt de robot volgens de geconfigureerde stopafstand en stoptijdlimieten.


1. Ga naar [Veiligheid](#) op het [tabblad Toepassing](#) en tik op [I/O-vlakken](#).

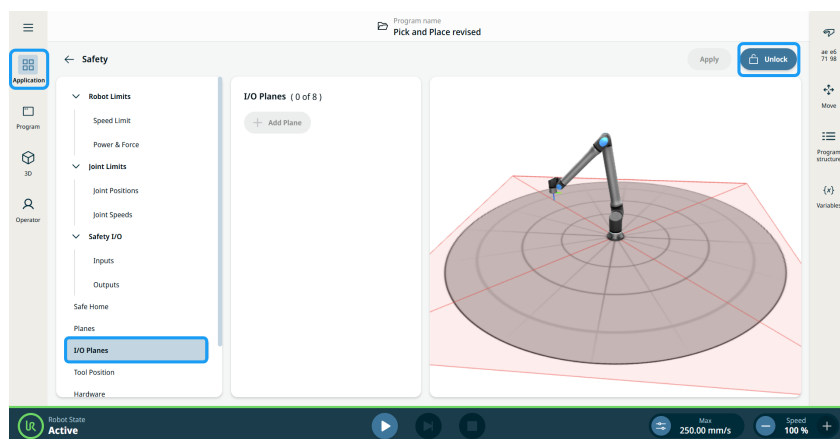

2. **Ontgrendel** en tik op **Vliegtuig toevoegen**. Verschillende velden en tabbladen van de I/O Planes eigenschappen verschijnen.

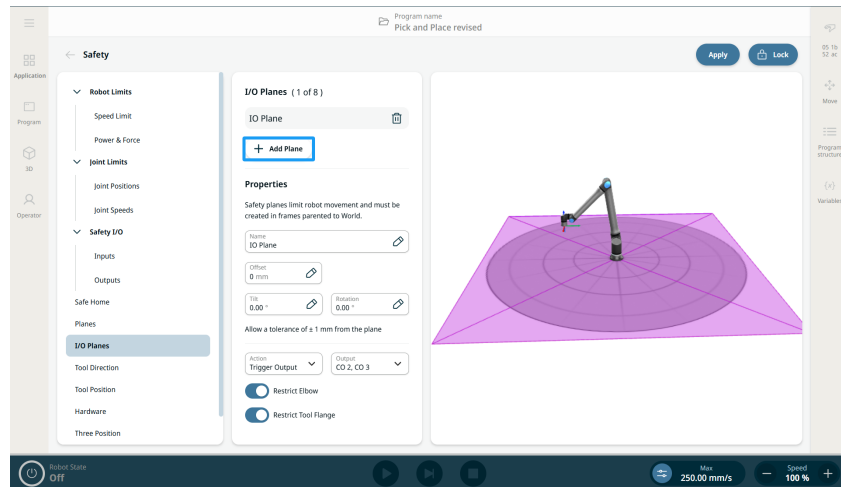

3. Voer de waarde van **Offset** en **Tilt** in.
4. Selecteer **Trigger Stop** in het veld **Actie**.
5. Selecteer **CI4** en **CI5** in het veld **Muting Input**. Tik op **Toepassen**.

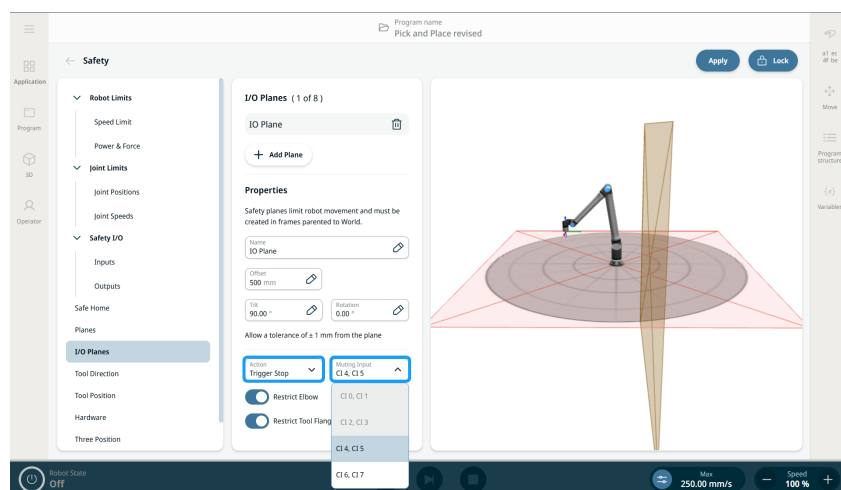

6. Als je een fysieke schakelaar omzet die op de ingang is aangesloten, verdwijnt het vlak uit de 3D-weergave. Tik op de knop **' (Afspeel )** en de robot beweegt vrij van de ene kant van het vlak naar de andere.
7. Schakel de schakelaar opnieuw in om het geluid van het vliegtuig weer aan te zetten en de robot gaat naar I/O stop.


**Uitgangsvlak**

**Triggeruitgang** genereert een veiligheidsuitgang gebaseerd op de vraag of een of meer van de veiligheidsbollen het vlak hebben overschreden.  
Wanneer een of meer van de veiligheidsbollen een vlak hebben overschreden dat is gedefinieerd als triggeruitgang, wordt de veiligheidsuitgang die overeenkomt met dat vlak geactiveerd. "Geactiveerd" betekent dat de veiligheidsuitgangen elektrisch "Laag" zijn ingesteld.

**MEDEDELING**

Wanneer een van de veiligheidsbollen een vlak heeft overschreden dat is gedefinieerd als triggeruitgang, wordt de veiligheidsuitgang die overeenkomt met dat vlak geactiveerd.

1. Voer de waarde van **Offset** en **Tilt** in.
2. Selecteer **Triggeruitvoer** in het veld **Actie**.
3. Selecteer **CO2, CO3** in het veld **Uitvoer**. Tik op **Toepassen**.

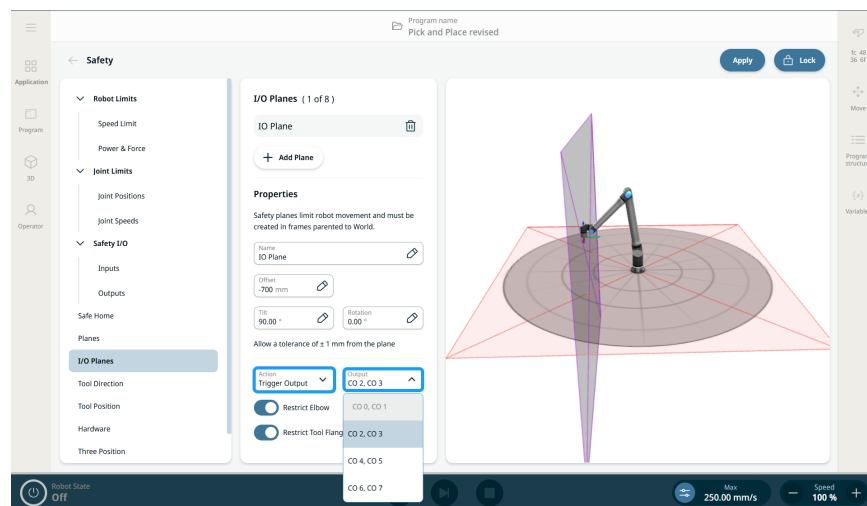

4. Wanneer je het robotprogramma afspeelt, kun je de "LOW" en "HIGH" uitgangen zien in het menu **Communicatie** tabblad.

## 10.4.6. Hardware



- Beschrijving** Met het onderdeel **Hardware** kunnen gebruikers het type programmeereenheid (TP) selecteren dat op hun robot is aangesloten. Beschikbare opties zijn:
- **3PE ingeschakeld.** Programmeereenheid met inschakelapparaat met drie standen (3PE TP)
  - **Geen.** Hierdoor kan de robot veilig worden gestart zonder dat er een programmeereenheid is aangesloten op de regelkast.

**MEDEDELING**

Om veiligheidsredenen start de robot niet als de selectie niet de aangesloten hardware weerspiegelt.


**Doel van de optie Geen**

De optie **Geen** ondersteunt instellingen waarbij er geen programmeereenheid verplicht is of fysiek aanwezig is. Dit maakt meer gestroomlijnde en flexibele implementaties mogelijk, met name in geautomatiseerde of op afstand aangestuurde omgevingen. Het geeft gebruikers drie belangrijke voordelen:


- Ondersteunt configuraties zonder bedieningsinterface waarbij geen programmeereenheid wordt gebruikt.
- Vereenvoudigt hardwarevereisten voor minimale configuraties.
- Verbeter de opstartflexibiliteit door de afhankelijkheid van de aanwezigheid van een programmeereenheid weg te nemen.

**Voor toegang tot Geen**

1. Tik op **Hardware** in het linkerpaneel van het scherm Veiligheidstoepassing.
2. Ontgrendel het hoofdscherm in het paneel rechtsboven, voer uw veiligheidswachtwoord in en druk op **Bevestigen**.
3. Tik in het middelste paneel op het veld **Programmeereenheid** en kies **Geen**.

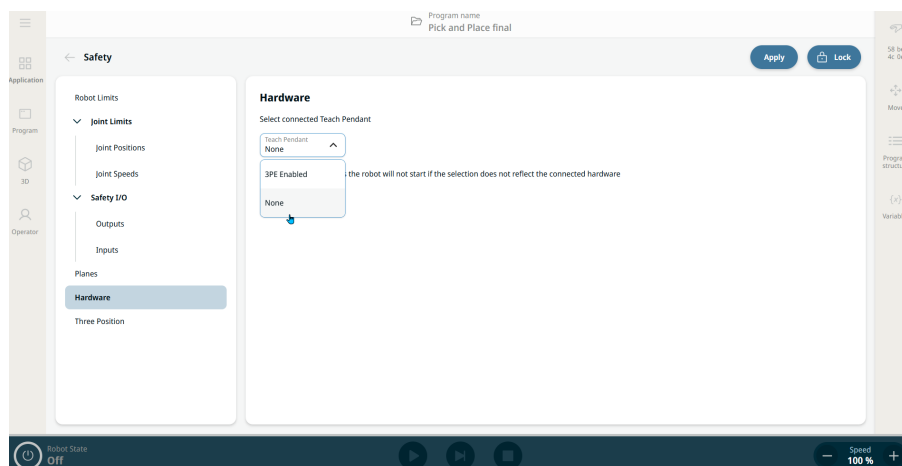

4. Tik op **Toepassen** naast de knop Vergrendelen in het hoofdscherf.
5. Tik op **Toepassen en opnieuw opstarten** in de pop-up Veiligheidsconfiguratie toepassen.
6. Het pop-upvenster Bevestiging van toegepaste veiligheidsconfiguratie wordt weergegeven. U kunt **Terugdraaien** of **Configuratie bevestigen**.

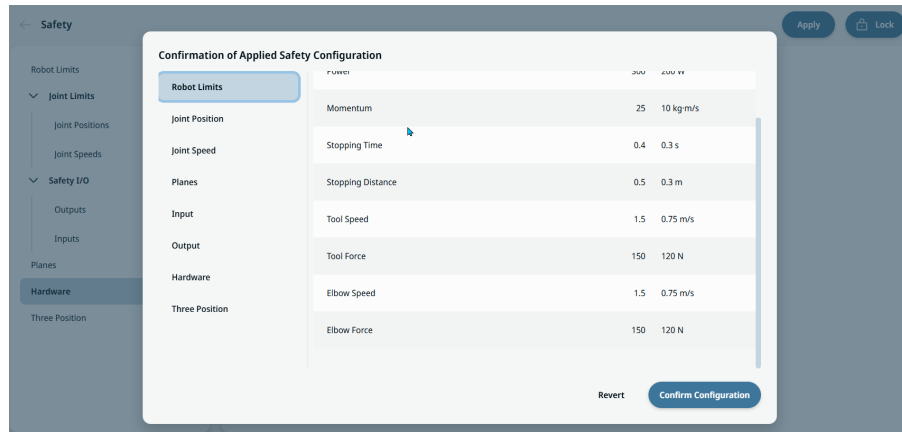

### 10.4.7. Driepositie

#### Beschrijving

Met de handmatige hoge snelheid kunnen zowel de gereedschapssnelheid als de snelheid van de elleboog tijdelijk hoger zijn dan 250 mm/s. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw robot in de handmatige modus staat en er een inschakelapparaat met drie standen is geconfigureerd. Als er binnen vijf minuten geen interactie plaatsvindt met het inschakelapparaat met drie standen, worden de verhoogde waarden teruggezet naar 250 mm/s.

#### Toegang tot Three Position

1. Tik in het linkerpaneel op **Drie posities**.
2. Tik op **Ontgrendelen** rechtsboven op het hoofdscherf.
3. Voer het veiligheidswachtwoord in en tik op **Bevestigen**.
4. Schuif op het centrale paneel de knop naar **Handmatige hoge snelheid toestaan**.
5. Tik op **Toepassen** rechtsboven in het hoofdscherf.

### 10.4.8. PROFIsafe

**Beschrijving**

Het PROFIsafe netwerkprotocol (geïmplementeerd als versie 2.6.1) stelt de robot in staat om te communiceren met een veiligheids-PLC volgens de vereisten van ISO 13849, Cat 3 PLd.

De robot verzendt veiligheidsgerelateerde informatie naar een veiligheids-PLC en ontvangt veiligheidsgerelateerde informatie.

De veiligheidsgerelateerde communicatie kan bestaan uit statusberichten of het activeren van een veiligheidsfunctie (bijv. verminderde instellingen, stop).

Stopcommando's worden beschreven volgens IEC 60204-1, waarbij de noodstop een stop van categorie 1 is en de veiligheidsstop een stop van categorie 2.

De PROFIsafe-interface biedt een veilig, netwerkgebaseerd alternatief voor het aansluiten van draden op de veiligheids-IO-pinnen van de robotbesturingskast.

Door gebruik te maken van de PROFIsafe-interface blijven de functionele veiligheidsspecificaties van de UR-robot (PL, categorie en PFH) behouden. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'Tabel met veiligheidsfuncties' in de UR-handleiding. De "veiligheidsstop" is bijvoorbeeld PLd-categorie 3 met een PFH-waarde van minder dan  $1,8E-07$  ( $1,8 \times 10^{-7}$ ).

PROFIsafe is alleen beschikbaar op robots met een activeringslicentie, die u kunt verkrijgen door contact op te nemen met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

Download uw licentie van [myUR](#) nadat u deze heeft verkregen.

Raadpleeg "Robotregistratie en URCap-licentiebestanden" voor informatie over robotregistratie en licentieactivering.

**Veiligheids-  
PLC uit**

Een regelbericht dat de veiligheids-plc naar de robot stuurt, bevat de informatie in de volgende tabel.

| Signaal                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-stop per systeem             | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Dwingt de systeemnoodstop af.</li> <li>1: Heft de systeemnoodstop op.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beveiligingsstop               | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Dwingt de beveiligde stop af.</li> <li>1: Normale bedrijfsstatus.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> zie ook de signaalbeschrijving "Beveiligde stop resetten".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beveiligingsstop resetten      | Reset de beveiligde stoptoestand bij overgang van 0 naar 1, wanneer het signaal "beveiligde stop" al op 1 staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beveiligingsstop auto          | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Dwingt een beveiligde stop af als de robot in de automatische modus werkt.</li> <li>1: Normale bedrijfsstatus.</li> </ul> <p>Beveiligingsstop auto mag alleen worden gebruikt wanneer een 3-positie Enabling (3PE) -apparaat is geconfigureerd. Als er geen 3PE-apparaat is geconfigureerd, werkt de beveiligingsstop auto als een normale beveiligingsstopingang.</p> <p><b>Opmerking:</b> zie ook de signaalbeschrijving "Automatische beveiligde stop resetten".</p> |
| Beveiligingsstop auto resetten | Reset de automatische beveiligde stoptoestand bij overgang van 0 naar 1, wanneer het signaal "automatische beveiligde stop" al op 1 staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verminderd                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Activeert de verminderde veiligheidslimieten.</li> <li>1: Activeert de veiligheidslimieten van de "normale modus".</li> </ul> <p>Het veiligheidssysteem garandeert dat de robot zich binnen de verminderde limieten bevindt in minder dan 0,5 s nadat de ingang is geactiveerd. Als de robotarm toch de verminderde limieten blijft overschrijden, wordt een categorie 0 stop getriggerd.</p>                                                                           |
| Operationele modus             | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Activeert de handmatige bedrijfsmodus.</li> <li>1: Activeert de automatische bedrijfsmodus.</li> </ul> <p>Als de veiligheidsconfiguratie "Selectie van operationele modus via PROFIsafe" is uitgeschakeld, wordt dit veld weggelaten uit het PROFIsafe-besturingsbericht.</p>                                                                                                                                                                                           |

**Veiligheids-  
PLC in**

Een statusbericht dat de robot naar de veiligheids-plc stuurt, bevat de informatie in de volgende tabel.


| Signaal             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stop, kat. 0        | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot voert een veiligheidsstop van categorie 0 uit of heeft deze voltooid. Een harde stop door onmiddellijke uitschakeling van de stroom naar de arm en de motoren.</li> <li>1: Normale bedrijfsstatus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stop, kat. 1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot voert een veiligheidsstop van categorie 1 uit of hij heeft deze voltooid. Een gecontroleerde stop, waarna de motoren in een uitgeschakelde toestand met ingeschakelde remmen worden gelaten.</li> <li>1: Normale bedrijfsstatus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stop, kat. 2        | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot voert een veiligheidsstop van categorie 2 uit of hij heeft deze voltooid. Een gecontroleerde stop, waarna de motoren in een ingeschakelde toestand worden gelaten.</li> <li>1: Normale bedrijfsstatus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Overtreding         | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot is gestopt omdat het veiligheidssysteem niet binnen de actieve gedefinieerde veiligheidslimieten bleef.</li> <li>1: Normale bedrijfsstatus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Storing             | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot is gestopt vanwege een onverwachte uitzonderlijke fout in het veiligheidssysteem.</li> <li>1: De robot heeft geen onverwachte uitzonderlijke fout in het veiligheidssysteem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-stop door systeem | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot is gestopt vanwege een van de volgende condities: <ul style="list-style-type: none"> <li>Een via PROFIsafe aangesloten veiligheids-PLC heeft een noodstop op systeemniveau afgedwongen.</li> <li>Een IMMI-module aangesloten op de regelkast heeft een noodstop op systeemniveau afgedwongen.</li> <li>Een eenheid aangesloten op de configureerbare noodstopveiligheidsingang van de regelkast heeft een noodstop op systeemniveau afgedwongen.</li> </ul> </li> <li>1: De robot bevindt zich niet in een systeemnoodstop.</li> </ul> |
| E-stop door robot   | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot is gestopt vanwege een van de volgende condities: <ul style="list-style-type: none"> <li>De e-stopknop van de teach pendant wordt ingedrukt.</li> <li>Een e-stopknop aangesloten op de niet-configureerbare veiligheidsingang van de bedieningskast van de robot e-stop wordt ingedrukt.</li> </ul> </li> <li>1: De robot bevindt zich niet in een noodstop door de robot.</li> </ul>                                                                                                                                                  |

| Signaal               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beveiligingsstop      | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot is gestopt vanwege een van de volgende condities: <ul style="list-style-type: none"> <li>Een veiligheids-PLC verbonden via PROFIsafe heeft de veiligheidsstop bevestigd.</li> <li>Een eenheid aangesloten op de niet-configureerbare beveiligde-stopingang van de regelkast heeft een beveiligde stop afgedwongen.</li> <li>Een eenheid die is aangesloten op de configureerbare veiligheidsingang van de besturingskast heeft de veiligheidsstop bevestigd.</li> </ul> </li> <li>1: De robot is niet gestopt vanwege een beveiligde stop.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> zie ook de signaalbeschrijving "Beveiligde stop resetten". PROFIsafe dwingt het gebruik af van de beveiligde-stopresetfunctie.</p> |
| Beveiligingsstop auto | <p>0: De robot wordt gestopt omdat deze in de automatische modus werkt en een van de volgende condities van toepassing is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een veiligheids-PLC die via PROFIsafe is verbonden, heeft een veiligheidsstop auto bevestigd.</li> <li>Een eenheid die is aangesloten op een automatisch configureerbare veiligheidsingang van de besturingskast heeft een automatische veiligheidsstop bevestigd.</li> </ul> <p>1: De robot is niet gestopt vanwege een automatische beveiligde stop.</p> <p><b>Opmerking:</b> zie ook de signaalbeschrijving "Automatische beveiligde stop resetten". PROFIsafe dwingt het gebruik af van de beveiligde-stopresetfunctie.</p>                                                            |
| 3PE stop              | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: De robot wordt gestopt omdat deze in de handmatige modus werkt en een van de volgende condities van toepassing is: <ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een 3PE ingedrukt in de middenpositie en de Freedrive-ingang is actief.</li> <li>Niet alle 3PE-apparaten zijn ingedrukt in de middenpositie.</li> </ul> </li> <li>1: De robot is niet gestopt vanwege een inschakelapparaat met 3 standen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Operationele modus    | <p>Aanduiding van de actieve bedrijfsmodus van de robot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Uitgeschakeld</li> <li>1: Automatisch</li> <li>2: Handmatig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verminderd            | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Verminderde veiligheidslimieten zijn actief.</li> <li>1: Normale veiligheidslimieten zijn actief.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Signaal                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actieve limiet ingesteld | <p>De actieve set veiligheidslimieten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: Normaal</li><li>• 1: Verminderd</li><li>• 2: Herstel</li></ul>                                                                                                                            |
| Robot beweegt            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: De robot beweegt. Als een gewricht beweegt met een snelheid van 0,02 rad/s of meer wordt de robot beschouwd als in beweging.</li><li>• 1: De robot staat stil.</li></ul>                                                             |
| Veilige uitgangspositie  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: De robot is in rust (de robot beweegt niet) en in de positie die als veilige uitgangspositie is gedefinieerd.</li><li>• 1: De robot is niet in rust of niet in de positie die als veilige uitgangspositie is gedefinieerd.</li></ul> |

**PROFIsafe**  
configureren

1. Tik in het scherm Veiligheidstoepassing op **PROFIsafe** in het paneel links.
2. Tik op **Ontgrendelen** rechtsboven in het hoofdscherm om PROFIsafe in te schakelen. Voer het veiligheidswachtwoord in en tik op **Bevestigen**.

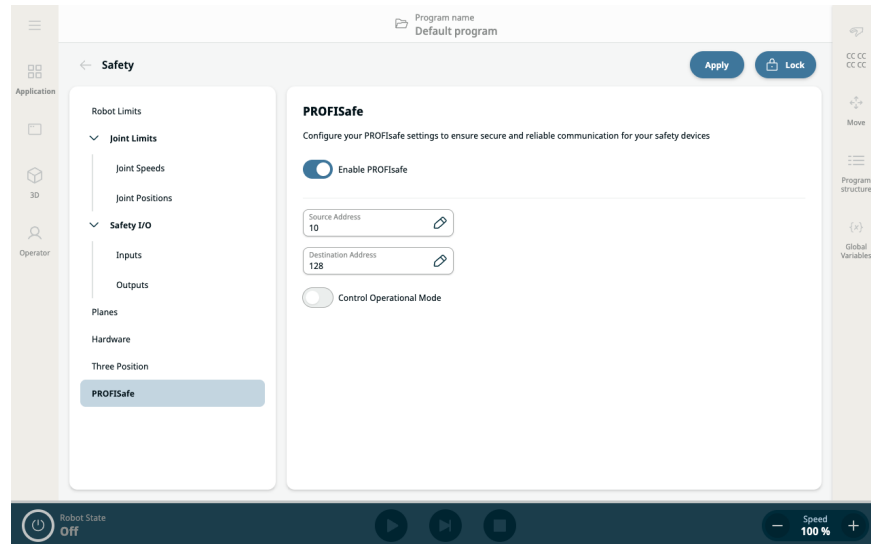

Het paneel rechts toont twee velden en twee knoppen voor het configureren van PROFIsafe:

- Knop PROFIsafe inschakelen
  - Veld Bronadres
  - Veld Bestemmingsadres
  - Bedrijfsmodus regelen
3. Schuif de knop **PROFIsafe inschakelen** naar rechts.
  4. Tik op de velden **Bronadres** en **Bestemmingsadres** om de adressen op te geven die door de robot en de veiligheids-plc worden gebruikt om elkaar te identificeren.
  5. Door op **Bedrijfsmodus regelen** te tikken, kunt u de PROFIsafe-plc inschakelen om de bedrijfsmodus van de robot te regelen.




**MEDEDELING**

Om PROFI-safe te configureren en te gebruiken, moet het **Profinet-apparaat** zijn ingeschakeld in het instellingenmenu van de beveiligingsservices.



Enable PROFINET in Settings / Security / Services  
**PROFINET has to be enabled**

Lees voor details en de locatie van de interface "Profinet".

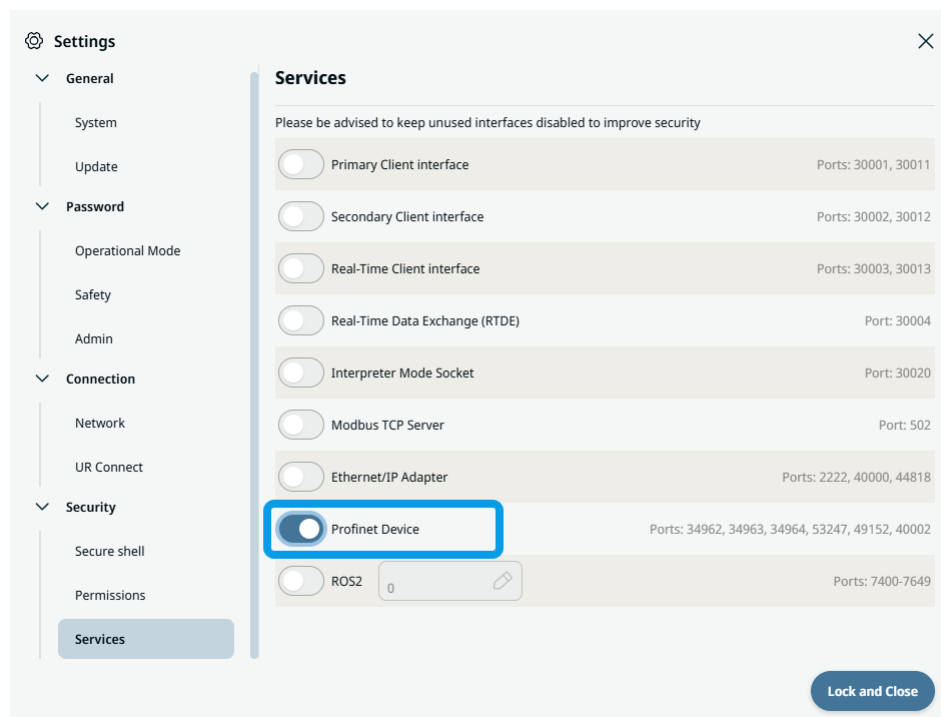


## 10.4.9. Veilig thuis

### Beschrijving


**Veilige uitgangspositie** is een PolyScope X-functie waarmee gebruikers een veiligheidsgelateerde uitgang kunnen definiëren die wordt geactiveerd wanneer de robot de geconfigureerde veilige uitgangspositie bereikt. De gebruiker kiest **Uitgangspositie** in de vervolkeuzelijst met beschikbare Smart Skill-posities, die kunnen worden toegewezen als referentie voor de veilige uitgangspositie.

## Toegang tot Veilige uitgangspositie


1. Tik op het tabblad **Toepassing** en kies **Veiligheidstoepassing**. Kies **Veilige uitgangspositie** in het paneel links.

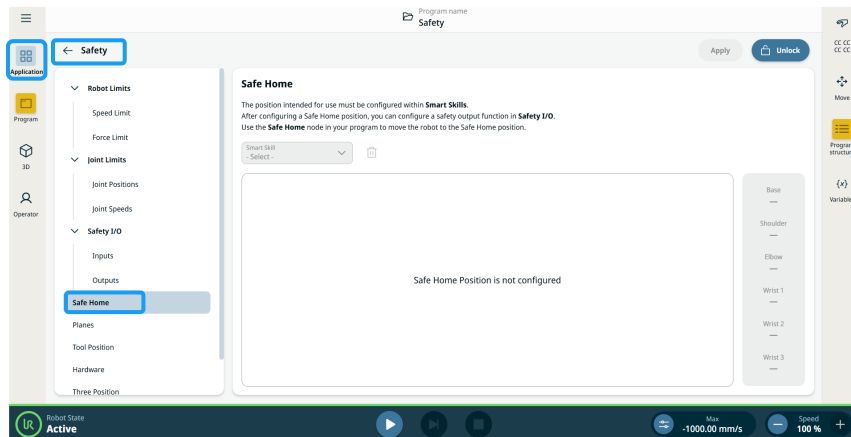


2. Ga naar **Smart Skills-toepassing** en kies **Uitgangspositie** om de robotpositie te configureren.
3. Tik op de knop **Positie bewerken** en de 3D-weergave van de robotarm wordt weergegeven.

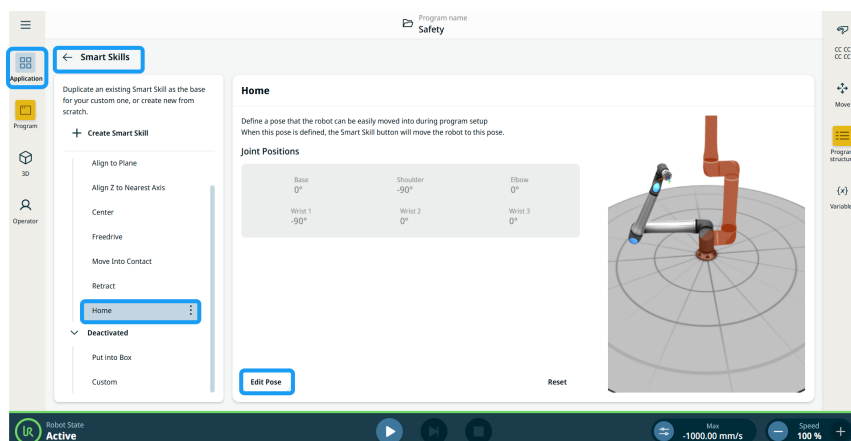

4. Jog de robot naar de gewenste positie met behulp van de knoppen **Bewegen**, **Gewrichten** en **TCP**.
5. Druk lang op de gele knop **Hierheen bewegen** totdat de voorbeeldafbeelding op de nieuwe configuratie is gepositioneerd.
6. Tik op **Opslaan** om de configuratie af te ronden.

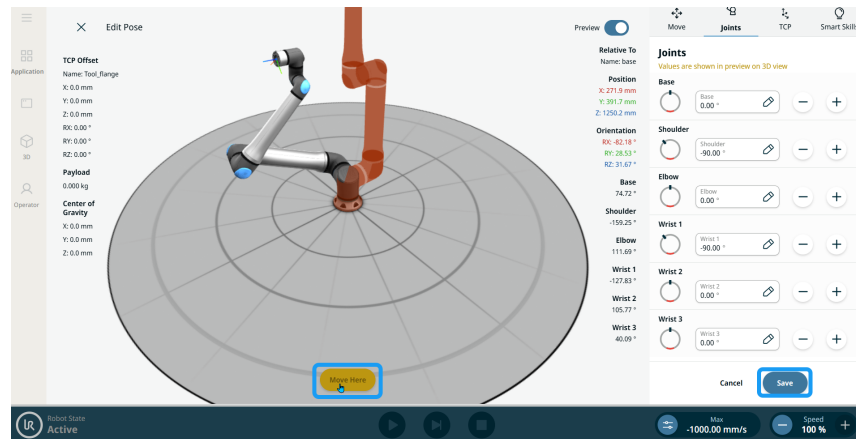

7. Ga terug naar **Veilige uitgangspositie** in **Veiligheidstoepassing** en voer het veiligheids wachtwoord in.
8. Selecteer **Uitgangspositie** in het veld **Smart Skill**, waarna de geconfigureerde robotpositie verschijnt in het hoofdscherm.
9. Tik op **Toepassen** en kies **Toepassen en opnieuw opstarten**. Tik vervolgens op **Configuratie bevestigen**.

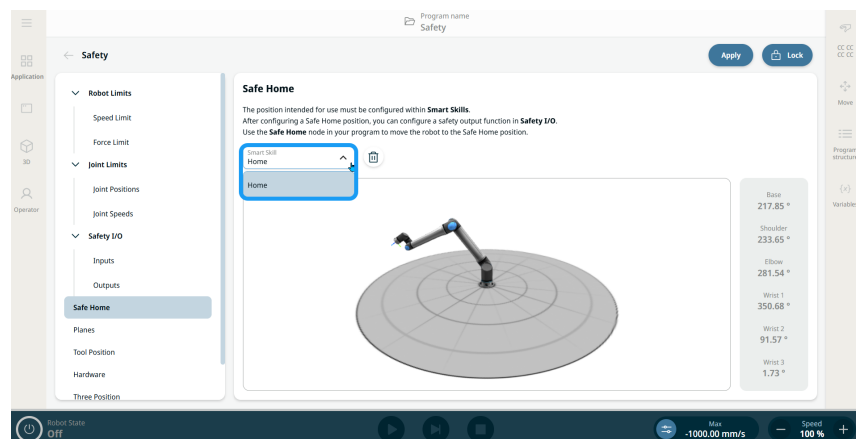




## MEDEDELING

Als de Position Smart Skill is geselecteerd als positie-referentie voor Safe Home:

- Het berichtvenster wordt weergegeven op de pagina Position Smart Skill.
- De Position Smart Skill die is geconfigureerd als Safe Home kan niet worden hernoemd, bewerkt of verwijderd, tenzij de gebruiker de Safe Home verwijdert of de toewijzing ervan ongedaan maakt in het **Safety > Safe Home** scherm.


10. In het scherm Smart Skills kan de uitgangspositie worden gedupliceerd en bewerkt. Alle nieuw gecreëerde Smart Skills zijn ook beschikbaar om te configureren als veilige uitgangspositie.

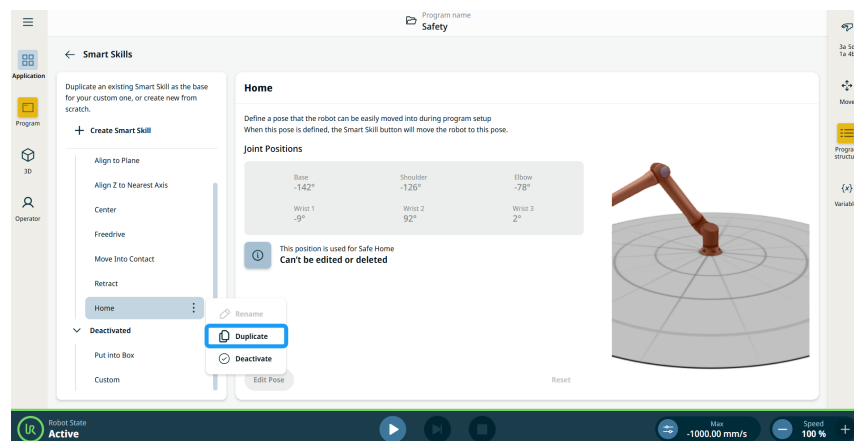


## Functie Veilige uitgangspositie in uitgangen

Als de **uitgangspositie** is toegewezen aan een Smart Skill-positie in **Veiligheid**, bevat de vervolgkeuzelijst voor Veiligheidsuitgangsfunctie **Veilige uitgangspositie** als nieuwe functietoewijzing.

Kies **Veilige uitgangspositie** in de **Functie**-velden in **Uitgangen** van Veiligheids-I/O.

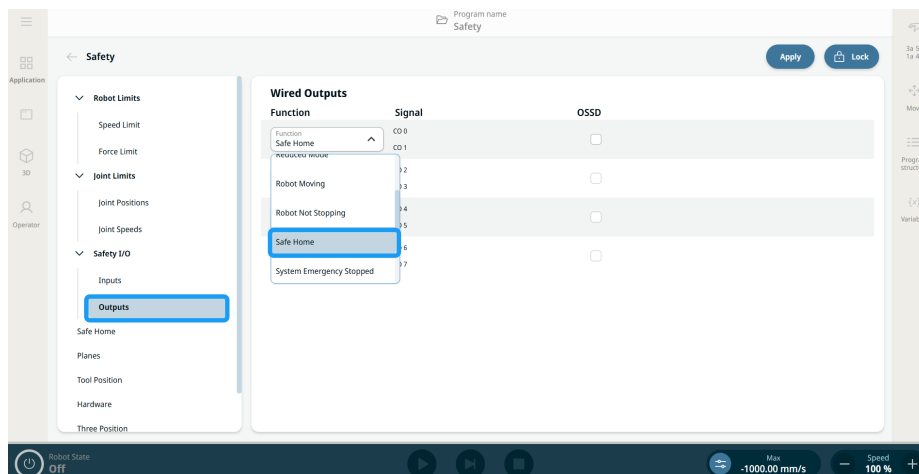


**Veilige uitgangspositie** is te vinden in de functietoewijzingstabel in de overzichtsdialog **Bevestiging van toegepaste veiligheidsinstellingen**.

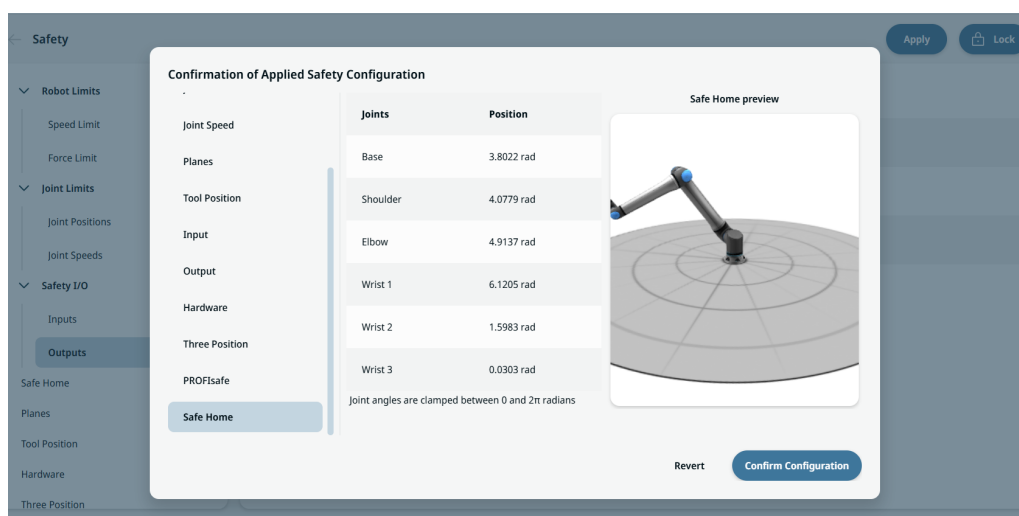


## Veilige uitgangspositie als programmanode

De programmanode **Veilige uitgangspositie** is te vinden onder de categorie **Bewegen-nodes** binnen de **Commandonodes**. Deze node wordt gebruikt om de robot opdracht te geven naar zijn vooraf gedefinieerde veilige uitgangspositie te bewegen, zoals geconfigureerd in de instellingen van de veiligheidstoepassing voor veilige uitgangspositie.

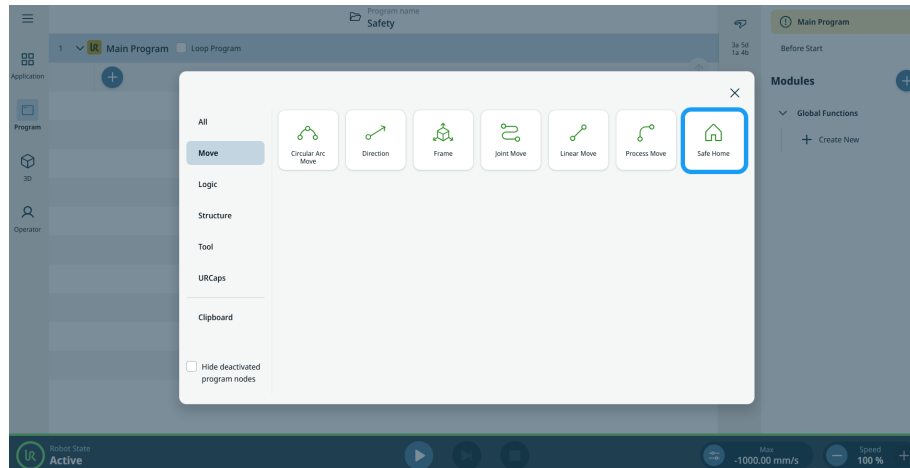

### MEDEDELING


Als de node wordt toegevoegd zonder een veilige uitgangspositie geconfigureerd in Veiligheid, wordt de node geel gemarkeerd.

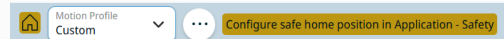

De commandonode Veilige uitgangspositie heeft opties voor bewegingsprofielen en



andere geavanceerde instellingen wanneer op het ellipsipictogram wordt getikt.

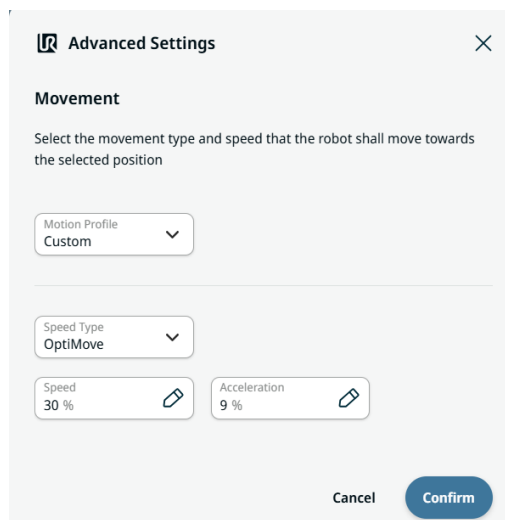

**Geavanceerde instellingen**

Gebruikers kunnen bewegingsprofielen maken in de Geavanceerde instellingen met behulp van de twee tabbladen en twee velden:

- Bewegingsprofiel
- Snelheidstype
- Tabblad Snelheid
- Tabblad Versnelling

**Bewegingsprofiel** is een functie waarmee gebruikers voorgedefinieerde bewegingsprofielen kunnen instellen in bewegingsnodes: Gewrichtsbeweging, Lineaire beweging, Cirkelboogbeweging, Procesbeweging en Richting. Met een **aangepast** bewegingsprofiel kunnen gebruikers bewegingsgegevens definiëren in de bewegingsnode.

In het veld **Snelheidstype** is **OptiMove** de standaardoptie. Kies de **Classic** beweging als u snelheid en versnelling in graden per seconde of mm per seconde wilt invoeren. OptiMove-instellingen worden in procenten opgegeven om het gebruik en de instelling te vereenvoudigen.

Gebruikers kunnen het percentage van de gewenste snelheid configureren op het tabblad **Snelheid**, waarmee de gewenste bewegingssnelheid wordt ingesteld als een percentage van de maximale snelheid van de robot.

Gebruikers kunnen het percentage van de gewenste acceleratie configureren op het tabblad **Acceleratie**, dat limieten instelt voor het doelkoppel tijdens acceleratie en deceleratie als een percentage van het maximale vermogen van de robot.


## 10.4.10. Gereedschapsrichting

**Beschrijving**

Via het scherm Tool Direction kunt u een veiligheidsfunctie configureren die de hoek beperkt waarin het gereedschap mag wijzen. U ziet de limiet voor de gereedschapsrichting, die is toegevoegd aan de veiligheidsinstellingen. De grens wordt bepaald door een kegel met een vaste oriëntatie ten opzichte van het basisreferentiekader van de robotarm. Terwijl de robotarm beweegt, wordt de richting van het gereedschap beperkt, zodat deze binnen de gedefinieerde kegel blijft.

**MEDEDELING**

De beperkingen kunnen worden uitgeschakeld of zo worden geconfigureerd dat ze van toepassing zijn in de verminderde modus, de modus Normaal of beide.

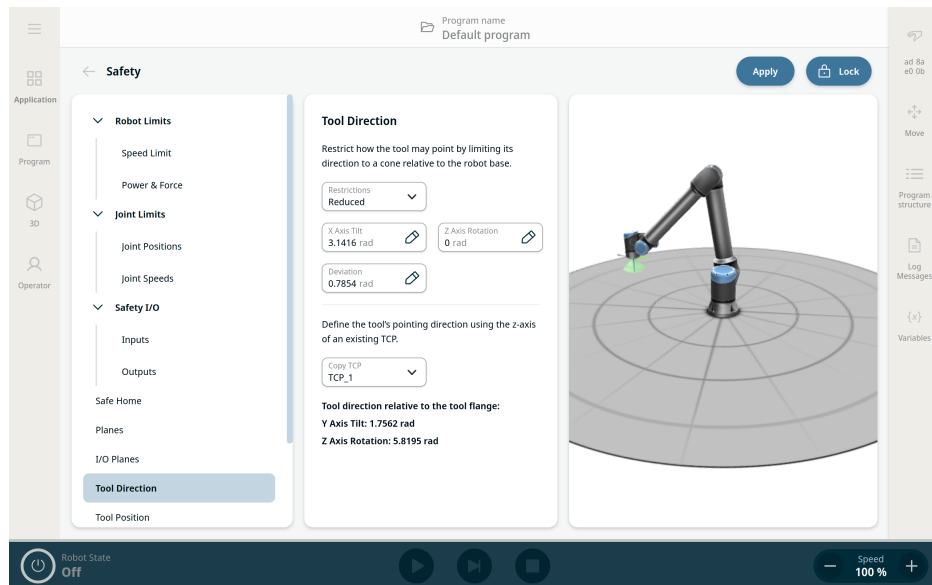**MEDEDELING**

Met de functie Tool Direction kunt u de veiligheid van een toepassing vergroten wanneer u een gereedschap gebruikt dat schade of letsel kan veroorzaken als het in een bepaalde richting is gericht.



**Limieteigenschappen**

De limiet voor Gereedschapsrichting heeft drie configureerbare eigenschappen:

1. **Kanteling:** U kunt de openingshoek van de kegel definiëren vanuit de centrale (referentie)richting.
2. **Rotatie:** U kunt bepalen hoe de kegel rond zijn centrale as draait.
3. **Afwijking:** U kunt de maximale hoekafwijking definiëren die is toegestaan tussen de gewenste richting en elke richting binnen de kegel.

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limiet gereedschapsrichting uitgeschakeld        | Nooit actief                                                                                           |
| Normale Limiet gereedschapsrichting              | Alleen actief wanneer het veiligheidssysteem in <b>Normale modus</b> staat                             |
| Verminderde Limiet gereedschapsrichting          | Alleen actief wanneer het veiligheidssysteem in <b>Verminderde modus</b> staat                         |
| Beide (normale en beperkte gereedschapsrichting) | Actief wanneer het veiligheidssysteem in de <b>Normale modus</b> of in de <b>Verminderde modus</b> is. |

De richtingsaanwijzing van het gereedschap wordt gespecificeerd met behulp van een TCP die is geconfigureerd in de **End Effectors-toepassing** instellingen.

**Gereedschapseigenschappen**


Het gereedschap wijst standaard in dezelfde richting als de Z-as van de uitgangsf lens van het gereedschap. U kunt dit aanpassen door twee hoeken op te geven:

- **Kantelhoek:** Hoeveel de Z-as van de uitgangsf lens gekanteld moet worden naar de X-as van de uitgangsf lens.
- **Rotatie Z-as:** Hoeveel de gekantelde Z-as moet draaien rond de oorspronkelijke Z-as van de uitgangsf lens.


U kunt ook de Z-as van een bestaande TCP kopiëren door die TCP te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

## Toegang tot Tool Richting

1. Tik op het tabblad '-toepassingen' en selecteer '-veiligheidstoepassing'. Selecteer in het linkerpaneel **Richting**.

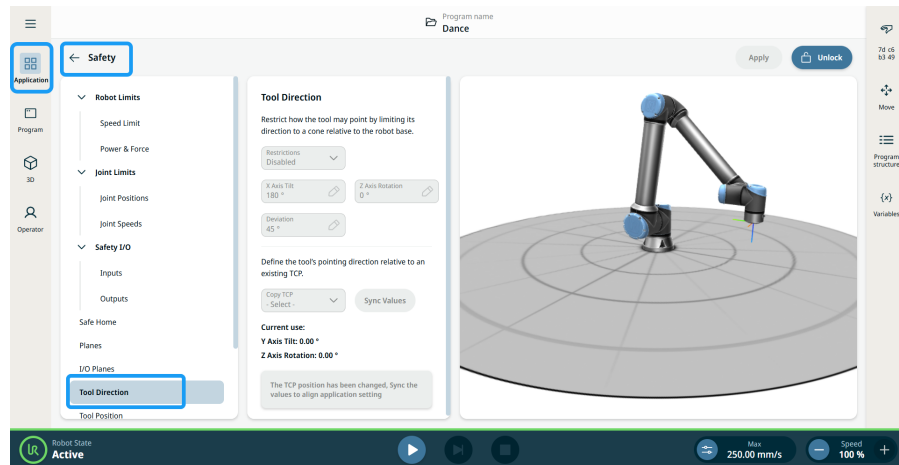

2. **Ontgrendel** en voer het veiligheidswachtwoord in.
3. Wanneer u het veld **Beperkingen** inschakelt, worden de andere velden beschikbaar. Er verschijnt een groene kegel in de TCP, die de richting van het gereedschap aangeeft.

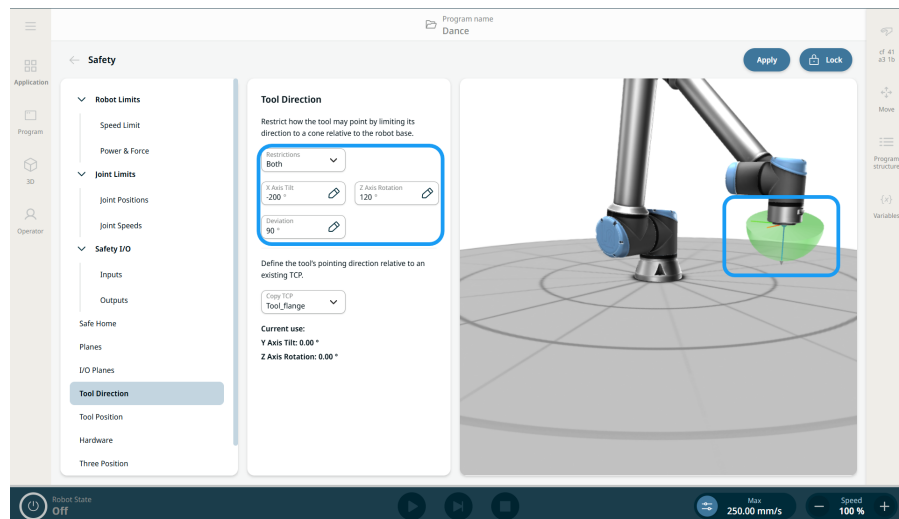

4. Tik op de **Toepassen** knop.
5. U kunt **Gereedschapsrichting** zien in de functietoewijzingstabel in het **Bevestiging van toegepaste veiligheidsconfiguratie** overzichtsdialogvenster.





# 11. Beoordeling van cyberbeveiligingsbedreigingen

## Beschrijving

Dit hoofdstuk bevat informatie om u te helpen de robot te versterken tegen potentiële cyberbeveiligingsbedreigingen. Het schetst vereisten voor het aanpakken van cyberbeveiligingsbedreigingen en biedt richtlijnen voor het versterken van de beveiliging.

## 11.1. Algemene cyberbeveiliging

### Beschrijving

Het verbinden van een Universal Robots-robot met een netwerk kan cyberbeveiligingsrisico's met zich meebrengen. Deze risico's kunnen worden beperkt door het inzetten van gekwalificeerd personeel en het implementeren van specifieke maatregelen voor het beschermen van de cyberbeveiliging van de robot. Het implementeren van cyberbeveiligingsmaatregelen vereist het uitvoeren van een beoordeling van cyberbeveiligingsdreigingen. Het doel is:

- Bedreigingen te identificeren
- Vertrouwde zones en circuits te definiëren
- Geef de vereisten van elk onderdeel aan in de toepassing



#### WAARSCHUWING

Het niet uitvoeren van een risicobeoordeling van de cyberbeveiliging kan de robot in gevaar brengen.

- De integrator of bekwaam, gekwalificeerd personeel moet een risicobeoordeling van de cyberbeveiliging uitvoeren.



#### MEDEDELING

Alleen bekwaam, gekwalificeerd personeel is verantwoordelijk voor het bepalen van de noodzaak van specifieke cyberbeveiligingsmaatregelen en voor het verstrekken van de vereiste cyberbeveiligingsmaatregelen.

## 11.2. Vereisten voor cyberbeveiliging

**Beschrijving** Om uw netwerk te configureren en uw robot te beveiligen, moet u de dreigingsmaatregelen voor cyberbeveiliging implementeren. Volg alle vereisten voordat u begint met het configureren van uw netwerk en controleer vervolgens of de robotinstallatie veilig is.

- Cyberbeveiliging**
- Bedienend personeel moet een goed begrip hebben van de algemene principes van cyberveiligheid en geavanceerde technologieën zoals die in de UR-robot worden gebruikt.
  - Fysieke beveiligingsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd om alleen toegang tot de robot door bevoegd personeel toe te staan.
  - Er moet een adequate controle zijn van alle toegangspunten. Bijvoorbeeld: sloten op deuren, badgesystemen, fysieke toegangscontrole in het algemeen.

**WAARSCHUWING**

Verbinden van de robot met een netwerk dat niet goed is beveiligd, kan beveiligings- en veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

- Verbind uw robot alleen met een vertrouwd en goed beveiligd netwerk.

**Vereisten voor netwerkconfiguratie**

- Alleen vertrouwde apparaten mogen met het lokale netwerk worden verbonden.
- Er mogen geen inkomende verbindingen zijn van aangrenzende netwerken naar de robot.
- Uitgaande verbindingen van de robot moeten worden beperkt om de kleinste relevante set van specifieke poorten, protocollen en adressen toe te staan.
- Alleen URCaps en magische scripts van vertrouwde partners kunnen worden gebruikt en alleen na verificatie van hun authenticiteit en integriteit

**Instelvereisten voor de robotbeveiliging**

- Wijzig het standaardwachtwoord in een nieuw, sterk wachtwoord.
- Schakel de "Magische bestanden" uit wanneer deze niet actief worden gebruikt (PolyScope 5).
- Schakel SSH-toegang uit wanneer dit niet nodig is. Geef de voorkeur aan verificatie op basis van sleutels boven verificatie op basis van wachtwoorden
- Stel de robotfirewall in op de meest beperkende nog bruikbare instellingen en schakel alle ongebruikte interfaces en services uit, sluit poorten en beperk IP-adressen
-

## 11.3. Richtlijnen voor versterking van de cyberbeveiliging

### Beschrijving

Hoewel PolyScope vele functies bevat om de netwerkverbinding veilig te houden, kunt u de veiligheid versterken door de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Voordat u uw robot met een netwerk verbindt, moet u altijd het standaardwachtwoord wijzigen in een sterk wachtwoord.



#### MEDEDELING

U kunt een vergeten of verloren wachtwoord niet ophalen of opnieuw instellen.

- Bewaar alle wachtwoorden veilig.

- Gebruik de ingebouwde instellingen om netwerktoegang tot de robot zoveel mogelijk te beperken.
- Sommige communicatie-interfaces hebben geen manier om communicatie te verifiëren en te versleutelen. Dit is een veiligheidsrisico. Overweeg passende beperkende maatregelen op basis van uw beoordeling van cyberbeveiligingsbedreigingen.
- SSH-tunneling (lokale port forwarding) moet worden gebruikt voor toegang tot robotinterfaces vanaf andere apparaten als de verbinding de grens van de vertrouwenszone overschrijdt.
- Verwijder gevoelige gegevens van de robot voordat deze buiten gebruik wordt gesteld. Let vooral op de URCaps en de gegevens in de programmamap.
  - Wis of vernietig de SD-kaart veilig om ervoor te zorgen dat zeer gevoelige gegevens veilig worden verwijderd.

# 12. Communicatienetwerken

---

## Veldbus


U kunt de veldbusopties gebruiken om de familie van industriële computernetwerkprotocollen te definiëren en te configureren die worden gebruikt voor realtime gedistribueerde besturing die door PolyScope wordt geaccepteerd:

- MODBUS
  - Ethernet/IP
  - Profinet
  - PROFIsafe
  - UR Connect
-

## 12.1. MODBUS

### Beschrijving


Hier kunnen de MODBUS client (master) signalen worden ingesteld. Verbindingen met MODBUS-SERVERS (of -slaves) op gespecificeerde IP-adressen kunnen worden gemaakt met ingangs-/uitgangssignalen (registers of digitaal). Elk signaal heeft een unieke naam, zodat het in programma 's kan worden gebruikt.

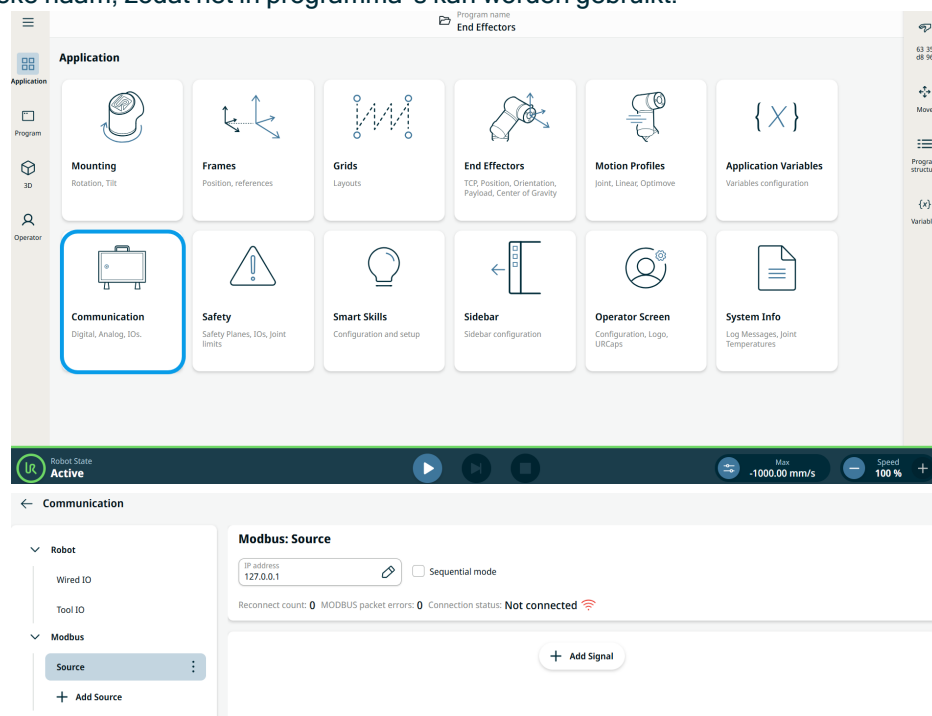



## Signaal toevoegen

U kunt een signaalnaam aanpassen bij het toevoegen van een signaal. Selecteer het signaaltype, de signaalrichting en geef frequentie, time-out en andere geavanceerde instellingen op. Signaal kan één adres of meerdere gebruiken.

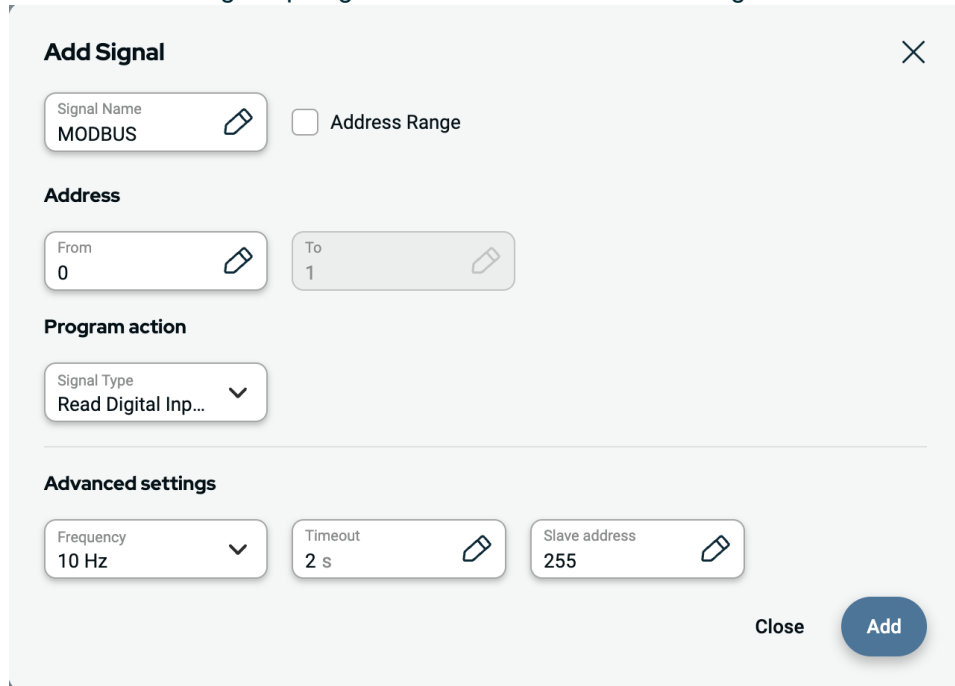


The 'Add Signal' dialog box contains the following fields and options:

- Signal Name:** A text field with 'MODBUS' entered and an edit icon.
- Address Range:** An unchecked checkbox.
- Address:**
  - From:** A text field with '0' entered and an edit icon.
  - To:** A text field with '1' entered and an edit icon.
- Program action:** A dropdown menu showing 'Signal Type' and 'Read Digital Inp...'.
- Advanced settings:**
  - Frequency:** A dropdown menu showing '10 Hz'.
  - Timeout:** A text field with '2 s' entered and an edit icon.
  - Slave address:** A text field with '255' entered and an edit icon.
- Buttons:** 'Close' and 'Add' (highlighted in blue).


## Signaalbron

Modbus-signaalbroninstellingen kunnen worden bewerkt en verwijderd. Tik op de knop **Configureren** om te bewerken en tik op het prullenbakpictogram om te verwijderen.

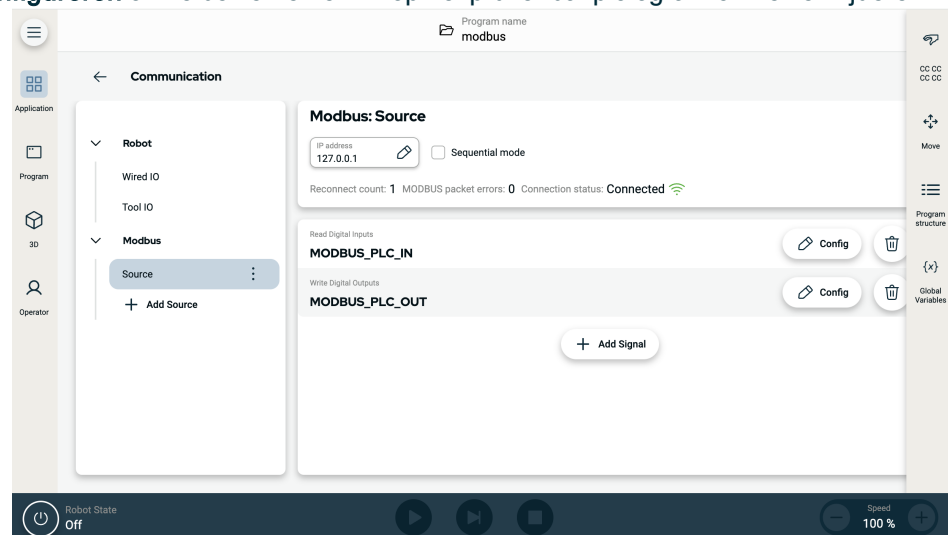


**Programmering**

Net als bij andereingangssignalen kunnen Modbus-signalen worden gemonitord. Selecteer **Signaalingang** onder **Wachttype** in het programma onder het commando **Wachten**. Kies vervolgens de Modbus-bron, het specifieke ingangssignaal en de status waarop moet worden gewacht. Adresbereiken kunnen niet worden gebruikt in logische expressies. Het programma kan slechts één adres gebruiken, zelfs als het deel uitmaakt van een bereik.

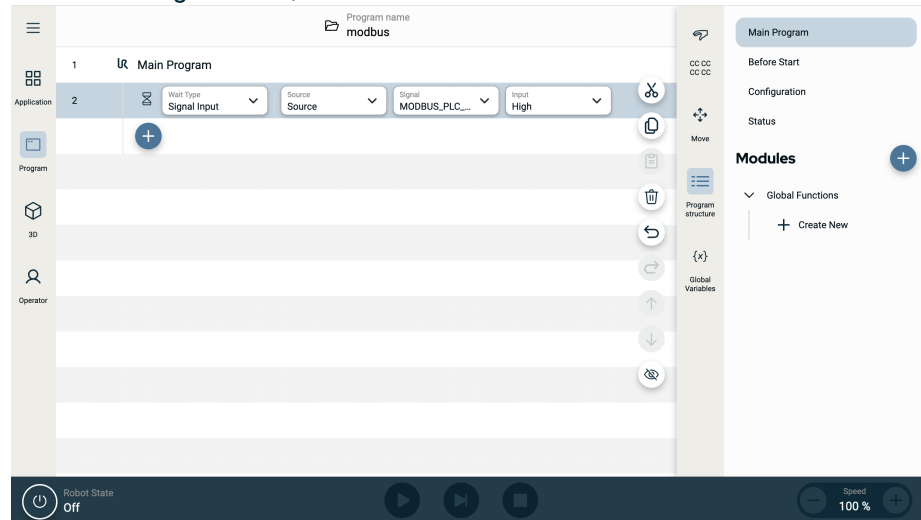

Een Modbus-uitgangssignaal kan worden geconfigureerd met het commando **Instellen**.

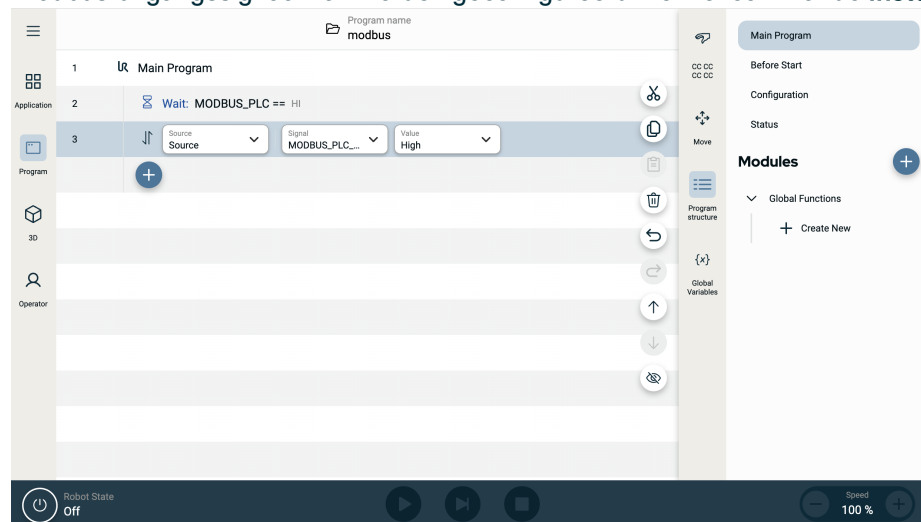

## 12.2. Ethernet/IP


**Beschrijving**

EtherNet/IP is een netwerkprotocol waarmee de robot kan worden verbonden met een industrieel EtherNet/IP-scanapparaat. Als de verbinding is gemaakt, kunt u de actie selecteren die moet worden uitgevoerd wanneer een programma de verbinding met het EtherNet/IP-scanapparaat verliest.

**Ethernet/IP  
inschakelen**

Zo schakelt u de Ethernet/IP-functie in PolyScope X in.

1. Tik linksboven in het scherm op het hamburgermenu.
2. Tik op Instellingen.
3. Tik in het menu links op Services onder Beveiliging.
4. Type the admin password.
5. Tik op de knop Ethernet/IP-adaptor om de schakelaar in te schakelen.

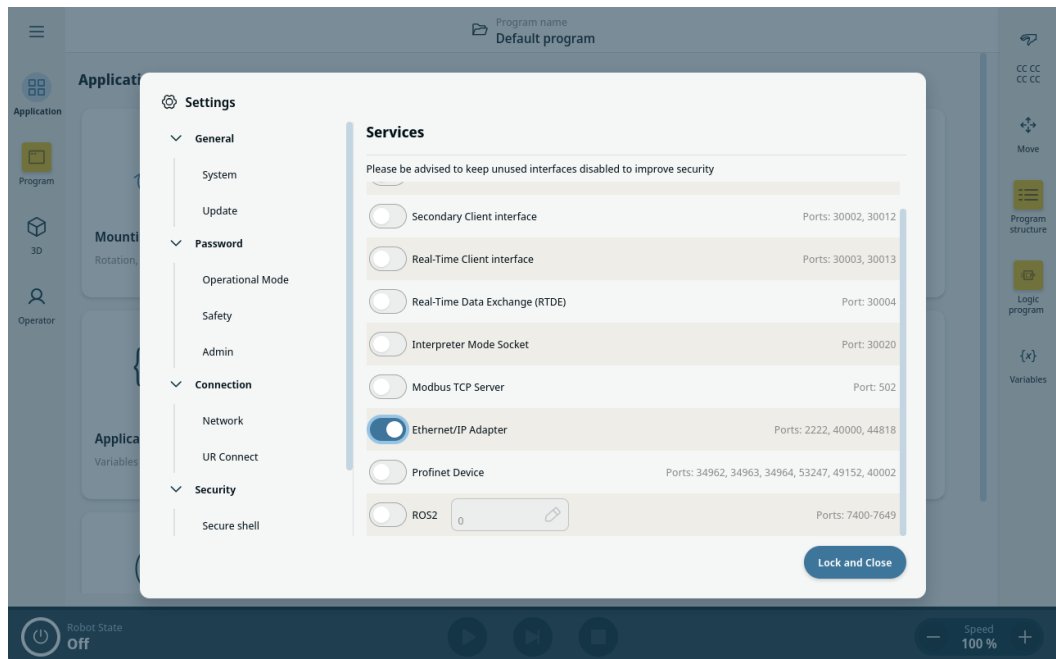

**Ethernet/IP gebruiken**


Zo vindt u de Ethernet/IP-functies in PolyScope X:

In de linkerkop van PolyScope X.

1. Tik op het pictogram Toepassing.
2. Selecteer Ethernet/IP onder Communicatie in het menu links.

Selecteer de relevante actie in de lijst:

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negeren  | PolyScope X negeert het verlies van de EtherNet/IP-verbinding en het hoofdprogramma gaat normaal verder. |
| Pauzeren | PolyScope X pauzeert het hoofdprogramma. Het programma wordt hervat vanaf de plek waar het is gestopt.   |
| Stop     | PolyScope X stopt het hoofdprogramma.                                                                    |

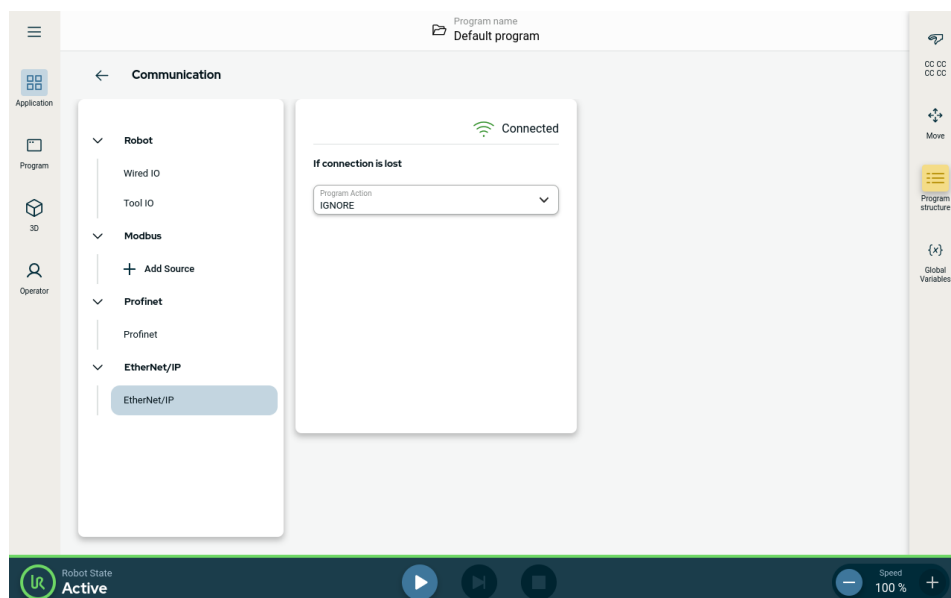

Rechtsboven in dit scherm ziet u de Ethernet/IP-status.

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbonden     | De robot is verbonden met de Ethernet/IP-scanner.                                               |
| Geen scanner  | Ethernet/IP-apparaat is actief, maar er is geen scanner verbonden met de robot via Ethernet/IP. |
| Uitgeschakeld | Ethernet/IP-apparaat is niet ingeschakeld.                                                      |

## 12.3. Profinet


**Beschrijving**

Het PROFINET-netwerkprotocol schakelt de verbinding van de robot met een industriële PROFINET-I/O-regelaar in of uit. Als de verbinding is ingeschakeld, kunt u de actie selecteren die optreedt wanneer een programma de PROFINET IO-Controller-verbinding verliest.

**PROFINET  
inschakelen**

Zo schakelt u de PROFINET-functie in PolyScope X in.

1. Tik linksboven in het scherm op het hamburgermenu en vervolgens op Instellingen.
2. Tik in het menu links op Services onder Beveiliging.
3. Type the admin password.
4. Tik op de PROFINET-knop om PROFINET in te schakelen.

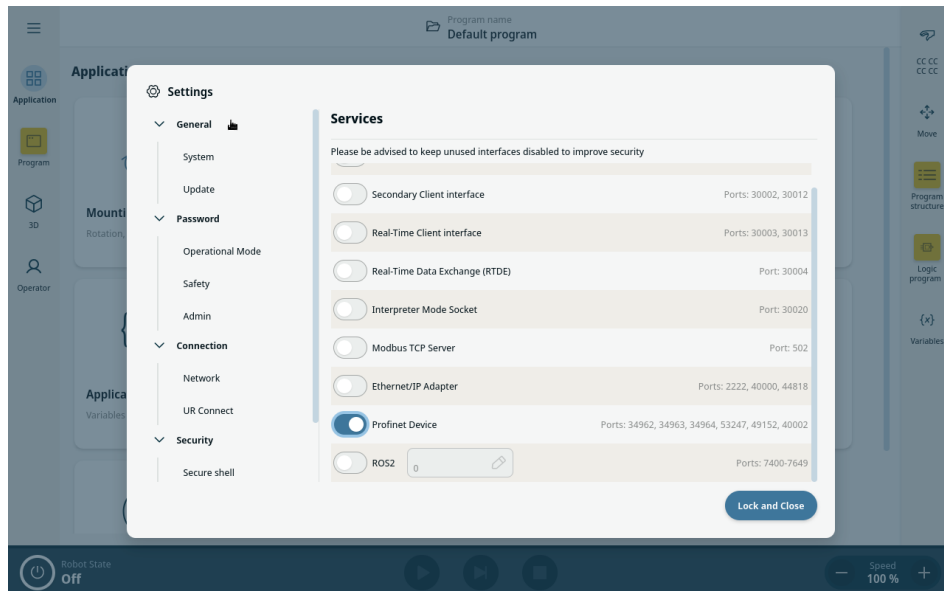

## PROFINET gebruiken


Zoek de PROFINET-functies in PolyScope X:

In de hoofdnavigatie van PolyScope X.

1. Tik op het pictogram Toepassing.
2. Selecteer PROFINET onder Communicatie in het menu links.

Selecteer de relevante actie in de lijst:

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negeren  | PolyScope X negeert het verlies van de PROFINET-verbinding en het hoofdprogramma gaat verder.          |
| Pauzeren | PolyScope X pauzeert het hoofdprogramma. Het programma wordt hervat vanaf de plek waar het is gestopt. |
| Stop     | PolyScope X stopt het hoofdprogramma.                                                                  |

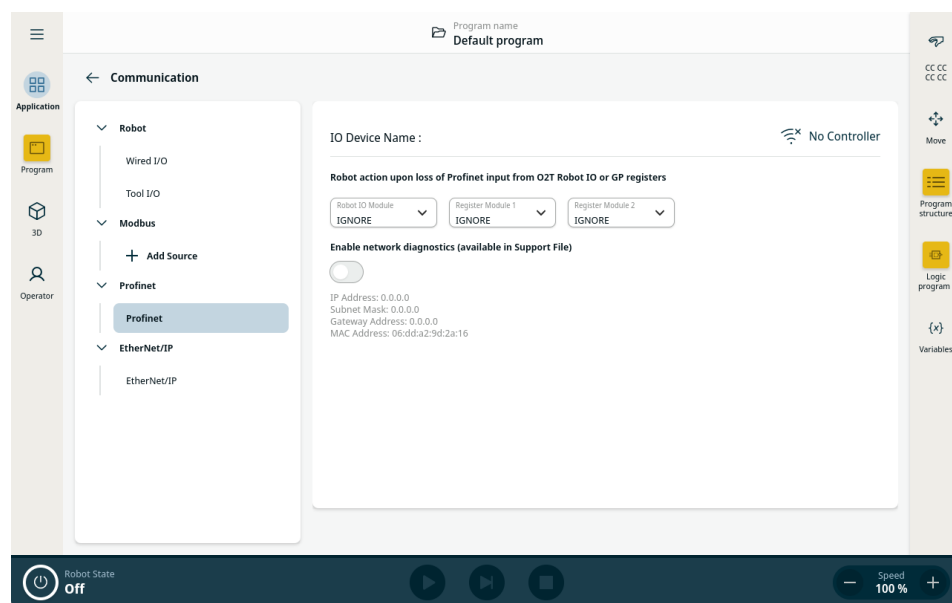

## Diagnostiek


Polyscope X heeft een optie om netwerkverkeer tussen Robot en de PROFINET I/O-controller op te nemen. Dit kan worden gebruikt voor diagnostiek in geval van verbindingsproblemen.

- Tik op de knop "Netwerkdagnostiek inschakelen" om deze optie in te schakelen.


Communicatiegegevens worden opgeslagen in een .pcap-bestand.

Het bestand wordt opgeslagen in Ondersteuningsbestand in Systeembeheer. Er kan tot 50 MB aan gegevens worden opgeslagen in de diagnostiek.

1. Ga naar de **kop, Systeembeheer** verschijnt.
2. Kies het programma waaraan u werkt.
3. Tik op het pictogram met de drie verticale stippen (kebabmenu) en kies **Exporteren**.

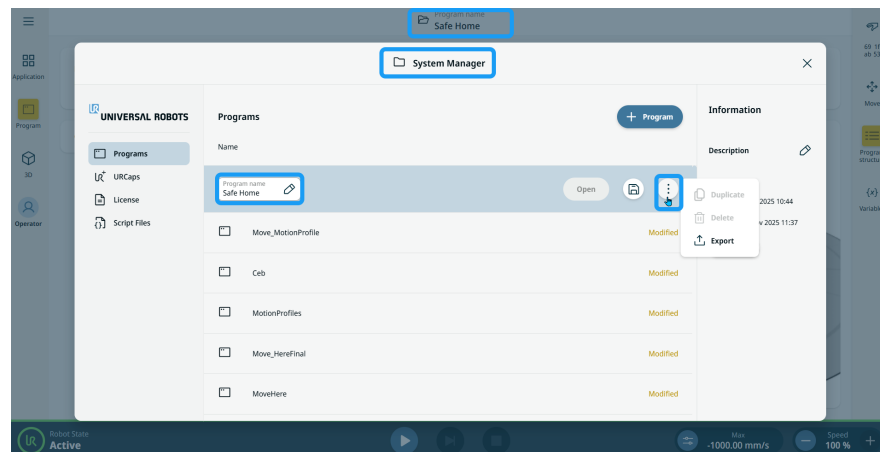

4. Kies de communicatiegegevens in het .pcap-bestand en sla op.

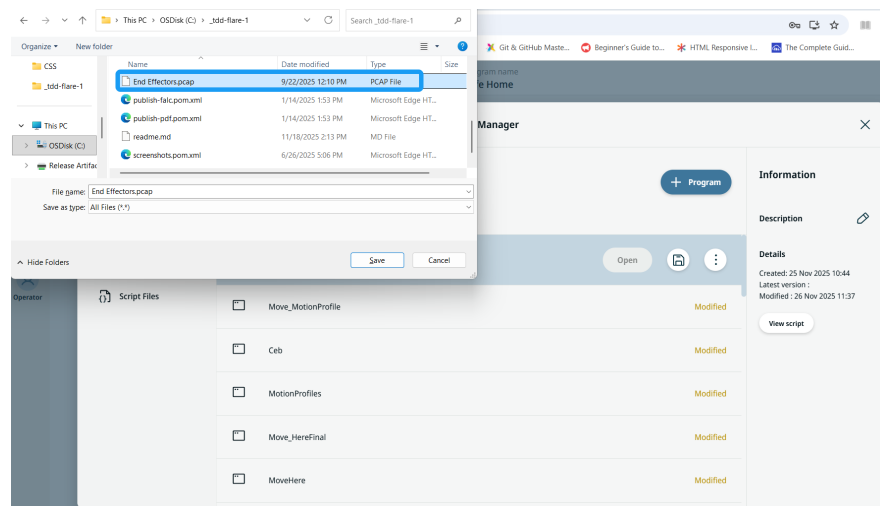

5. Er verschijnt een pop-upmelding in het hoofdscherm dat u het bestand in het programma heeft geëxporteerd.

**Status van de ethernetpoort**

Als PROFINET-apparaat is ingeschakeld, wordt er een nieuwe virtuele ethernetpoort aangemaakt.

De configuratie van de virtuele ethernetpoort toont informatie over het huidige geconfigureerde IP-adres, subnetmasker, gateway en MAC-adres.

Deze virtuele poort wijkt af van de poort die is geconfigureerd in Robotnetwerkinstellingen.

---




## 12.4. UR Connect


### PolyScope X verbinden met myUR Cloud

U moet uw PolyScope X-software verbinden met de myUR Cloud-service.  
U vindt de pincode op uw myUR-account.

1. Ga naar Instellingen.
2. Ga naar UR Connect.
3. Druk op de knop "Verbinden" op de hoofdpagina van UR Connect.
4. Voeg uw pincode toe vanuit myUR.

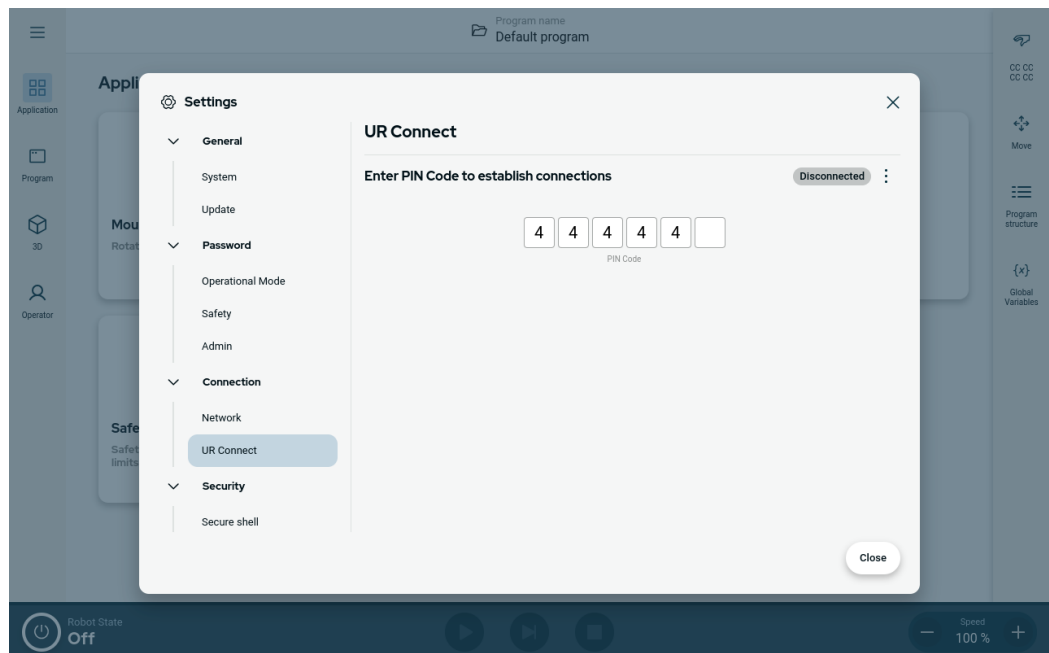


Wanneer u het groene pictogram ziet rechtsboven in het scherm, bent u verbonden met myUR Cloud.

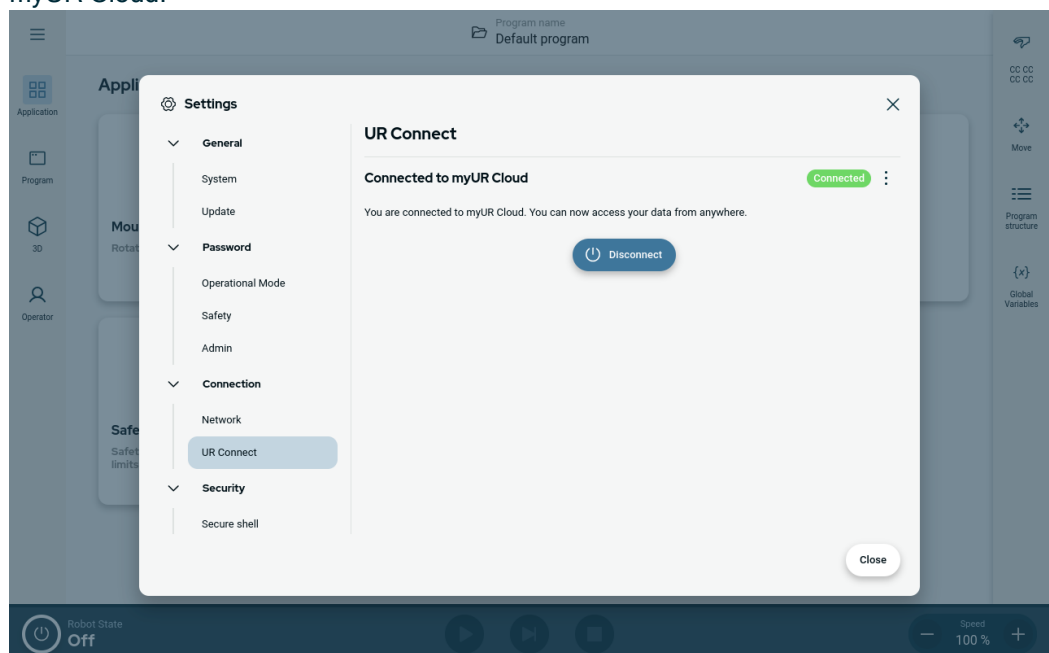

## Verbinding mislukt


Als u "Pincode onjuist" ziet, controleer dan de pincode van myUR.

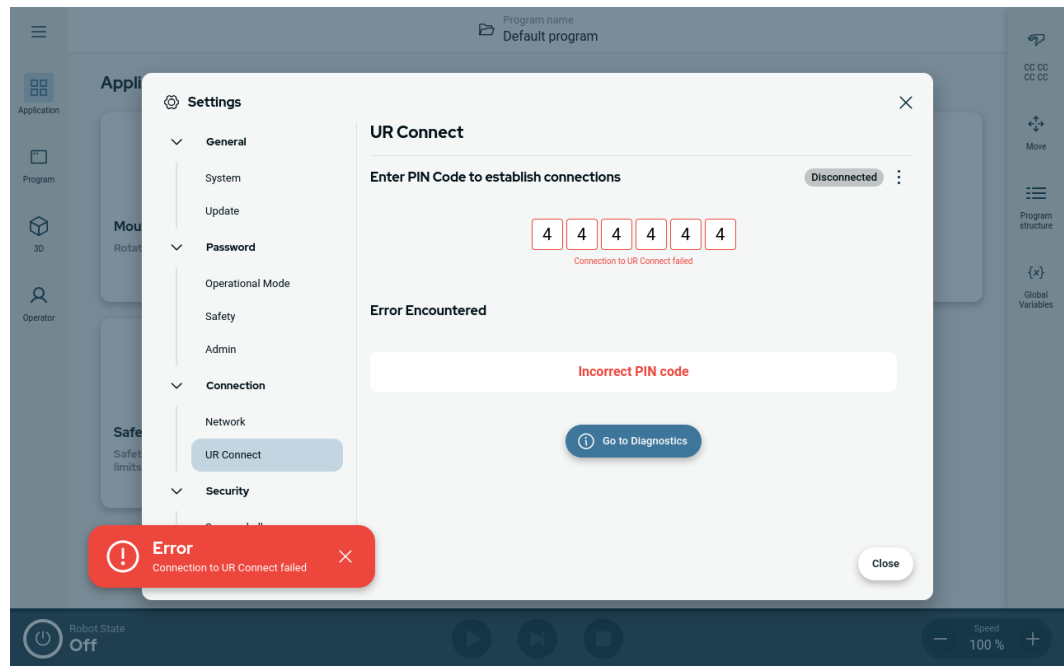

**Diagnostiek**

Als u iets onverwachts ervaart wanneer UR Connect actief is, kunt u naar Diagnostiek gaan.


1. Ga naar Instellingen.
2. Ga naar UR Connect.
3. Open het kebabmenu rechtsboven.
4. Selecteer "Diagnostiek".

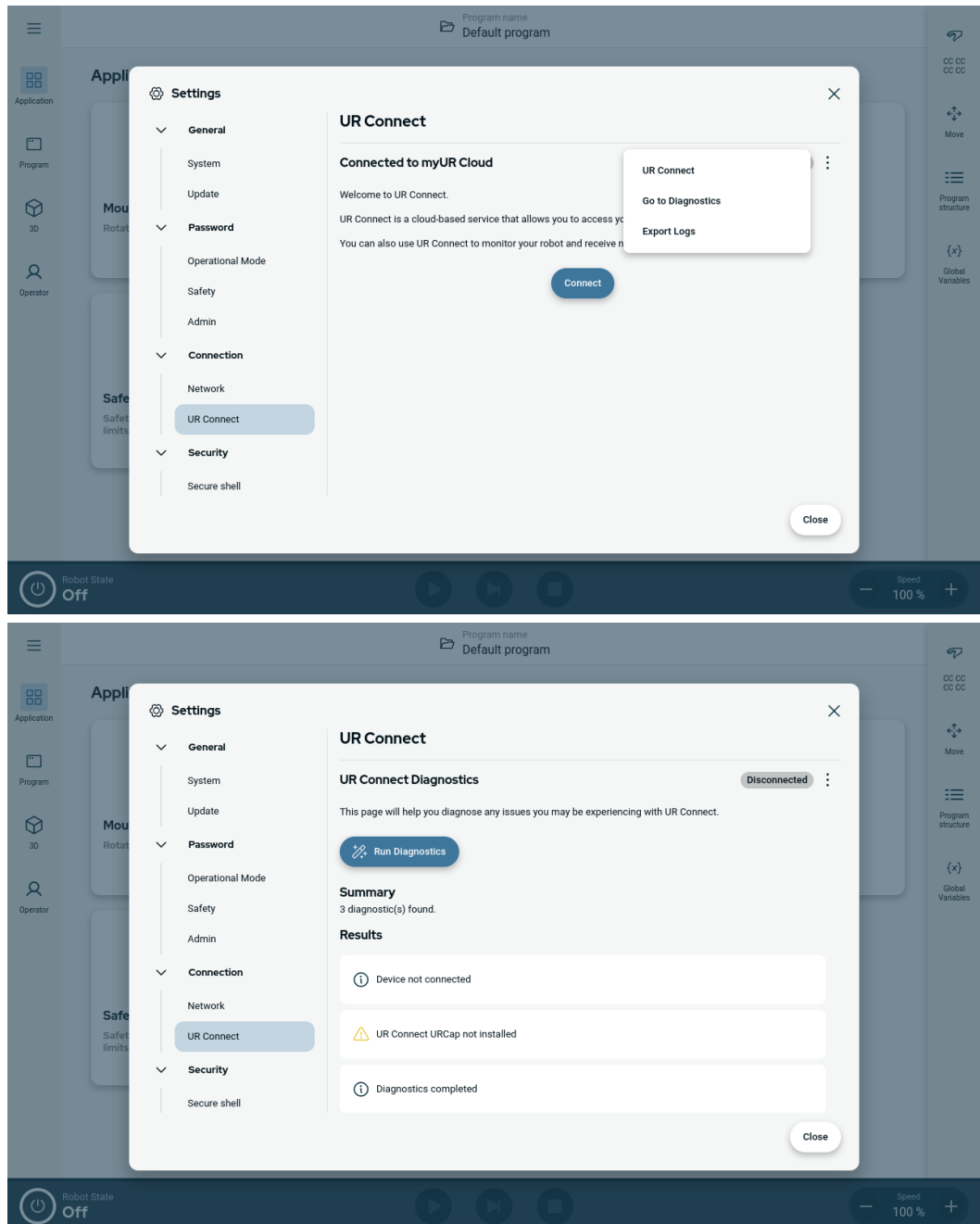

## Logs exporteren

Het is mogelijk om de UR Connect-logs te exporteren vanuit uw PolyScope X-software.

1. Ga naar Instellingen.
2. Ga naar UR Connect.
3. Open het kebabmenu rechtsboven.
4. Selecteer "Logs exporteren"
5. Selecteer "Exporteren naar myUR" of "Exporteren naar USB".

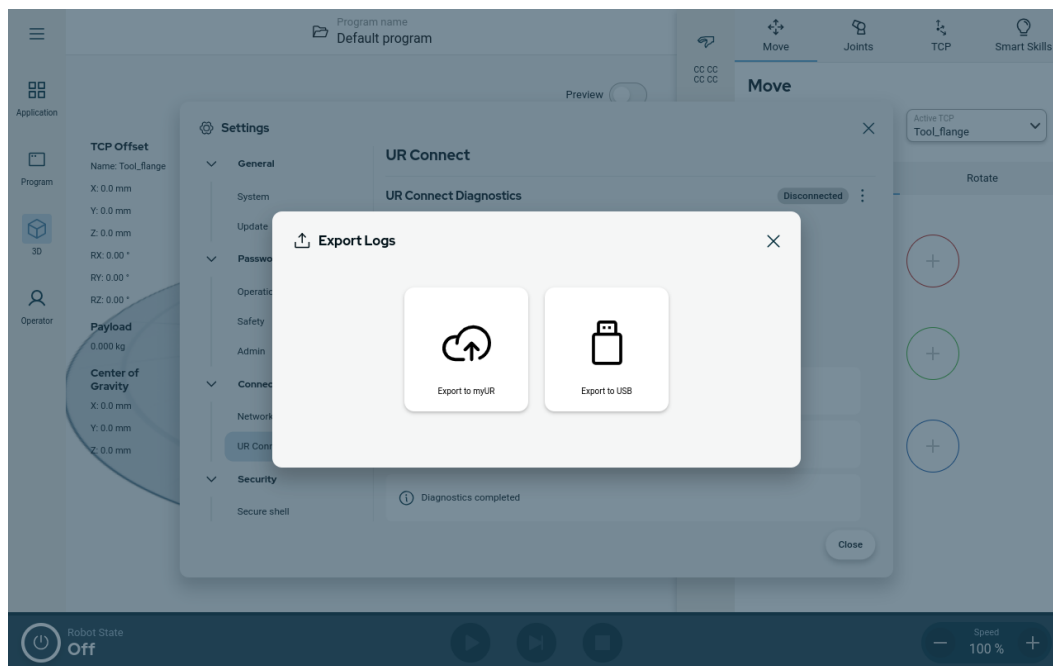

# 13. Risicobeoordeling

## Beschrijving

De risicobeoordeling is een vereiste die voor de toepassing moet worden uitgevoerd. De risicobeoordeling van de toepassing is de verantwoordelijkheid van de integrator. De gebruiker kan ook de integrator zijn.

De robot is een gedeeltelijk voltooide machine en als zodanig is de veiligheid van de robottoepassing afhankelijk is van het gereedschap/de eindeffector, obstakels en andere machines. De partij die de integratie uitvoert moet gebruik maken van ISO 12100 en ISO 10218-2 voor het uitvoeren van de risicobeoordeling. Technische specificatie ISO/TS 15066 kan aanvullende richtlijnen bieden voor collaboratieve toepassingen. De risicobeoordeling dient alle taken tijdens de levensduur van de robottoepassing in overweging te nemen, inclusief maar niet beperkt tot:

- Programmeren van de robot tijdens de instelling en ontwikkeling van de robottoepassing
- Problemen oplossen en onderhoud
- Normale werking van de robottoepassing

Een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd **voordat** de robottoepassing voor het eerst wordt ingeschakeld. De risicobeoordeling is een iteratief proces. Controleer na het fysiek installeren van de robot de verbindingen en voltooi vervolgens de integratie. Een onderdeel van de risicobeoordeling is het bepalen van de juiste instellingen voor de veiligheidsconfiguratie en het vaststellen van de noodzaak voor extra noodstoppen en/of andere beschermingsmaatregelen voor de specifieke robottoepassing.

## Instelling veiligheidsconfiguratie

Vaststellen wat de juiste instellingen voor de veiligheidsconfiguratie zijn is een bijzonder belangrijk deel van de ontwikkeling van robottoepassingen. Onbevoegde toegang tot de veiligheidsconfiguratie moet worden voorkomen door wachtwoordbeveiliging in te schakelen en in te stellen.



### WAARSCHUWING

Het niet instellen van wachtwoordbeveiliging kan leiden tot letsel of overlijden als gevolg van doelbewuste of onbedoelde wijzigingen in de configuratie-instellingen.

- Stel altijd wachtwoordbeveiliging in.
- Stel een programma in voor het beheren van wachtwoorden, zodat alleen personen toegang hebben die het effect van wijzigingen begrijpen.

Sommige veiligheidsfuncties zijn speciaal ontworpen voor samenwerkende robottoepassingen. Deze zijn configureerbaar via de instellingen van de veiligheidsconfiguratie. Ze worden gebruikt om risico's aan te pakken die zijn geïdentificeerd in de risicobeoordeling van de toepassing.

De volgende begrenzen de robot en kunnen als zodanig de energieoverdracht naar een persoon door de robotarm, de eindeffector en het werkstuk beïnvloeden.

- **Kracht- en vermogensbeperking:** Gebruikt om klemkracht en druk te beperken die door de robot worden uitgeoefend in de bewegingsrichting in het geval van botsingen tussen de robot en de operator.
- **Momentumbeperking:** Gebruikt om hoge kortstondige energie en stootkrachten te beperken in geval van botsingen tussen robot en operator door de snelheid van de robot te verminderen.
- **Snelheidsbegrenzing:** wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de snelheid lager is dan de geconfigureerde limiet.

De volgende oriëntatie-instellingen worden gebruikt om bewegingen te voorkomen en blootstelling van personen aan scherpe randen en uitsteeksels te verminderen.

- **Positiebegrenzing van gewrichten, elleboog en gereedschap/eindeffector:** wordt gebruikt om risico's in verband met bepaalde lichaamsdelen te verminderen door beweging richting hoofd en nek te vermijden.
- **Beperking gereedschaps-/eindeffectororiëntatie:** wordt gebruikt om risico's gerelateerd aan bepaalde gebieden en functies van het gereedschap/de eindeffector en het werkstuk te beperken. Vermijd dat scherpe randen naar de bediener zijn gericht door ze naar binnen richting de robot te draaien.

**Risico's van de stopprestaties**

Sommige veiligheidsfuncties zijn met opzet ontworpen voor elke robottoepassing. Deze functies zijn configureerbaar via de instellingen van de veiligheidsconfiguratie. Ze worden gebruikt om risico's aan te pakken die verband houden met de stopprestaties van de robottoepassing.

De volgende beperken de stoptijd en stopafstand van de robot om ervoor te zorgen dat deze stopt voordat de geconfigureerde limieten worden bereikt. Beide instellingen beïnvloeden automatisch de snelheid van de robot om ervoor te zorgen dat de limiet niet wordt overschreden.

- **Stoptijdlimiet:** wordt gebruikt om de stoptijd van de robot te beperken.
- **Stopafstandslimiet:** wordt gebruikt om de stopafstand van de robot te beperken.

Als een van de bovenstaande wordt gebruikt, is er geen behoefte aan periodieke handmatige tests van de stopprestaties. Het veiligheidssysteem van de robot voert continue bewaking uit.

Als de robot is geïnstalleerd in een robottoepassing waar gevaren niet op redelijke wijze kunnen worden weggenomen of risico's niet voldoende kunnen worden beperkt door middel van ingebouwde veiligheidsfuncties (zoals bij gebruik van een gevaarlijk gereedschap/eindeffector of een gevaarlijk proces), dan zijn veiligheidsmaatregelen vereist.

**WAARSCHUWING**

Het niet uitvoeren van een risicobeoordeling van de toepassing kan gevaren vergroten.

- Voer altijd een risicobeoordeling van de toepassing uit voor voorzienbare risico's en redelijkerwijs voorzienbaar misbruik.

Voor collaboratieve toepassingen omvat de risicobeoordeling de voorzienbare risico's als gevolg van botsingen en redelijkerwijs voorzienbaar misbruik.

De risicobeoordeling moet betrekking hebben op:

- Ernst van schade/letsel
- Waarschijnlijkheid van optreden
- Mogelijkheid om de gevaarlijke situatie te vermijden

**Potentiële gevaren**

Universal Robot merkt de onderstaande potentiële significante gevaren aan als gevaren waar de integrator rekening mee moet houden. Er kunnen andere significante gevaren aanwezig zijn in een specifieke robottoepassing.

- Penetratie van de huid door scherpe randen en scherpe punten op gereedschap/eindeffector of gereedschaps-/eindeffectorconnector.
  - Penetratie van de huid door scherpe randen en punten op obstakels in de buurt.
  - Kneuzing door contact.
  - Verstuiking of botbreuk als gevolg van stoten.
  - Gevolgen voortvloeiend uit losse bouten waar de robotarm of het gereedschap/eindeffector vastzit.
  - Objecten die uit het gereedschap/de eindeffector vallen of vliegen, bijvoorbeeld als gevolg van een slechte grip of stroomonderbreking.
  - Verkeerd begrip van wat wordt geregeld door meerdere noodstopknoppen.
  - Onjuiste instelling van de parameters van de veiligheidsconfiguratie.
  - Onjuiste instellingen vanwege ongeoorloofde wijzigingen in de parameters van de veiligheidsconfiguratie.
-



## 13.1. Beknellingsgevaar



### Beschrijving

Beknellingsgevaaren kunnen worden vermeden door obstakels in deze gebieden te verwijderen, door de robot anders te plaatsen, of door een combinatie van veiligheidsvlakken en gewrichtslimieten te gebruiken om de gevaren te elimineren, door te voorkomen dat de robot dit gebied van de werkruimte in beweegt.



#### LET OP

Door de robot in bepaalde gebieden te plaatsen, kunnen beknellingsgevaaren ontstaan die tot letsel kunnen leiden.

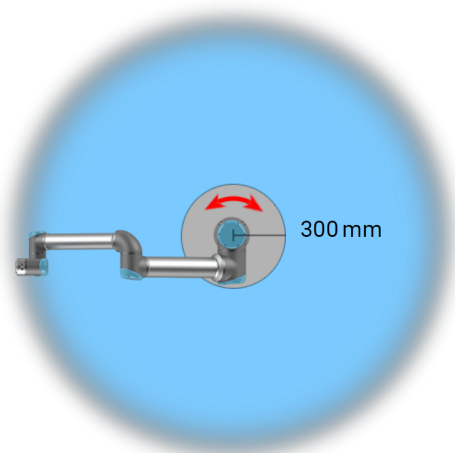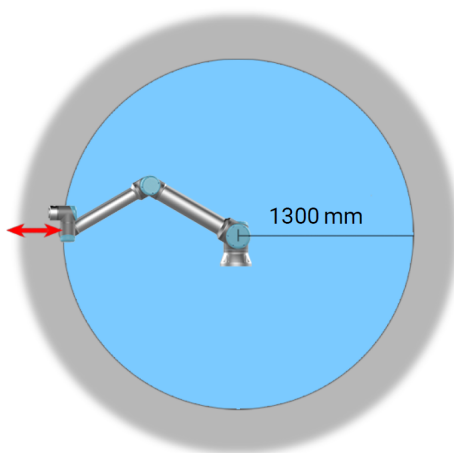

*Vanwege de fysieke afmeting van de robotarm vereisen bepaalde werkgebieden aandacht met betrekking tot gevaar op beklemming. Eén gebied (links) is gedefinieerd voor radiale bewegingen, wanneer polsgewricht 1 minimaal 1300 mm van de basis van de robot is verwijderd. Het andere gebied (rechts) bevindt zich binnen 300 mm van de basis van de robot, bij beweging in tangentiële richting.*

## 13.2. Stoptijden en stopafstanden

### Beschrijving



#### MEDEDELING

U kunt een gebruikersgedefinieerde veilige maximale stoptijd en stopafstand instellen.

Als gebruikersgedefinieerde instellingen worden gebruikt, wordt de programmasnelheid dynamisch aangepast om altijd aan de geselecteerde limieten te voldoen.

De grafische gegevens voor **Gewricht 0 (basis)**, **Gewricht 1 (schouder)** en **Gewricht 2 (elleboog)** zijn geldig voor de remafstand en de remafstand:

- Categorie 0
- Categorie 1
- Categorie 2

De test op **Gewricht 0** is uitgevoerd met behulp van een horizontale beweging, waarbij de rotatie-as loodrecht op de grond stond. Voor de test voor **Gewricht 1** en **Gewricht 2** volgde de robot een verticaal traject, waarbij de rotatie-assen parallel stonden aan de grond en de stop werd uitgevoerd terwijl de robot neerwaarts bewoog.


De Y-as is de afstand van de waar de stop wordt gestart tot de uiteindelijke positie. Het belastingszwaartepunt is op de gereedschapsflens.

De hieronder geïllustreerde waarden representeren twee scenario's, robots met een maximale belasting van 10 kg en robots met een maximale belasting van 12,5 kg.


### 13.2.1. Robotscenario 1: 10 kg.

Gewricht 0  
(BASIS)


Stopafstand in  
meters bij 33%  
van 10 kg

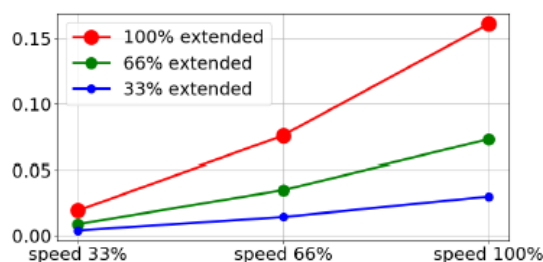

Stopafstand in  
meters bij 66%  
van 10 kg

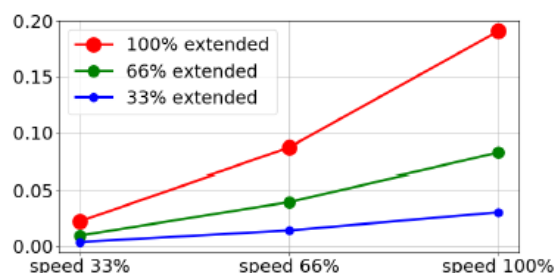


Stopafstand in  
meters bij de  
maximale  
belasting van  
10 kg

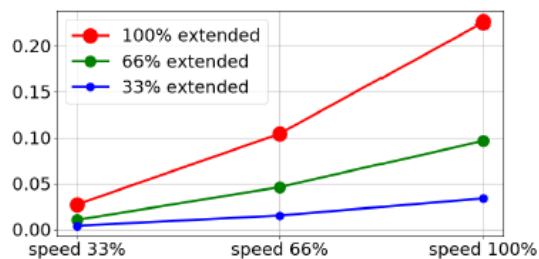


Gewricht 0  
(BASIS)


Stoptijd in  
seconden bij  
33% van 10 kg

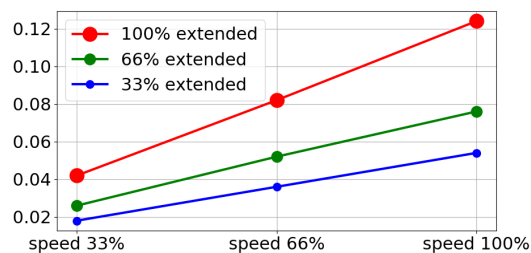

Stoptijd in  
seconden bij  
66% van 10 kg

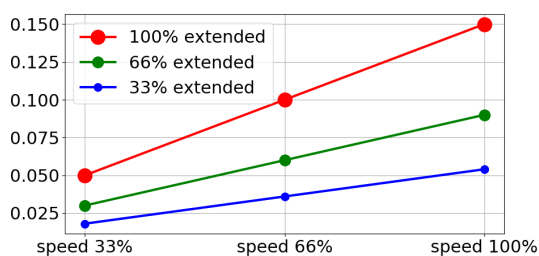


Stoptijd in  
seconden bij  
de maximale  
belasting van  
10 kg

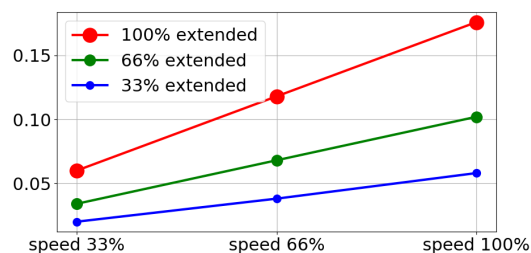


**Gewricht 1  
(SCHOUDER)**


Stopafstand in  
meters bij 33%  
van 10 kg

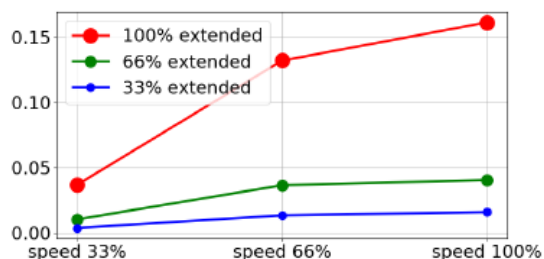

Stopafstand in  
meters bij 66%  
van 10 kg

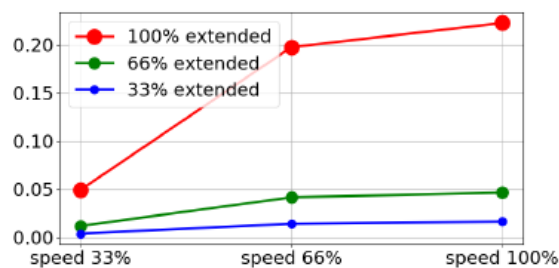


Stopafstand in  
meters bij de  
maximale  
belasting van  
10 kg

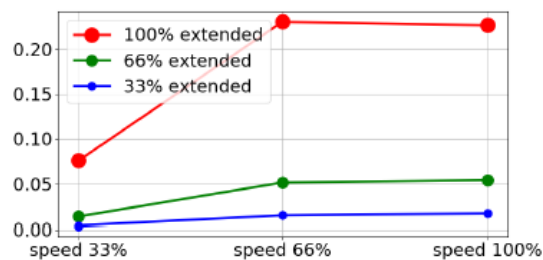


**Gewricht 1  
(SCHOUDER)**


Stoptijd in  
seconden bij  
33% van 10 kg

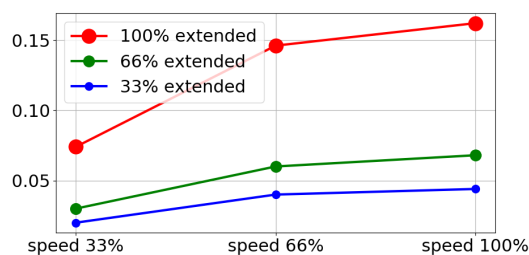

Stoptijd in  
seconden bij  
66% van 10 kg

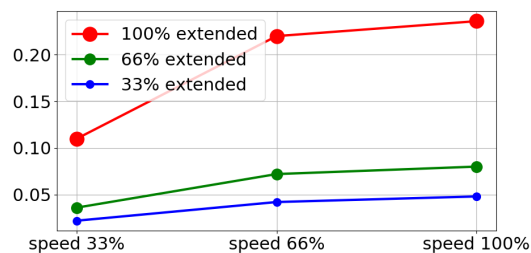


Stoptijd in  
seconden bij  
de maximale  
belasting van  
10 kg

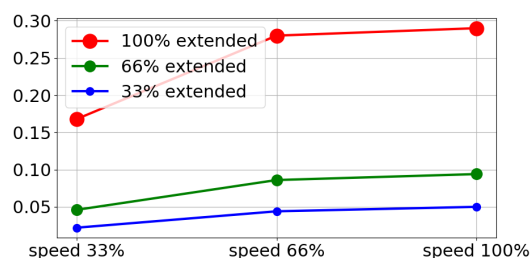


**Gewricht 2  
(ELLEBOOG)**

Stopafstand in  
meters bij alle  
ladingen

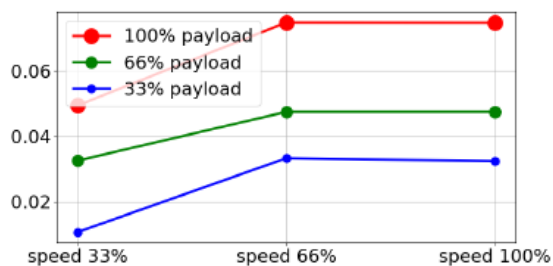

Stoptijd in  
seconden bij  
de maximale  
lading

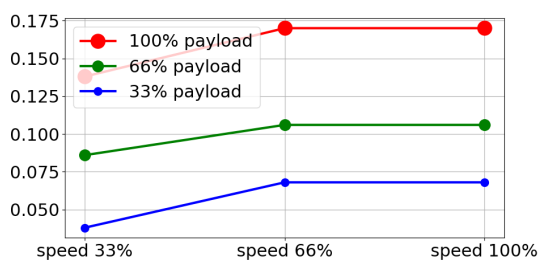


## 13.2.2. Robotscenario 2: 12,5 kg.


### Gewricht 0

#### (BASIS)


Stopafstand in meters bij 33% van 12,5 kg

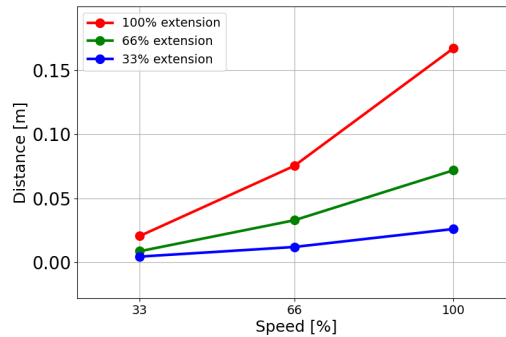

Stopafstand in meters bij 66% van 12,5 kg

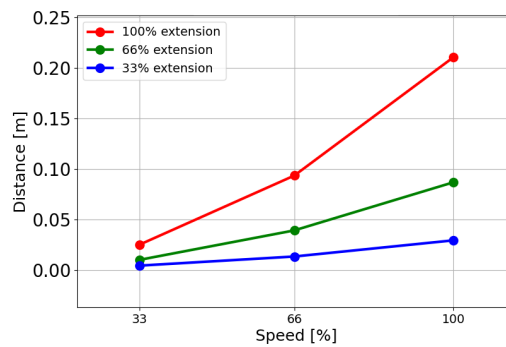


Stopafstand in meters bij de maximale lading van 12,5 kg

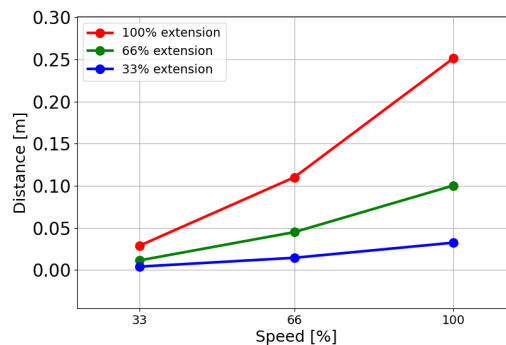


### Gewricht 0

#### (BASIS)


Stoptijd in seconden bij 33% van 12,5 kg

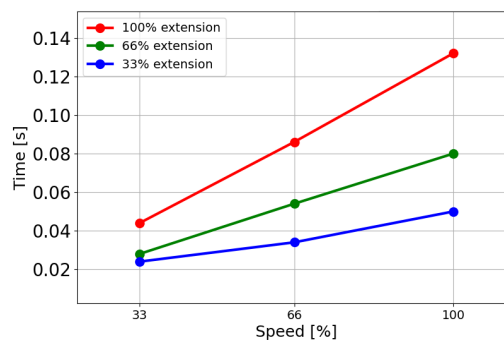

Stoptijd in  
seconden bij  
66% van 12,5  
kg

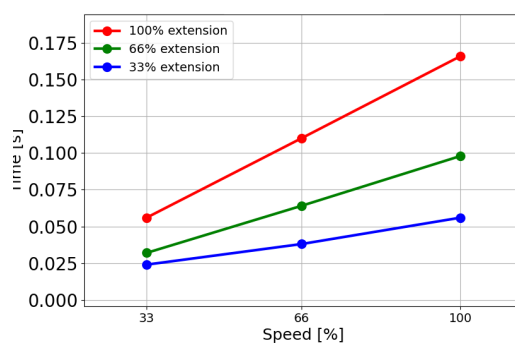


Stoptijd in  
seconden bij  
de maximale  
lading van  
12,5 kg

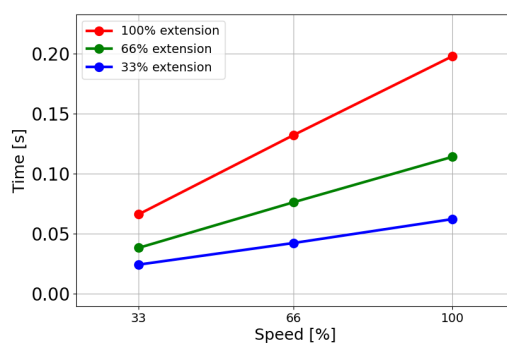


**Gewricht 1  
(SCHOUDER)**


Stopafstand in  
meters bij 33%  
van 12,5 kg

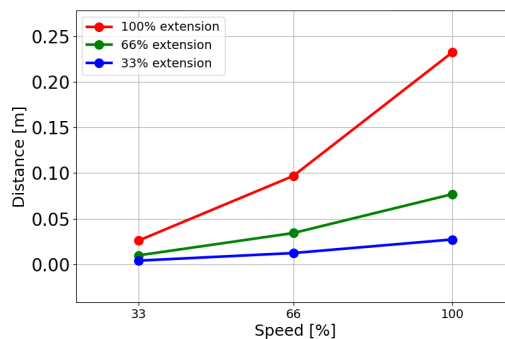

Stopafstand in  
meters bij 66%  
van 12,5 kg

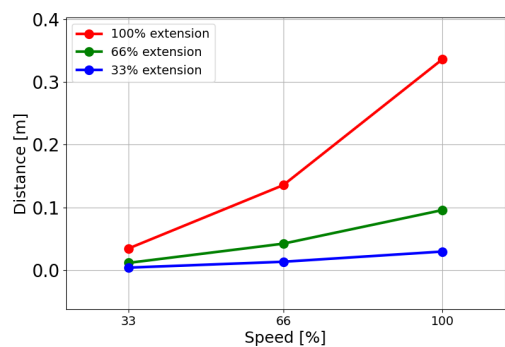


Stopafstand in  
meters bij de  
maximale  
lading van 12,5  
kg

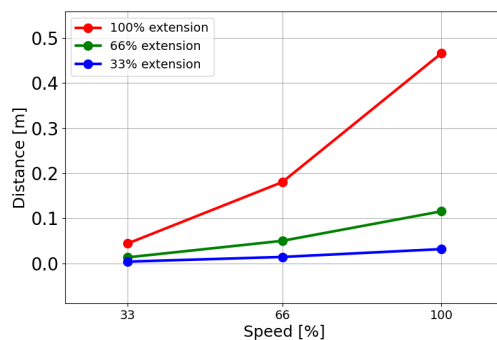


### Gewricht 1 (SCHOUDER)


Stoptijd in  
seconden bij  
33% van 12,5 kg

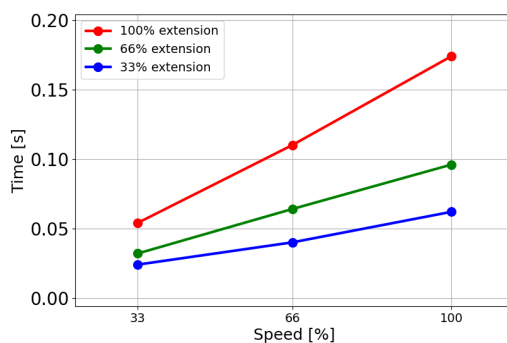

Stoptijd in  
seconden bij  
66% van 12,5 kg

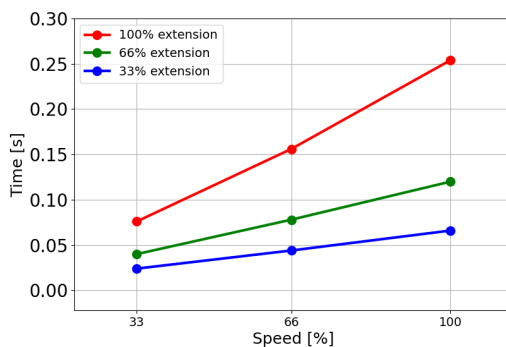


Stoptijd in  
seconden bij  
de maximale  
lading van  
12,5 kg

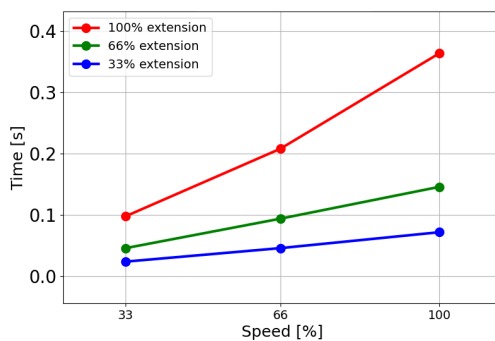




**Gewricht 2  
(ELLEBOOG)**


Stopafstand in  
meters bij 33%  
van 12,5 kg

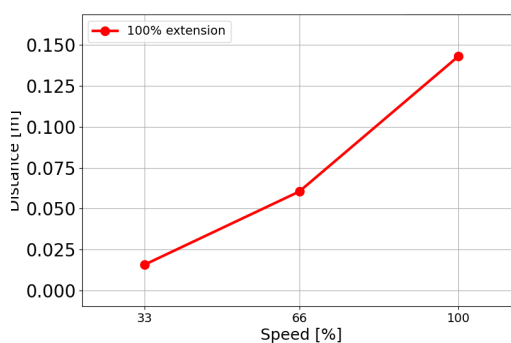


Stopafstand in  
meters bij 66%  
van 12,5 kg

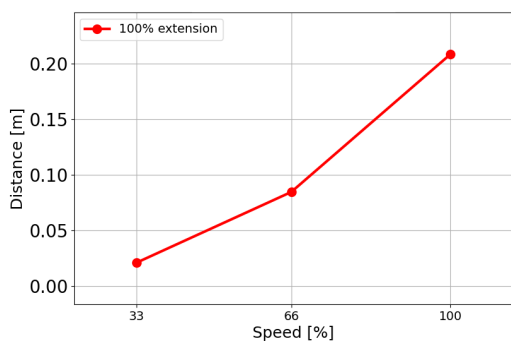


Stopafstand in  
meters bij de  
maximale  
lading van 12,5  
kg

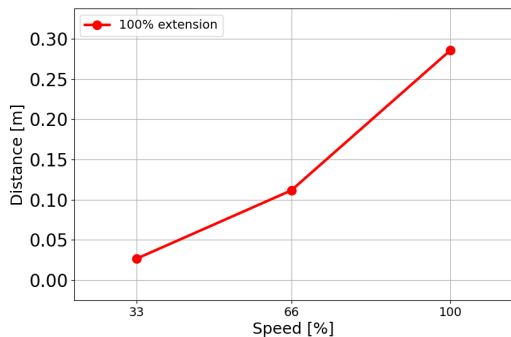**Gewricht 2  
(ELLEBOOG)**


Stoptijd in  
seconden bij  
33% van 12,5 kg

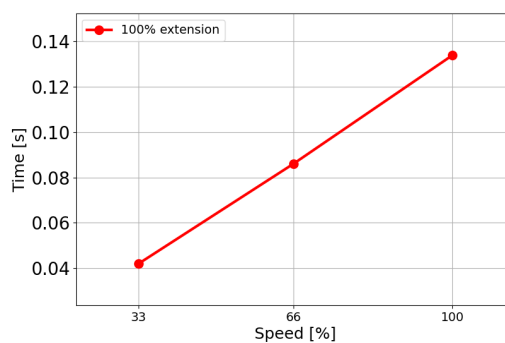

Stoptijd in seconden bij 66% van 12,5 kg

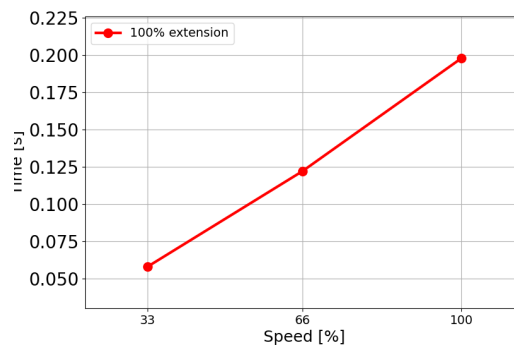

Stoptijd in seconden bij de maximale lading van 12,5 kg

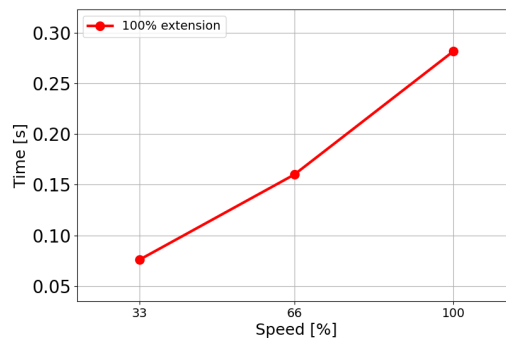

## 13.3. Stopcategorieën

### Beschrijving

Afhankelijk van de omstandigheden kan de robot drie types stopcategorieën initiëren, gedefinieerd volgens IEC 60204-1. De categorieën worden gedefinieerd in de volgende tabel.

| Stopcategorieën | Beschrijving                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0               | Stop de robot door onmiddellijke de stroom uit te schakelen.                                                                                              |
| 1               | Stop de robot op een ordelijke, gecontroleerde manier. De stroom wordt uitgeschakeld nadat de robot is gestopt.                                           |
| 2               | *Stop de robot met stroom voor de aandrijvingen en behoud van het traject. De stroom voor de aandrijvingen blijft ingeschakeld nadat de robot is gestopt. |

Configureerbare veiligheidsfuncties

# 14. Noodgevallen

---

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b> | Volg de instructies hier om met noodsituaties om te gaan, zoals het activeren van de noodstop met de rode drukknop. Dit hoofdstuk beschrijft ook hoe het systeem handmatig kan worden bewogen zonder stroom. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## 14.1. Noodstop

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschrijving</b> | De noodstop is de rode drukknop op de programmeereenheid. Druk op de noodstopknop om alle beweging van de robot te stoppen. Het activeren van de noodstopknop veroorzaakt een categorie 1 stop (IEC 60204-1). Noodstoppen zijn geen beveiligingen (ISO 12100). |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Noodstoppen zijn aanvullende beschermingsmaatregelen en voorkomen geen letsel. De risicobeoordeling van de robottoepassing bepaalt of aanvullende noodstopknoppen vereist zijn. De noodstopfunctie en de inschakelinrichting moeten voldoen aan ISO 13850.

Nadat een noodstop is geactiveerd, wordt de drukknop vergrendeld in die stand. Daarom moet elke keer dat een noodstop wordt geactiveerd, deze handmatig worden gereset op de drukknop die de stop heeft geïnitieerd.

Voordat de noodstopknop wordt reset, moet u de reden voor activering van de noodstop visueel vaststellen en beoordelen. Visuele beoordeling van alle apparatuur in de toepassing is vereist. Reset de noodstopknop nadat het probleem is opgelost.

### Om de noodstopknop te resetten

1. Houd de drukknop ingedrukt en draai deze rechtsom totdat de vergrendeling wordt opgeheven.  
U kunt het voelen wanneer de vergrendeling wordt opgeheven, wat aangeeft dat de drukknop is gereset.
  2. Controleer de situatie en of de noodstop moet worden gereset.
  3. Herstel na het resetten van de noodstop de stroomtoevoer naar de robot en hervat de werking.
-

## 14.2. Beweging zonder aandrijfkraft

### Beschrijving

In het geval van een noodsituatie, wanneer het niet mogelijk of ongewenst is om de robot van stroom te voorzien, kunt u geforceerde backdrive gebruiken om de robotarm te bewegen.

Voor een geforceerde backdrive moet u de robotarm hard duwen of trekken om het gewricht te bewegen. Voor grotere robotarmen kan meer dan één persoon nodig zijn om het gewricht te bewegen.

Elke gewrichtsrem heeft een frictiekoppeling die beweging bij een hoog geforceerd koppel mogelijk maakt. Geforceerd backdriven vereist veel kracht en het kan een of meer mensen vereisen om de robot te bewegen.

In opspansituaties zijn er twee of meer mensen nodig om de geforceerde backdrive uit te voeren. In sommige situaties zijn er twee of meer mensen nodig om de robotarm te demonteren.

Personeel dat de UR-robot gebruikt, moet worden getraind om op noodsituaties te reageren. Er moet aanvullende informatie worden verstrekt over integratie.



#### WAARSCHUWING

Risico's als gevolg van het breken of vallen van een niet-ondersteunde robotarm kunnen letsel of overlijden veroorzaken.

- Demonteer de robot niet tijdens een noodgeval.
- Ondersteun de robotarm voordat u de stroom uitschakelt.



#### MEDEDELING

Handmatig bewegen van de robotarm is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties en servicedoeleinden. Onnodig bewegen van de robotarm kan tot materiële schade leiden.

- Beweeg het gewricht niet meer dan 160 graden, om ervoor te zorgen dat de robot zijn oorspronkelijke fysieke positie kan vinden.
- Beweeg gewrichten niet meer dan nodig is.

## 14.3. Operationele modus

**Beschrijving**

U hebt toegang tot en activeert verschillende modussen met behulp van de programmeereenheid of de Dashboard-server. Als een externe moduskeuzeschakelaar is geïntegreerd, regelt deze de modussen, niet PolyScope of de Dashboard-server.

**Automatische modus** Wanneer deze modus is geactiveerd, kan de robot alleen een programma van voorgedefinieerde taken uitvoeren. U kunt programma 's en installaties niet wijzigen of opslaan.

**Handmatige modus** Wanneer deze modus is geactiveerd, kunt u de robot programmeren. U kunt programma 's en installaties wijzigen en opslaan. De in de handmatige modus gebruikte snelheden moeten worden beperkt om letsel te voorkomen. Wanneer de robot in de handmatige modus werkt, zou een persoon zich binnen het bereik van de robot kunnen bevinden. De snelheid moet worden beperkt tot de waarde die passend is volgens de risicobeoordeling van de toepassing.

**WAARSCHUWING**

Er kan letsel optreden als de gebruikte snelheid te hoog is terwijl de robot in de handmatige modus werkt.

**Herstelmodus** Deze modus wordt geactiveerd wanneer een veiligheidslimiet van de actieve limietenset wordt overschreden. De robotarm voert een categorie 0 stop uit. Als een actieve veiligheidslimiet, zoals een gewrichtspositielimiet of een veiligheidsgrens al wordt overschreden wanneer de robotarm wordt ingeschakeld, start deze in de Herstelmodus. Dit maakt het mogelijk om de robotarm binnen de veiligheidslimieten terug te bewegen. In de Herstelmodus wordt de beweging van de robotarm beperkt door een vaste limiet die u niet kunt aanpassen.

**Modus Handmatige hoge snelheid** Als deze modus is ingeschakeld, kunt u tijdelijk de standaard snelheidslimiet van het gereedschap en de elleboog overschrijden. De robot voert in handmatige modus een beveiligde stop uit als een inschakelapparaat met drie standen is geconfigureerd en is losgelaten (niet ingedrukt) of volledig ingedrukt.

Om tussen automatische en handmatige modus te schakelen moet het inschakelapparaat met drie standen volledig worden losgelaten en weer worden ingedrukt om de robot te laten bewegen. Als Handmatige hogesnelheidsmodus wordt gebruikt, gebruik dan veilige gewrichtslimieten of veiligheidsvlakken om de bewegingsruimte van de robot te beperken.

**MEDEDELING**

Na vijf minuten inactiviteit wordt de snelheidslimiet teruggezet naar de standaardwaarde.

**Handmatige hoge snelheid inschakelen**

1. Tik op **Toepassing** en selecteer **Veiligheid**.
2. Open de opties voor **Inschakelapparaat met drie standen**.
3. Schuif de knop **Handmatige hoge snelheid toestaan** op de pagina.

**Van modus wisselen**

| Operationele modus                       | Handmatig             | Automatisch |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Robot bewegen met +/- op tabblad Bewegen | x                     |             |
| Freedrive                                | x                     |             |
| Programma 's uitvoeren                   | Verminderde snelheid* | x           |
| Programma bewerken en opslaan            | x                     |             |

\*Als een inschakelapparaat met drie standen is geconfigureerd, werkt de robot op Handmatige verminderde snelheid, tenzij de modus Handmatige hoge snelheid is ingeschakeld.

**WAARSCHUWING**

- Alle stopgezette beveiligingsmechanismes moeten weer volledig functioneren voordat de Automatische modus wordt geselecteerd.
- Waar mogelijk mag de handmatige modus alleen worden gebruikt terwijl alle personen zich buiten de beschermde ruimte bevinden.
- Als een externe moduskeuzeschakelaar wordt gebruikt, moet deze buiten de beschermde ruimte worden geplaatst.
- Niemand mag de beschermde ruimte betreden of zich erin bevinden in de automatische modus, tenzij veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt of de collaboratieve toepassing wordt gevalideerd voor vermogens- en krachtbegrenzing (PFL).

**Inschakelapparaat met drie posities**

Wanneer een Inschakelapparaat met drie standen wordt gebruikt en de robot in de handmatige modus staat, moet voor beweging het inschakelapparaat met drie standen in de middenpositie worden ingedrukt. Het inschakelapparaat met drie standen heeft geen effect in Automatische modus.

**MEDEDELING**

- Sommige UR-robots zijn mogelijk niet voorzien van een inschakelapparaat met drie standen. Als de risicobeoordeling het inschakelapparaat vereist, moet een 3PE-programmeereenheid worden gebruikt.

Een 3PE-programmeereenheid (3PE TP) wordt aanbevolen voor het programmeren. Als een andere persoon zich in de beschermde ruimte kan bevinden in de handmatige modus, kan een extra apparaat worden geïntegreerd en geconfigureerd voor gebruik door de extra persoon.

**Van modus wisselen**

Om van modus te wisselen, selecteert u rechtsboven in de kop het profielpictogram om de dialoog Modusselectie weer te geven.


- Automatisch geeft aan dat de bedieningsmodus van de robot op Automatisch is ingesteld.
- Handmatig geeft aan dat de bedieningsmodus van de robot op Handmatig is ingesteld.

PolyScope X staat automatisch in Handmatige modus wanneer de Veiligheids-I/O configuratie met inschakelapparaat met drie standen is ingeschakeld.

**Selecteer Externe modus**

De externe modus kan alleen worden gewijzigd wanneer u de bedrijfsmodus hebt gewijzigd in "Automatisch".

Als u de externe modus wijzigt van "extern" naar "lokaal", gaat de bedrijfsmodus terug naar "handmatig".

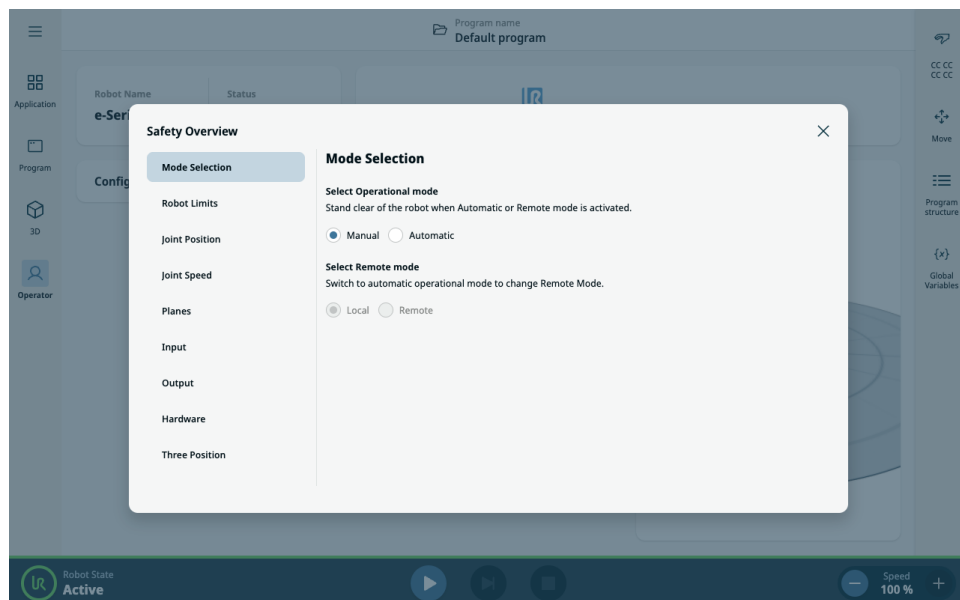

# 15. Transport

## Beschrijving

Vervoer de robot enkel in de originele verpakking. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een droge plek voor als u de robot later wilt verplaatsen.

Houd beide buizen van de robotarm tegelijkertijd vast, wanneer de robot uit zijn verpakking gehaald wordt naar de opstellingsruimte. Houd de robot op zijn plek tot alle montagebouten stevig zijn bevestigd aan de basis van de robot.

Til de regelkast op aan het handvat.



### WAARSCHUWING

Onjuiste hijs technieken of het gebruik van onjuiste hijsapparatuur kan tot letsel leiden.

- Vermijd overbelasting van uw rug of andere lichaamsdelen bij het hijsen van de apparatuur.
- Gebruik de juiste tilapparatuur.
- Alle regionale en nationale richtlijnen voor tillen dienen in acht genomen te worden.
- Zorg dat u de robot monteert conform de instructies in het hoofdstuk Mechanische interface.



### MEDEDELING

Als de robot tijdens het transport is bevestigd aan een applicatie/ installatie van derden, raadpleeg dan het volgende:

- Als u de robot zonder de originele verpakking vervoert, vervallen alle garanties van Universal Robots A/S.
- Als de robot wordt vervoerd als onderdeel van een geprefabriceerde oplossing, stevig is gemonteerd en volledig voldoet aan de onderstaande aanbevelingen, wordt deze niet beschouwd als een inbreuk op de garantie.

## Disclaimer

Universal Robots is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vervoer van de apparatuur.

Zie de aanbevelingen voor transport zonder verpakking vinden op: [universal-robots.com/manuals](https://universal-robots.com/manuals)



## 15.1. Vervoer zonder verpakking



### Beschrijving

Universal Robots raadt aan de robot altijd te vervoeren in de originele verpakking. Deze aanbevelingen zijn opgesteld om ongewenste trillingen in gewrichten en remsystemen te verminderen en het draaien van gewrichten te verminderen. Als de robot wordt getransporteerd zonder de originele verpakking, raadpleeg dan de volgende richtlijnen:



- Vouw de robot zoveel mogelijk in - vervoer de robot niet in de singulariteitspositie.
- Plaats het zwaartepunt van de robot zo dicht mogelijk bij de basis.
- Zet elke buis vast op een vast oppervlak op twee verschillende punten op de buis.
- Zet een bevestigde eindeffector stevig vast in 3 assen.

### Transport



Vouw de robot zoveel mogelijk in.

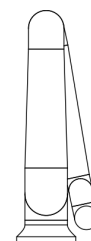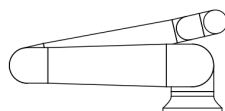

Vervoer de robot niet in uitgestrekte positie.  
(singulariteitspositie)

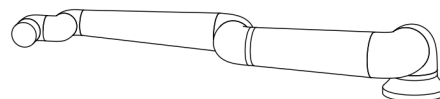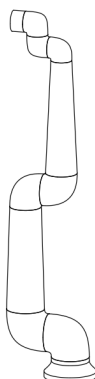

Zet de buizen vast op een vast oppervlak.  
Zet een bevestigde eindeffector stevig vast in 3 assen.

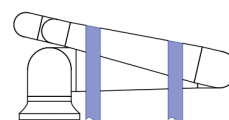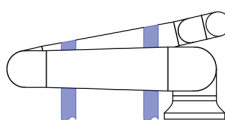

## 15.2. Opbergen van de programmeereenheid

- Beschrijving** De operator moet een duidelijk inzicht hebben in wat de noodstop op de programmeereenheid doet wanneer deze wordt ingedrukt. Er kan bijvoorbeeld verwarring zijn bij een installatie met meerdere robots. Het moet duidelijk worden gemaakt of de noodstop op de programmeereenheid de hele installatie stopt of alleen de verbonden robot.
- Als er verwarring zou kunnen zijn, berg de programmeereenheid dan zo op dat de noodstopknop niet zichtbaar of bruikbaar is.
- 

## 15.3. Langetermijnopslag

---

- Beschrijving** Dit hoofdstuk beschrijft algemene richtlijnen voor langdurige opslag van robots en reserveonderdelen.
- Dit geldt voor alle robotgeneraties en reserveonderdelen.
- Een robot wordt als langdurig opgeslagen beschouwd wanneer deze voor een periode van 6 maanden of langer wordt opgeslagen.
- 

- Richtlijnen** Om de robot en reserveonderdelen in de best mogelijke staat te houden, wordt aanbevolen om normale goede praktijken te volgen, namelijk:
- Opslagtemperatuur: 10 °C - 30 °C
  - Luchtvochtigheid: 20-60% RH
  - Universal Robots raadt aan om robots ten minste **jaarlijks** uit te pakken en op te starten en ze een programma met lichte belasting te laten draaien dat alle gewrichten ten minste 5 keer 90 graden draait in elke richting om de smeermiddelen te verdelen.  
Monteer ook reservegewrichten op een arm indien mogelijk en voer dezelfde routine uit.
  - In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om de robots na opslag af te vegen om overtollig smeermiddel dat uit de afdichtingen is gelopen te verwijderen.
  - De batterij is ontworpen om de gehele levensduur van de robot mee te gaan en wordt niet opgeladen wanneer de stroomtoevoer naar het systeem wordt ingeschakeld. De levensduur van de batterij is 8 tot 10 jaar, maar voor e-Series en UR Series kan deze worden vervangen.
  - Flashgeheugen kan in de loop van de tijd gegevenscapaciteit verliezen. Daarom is er een potentieel risico dat de gegevens op bijvoorbeeld de SD-kaart opnieuw moeten worden weggeschreven.
-

# 16. Onderhoud en reparatie

## Beschrijving

Alle onderhoudswerkzaamheden, inspecties en kalibraties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met alle veiligheidsinstructies in deze handleiding, de UR Service Manual en volgens de lokale voorschriften.  
Reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door Universal Robots. Door de klant aangewezen, getrainde personen kunnen reparatiewerkzaamheden uitvoeren, mits zij zich houden aan de Servicehandleiding.

## Veiligheid voor onderhoud

Het doel van onderhoud en reparatie is ervoor te zorgen dat het systeem blijft functioneren zoals verwacht.

Bij het werken met de robotarm of regelkast dient u rekening te houden met onderstaande procedures en waarschuwingen.



### WAARSCHUWING

Het niet naleven van een van de onderstaande veiligheidspraktijken kan tot letsel leiden.

- Trek de stroomkabel uit de onderkant van de regelkast om zeker te zijn dat er helemaal geen stroom meer op staat. Schakel alle andere energiebronnen uit die zijn aangesloten op de robotarm of de regelkast. Tref de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat anderen het systeem inschakelen tijdens de reparatie.
- Controleer de aardingsaansluiting voordat u het systeem weer inschakelt.
- Houdt u aan ESD-regels als onderdelen van de robotarm of de regelkast worden gedemonteerd.
- Voorkom dat water en stof in de robotarm of de regelkast komen.

**Veiligheid  
voor  
onderhoud****WAARSCHUWING**

Als niet voldoende ruimte wordt gelaten zodat de deur van de regelkast volledig kan worden geopend, kan dit tot letsel leiden.

- Zorg voor ten minste 915 mm ruimte zodat de deur van de regelkast volledig kan worden geopend, om toegang te bieden voor onderhoud.

**WAARSCHUWING: ELEKTRICITEIT**

Het te snel demonteren van de voeding van de regelkast na uitschakeling kan leiden tot letsel als gevolg van elektrische gevaren.

- Vermijd het demonteren van de voeding in de regelkast, omdat er gedurende enkele uren nadat de regelkast is uitgeschakeld hoge spanningen (tot 600 V) aanwezig kunnen zijn in deze voeding.

Controleer na probleemoplossing, onderhoud en reparatie of aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan. Houd u aan de nationale of regionale arbeidsveiligheidsvoorschriften. De juiste werking van alle instellingen van veiligheidsfuncties moet ook worden getest en gevalideerd.

## 16.1. Stopprestaties testen

**Beschrijving**

Test periodiek om te bepalen of de stopprestaties verslechteren. Langere stoptijden kunnen vereisen dat veiligheidsvoorzieningen worden aangepast, mogelijk met wijzigingen in de installatie. Als veiligheidsfuncties op basis van stoptijd en/of stopafstand worden gebruikt en de basis vormen van de strategie voor risicobeperking, is er geen bewaking of test van de stopprestaties vereist. De robot voert continue bewaking uit.

## 16.2. Reiniging en inspectie van robotarm

**Beschrijving**

Als onderdeel van regelmatig onderhoud kan de robotarm worden gereinigd, in overeenstemming met de aanbevelingen in deze handleiding en lokale vereisten.

**Reinigingsmethoden**

Om stof, vuil of olie van de robotarm en/of programmeereenheid te verwijderen, gebruikt u simpelweg een doek naast een van de onderstaande reinigingsmiddelen.

**Vorbereiding van oppervlakken:** voordat u de onderstaande oplossingen aanbrengt, moeten oppervlakken mogelijk worden voorbereid door los vuil of deeltjes te verwijderen.

**Reinigingsmiddelen:**

- Water
- 70% isopropylalcohol
- 10% ethanolalcohol
- 10% nafta (gebruik dit om vet te verwijderen.)

**Toepassing:** de oplossing wordt meestal aangebracht op het oppervlak dat moet worden gereinigd met een spuitfles, borstel, spons of doek. Het kan direct worden aangebracht of verder worden verdund, afhankelijk van de mate van vervuiling en het type oppervlak dat wordt gereinigd.

**Beroering:** voor hardnekkige vlekken of zwaar vervuilde delen kan de oplossing worden beroerd met een borstel, schrobmachine of andere mechanische middelen om de verontreinigingen los te maken.

**Aanbrengtijd:** indien nodig mag de oplossing maximaal 5 minuten op het oppervlak blijven om de verontreinigingen effectief te penetreren en op te lossen.

**Afspoelen:** na de aanbrengtijd wordt het oppervlak gewoonlijk grondig afgespoeld met water om de opgeloste verontreinigingen en eventuele resten van het reinigingsmiddel te verwijderen. Het is essentieel om grondig af te spoelen, om te voorkomen dat resten schade veroorzaken of een veiligheidsrisico vormen.

**Drogen:** tot slot kan het gereinigde oppervlak aan de lucht of met doeken worden gedroogd.

**WAARSCHUWING**

GEBRUIK GEEN BLEEKMIDDEL in een verdunde reinigungsoplossing.

**WAARSCHUWING**

Vet is irriterend en kan een allergische reactie veroorzaken. Contact, inademing of inslikken kan ziekte of letsel veroorzaken. Houd u aan het volgende om ziekte of letsel te voorkomen:

- **VOORBEREIDING:**
  - Zorg dat de ruimte goed geventileerd is.
  - Zorg dat er geen eten of drinken in de buurt van de robot en reinigingsmiddelen is.
  - Zorg dat er een oogspoelstation in de buurt is.
  - Verzamel de vereiste PBM's (handschoenen, oogbescherming)
- **DRAGEN:**
  - Beschermende handschoenen: oliebestendige handschoenen (nitril). Ondoordringbaar en bestand tegen het product.
  - Oogbescherming wordt aanbevolen om onbedoeld contact van vet met de ogen te voorkomen.
- **NIET INSLIKKEN.**
- In geval van
  - contact met de huid, wassen met water en een mild reinigingsmiddel
  - een huidreactie, roep medische hulp in
  - contact met de ogen, gebruik een oogspoelstation, roep medische hulp in.
  - inademing van dampen of inslikken van vet, roep medische hulp in
- Na smeerwerkzaamheden
  - verontreinigde werkoppervlakken reinigen.
  - alle voor het reinigen gebruikte lappen of papier op verantwoorde wijze verwijderen.
- Contact met kinderen en dieren is verboden.

**Inspectieplan  
robotarm**

De tabel hieronder is een checklist van de soorten inspecties die door Universal Robots worden aanbevolen. Voer inspecties regelmatig uit, zoals geadviseerd in de tabel. Vermelde onderdelen die in een onacceptabele staat blijken te verkeren, moeten worden hersteld of vervangen.

| Type inspectieactie |                                            |   | Tijdsbestek |               |           |
|---------------------|--------------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------|
|                     |                                            |   | Maandelijks | Halfjaarlijks | Jaarlijks |
| 1                   | Platte ringen controleren                  | V |             | X             |           |
| 2                   | Robotkabel controleren                     | V |             | X             |           |
| 3                   | Controleer aansluiting robotkabel          | V |             | X             |           |
| 4                   | Montagebouten van robotarm controleren*    | F | X           |               |           |
| 5                   | Montagebouten van gereedschap controleren* | F | X           |               |           |
| 6                   | Ronde hijsband                             | F |             |               | X         |

**Inspectieplan  
robotarm**

**MEDEDELING**

Het gebruik van perslucht om de robotarm te reinigen, kan de onderdelen van de robotarm beschadigen.

- Gebruik nooit perslucht om de robotarm te reinigen.

**Inspectieplan  
robotarm**


1. Verplaats de robotarm naar de nulpositie, indien mogelijk.
2. Schakel de robot uit en koppel de voedingskabel af van de regelkast.
3. Inspecteer de kabel tussen de regelkast en de robotarm op schade.
4. Controleer of de bevestigingsbouten van de basis goed vastzitten.
5. Controleer of de bouten van de gereedschapsflens goed vastzitten.
6. Inspecteer de platte ringen op slijtage en schade.
  - Vervang de platte ringen als ze versleten of beschadigd zijn.


**MEDEDELING**


Als schade aan een robot wordt geconstateerd binnen de garantieperiode, neem dan contact op met de distributeur waar de robot is aangeschaft.

**Inspectie**

1. Koppel gereedschappen of hulpstukken af of stel TCP/belasting/zwaartepunt in volgens de gereedschapsspecificaties.
2. Om de robotarm te bewegen in Freedrive:
  - Druk de 3PE-knop op een 3PE-programmeereenheid snel licht in, laat los, druk weer licht in en houd de knop in deze positie.

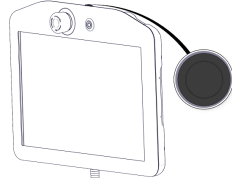


Aan/uit-knop

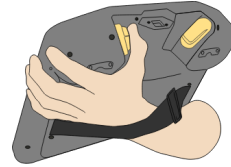

3PE-knop

3. Trek/duw de robot naar een horizontaal uitgerekte positie en laat los.

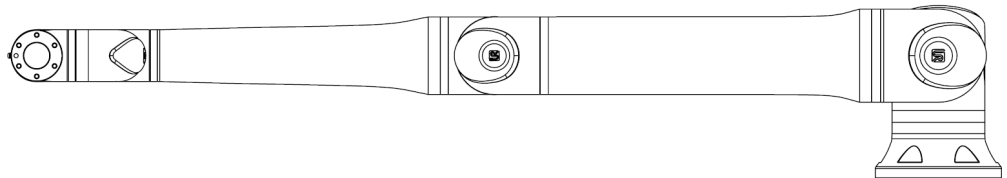

4. Controleer dat de robotarm de positie kan handhaven zonder ondersteuning en zonder Freedrive te activeren.

## 16.3. Programmeereenheid en regelkast reinigen

### Het touchscreen van de programmeereenheid schoonmaken

Gebruik een mild, industrieel reinigingsmiddel zonder verdunningsmiddelen of agressieve toevoegingen. Gebruik geen schurend materiaal om het scherm af te nemen. Universal Robots promoot geen specifiek reinigingsmiddel.

### De regelkast schoonmaken


Neem de [CB] indien nodig af met een vochtige doek. Gebruik de schoonmaakaanbeveling in de gebruikershandleiding.



**Filters van de regelkast vervangen**

Er is een filter aan beide kanten van de regelkast.

1. Verwijder voorzichtig het buitenste kunststof frame door te trekken op de plaatsen van de rode pijlen, zoals weergegeven in de afbeeldingen hieronder in figuur 3.7. Het frame kantelt naar buiten.
2. Vervang filters.

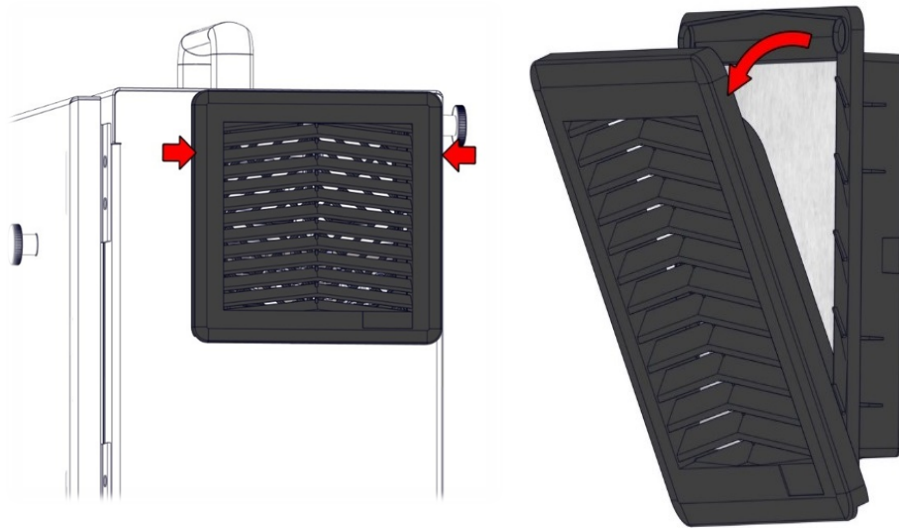


Figuur 3.7. Vervang de filters van de regelkast.


## 16.4. Software-installatie

## Configureren van de software voor de 3PE-programmeereenheid

1. Tik in PolyScope in het menu links op **Toepassing** en selecteer **Veiligheid**.

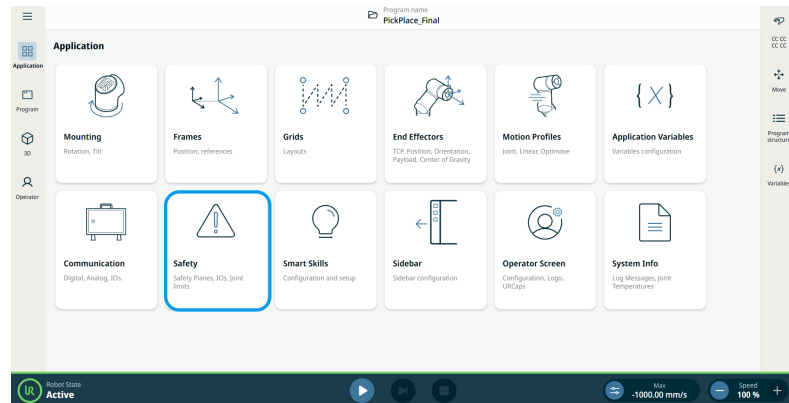

2. Tik op **Hardware** en vervolgens op de knop **Ontgrendelen**

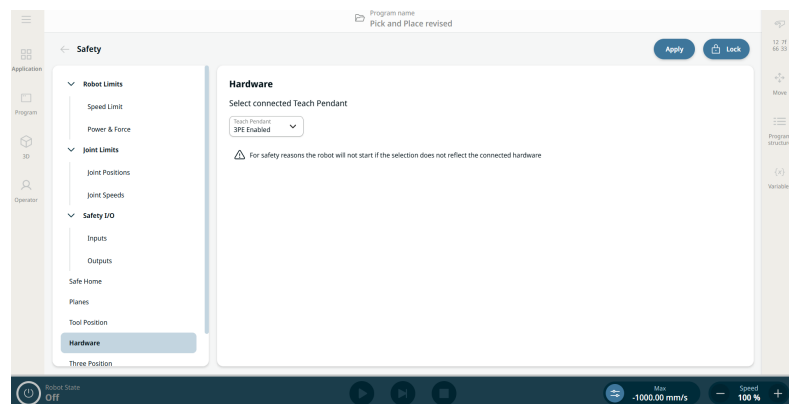

3. Voer het wachtwoord in en tik op **Bevestigen**. Programmeereenheid is nu ingeschakeld.
4. Tik op **Toepassen** om het systeem opnieuw te starten. PolyScope blijft lopen.
5. Tik op **Toepassen en opnieuw starten** en vervolgens op **Configuratie bevestigen** om de software-installatie van de 3PE-programmeereenheid te voltooien.

# 17. Wegwerpen en het milieu

## Beschrijving

Robots van Universal Robots dienen te worden verwijderd conform de toepasselijke nationale wetten, regels en normen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de robot.

UR-robots worden geproduceerd met beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen om het milieu te beschermen; zoals is vastgelegd in de Europese RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Als robots (robotarm, regelkast, programmeereenheid) worden geretourneerd naar Universal Robots Denemarken, dan wordt de verwijdering geregeld door Universal Robots A/S.

De verwijderingsvergoeding voor UR-robots verkocht op de Deense markt wordt vooraf betaald aan het DPA-systeem door Universal Robots A/S. Importeurs in landen die gedekt zijn door de Europese WEEE-richtlijn 2012/19/EU moeten hun eigen registratie uitvoeren bij het nationale WEEE-register in hun land. De kosten zijn meestal minder dan 1€/robot.

Een lijst van nationale registers vindt u hier: <https://www.ewrn.org/national-registers>. Zoek hier naar Global Compliance: <https://www.universal-robots.com/download>.

**Stoffen in  
de UR-  
robot****Robotarm**

- Buizen, basisflens, montagebeugel voor gereedschap: geanodiseerd aluminium
- Gewrichtsbehuizingen: gepoedercoat aluminium
- Zwarte afdichtingsringen: AEM-rubber
  - aanvullende glijring onder zwarte band: gegoten zwart kunststof
- Eindkappen/deksels: PC/ASA-plastic
- Kleine mechanische onderdelen zoals schroeven, moeren, afstandhouders (staal, messing en kunststof)
- Draadbundels met koperdraden en kleine mechanische componenten zoals schroeven, moeren, afstandhouders (staal, messing en kunststof)

**Gewrichten van de robotarm (intern)**

- Tandwielen: staal en vet (beschreven in de Servicehandleiding)
- Motoren: ijzeren kern met koperen draden
- Draadbundels met koperdraden, PCB's, diverse elektronische componenten en kleine mechanische componenten
- Gewrichtsafdichtingen en O-ringen bevatten een kleine hoeveelheid PFAS, een verbinding binnen PTFE (algemeen bekend als Teflon™).
- Vet: synthetische en minerale olie met een verdikkingsmiddel van lithiumcomplexzeep of ureum. Bevat molybdeen.
  - Afhankelijk van het model en de productiedatum kan de kleur van het vet geel, magenta, donkerroze, rood of groen zijn.
  - De Servicehandleiding beschrijft de voorzorgsmaatregelen voor hantering en bevat veiligheidsinformatiebladen voor vetten

**Regelkast**

- Kast (behuizing): gepoedercoat staal
  - Standaard regelkast
- Aluminium plaatbehuizing (intern in de kast). Dit is ook de behuizing van de OEM-regelkast.
  - Standaard regelkast en OEM-regelkast.
- Draadbundels met koperdraden, PCB's, verschillende elektronische componenten, plastic connectoren en kleine mechanische componenten zoals schroeven, moeren, afstandhouders (staal, messing en kunststof)
- Een lithiumbatterij is op een printplaat gemonteerd. Zie de Servicehandleiding voor het verwijderen ervan.

# 18. Verklaringen en certificeringen



## 18.1. Opnameverklaring (origineel)

**EU Declaration of Incorporation (DOI)** (in accordance with 2006/42/EC Annex II B)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manufacturer:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Person in the Community Authorized to Compile the Technical File:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| Universal Robots A/S<br>Energivej 51, DK-5260 Odense S DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | David Brandt, Technology Officer R&D<br>Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S Denmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Description and Identification of the Partly-Completed Machine(s):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Product and Function:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Industrial robot multi-purpose multi-axis manipulator with standard control box, standard length cables & with or without UR teach pendant Function is determined by the completed machine (robot application or cell with end-effector, intended use and application program).                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Model:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e, UR16e (e-Series) with the standard control box and the UR16e with the OEM DC Controller:<br>Effective October 2020: Teach Pendants with 3-Position Enabling (3PE TP) & standard Teach Pendants (TP).<br>Effective May 2021: UR10e specification improvement to 12.5kg maximum payload.<br><b>NOTE:</b> This DOI is NOT applicable for use with the OEM AC Controller, except the UR16e with OEM DC Controller.<br>See control box markings. |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Serial Number:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting <b>XY 24 50 00000</b> and higher<br>Factory year e-Series<br>Sequential numbering, restarting at 0 each year<br>3 = UR3e, 5 = UR5e, 7 = UR7e, 0 = UR10e, 1 = UR12e, 2 = UR10e (12kg payload), 6 = UR16e                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Incorporation:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Universal Robots e-Series (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e and UR16e) shall only be put into service upon being integrated into a final complete machine (robot application or cell), which conforms with the provisions of the Machinery Directive and other applicable Directives.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
| It is declared that the above products fulfil, for what is supplied, the following directives as detailed below:<br>When this partly completed machine is integrated and becomes a complete machine, the integrator is responsible for the completed machine fulfilling all applicable Directives, applying the CE mark and providing the Declaration of Conformity (DOC).                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| <b>I. Machinery Directive 2006/42/EC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The following essential requirements have been fulfilled: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 with 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, Annex VI.<br>It is declared that the relevant technical documentation has been compiled in accordance with Part B of Annex VII of the Machinery Directive.                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| <b>II. Low-voltage Directive 2014/35/EU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reference the LVD and the harmonized standards used below.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
| <b>III. EMC Directive 2014/30/EU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reference the EMC Directive and the harmonized standards used below.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| See the harmonized standards used, as referred to in Article 7(2) of the MD & LV Directives & Article 6 of the EMC Directive:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| (I) EN ISO 10218-1:2011 <br>(I) EN ISO 12100:2010<br>(I) EN ISO 13732-1:2008 as applicable<br>(I) EN ISO 13849-1:2015 <br>2023 edition has no relevant changes<br>(I) EN ISO 13849-2:2012<br> See TÜV Rheinland Certificates | (I) EN ISO 13850:2015<br>(I) EN IEC 60204-1:2018 as applicable<br>(II) EN IEC 60320-1:2021<br>(II) EN IEC 60664-1:2006 & 2020<br>(I)(II) EN 60947-5-5:1997+A2:2017<br>(II) EN IEC 60947-5-8:2021                                                                                                                                                                                                                                                                            | (III) EN 61000-3-3: 2013<br>(III) EN 61000-6-1:2007 & 2019<br>UR3e, UR5e & UR7e ONLY<br>(III) EN 61000-6-2:2005 & 2019<br>(III) EN IEC 61000-6-3:2007 & 2021<br>UR3e, UR5e & UR7e ONLY |
| <b>Reference to other technical standards and technical specifications used:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| (I) ISO 9409-1:2004 [Type 50-4-M6]<br>(I) ISO/TS 15066:2016 as applicable<br>(III) EN 60068-2-1: 2007<br>(III) EN 60068-2-2:2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (III) EN 60068-2-27:2009<br>(III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019<br>EN 60529:1991/A2/AC:2019<br>(III) EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (III) EN IEC 61000-6-4:2023<br>(III) EN 61326-3-1: 2017<br>[Industrial locations SIL 2]<br>(II) IEC 61784-3:2021/AMD1:2024 [SIL2]                                                      |
| The manufacturer, or his authorised representative, shall transmit relevant information about the partly completed machinery in response to a reasoned request by the national authorities.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| Approval of full quality assurance system by the notified body Bureau Veritas: ISO 9001 certificate #DK019348, ISO 14001 certificate DK019349, and ISO 45001 certificate #DK019350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |

Odense Denmark, 5 Dec 2025

  
**Roberta Nelson Shea** Global Technical Compliance Officer

This DOI can change without notice. For the most recent DOI, the latest User Manual and DOI are available from the UR website.

## 18.2. Verklaringen en certificaten

Vertaling van de originele instructies

| EU-opnameverklaring (conform 2006/42/EG bijlage II B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Universele robots A/S<br>Energivej 51,<br>DK-5260 Odense S Denemarken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Persoon in de Gemeenschap die gemachtigd is om het technisch dossier op te stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | David Brandt<br>Technology Officer, R&D<br>Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S, Denemarken                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beschrijving en identificatie van de gedeeltelijk voltooide machine(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Product en functie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Industriële robot, multifunctionele meerassige manipulator met regelkast en met of zonder programmeereenheidfunctie, bepaald door de voltooide machine (robottoepassing of -cel met eindeffector, beoogd gebruik en toepassingsprogramma).                                                                                                                                                                     |
| Model:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e, UR16e (e-Series) met de standaard regelkast en UR16e met de OEM DC-controller: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanaf oktober 2020: programmeereenheden met inschakelapparaat met drie standen (3PE TP) en standaard programmeereenheden (TP).</li> <li>Vanaf mei 2021: verbetering UR10e-specificatie tot 12,5 kg maximale belasting.</li> </ul>                        |
| Opmerking:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deze opnameverklaring geldt NIET voor gebruik met de OEM AC-controller, behalve de UR16e met OEM DC-controller. Zie de markeringen op de regelkast.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serienummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vanaf 2023500000 en hoger<br>jaar e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10 kg belasting), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e sequentiële nummering, begint elk jaar vanaf 0                                                                                                                                                                                                                               |
| Inbouw:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Universal Robots e-Series (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e en UR16e) dienen alleen in bedrijf te worden gesteld na integratie in een voltooide machine (robottoepassing of -cel) die voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn en andere toepasselijke richtlijnen.                                                                                                                                     |
| <p><b>Verklaard wordt dat de bovengenoemde producten, voor zover geleverd, voldoen aan de volgende richtlijnen zoals hieronder uiteen is gezet:</b></p> <p>Wanneer deze gedeeltelijk voltooide machine wordt geïntegreerd en een voltooide machine wordt, is het de verantwoordelijkheid van de integrator om te bepalen of de voltooide machine voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen, de CE-markering aan te brengen en de conformiteitsverklaring te verstrekken.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. Machinerichtlijn 2006/42/EG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Aan de volgende essentiële vereisten is voldaan:</b> 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 met 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, bijlage VI. Verklaard wordt dat de relevante technische documentatie is samengesteld overeenkomstig deel B van bijlage VII bij de Machinerichtlijn. |
| II. Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zie de LVD en de gehanteerde geharmoniseerde normen hieronder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III. EMC-richtlijn 2014/30/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zie de EMC-richtlijn en de gehanteerde geharmoniseerde normen hieronder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zie de gehanteerde geharmoniseerde normen als bedoeld in artikel 7, lid 2 van de Machine- en Laagspanningsrichtlijn en artikel 6 van de EMC-richtlijn:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| (I) EN ISO 10218-1:2011 *<br>(I) EN ISO 12100:2010<br>(I) EN IEC 60204-1:2018 zoals van toepassing<br>(I) EN ISO 13849-1:2015 *<br>Editie 2023 heeft geen relevante wijzigingen<br>(I) EN ISO 13849-2:2012<br>* Zie TÜV Rheinland-certificaten | (I) EN ISO 13850:2015<br>(I) EN ISO 13732-1:2008 zoals van toepassing<br>(II) EN IEC 60320-1:2021<br>(II) EN IEC 60664-1:2006 & 2020<br>(I)(II) EN 60947-5-5:1997+A2:2017<br>(II) EN IEC 60947-5-8:2021 | (III) EN 61000-3-3: 2013<br>(III) EN 61000-6-1:2007 & 2019 ALLEEN UR3e, UR5e en UR7e<br>(III) EN 61000-6-2:2005 & 2019<br>(III) EN IEC 61000-6-3:2007 & 2021<br>ALLEEN UR3e, UR5e en UR7e |
| Verwijzing naar andere gehanteerde technische normen en specificaties:                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| (I) ISO 9409-1:2004 [type 50-4-M6]<br>(I) ISO/TS 15066:2016 zoals van toepassing<br>(III) EN 60068-2-1: 2007<br>(III) EN 60068-2-2:2007                                                                                                        | (III) EN 60068-2-27:2009<br>(III) EN 60068-2-64:2008+A1:2019<br>EN 60529:1991/A2/AC:2019<br>(III) EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024                                                                         | (III) EN IEC 61000-6-4:2023<br>(III) EN 61326-3-1: 2017 [Industriële locaties SIL 2]<br>(II) IEC 61784-3:2021/AMD1:2024 [SIL2]                                                            |
| De fabrikant of diens gevolmachtigde verstrekt relevante informatie over de gedeeltelijk voltooide machine op een met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten.                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Goedkeuring van het volledige kwaliteitsborgingssysteem door de aangemelde instantie Bureau Veritas: ISO 9001-certificaat DK019348, ISO 14001-certificaat DK019349 en ISO 45001-certificaat DK019350.                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

Odense, Denemarken, 5 dec 2025



#### MEDEDELING

Deze opnameverklaring kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. Voor de meest recente opnameverklaring zijn de nieuwste gebruikershandleiding en opnameverklaring beschikbaar op de UR-website.

## 18.3. Certificeringen UR10e

### Beschrijving

Certificering van derden is vrijwillig. Om echter de beste service te bieden aan robotintegreerders, kiest Universal Robots ervoor om zijn robots te certificeren bij de hieronder vermelde testinstituten.  
U kunt kopieën van alle certificaten vinden in het hoofdstuk Certificaten.

## Certificering

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TÜV<br>Rheinland | Certificaten van TÜV Rheinland volgens EN ISO 10218-1 en EN ISO 13849-1. TÜV Rheinland staat voor veiligheid en kwaliteit op vrijwel alle bedrijfs- en levensgebieden. Het bedrijf werd 150 jaar geleden opgericht en is een van 's werelds toonaangevende testdienstverleners. |
|    | TÜV<br>Rheinland | Het cTUV-keurmerk geeft aan dat een product voldoet aan de Canadese veiligheidsnormen en bewijst dat het voldoet aan de Canadese elektrische veiligheidsnormen.                                                                                                                 |
|    | CHINA<br>RoHS    | Producten van Universal Robots voldoen aan de CHINA RoHS-vereisten voor de beheersing van vervuiling door elektronische informatieproducten. Een productverklaringentabel is verstrekt.                                                                                         |
|    | KCs              | Universal Robots-producten zijn beoordeeld en voldoen aan de KOSHA-veiligheidsnormen.                                                                                                                                                                                           |
|  | KC               | Universele Robots producten zijn beoordeeld op conformiteit met de EMC-vereisten van Zuid-Korea.                                                                                                                                                                                |
|  | Delta            | Universal Robots-producten zijn op prestaties getest door DELTA.                                                                                                                                                                                                                |

Certificering  
van externe  
leveranciers

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Omgeving | De door onze leveranciers verstrekte transportpallets voor Universal Robots e-Series-robots voldoen aan de Deense ISMPM-15-eisen voor de productie van houten verpakkingsmateriaal en zijn conform deze regeling gemarkeerd. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Testcertificering  
fabrikant

|                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Universal<br>Robots | Universal Robots e-Series-robots ondergaan voortdurend interne tests alsmede testprocedures aan het einde van de productielijn. UR-testprocessen worden voortdurend geëvalueerd en verbeterd. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Verklaringen  
conform EU-  
richtlijnen**

Hoewel EU-richtlijnen relevant zijn voor Europa, erkennen en/of vereisen sommige landen buiten Europa EU-verklaringen. Europese richtlijnen zijn beschikbaar op de officiële website: <http://eur-lex.europa.eu>.

Volgens de Machinerichtlijn zijn de robots van Universal Robots gedeeltelijk voltooide machines, waardoor er geen CE-markering op is aangebracht.

U kunt de inbouwverklaring volgens de Machinerichtlijn vinden in het hoofdstuk Verklaringen en certificaten.

---

**EU REACH**

Ons product bevat onderdelen, met name de blauwe kunststof deksels (cups) en grijze kunststof onderdelen, die stoffen bevatten die voorkomen op de REACH-kandidatenlijst (>0,1% g/g).

Raadpleeg het document Global Compliance dat kan worden gedownload van onze website. Deze informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de verplichtingen van EU REACH voor artikelen die op de EU-markt worden gebracht. Gebruik ons product zoals bedoeld en volg alle operationele en veiligheidsinstructies in deze handleiding. Zie voor meer informatie de officiële REACH-verordening (geconsolideerde tekst: 32006R1907). Neem bij vragen over productveiligheid contact met ons op via: [ProductCompliance@teradyne-robotics.com](mailto:ProductCompliance@teradyne-robotics.com).

---

## 18.4. Certificaten UR10e

---



# Certificate

Certificate no.

T 72503111 0001

**License Holder:**

Universal Robots A/S  
Energivej 51  
5260 Odense S  
Denmark

**Manufacturing Plant:**

See additional page(s) for the listing of 3 factories

Report Number: 31875333 027

Client Reference: Roberta Nelson Shea

Certification acc. to: EN ISO 10218-1:2011  
EN ISO 13849-1:2015

**Product Information**

Certified Product: Industrial Robot

Model Designation: UR3, UR5, UR10, UR15, UR20, UR30, UR3e, UR5e,  
UR7e, UR10e, UR12e, UR16e, UR8 Long, UR18

Technical Data: Rated Voltage: AC 100-200V, 50/60Hz or AC 200-240V, 50/60Hz  
Rated Current: 15A or 8A  
Protection Class: I

Special Remarks: The robot is only a component in a final robot application, collaborative or non-collaborative. The final application/installation must comply with EN ISO 10218-2. Certificate is only valid within used in conjunction with the UR Control Box, with or without a UR Teach Pendant. Includes optional IMMI accessory. The following safety functions have been evaluated and determined to meet PLd Cat. 3 per EN ISO 13849-1:2015:

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1- Emergency Stop;                    | 2- Safeguard Stop                |
| 3- Joint Position Limit;              | 4- Joint Speed Limit             |
| 5- Pose Limit;                        | 6- Cartesian Speed Limit         |
| 7- Force Limit;                       | 8- Momentum Limit                |
| 9- Power Limit;                       | 10- Stopping Time Limit          |
| 11- Stopping Distance Limit;          | 12- System Emergency Stop Output |
| 13- Robot Moving Digital Output;      |                                  |
| 14- Robot Not Stopping Digital Output |                                  |
| 15- Reduced Mode Digital Output;      |                                  |
| 16- Not Reduced Mode Digital Output   |                                  |
| 17- 3 Position Enabling Device INPUT  |                                  |

Refer to product manual for additional information.  
Must be installed and programmed in accordance with the manufacturer's instructions.

Remarks: Replaces Certificate T72501672.

Appendix: 1, 1-68

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Publication and application require prior approval.

TÜV Rheinland of North America, Inc.  
400 Beaver Brook Rd, Boxborough, MA 01719  
Tel +1 (978) 266 9500, Fax +1 (978) 266-9992

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

TÜV  
Rheinland  
North America

Page 1

# Certificate

Certificate no.

CA 72405127 0001

**License Holder:**

Universal Robots A/S  
Energivej 25  
5260 Odense S  
Denmark

**Manufacturing Plant:**

Universal Robots A/S  
Energivej 25  
5260 Odense S  
Denmark

**Report Number:** 31875333 006**Client Reference:** Roberta Nelson Shea**Certification acc. to:** CAN/CSA-Z434-14 + GI1 (R2019)**Product Information****Certified Product:** Industrial Robot**Model Designation:** UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20, UR30

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.

TÜV Rheinland of North America, Inc.  
400 Beaver Brook Rd, Boxborough, MA 01719  
Tel +1 (978) 266 9500, Fax +1 (978) 266-9992

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

 TÜVRheinland®



China  
RoHS

Management Methods for Controlling Pollution  
by Electronic Information Products  
Product Declaration Table For Toxic or Hazardous Substances

表1 有毒有害物质或元素名称及含量标识格式



| Product/Part Name<br>产品/部件名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toxic and Hazardous Substances and Elements<br>有毒有害物质或元素 |                   |                   |                                  |                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 铅<br>Lead (Pb)                                           | 汞<br>Mercury (Hg) | 镉<br>Cadmium (Cd) | 六价<br>Hexavalent Chromium (Cr+6) | 多溴联苯<br>Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| UR Robots<br>机器人：基本系统<br>UR3 / UR5 / UR10 /<br>UR3e / UR5e / UR7e<br>UR10e / UR12e /<br>UR16e / UR15e /<br>UR20 / UR30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                        | O                 | X                 | O                                | X                                      | X                                              |
| <p>O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.<br/>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。</p> <p>X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.<br/>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。<br/>(企业可在此处·根据实际情况对上表中打“X”的技术原因进行进一步说明。)</p> <p>Items below are wear-out items and therefore can have useful lives less than environmental use period:<br/>下列项目是损耗品,因而它们的有用环境寿命可能短于基本系统和可选项目的使用时间:<br/>Drives, Gaskets, Probes, Filters, Pins, Cables, Stiffener, Interfaces<br/>电子驱动器, 垫圈, 探针, 过滤器, 别针, 缆绳, 加强筋, 接口<br/>Refer to product manual for detailed conditions of use.<br/>详细使用情况请阅读产品手册。</p> <p>Universal Robots encourages that all Electronic Information Products be recycled but does not assume responsibility or liability.<br/>Universal Robots 鼓励回收再利用所有的电子信息产品,但 Universal Robots 不负任何责任或义务</p> <p>To the maximum extent permitted by law, Customer shall be solely responsible for complying with, and shall otherwise assume all liabilities that may be imposed in connection with, any legal requirements adopted by any governmental authority related to the Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products (Ministry of Information Industry Order #39) of the Peoples Republic of China otherwise encouraging the recycle and use of electronic information products. Customer shall defend, indemnify and hold Universal Robots harmless from any damage, claim or liability relating thereto. At the time Customer desires to dispose of the Products, Customer shall refer to and comply with the specific waste management instructions and options set forth at <a href="http://www.universal-robots.com/about-universal-robots/social-responsibility">www.universal-robots.com/about-universal-robots/social-responsibility</a> and <a href="http://www.teradyne.com/company/corporate-social-responsibility">www.teradyne.com/company/corporate-social-responsibility</a>, as the same may be amended by Teradyne or Universal Robots.</p> |                                                          |                   |                   |                                  |                                        |                                                |




**KC-  
veiligheid**

**자율안전확인 신고증명서**

|                 |         |                                      |         |                   |
|-----------------|---------|--------------------------------------|---------|-------------------|
| 신청인             | 사업장명    | Universal Robots A/S                 | 사업장관리번호 | 2016E110079       |
|                 | 사업자등록번호 | 016E110079                           | 대표자 성명  | Klaus Vestergaard |
|                 | 소재지     | Energivej 25, 5260 Odense S, Denmark |         |                   |
| 자율안전인증대상 기계·기구명 |         |                                      |         |                   |
| 형식(규격)          |         | UR10e                                | 산업용로봇   | 용량(등급)            |
|                 |         |                                      |         | 6 axis            |
| 자율안전확인번호        |         | 18-AB2EQ-01602                       |         |                   |
| 제조사             |         | Universal Robots A/S                 |         |                   |
| 소재지             |         | Energivej 25, 5260 Odense S, Denmark |         |                   |

「산업안전보건법」 제35조제1항 및 같은 법 시행규칙 제61조제3항에 따라  
자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.

2018년 11월 06일

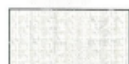

한국산업안전보건공단 서울지역본부장



## KC-registratie

8ED6-B666-998D-8738


| 방송통신기자재등의 적합등록 필증<br><i>Registration of Broadcasting and Communication Equipments</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 상호 또는 성명<br><i>Trade Name or Registrant</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Universal Robots A/S       |
| 기자재명칭(제품명칭)<br><i>Equipment Name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UR e-Series robot          |
| 기본모델명<br><i>Basic Model Number</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UR10e                      |
| 파생모델명<br><i>Series Model Number</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 등록번호<br><i>Registration No.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R-R-URK-UR10e              |
| 제조사/제조(조립)국가<br><i>Manufacturer/Country of Origin</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Universal Robots A/S / 덴마크 |
| 등록연월일<br><i>Date of Registration</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018-10-23                 |
| 기타<br><i>Others</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <p>위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.<br/>           It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.</p> <p style="text-align: right;">2018년(Year) 10월(Month) 23일(Day)</p> <p style="text-align: center;">국립전파연구원장</p> <p style="text-align: center;"><i>Director General of National Radio Research Agency</i></p> <p style="text-align: center;">※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다.<br/>           위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.</p> |                            |



## Omgeving

### Climatic and mechanical assessment

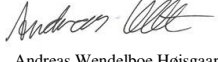

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Client</b><br>Universal Robots A/S<br>Energivej 25<br>5260 Odense S<br>Denmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Force Technology project no.</b><br>117-32120                                                                                                         |
| <b>Product identification</b><br>UR 3 robot arms<br>UR 3 control boxes with attached Teach Pendants.<br>UR 5 robot arms<br>UR5 control boxes with attached Teach Pendants.<br>UR10 robot arms:<br>UR10 control boxes with attached Teach Pendants.<br>See reports for details.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
| <b>Force Technology report(s)</b><br>DELTA project no. 117-28266, DANAK-19/18069<br>DELTA project no. 117-28086, DANAK-19/17068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
| <b>Other document(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| <b>Conclusion</b><br>The three robot arms UR3, UR5 and UR10 including their control boxes and Teach Pendants have been tested according to the below listed standards. The test results are given in the Force Technology reports listed above. The tests were carried out as specified and the test criteria for environmental tests were fulfilled in general terms with only a few minor issues (see test reports for details).<br><br>IEC 60068-2-1, Test Ae; -5 °C, 16 h<br>IEC 60068-2-2, Test Be; +35°C, 16h<br>IEC 60068-2-2, Test Be; +50°C, 16 h<br>IEC 60068-2-64, Test Fh; 5 – 10 Hz: +12 dB/octave, 10-50 Hz 0.00042 g <sup>2</sup> /Hz, 50 – 100 Hz: -12 dB/octave, 1,66 grms, 3 x 1½ h<br>IEC 60068-2-27, Test Ea, Shock; 11 g, 11 ms, 3 x 18 shocks |                                                                                                                                                          |
| <b>Date</b><br><br>Hørsholm, 25 August 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Assessor</b><br><br><br>Andreas Wendelboe Højsgaard<br>M.Sc.Eng. |

DELTA – a part of FORCE Technology - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00 - Fax +45 72 19 40 01 - www.delta.dk

# 19. Veiligheidsfunctietabellen

## Beschrijving

Veiligheidsfuncties en veiligheids-I/O van robots van Universal Robots zijn prestatieniveau d, categorie 3 (ISO 13849-1), waarbij elke veiligheidsfunctie een PFH-waarde heeft van minder dan 1,8E-07.

De PFH-waarden zijn bijgewerkt om rekening te houden met een grotere ontwerpflexibiliteit voor de veerkracht van de toeleveringsketen.

Voor veiligheids-I/O's wordt de resulterende veiligheidsfunctie inclusief het externe apparaat of de apparatuur bepaald door de algemene architectuur en de som van alle PFH's, inclusief de UR-robotveiligheidsfunctie PFH.

Als een veiligheidsfunctiegrens wordt overschreden of een fout wordt gedetecteerd in een veiligheidsfunctie of een veiligheidsgerelateerd deel van het besturingssysteem, definieert UR de veilige toestand als een stop met verwijdering van de aandrijfkraft (een categorie 1 stop of 0<sup>4</sup> onmiddellijke uitschakeling van de stroom).

### SF1

1, 2, 3, 4

#### Noodstopstop (ISO 13850)

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wat gebeurt er?               | Tolerantie | Beïnvloedt                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| <p>Het indrukken van de noodstopknop op de programmeereenheid<sup>1</sup> of de externe noodstop (bij gebruik van de noodstopveiligheidsingang) resulteert in een categorie 1 stop<sup>4</sup> waarbij de stroom naar de robotactuators en de gereedschaps-I/O wordt uitgeschakeld. Controller-I/O worden "laag".</p> <p>Alle gewrichten krijgen het commando<sup>1</sup> om te stoppen en wanneer alle gewrichten tot een gecontroleerde stilstand zijn gekomen, wordt de stroom uitgeschakeld.</p> <p>Zie de veiligheidsfuncties Stoptijd en Stopafstand<sup>5</sup>.</p> <p><b>ALLEEN GEBRUIKEN VOOR NOODGEVALLEN</b>, niet te gebruiken voor beveiliging, omdat bediening een handmatige handeling vereist.</p> | Stopcategorie 1 (IEC 60204-1) | --         | Robot, robotgereedschaps-I/O en controller-I/O |

### SF2

3, 5

#### Beveiligde stop

(Beschermd stop volgens ISO 10218-1\*)

\*Tot 2006 heette dit "veiligheidsstop" of "beveiligde stop"

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wat gebeurt er?                                                                                         | Tolerantie | Beïnvloedt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <p>Deze veiligheidsfunctie wordt geïnitieerd door een externe beveiligingsinrichting met veiligheidsingangen die een categorie 2 stop<sup>4</sup> initiëren. Het doel is om mensen te beschermen tegen letsel, in vergelijking met het beschermen van de robot, apparatuur of producten.</p> <p>De gereedschap-I/O wordt niet beïnvloed door de beveiligde stop. Als er een inschakelapparaat is aangesloten, is het mogelijk om de beveiligde stop te configureren om ALLEEN in de automatische modus te functioneren.</p> <p>Zie de veiligheidsfuncties Stoptijd en Stopafstand<sup>5</sup>.</p> | <p><b>Stop Categorie 2</b> (IEC 60204-1)</p> <p><b>SS2-stop</b> (zoals beschreven in IEC 61800-5-2)</p> | --         | Robot      |

#### Reset beveiligde stop

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                  | Wat gebeurt er?             | Tolerantie | Beïnvloedt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| <p>Indien geconfigureerd voor beveiligde reset en de externe resetverbindingen overgaan van laag naar hoog, wordt de beveiligde stop gereset. Veiligheidsingang voor het initiëren van een reset van SF2.</p> | <b>Resetingang naar SF2</b> | --         | Robot      |

**SF3**  
**Gewrichtspositielimiet**  
**(softwaregebaseerde**  
**asbegrenzing)**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                                                                                                                     | Tolerantie | Beïnvloedt     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <p>Stelt boven- en onderlimieten in voor de toegestane gewrichtsposities. Stoptijden en -afstanden worden niet in overweging genomen, aangezien de limiet(en) niet worden overschreden. Elk gewricht kan zijn eigen limieten hebben.</p> <p><i>Beperkt rechtstreeks de reeks toegestane gewrichtsposities waarbinnen de gewrichten kunnen bewegen. Het is een op veiligheid gebaseerde zachte as- en ruimtebegrenzing, volgens ISO 10218-1:2011, 5.12.3.</i></p> | <p><b>Staat niet toe dat bewegingen de limietinstellingen overschrijden.</b></p> <p>De snelheid kan worden verlaagd, zodat de beweging geen limieten overschrijdt.</p> <p>Er wordt een robotstop geïnitieerd om te voorkomen dat een limiet wordt overschreden.</p> | 5°         | Gewricht (elk) |

**SF4**  
**Gewrichtssnelheidslimiet**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                                                                                                                     | Tolerantie | Beïnvloedt     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <p>Stelt een bovenlimiet in voor de gewrichtssnelheid. Elk gewricht kan zijn eigen limiet hebben. Deze veiligheidsfunctie heeft de meeste invloed op de energieoverdracht bij contact (klemmen of voorbijgaand).</p> <p><i>Beperkt rechtstreeks de set toegestane gewrichtssnelheden waarmee de gewrichten mogen bewegen. Het wordt gebruikt om snelle gewrichtsbewegingen te beperken, bijvoorbeeld vanwege risico's in verband met singulariteiten.</i></p> | <p><b>Staat niet toe dat bewegingen de limietinstellingen overschrijden.</b></p> <p>De snelheid kan worden verlaagd, zodat de beweging geen limieten overschrijdt.</p> <p>Er wordt een robotstop geïnitieerd om te voorkomen dat een limiet wordt overschreden.</p> | 1,15 °/s   | Gewricht (elk) |

**Koppellimiet**  
**gewricht**

Overschrijding van de interne koppellimiet (van elk gewricht) resulteert in een categorie 0 stop<sup>4</sup>. Deze veiligheidsfunctie is niet toegankelijk voor de gebruiker; het is een fabrieksinstelling. Deze wordt NIET weergegeven omdat er geen gebruikersinstellingen zijn.

**SF5**

heeft verschillende namen:

**Positielimiet**

**Gereedschapslimiet,**

**Oriëntatielimiet,**

**Veiligheidsvlakengrenzen,**

**Veiligheidsgrenzen**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                                                                  | Tolerantie      | Beïnvloedt                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| <p>Bewaakt de <b>TCP</b>-positie (positie en oriëntatie) en voorkomt dat een veiligheidsvlak of TCP-positielimiet wordt overschreden.</p> <p>Meerdere positielimieten zijn mogelijk (gereedschapsflens, elleboog en maximaal 2 configureerbare gereedschapsoffsetpunten met een radius)</p> <p>Oriëntatie beperkt door de afwijking van de element-Z-richting van de gereedschapsflens OF het TCP.</p> <p><i>Twee delen. (1) is de veiligheidsvlakken voor het begrenzen van de mogelijke TCP-posities. (2) is de TCP-oriëntatielimiet, die wordt ingevoerd als een toegestane richting en een tolerantie. Dit zorgt voor TCP- en polsinsluitings-/uitsluitingszones vanwege de veiligheidsvlakken.</i></p> | <p>Staat niet toe dat bewegingen de limietinstellingen overschrijden. De snelheid of het koppel kan worden verlaagd, zodat de beweging de voor SF 5, SF 6, SF 7 of SF 8 ingestelde limiet niet overschrijdt.</p> | <p>3° 40 mm</p> | <p>TCP<br/>Gereedschapsflens<br/>Elleboog</p> |

**SF6**

**Snelheidslimiet**

**TCP en elleboog**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                               | Tolerantie     | Beïnvloedt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <p>Bewaakt de snelheid van het <b>TCP</b>- en de <b>elleboog</b> om te voorkomen dat een snelheidslimiet wordt overschreden. Gelijk aan het bewaken van de hele arm, omdat de secties tussen het TCP en de elleboog niet sneller kunnen bewegen dan de eindpunten van deze secties.</p> | <p>Er wordt een robotstop geïnitieerd om te voorkomen dat een limiet wordt overschreden.</p> <p><b>Staat niet toe dat bewegingen de limietinstellingen overschrijden.</b></p> | <p>50 mm/s</p> | <p>TCP</p> |

**SF7**  
**Krachtlimiet**  
**(TCP)**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                               | Tolerantie | Beïnvloedt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <p>De Krachtlimiet is de kracht die de robot uitoefent op het TCP (Tool Center Point) en de "elleboog". De veiligheidsfunctie berekent voortdurend de toegestane koppels voor elk gewricht om binnen de gedefinieerde krachtlimiet te blijven voor zowel de TCP als de elleboog.</p> <p>De gewrichten regelen hun koppelvermogen om binnen het toegestane koppelbereik te blijven. Dit betekent dat de krachten op het TCP of de elleboog binnen de gedefinieerde krachtlimiet blijven.</p> <p>Wanneer een stop wordt geïnitieerd door de krachtlimiet-SF, stopt de robot. De UR-standaardcontroller zorgt dat de beweging "terugkeert" gaat naar de positie voordat de krachtlimiet werd overschreden. Dit "terugkeren" maakt geen deel uit van de veiligheidsfunctie zoals deze wordt uitgevoerd door de standaardcontroller. De veiligheidscontroller heeft een vaste tijd (deel van de responstijd) die is toegestaan voordat een robotstop wordt geïnitieerd.</p> | <p>Er wordt een robotstop geïnitieerd om te voorkomen dat een limiet wordt overschreden.</p> <p><b>Staat niet toe dat bewegingen de limietinstellingen overschrijden.</b></p> | 25 N       | TCP        |

**SF8**  
**Momentumlimiet**

| Beschrijving                                                                                                                                           | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                               | Tolerantie | Beïnvloedt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <p>De momentumlimiet is zeer nuttig voor het begrenzen van kortstondige stootkrachten.</p> <p><i>De momentumlimiet beïnvloedt de gehele robot.</i></p> | <p>Er wordt een robotstop geïnitieerd om te voorkomen dat een limiet wordt overschreden.</p> <p><b>Staat niet toe dat bewegingen de limietinstellingen overschrijden.</b></p> | 3 kg m/s   | Robot      |

**SF9**  
**Vermogenslimiet**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wat gebeurt er?                                      | Tolerantie | Beïnvloedt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| <p>Deze functie controleert de mechanische arbeid (som van gewrichtskoppels maal gewrichtshoeksnelheden) die wordt uitgevoerd door de robot, wat ook de stroom naar de robotarm en de robotsnelheid beïnvloedt. Deze veiligheidsfunctie beperkt dynamisch de stroom/het koppel, maar handhaaft de snelheid.</p> | <p>Dynamische beperking van de stroom/het koppel</p> | 10 W       | Robot      |

### SF10 UR- robotstopuitgangen

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wat gebeurt er?                                                                                      | Tolerantie | Beïnvloedt                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| <p>Indien geconfigureerd voor een robotstopuitgang en er een robotstop is, zijn de dubbele uitgangen LAAG. Als er geen robotstop wordt geïnitieerd, zijn de dubbele uitgangen hoog. Impulsen worden niet gebruikt, maar wel getolereerd. Zie voetnoot <sup>6</sup> voor een geïntegreerde veiligheidsfunctie</p> <p>Deze dubbele uitgangen veranderen van toestand voor elke externe noodstopknop die is aangesloten op configureerbare veiligheidsingangen, waarbij deze ingang is geconfigureerd als een noodstopingang.</p> <p>Voor de stopuitgang wordt de validatie uitgevoerd bij de externe apparatuur, aangezien de UR-uitgang een ingang is voor deze externe stopveiligheidsfunctie voor externe apparatuur.</p> | De dubbele uitgangen worden laag in geval van een stop, als configureerbare uitgangen zijn ingesteld | N.v.t.     | Externe aansluiting op logica en/of apparatuur |
| <div>  <p><b>MEDEDELING</b></p> <p>Deze stopuitgang is niet verbonden met de IMMI (spuitgietmachine-interface) om een onherstelbare stop te voorkomen.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |            |                                                |

### SF11 Veiligheidsfunctie voor "beweging" met digitale uitgangen

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wat gebeurt er?                                                                  | Tolerantie | Beïnvloedt                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Wanneer de robot beweegt (beweging onderweg), zijn de dubbele digitale uitgangen LAAG. De uitgangen zijn HOOG wanneer er geen beweging is. De functionele veiligheid is voor wat zich binnenin de UR-robot bevindt. Zie voetnoot <sup>6</sup> voor een geïntegreerde veiligheidsfunctie. | De dubbele uitgangen zijn laag tijdens beweging en hoog als er geen beweging is. | N.v.t.     | Externe aansluiting op logica en/of apparatuur |

### SF12 Veiligheidsfunctie voor "niet stoppen" met digitale uitgangen

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wat gebeurt er?                                                                    | Tolerantie | Beïnvloedt                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Wanneer de robot STOPT ( bezig met stoppen of in stilstand) zijn de dubbele digitale uitgangen HOOG. Als de uitgangen LAAG zijn, is de robot NIET bezig met stoppen en is deze NIET in een stilstaande toestand. Zie voetnoot <sup>6</sup> voor een geïntegreerde veiligheidsfunctie. | De dubbele uitgangen zijn hoog wanneer de robot bezig is te stoppen of stil staat. | N.v.t.     | Externe aansluiting op logica en/of apparatuur |

**SF13**  
**Veiligheidsfunctie**  
**"Verminderd actief"**  
**met digitale**  
**uitgangen**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              | Wat gebeurt er?                                                             | Tolerantie | Beïnvloedt                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Als verminderde instellingen actief (of geïnitieerd) zijn voor veiligheidsfuncties, zijn de dubbele digitale uitgangen LAAG. De functionele veiligheid is voor wat zich binnenin de UR-robot bevindt. Zie voetnoot <sup>6</sup> voor de geïntegreerde veiligheidsfunctie. | De dubbele uitgangen zijn laag wanneer verminderde instellingen actief zijn | N.v.t.     | Externe aansluiting op logica en/of apparatuur |

**SF14**  
**Veiligheidsfunctie**  
**"Verminderd niet actief"** met digitale uitgangen

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wat gebeurt er?                                                                   | Tolerantie | Beïnvloedt?                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Wanneer de verminderde instellingen voor veiligheidsfuncties NIET actief (of niet geïnitieerd) zijn, zijn de digitale uitgangen LAAG.<br>De functionele veiligheidsclassificatie is voor wat zich binnenin de UR-robot bevindt. Zie voetnoot <sup>6</sup> hieronder voor de geïntegreerde veiligheidsfunctie | De dubbele uitgangen zijn laag wanneer verminderde instellingen NIET actief zijn. | N.v.t.     | Externe aansluiting op logica en/of apparatuur. |

**Ingang "Verminderd actief" SF-parameterinstellingen wijzigen**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beïnvloedt   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Verminderd is geen modus. Het is een wijziging van instellingen die is geïnitieerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>intern door een veiligheidsvlak/-grens (begint bij 2 cm van het vlak en verminderde instellingen worden binnen 2 cm van het vlak bereikt); of</li> <li>extern door gebruik van een externe ingang, die de instellingen binnen 500 ms van de activerende ingang vermindert.</li> </ul> <p>Als de externe verbindingen laag zijn, wordt de verminderde modus gestart. "Reduced Active" maakt alle verlaagde limieten <b>ACTIEF</b>.</p> <p>Verminderd is geen veiligheidsfunctie. Verminderd is een middel om veiligheidsfuncties te parameteriseren.</p> <p>Verminderd is een statusverandering die de instellingen van de volgende veiligheidsfuncties beïnvloedt: gewrichtspositie, gewrichtssnelheid, TCP-positielimiet, TCP-snelheid, TCP-kracht, momentum, vermogen, stoptijd en stopafstand.</p> <p>Verifieer en valideer alle parameters en instellingen voor de robottoepassing.</p> | <b>Robot</b> |

**SF15**  
**Stoptijdlimiet**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                 | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                                                       | Toleranties | Beïnvloedt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Realtime bewaking van omstandigheden zodat de stoptijdlimiet niet wordt overschreden. De snelheid van de robot wordt beperkt om ervoor te zorgen dat de stoptijdlimiet niet wordt overschreden. <sup>7</sup> | <p><b>Zorgt ervoor dat de daadwerkelijke stoppositie de ingestelde limiet niet overschrijdt.</b></p> <p>Zorgt voor een snelheidsvermindering of een robotstop om de limiet NIET te overschrijden.</p> | 50 ms       | Robot      |

**SF16**  
**Stopafstandlimiet**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                       | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                                            | Toleranties | Beïnvloedt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Realtime bewaking van omstandigheden zodat de stopafstandlimiet niet wordt overschreden. De snelheid van de robot wordt beperkt om ervoor te zorgen dat de stopafstandlimiet niet wordt overschreden. <sup>7</sup> | <b>Zorgt ervoor dat de daadwerkelijke stoppositie de ingestelde limiet niet overschrijdt.</b><br>Zorgt voor een snelheidsvermindering of een robotstop om de limiet NIET te overschrijden. | 40 mm       | Robot      |

**SF17**  
**Veilige uitgangspositie "bewaakte positie"**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wat gebeurt er?                                                                                                                             | Toleranties | Beïnvloedt                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Veiligheidsfunctie die een veiligheidsuitgang bewaakt, zodat de uitgang alleen kan worden geactiveerd als de robot zich in de geconfigureerde en bewaakte "veilige uitgangspositie" bevindt. Een categorie 0 stop wordt geïnitieerd als de uitgang wordt geactiveerd wanneer de robot zich niet in de geconfigureerde positie bevindt. | De "uitgang veilige uitgangspositie" wordt alleen geactiveerd wanneer de robot zich in de geconfigureerde "veilige uitgangspositie" bevindt | 1,7°        | <b>Externe aansluiting op logica en/of apparatuur</b> |

**Modusschakelaar-  
INGANG**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wat gebeurt er?         | Beïnvloedt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Wanneer de externe verbindingen laag zijn, is de automatische modus actief. Als ze hoog zijn, wordt er geprogrammeerd.<br><b>Aanbeveling:</b> gebruiken met een inschakelapparaat, d.w.z. UR-programmeereenheid met een geïntegreerd inschakelapparaat met 3 standen.<br>Tijdens het programmeren wordt de TCP-snelheid in eerste instantie beperkt tot 250 mm/s. De snelheid kan handmatig worden verhoogd met behulp van de "snelheidsschuifregelaar" van de programmeereenheid, maar bij activering van het inschakelapparaat wordt de snelheidsbeperking gereset naar 250 mm/s. | Ingangssignaal naar SF2 | Robot      |

**SF18**  
**(Inschakelapparaat met 3 standen)**  
**Veiligheidsfunctie-  
ingen<sup>8</sup>**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wat gebeurt er?                                                                                                                               | Tolerantie | Beïnvloedt                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Een inschakelapparaat met 3 standen<sup>9</sup> heeft 3 schakelposities: uit, aan, uit</b> (in volgorde van actuatie bij knijpen).<br>Als het apparaat volledig wordt losgeslagen, is het uit. Als het apparaat wordt gedrukt/geknepen in de middelste positie, is het aan. Volledig indrukken (knijpen) resulteert in een uit-toestand.<br>Als het inschakelapparaat met 3 standen "AAN" is, is beweging ingeschakeld.<br>Wanneer <b>in de handmatige modus</b> de verbinding van een extern inschakelapparaat UIT is, initieert het veiligheidssysteem intern SF2, een categorie 2 stop.<br><b>Aanbeveling:</b> gebruiken met een modusschakelaar als veiligheidsingang. <sup>10</sup> | <b>In de handmatige modus, als de SF18-ingang LAAG is, wordt SF2 intern geactiveerd</b><br>Categorie 2 stop (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2) | N.v.t.     | <b>Robot en externe verbinding met SF19 en SF20</b> |



**SF19**  
**3PE (inschakeling**  
**met 3 standen)**  
**Veiligheidsfunctie<sup>8</sup>**  
**met digitale**  
**uitgangen**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                               | Tolerantie | Beïnvloedt                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| <p><b>In de automatische modus ("uitvoering") zijn de SF19-uitgangen HOOG.</b></p> <p>Als in de handmatige modus een inschakelapparaat<sup>11</sup> op UIT staat (niet in de middelste AAN-positie, dat wil zeggen dat het inschakelapparaat is losgelaten of volledig is ingedrukt), wordt een SF2 geactiveerd die tot een categorie 2 stop (SS2) leidt en zijn de SF19-uitgangen laag.<sup>8</sup></p> <p><b>Als in de handmatige modus Freedrive en 3PE worden gebruikt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als Freedrive is geactiveerd en</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u>3PE op UIT staan, zijn de SF19-uitgangen HOOG.</li> <li>• <u>Een</u> 3PE op AAN staat, zijn de SF19-uitgangen LAAG.</li> </ul> </li> <li>• <b>Als Freedrive niet is geactiveerd en</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u>3PE op AAN staan, zijn de SF19-uitgangen HOOG.</li> <li>• <u>Een</u> 3PE op UIT staat, zijn de SF19-uitgangen LAAG.</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>Als in de handmatige modus de 3PE op UIT staat, zijn de uitgangen LAAG en wordt SF2 intern geactiveerd</b></p> <p>Stopcategorie 2 (IEC 60204-1) SS2 (IEC 61800-5-2)</p> | N.v.t.     | Externe aansluiting op logica en/of apparatuur |

**SF20**  
**3PE (inschakeling**  
**met 3 standen)**  
**"NIET-status"**  
**Veiligheidsfunctie<sup>8</sup>**  
**met digitale**  
**uitgangen**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wat gebeurt er?                                                                       | Tolerantie | Beïnvloedt                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| <p><b>In de automatische modus ("uitvoering") zijn de SF20-uitgangen LAAG.</b></p> <p>Als in de handmatige modus een inschakelapparaat<sup>11</sup> op UIT staat (niet in de middelste AAN-positie, dat wil zeggen dat het inschakelapparaat is losgelaten of volledig is ingedrukt), zijn de SF20-uitgangen laag.<sup>7</sup></p> <p>Als in de handmatige modus Freedrive en 3PE worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als Freedrive is geactiveerd en:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u>3PE op UIT staan, zijn de SF20-uitgangen LAAG.</li> <li>• <u>Een</u> 3PE op AAN staat, zijn de SF20-uitgangen HOOG.</li> </ul> </li> <li>• <b>Als Freedrive niet is geactiveerd en:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ALLE</u>3PE op AAN staan, zijn de SF20-uitgangen LAAG.</li> <li>• <u>Een</u> 3PE op UIT staat, zijn de SF20-uitgangen HOOG.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> SF20 is een omgekeerde versie van de SF19 waarbij de uitgangsstatus logisch omgekeerd is ten opzichte van SF19.</p> | <p><b>Als in de handmatige modus de 3PE op UIT staat, zijn de uitgangen HOOG.</b></p> | N.v.t.     | Externe aansluiting op logica en/of apparatuur |

### SF21 Koppelimiet polsbeknelling

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wat gebeurt er?                                                           | Tolerantie | Beïnvloedt |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <p>Controleert het koppel van de polsgewrichten om hoge klemkrachten te voorkomen. Zorgt ervoor dat het koppel van de pols de limiet niet overschrijdt.</p> <div>  <p><b>MEDEDELING</b><br/>Deze veiligheidsfunctie kan worden uitgeschakeld.</p> </div> | <b>Zorgt ervoor dat de robot stopt om de limiet NIET te overschrijden</b> | N.v.t.     | Robot      |

### SF22 Uitgangen geactiveerd door een Safety Plane (SF5)

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wat gebeurt er?                                                                            | Tolerantie                        | Beïnvloedt                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>Wanneer de bewaakte TCP-positie het veiligheidsvlak heeft overschreden, zijn de dubbele uitgangen LOW.</p> <p>Meerdere posities kunnen de dubbele uitgangen activeren (gereedschapsflens, elleboog en maximaal 2 configureerbare gereedschapsverschuivingspunten met een straal)</p> <p>Zie Beperking van de gereedschapspositie voor meer informatie.</p> | <b>De uitgangen zijn LOW wanneer de bewaakte TCP-positie het veiligheidsvlak passeert.</b> | <b>40 mm</b><br>hetzelfde als SF5 | <b>Externe aansluiting op logica en/of apparatuur</b> |

**SF23**  
**Veiligheidsvlak**  
**(SF5)**  
**geactiveerd door**  
**ingangen**

| Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wat gebeurt er?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tolerantie                                | Beïnvloedt                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>Wanneer beide INPUTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOGE. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bewaakte TCP-positie kan vrij bewegen.</li> </ul> </li> <li>• LAAG. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het beoogde resultaat van de veiligheidsfunctie is te voorkomen dat de positie van de bewaakte TCP- e het veiligheidsvlak overschrijdt. Dit is echter niet mogelijk als er onvoldoende tijd of afstand is om te stoppen.</li> <li>• Als de bewaakte TCP-positie het veiligheidsvlak al heeft gepasseerd of op het punt staat het veiligheidsvlak te passeren, zal de robot stoppen volgens de instellingen voor de stoptijd en de maximale stopafstand.</li> </ul> </li> </ul> <p>Zie Beperking van de gereedschapspositie voor meer informatie.</p> | <p>Wanneer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beide ingangen zijn LOW, en</li> <li>• de bewaakte TCP-positie beweegt zich naar het veiligheidsvlak, en</li> <li>• er voldoende tijd of afstand is om te stoppen voordat het veiligheidsvlak wordt bereikt, wordt een robotstop in gang gezet om te voorkomen dat het veiligheidsvlak wordt overschreden.</li> </ul> <p>Als er onvoldoende tijd of afstand is om te stoppen voordat het veiligheidsvlak wordt bereikt, wordt een robotstop geactiveerd die voldoet aan de geconfigureerde instellingen voor de stoptijd en de maximale stopafstand. De bewaakte TCP-positie zal echter het veiligheidsvlak passeren.</p> | <p><b>40 mm</b><br/>hetzelfde als SF5</p> | <p><b>TCP</b><br/><b>Gereedschapsflens</b><br/><b>Elleboog</b></p> |

**Tabel 1,  
voetnoten**

<sup>1</sup>**De communicatie** tussen de programmeereenheid, de regelkast en binnen de robot is SIL 2 voor veiligheidsgegevens (volgens IEC 61784-3).

<sup>2</sup>**Noodstopvalidatie:** de noodstopknop op de programmeereenheid wordt geëvalueerd binnen de programmeereenheid en vervolgens gecommuniceerd<sup>1</sup> naar de veiligheidsregelaar via SIL2-communicatie. Om de noodstopfunctie van de programmeereenheid te valideren, drukt u op de noodstopknop en controleert u of er een noodstop volgt. Dit bevestigt dat de noodstop is verbonden met de programmeereenheid, dat de noodstop werkt zoals bedoeld en dat de programmeereenheid is verbonden met de regelkast.

<sup>3</sup>**Als een robotveiligheidsfunctie** is "geïntegreerd" of "verbonden" met externe apparatuur, voorzieningen of logica, heeft de resulterende geïntegreerde veiligheidsfunctie een PFH die de som is van alle PFH-waarden, inclusief de PFH-waarde van de robotveiligheidsfunctie.

<sup>4</sup>**Stopcategorieën** volgens IEC 60204-1 (NFPA79). Voor de noodstop zijn alleen stopcategorie 0 en 1 toegestaan.

- **Stopcategorie 0 en 1** resulteren in het verwijderen van de aandrijfkraft, waarbij stopcategorie 0 ONMIDDELIJK is en stopcategorie 1 een gecontroleerde stop is (bijvoorbeeld afremmen tot stilstand en vervolgens verwijderen van de aandrijfkraft).
- **Stopcategorie 2** is een stop waarbij de aandrijfkraft NIET wordt verwijderd. Stopcategorie 2 wordt gedefinieerd in IEC 60204-1. Beschrijvingen van STO, SS1 en SS2 staan in IEC 61800-5-2. Bij UR-robots handhaaft een stopcategorie 2 de baan en behoudt de aandrijving het vermogen na de stop.

<sup>5</sup> De veiligheidsfuncties **Stoptijd en Stopafstand** moeten worden gebruikt. Als deze worden gebruikt, is periodieke verificatie van de stopprestaties niet nodig.

<sup>6</sup>**Als een robotveiligheidsfunctie** is "geïntegreerd" of "verbonden" met externe apparatuur, voorzieningen of logica, heeft de resulterende geïntegreerde veiligheidsfunctie een PFH die de som is van alle PFH-waarden, inclusief de PFH-waarde van de robotveiligheidsfunctie.

<sup>7</sup> Het stopvermogen van de robot voor de gegeven beweging(en) wordt continu bewaakt om bewegingen te voorkomen die de stoplimiet zouden overschrijden. Als de tijd die nodig is om de robot te stoppen de tijdslimiet dreigt te overschrijden, wordt de bewegingssnelheid verminderd om ervoor te zorgen dat de limiet niet wordt overschreden. Er wordt een stop geïnitieerd om te voorkomen dat de limiet wordt overschreden.

<sup>8</sup> Voor de geïntegreerde functionele veiligheidsclassificatie met een extern veiligheidsgerelateerd regelsysteem, voegt u de PFH van deze veiligheidsgerelateerde uitgang toe aan de PFH van het externe veiligheidsgerelateerde regelsysteem. De veiligheidsfunctie en de activering van een stop zijn opgenomen in de PFH-waarde voor deze SF.

<sup>9</sup> Het inschakelapparaat kan op de programmeereenheid zijn of kan extern verbonden zijn met de ingang voor de inschakelfunctie (SF18).

<sup>10</sup> Het gebruik van een externe modusschakelaar wordt aanbevolen bij gebruik van een inschakelapparaat met 3 standen. Als er een externe modusschakelaar wordt gebruikt op de veiligheidsingangen, wordt de robotmodus bepaald door de gebruikersinterface. Als de gebruikersinterface staat in de

- "automatische modus", is de inschakelfunctie niet actief.
- "handmatige modus", is de inschakelfunctie niet actief. Wachtwoordbeveiliging voor het wijzigen van de modus kan worden geconfigureerd.

<sup>11</sup> Als een 3PE-inschakelapparaat wordt losgelaten of volledig wordt ingedrukt, is de veiligheidsfunctie met inschakeling met 3 standen UIT (niet in de middelste AAN-positie).



Software naam: PolyScope X  
Software versie: 10.13  
Document versie: 20.17.132



718-696-00



718-696-00